

TRICELL for active care.

エアマスタートライセル


取扱説明書

(保証書付)

この度はエアマスタートライセルをお買いあげいただき、
まことにありがとうございます。

本取扱説明書について

- エアマスタートライセルのご使用に先立って、
この取扱説明書を初めから最後まで必ずお読みください。
- いつでも読み返すことができるように、本書をエアマスタートライセルのそばに保管してください。
- 本書の最終ページは保証書になっています。

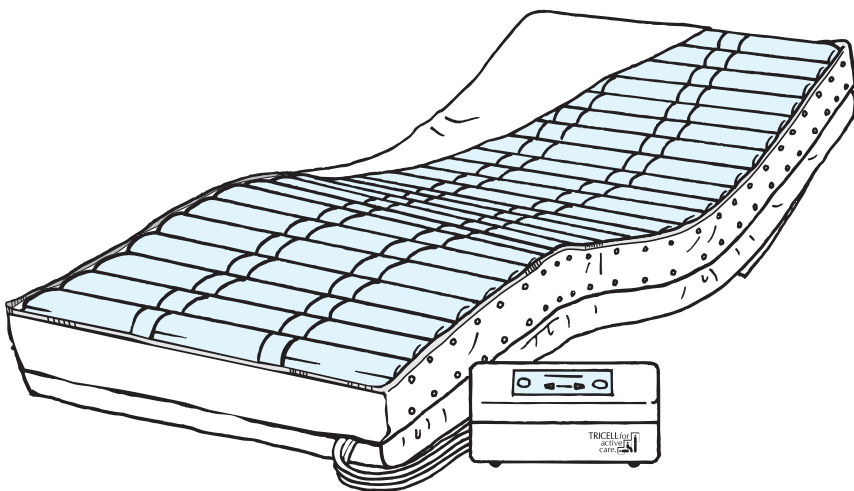

CONTENTS も く じ

- P2. エアマスタートライセルについて
- P4. 安全にお使いいただくために
 - 重要安全情報
 - 安全上のご注意
- P6. 設置の前に
 - この取扱説明書の見方
 - 梱包内容の確認
 - 各部の名称
- P8. 設置をしましょう
- P12. 実際に使用しましょう
 - 通常時
 - 背上げ時
 - 底つきチェックの方法
- P18. 定期的なお手入れのしかた
- P19. 保管・廃棄方法
- P20. 故障かな?と思ったら…
仕様
- P22. アフターサービス
- P23. 仕様
- P24. 保証書(裏表紙)

エアマスタートライセルについて

エアマスタートライセルは、床ずれ防止用エアマットレスです。ケーブ独自の24本の完全独立2層式エアセルとマイコン制御のポンプによって構成されており、「体圧分散」と「動きやすさ」を両立したエアマットレスです。また、背上げ時に起こる底つきにも対応できるケーブ独自の「背上げ対応機能」を搭載したエアマットレスです。

エアマスタートライセルのご使用に際して

ご使用に際しては、専門家と相談の上、ご使用ください。

また、使用中にご使用者の身体に異常が生じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。

■ご理解いただきたいこと


残念ながら、床ずれが発生するメカニズムについては、現在でもその全容が解明されているわけではありません。また、療養者の個別な全身状態によっても、その発生は大きく左右されます。しかし、ひとつの要因として「体重によって局所に加わる継続的な圧力」が直接的物理的要因であることは、広く認識されています。そのため、床ずれ発生危険度の高い療養者には、介護者による2時間ごとの「体位変換」が有効であるとされています。

エアマスタートライセルは、圧力の時間的継続性を断ち、床ずれを防止しようとする補助具です（医療機器ではありません）。したがって、療養者の全身状態や様々な状況によっては、適切にご使用いただいても床ずれを防止できないことがあります。これらのことをご理解いただき、ご使用くださいますようお願いいたします。

●特徴


1、「トリプルシステム」(3連圧切替)

24本のエアセルが、約5分間隔で3連順次に膨張と収縮を繰り返します。エアセルが収縮している部位の接触圧(体圧)は隣接部より低くなり、圧迫のダメージから回復することができます。また、3本のうち2本のエアセルは常に順次膨張していますので、身体を広い面積で支え、マットレスに安定感を与えます。

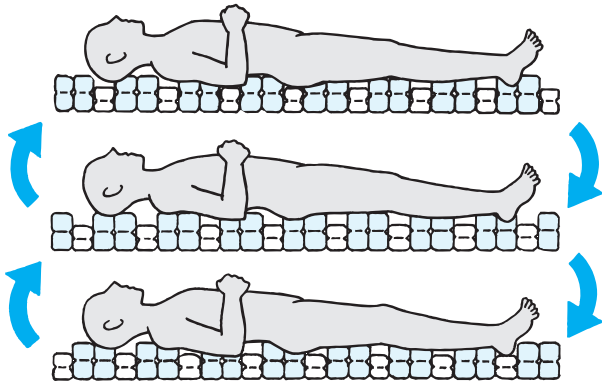

2、ケープ独自の「完全独立2層式エアセル」

骨突出部位だけを垂直方向に圧力解放し、身体を広い面で安定保持します。また身体に追従して変形するので、背上げ時のずれを防ぐことができます。

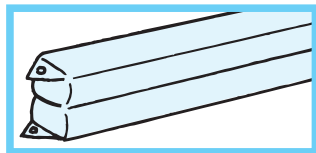

3、マイコン制御の専用エアポンプ

使用者の体重を設定するだけで、あとはマイコンが適正圧力を制御します。操作パネルも扱いやすく誤動作も少ないタッチパネル式としました。また、消費電力や振動・発生音も低く抑えています。

4、ケープ独自の「背上げ対応機能」

食事を摂るときなど、専用ポンプの「背上げボタン」を押すだけで、ベッドの背上げ時の底づきを防止することができる「背上げ対応機能」を搭載しました。

5、取り外し可能な専用カバー

抗菌・防水機能付きの専用カバーを付属しています。洗濯、交換時に取り外せるファスナー脱着式で、エアマットレス全体を包み込むため、エアマットレス内の汚れも防止します。

6、環境に優しい素材使用

交換可能なエアセルは耐久性に優れ、環境にも優しい素材のウレタンフィルムを採用しています。

万一エアセルがパンクしても、各エアセルを取り外して交換できるため、メンテナンスが容易で経済的です。

安全にお使いいただくために

エアマスタートライセルの取り扱いにあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

重要安全情報

「エアマスタートライセル」のご使用中に生じる可能性のある災害を回避するためには、その原因となり得る危険の要素がどこにあるかを、予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義して記載してあります。



警告:このマークにある指示に従わなかった場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告しています。特に重要なため、下記「安全上のご注意」にまとめて記載し、警告します。



注意:このマークにある指示に従わなかった場合に、本商品が正常に機能しなくなる可能性を警告しています。

安全上のご注意<警告>



1 エアマスタートライセルは、空気の層で患者の身体を柔らかくフロート(浮かせて)して保持するのが特徴です。従って、心臓マッサージ等、反発力の強い床などの上でないと効果がでない処置が予め予測されるような患者への使用はお控えください。ICU等、万が一の応急処置で心臓マッサージの予想される病棟でのご使用に際しては、固い板をご用意いただくなど医師の指導の下でのご使用ください。




2 エアマスタートライセルの使用に際しては、必ず専門家と相談の上ご使用ください。また使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。症状悪化や事故の恐れがあります。



3 送風チューブは必ず足側になるようにエアマスタートライセルを設置してください。
送風チューブが頭側にくると、送風チューブが首にからんで重大な事故を招く恐れがあります。



4 エアマスタートライセルをご使用の際は、必ずベッドにサイドレールを取り付けてください。サイドレールを使用しない場合には、ベッドからの落下・転落を招く恐れがあり、事故の原因にもなります。

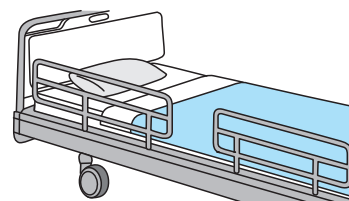


5 エアマスタートライセルの上で、飛び跳ねないでください。ケガをしたり、破損の原因になります。エアマットレスの上で立ち上がった時、膝を立てたりしないでください。局所に高い圧力がかかり続けるとエアセル破損の危険性があります。




6 エアマスターライセルの上で端座位や移乗する際には、必ず補助の方の立ち会いのもと行ってください。ベッドからの落下・転落を招く危険があります。



8 送風チューブを束ねたり専用マットレスの下に巻き込まないでください。送風チューブが折れ曲がったり圧迫されると、空気がエアマットレス内に送りこまれなくなり、期待した効果が得られない恐れがあります。

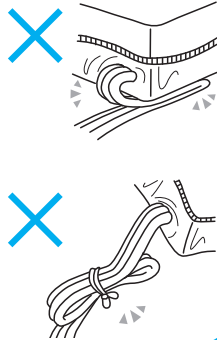


11 エアマスターライセル専用ポンプを湿気の多い場所で使用したり、エアマスターライセル専用ポンプに水や尿などの液体をかけたり、こぼしたりしないでください。感電事故や故障の原因となります。

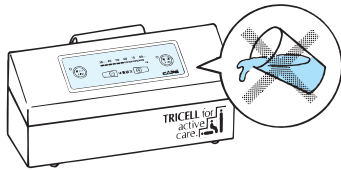

注意 直射日光の当たる場所、高温多湿な場所を避け、湿気がこもらないように壁から5cm以上離して設置してください。



13 エアマスターライセル専用ポンプの電源プラグは、必ず日本国内の家庭用コンセント(100V/50/60Hz)に確実に差し込んでお使いください。これ以上の電圧で使用すると、火災事故や故障の原因となります。また濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。感電事故や故障の原因となります。

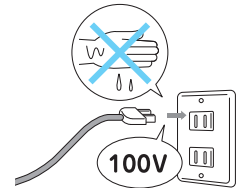


14 エアマスターライセルの専用マットレスと専用ポンプ以外の組み合わせでは、絶対に使用しないでください。期待した効果が得られないばかりか、火災事故や故障の原因にもなります。



15 エアマスターライセルを長期間使用しないときやエアマスターライセル専用ポンプのお手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから外してください。火災事故や感電事故、故障の原因となります。



16 エアマスターライセル専用ポンプの電源コードを無理に引っ張ったり、傷つけたり、破損させたり、ドアに挟んだりしないでください。またコンセントからプラグを抜く時には、必ず電源プラグを持って抜いてください。感電事故や火災事故、故障の原因となります。

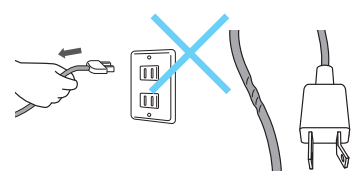

7 エアマスターライセルの上での喫煙はお止めください。火災の原因等になることがあります。




9 二人以上で使用しないでください。本来の性能を発揮できない恐れやマットレス破損の原因になります。



10 エアマスターライセル専用ポンプをフットボードに掛けて使用する場合は、ポンプフックが使用者の足に当たらない位置に設置してください。ケガの原因になることがあります。また専用ポンプの操作パネルに足をかけたり、掛け布団などがかかると思わぬボタンの誤作動の原因となりますので、専用ポンプの上に物を置かないでください。



12 ご自分で修理するためにエアマスターライセル専用ポンプのネジを取り外し、ケースを開けることは絶対にしないでください。感電事故や故障の原因となります。また専用ポンプを当社に承諾無しに改造したりすることは、安全上重大な影響を及ぼす恐れがあります。決してお客様による改造は行わないでください。

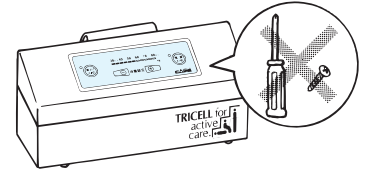

設置の前に

この取扱説明書の見方

- 必ず、初めから最後まで通してお読みください。
- 各説明には以下の3つのマークがあり、それぞれ詳しい情報が記載されています。必要に応じて参照してください。

説明

準備や操作の指示内容について、その必要性を説明しています。

確認

準備や操作の指示内容について、それが指示通りにできたかを確認する方法を説明しています。

工夫

ちょっとした工夫で、準備や操作がより効率的になるアイデアを説明しています。


- ・使用を開始してからも、困ったこと、わからないこと、不安なこと等が生じた場合には、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら...」(P.20~21)を見て、解決のための情報を得てください。故障でない場合、その問題についての説明が、この取扱説明書のどのページに記載されているかがわかるようになっています。
- ・上記の方法で解決が得られない場合は、この取扱説明書裏面の保証書をご覧になり、お買い上げの販売店、もしくは(株)ケーブまでお問い合わせください。

梱包内容の確認


お手元にお届けした梱包には以下のものが入っています。ご確認ください。

●エアマスタートライセルセット


- ①エアマスタートライセル専用ポンプ × 1
- ②エアマスタートライセル専用マットレス(カバー付) × 1
- ③取扱説明書(保証書付/本書)..... × 1

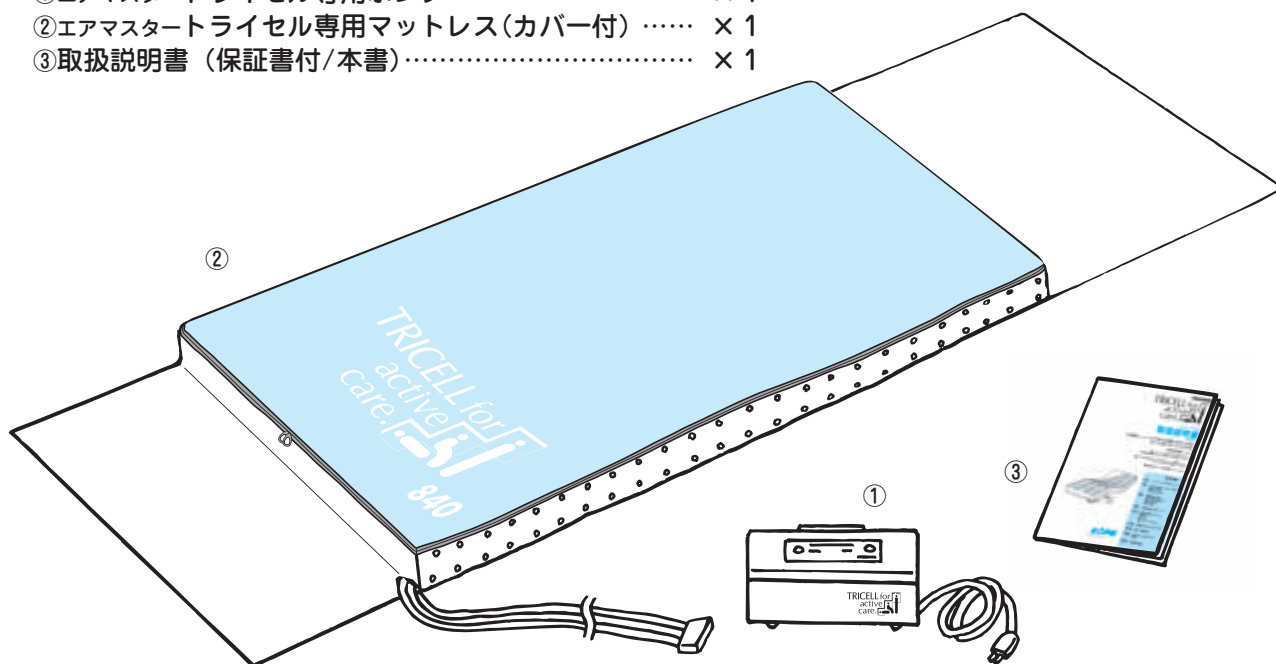

各部の名称

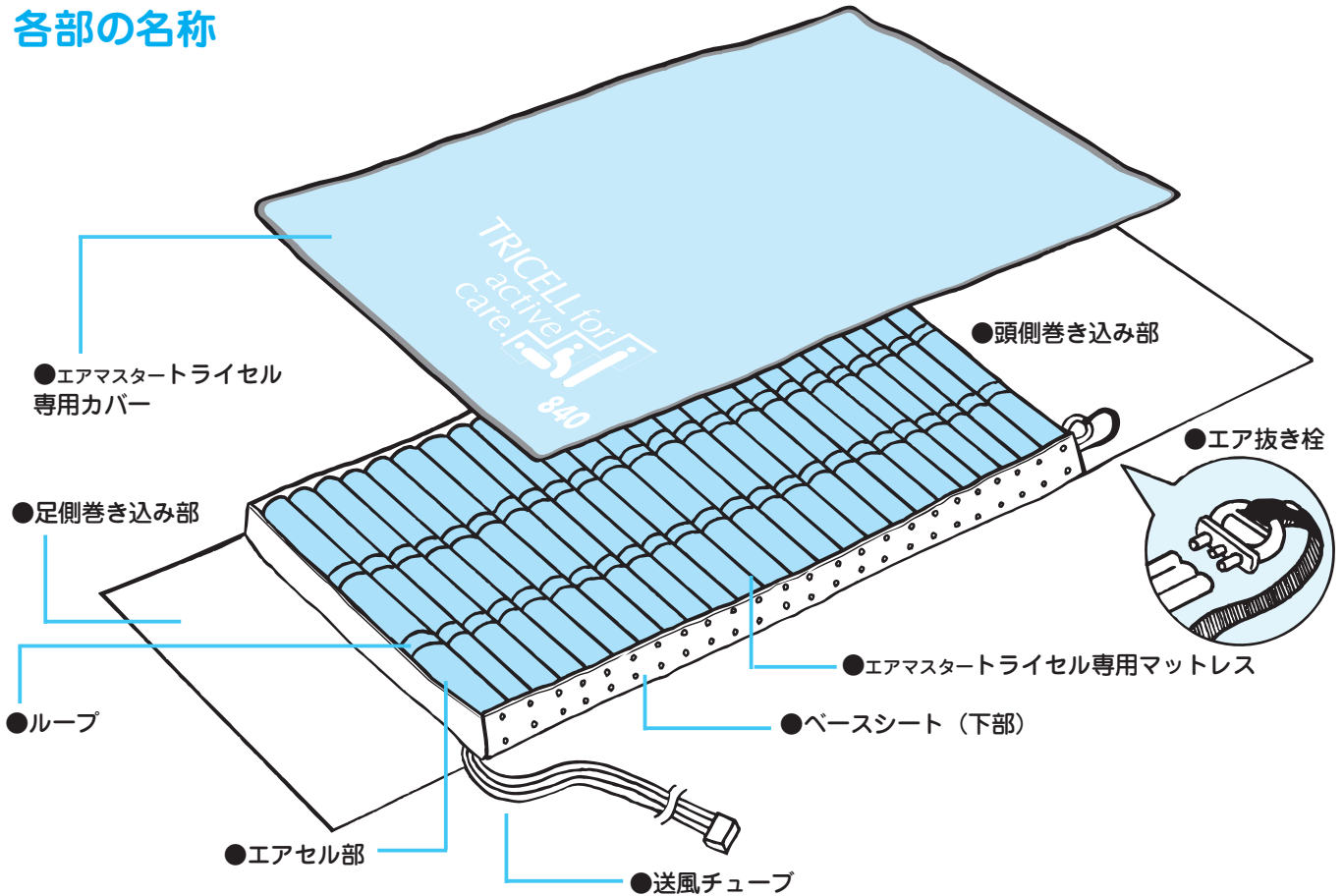

※送風チューブは予めエアマスタートライセル専用マットレスに取り付けてあります。

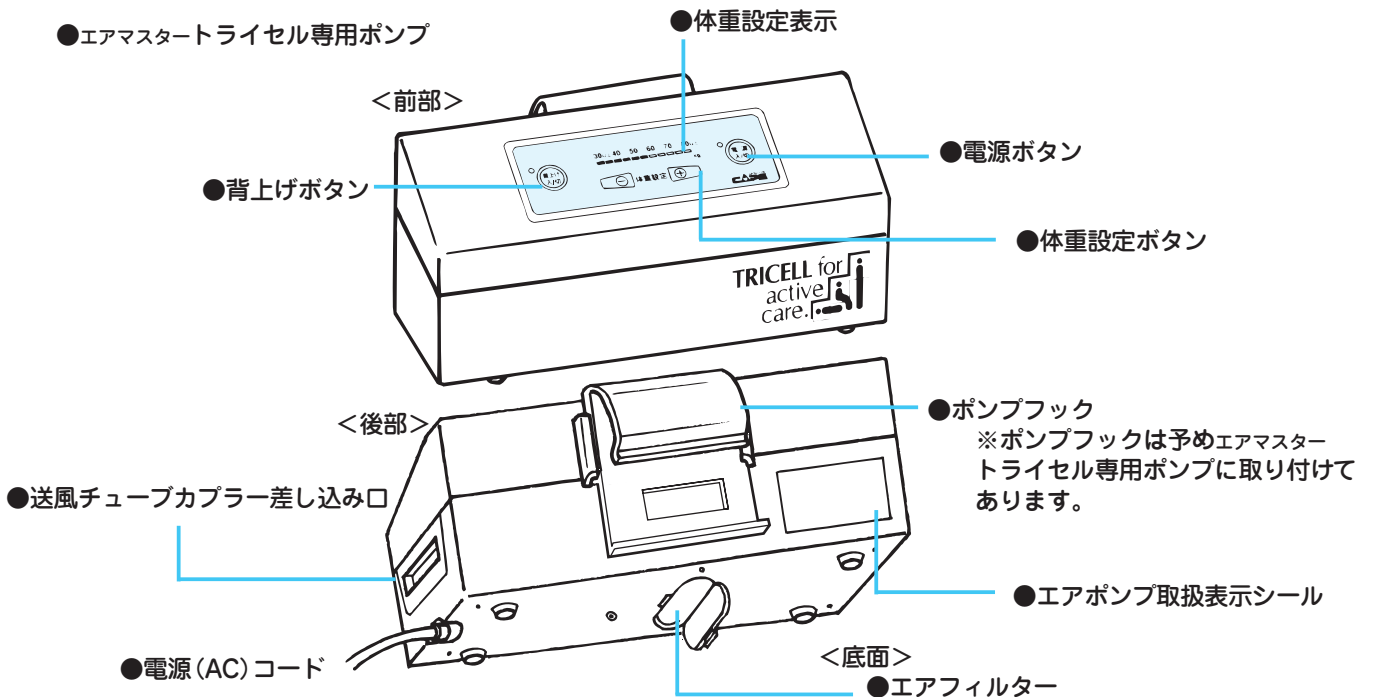


※ポンプフックは予めエアマスタートライセル専用ポンプに取り付けてあります。

設置をしましょう

梱包を解いた後、エアマスタートライセル専用マットレスとエアマスタートライセル専用ポンプを送風チューブで接続し、ベッド上に設置します。以下にその手順をご説明します。

1 エアマスタートライセル専用マットレスをマットレス(敷き布団)に固定します。

- エアセルが並んでいる面を上にして設置してください。
- 送風チューブが出ている方が、必ず足側になるように設置してください。
- 頭側巻き込み部、足側巻き込み部をマットレスや敷き布団の下に敷き込んで固定してください。
- エア抜き栓がしっかり送風チューブに差し込まれているかを確認してください。

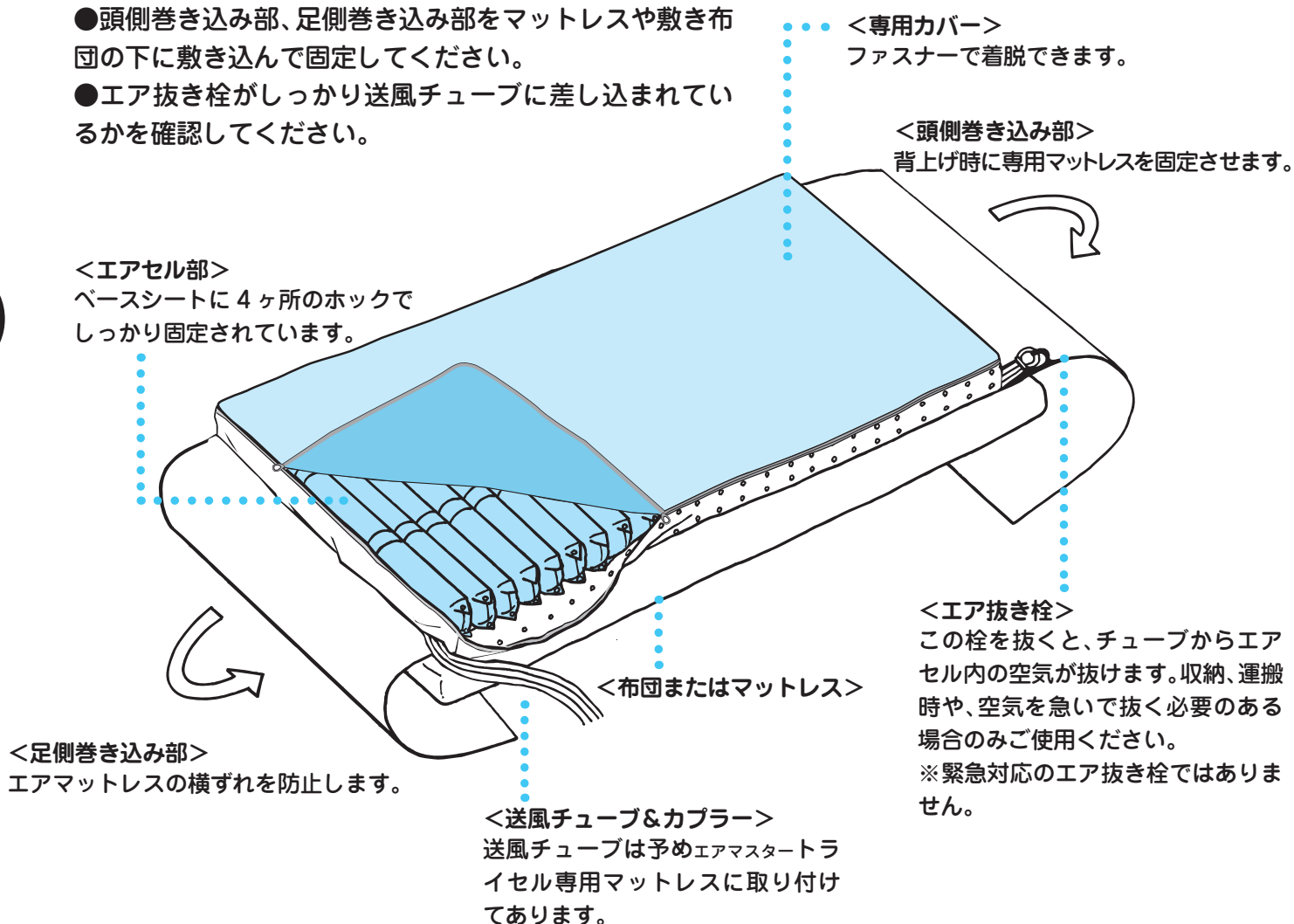

送風チューブは必ず足側になるように設置してください。送風チューブが頭側になると、送風チューブが首にからんで事故を招く恐れがあります。




送風チューブをエアマスタートライセル専用マットレスやマットレス(敷き布団)の下に巻き込まないでください。送風チューブが折れ曲がったり圧迫されると、期待した効果が得られない恐れがあります。

2 エアスタートライセル専用ポンプに送風チューブを接続します。

●エアスタートライセル専用マットレスに付いている送風チューブのカプラーを、エアスタートライセル専用ポンプの送風チューブ差し込み口に、しっかりと差し込みます。

※カプラーを差し込む向きは問いません。

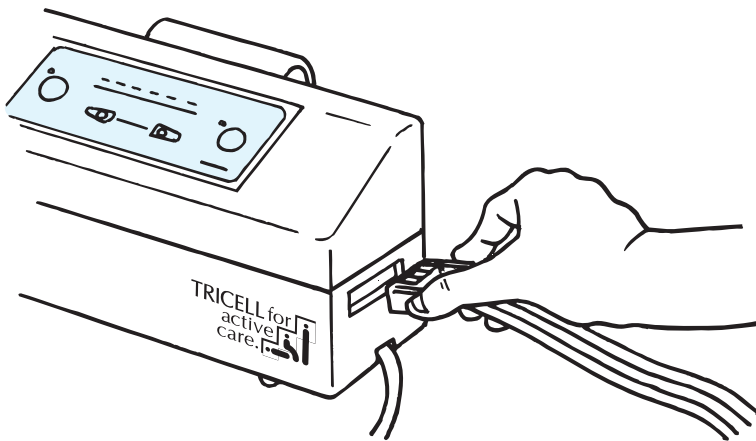

カプラーが確実に接続されていることを確認してください。

注意

送風チューブが外れないように、カプラーを確実に接続してください。エアセルに空気が送られないと、エアスタートライセルは機能しません。

注意

エアスタートライセルの専用ポンプから専用マットレスを取り外す場合、送風チューブ先端のカプラーをつかんで引き抜いてください。


※送風チューブを持って引き抜くことはおやめください。

設置をしましょう

3

エアマスタートライセル専用ポンプを正しく設置します。

●ベッドでご使用の場合はポンプフックを使い、エアマスタートライセル専用ポンプをベッドのフットボードに引っ掛けて固定してください。ポンプフックは図のように斜めに傾けてから引っ掛けると楽にできます。

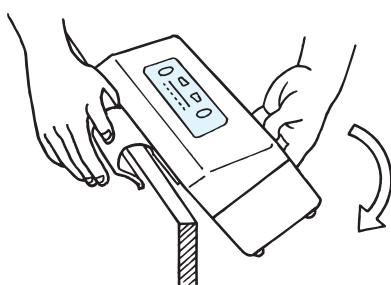

●布団や引っ掛ける場所のないベッドでご使用の場合は、エアマスタートライセル専用ポンプを足側などの邪魔にならない位置の水平で安定した場所に置いてください。

説明

送風チューブが折れ曲がっていると、エアマスタートライセル専用マットレスに十分な空気が送られません。

●氷点下になる場所で長時間保管された場合は、室温になじませてからご使用ください。

警告

エアマスタートライセル専用ポンプを設置する際、送風チューブを折り曲げないでください。十分な空気が送られないと、期待した効果が得られない恐れがあります。

注意


エアマスタートライセル専用ポンプをベッドの脚部などに直接接触させないでください。振動音を発する恐れがあります。また、枕元への設置も避けてください。わずかな作動音ですが安眠を妨げる可能性があります。

注意

エアマスタートライセル専用ポンプを高さ調節のできるベッド脇の床に設置した場合、エアマスタートライセル専用ポンプがベッドのフレームと床との間にはさまれないよう注意してください。ベッドの高さを下げる際、フレームと床の間にはさまり、ポンプが破損する恐れがあります。

警告

エアマスタートライセル専用ポンプを湿気の多い場所で使用したり、エアマスタートライセル専用ポンプに水などの液体をかけたり、こぼしたりしないでください。感電事故や故障の原因となります。

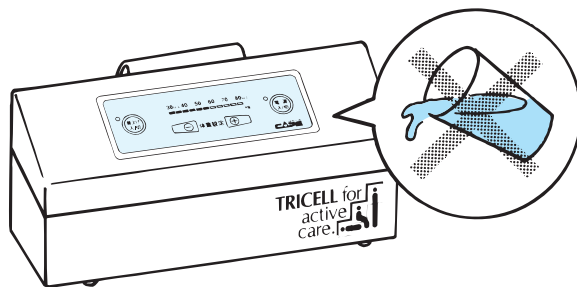

注意

エアポンプの足ゴムは、P タイルなどの床材に着色移行する場合があります。じかに床へ置く(設置)場合は、足ゴムが床材に直接接触しないよう、布や紙を敷いてその上にエアポンプを置いてください。

4

エアマスタートライセル専用ポンプをコンセントにつなぎ、ポンプを作動させてエアセル部を膨らませます。

●エアマスタートライセル専用ポンプの電源プラグを、家庭用コンセント(100V/50/60Hz)に差し込みます。


●コンセントを入れると自動で電源が入り、約20分ほどで使用可能状態になります。

→電源ボタン横の赤ランプが点灯します。

→初期設定体重表示が「50kg」を表示します。

説明

エアマスタートライセル専用マットレスに十分な空気を送るために、約20分かかります。

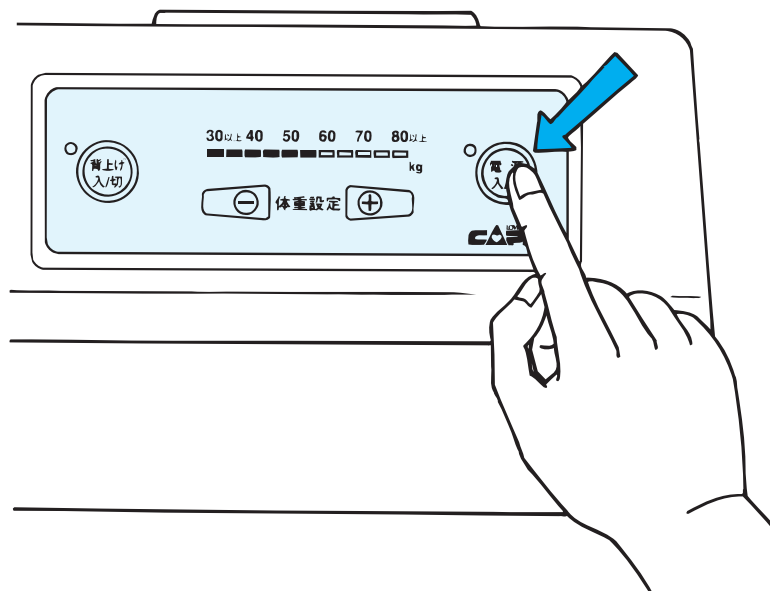

警告

エアマスタートライセル専用ポンプの電源プラグは、必ず日本国内の家庭用コンセント(100V/50/60Hz)に確実に差し込んでお使いください。これ以外の電圧で使用すると、火災事故や故障の原因となります。

注意

使用中の空気もれや使用手順の不備があった場合、電源ボタン横のランプが点滅します。チューブの接続を確認後、再度はじめてから操作を行ってください。

警告

濡れた手で、エアマスタートライセル専用ポンプの電源プラグを抜き差ししないでください。感電事故や故障の原因となります。

説明

エアフィルターは使用場所の環境にもよりますが、連続使用の場合、1年に1回の交換をお薦めします。

実際に使用しましょう

エアマスタートライセル専用マットレスが最も効果的になるように、使用される方に合わせて体重設定を行います。以下にその手順をご説明します。

1 使用される方の体重を設定します。

●P.8～11の準備を行い、エアマスタートライセル専用マットレスの2系統以上のエアセルが完全に膨らんでいる状態にします。

●体重設定表示を見ながら体重設定ボタンで体重を合わせ、約15分間そのままにしてください。

説明


エアマスタートライセル専用ポンプから送られる空気圧が変化し、安定するまで約15分かかります。

説明

電源スイッチを押して電源を切っても、再度電源を入れた際には前に設定した値が表示されます。尚、コンセントを抜いた際には再度の設定が必要となります。

確認

送風チューブが出ている方が足側になっていることを確認してください。

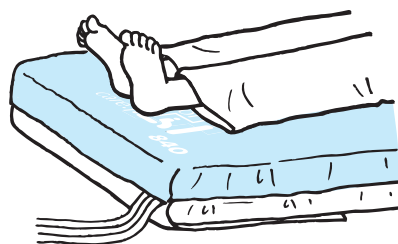


確認

エアマスタートライセル専用マットレスの2系統以上のエアセルが膨らんでいることを確認してください。

お願い

エアマスタートライセルは、介護者による「体位交換」が必要な方にとって、それを不要にするものではありません。ご使用に当たっては、これらのことをご理解いただき、ご了承くださいようお願いいたします。

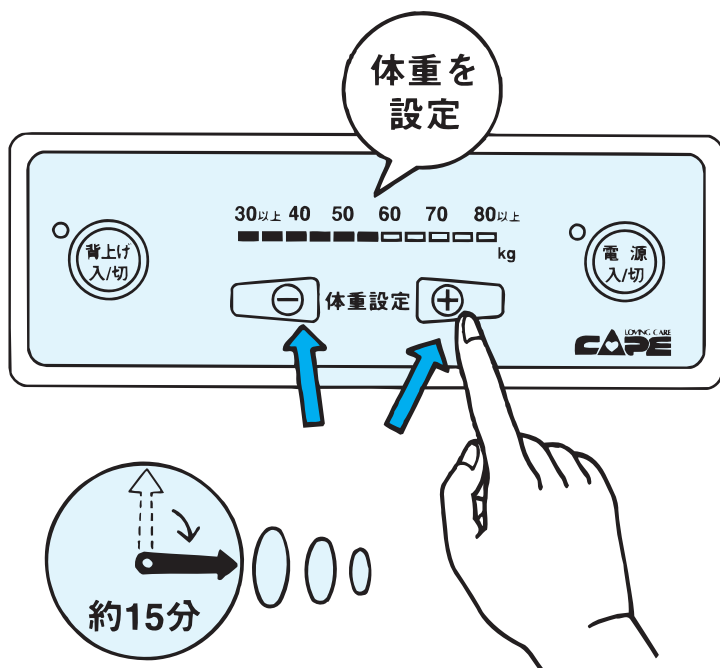

2

マットレス内圧が安定した後、ご使用者に寝てもらいます。



エアマスタートライセルをご使用の際は、必ずベッドにサイドレールを取り付けてください。サイドレールを使用しない場合には、ベッドからの落下・転落を招く恐れがあり、事故の原因にもなります。



エアマスタートライセルの上で、飛び跳ねないでください。ケガをしたり、破損の原因になります。エアマットレスの上で立ち上がったり、膝を立てたりしないでください。局所に高い圧力がかかり続けるとエアセル破損の危険性があります。



エアマスタートライセルの上で端座位や移乗する際には、必ず補助の方の立ち会いのもと行ってください。ベッドからの落下・転落を招く危険があります。



エアマスタートライセルの上での喫煙はお止めください。火災の原因等になることがあります。



二人以上で使用しないでください。本来の性能を発揮できない恐れやマットレス破損の原因になります。



エアマスタートライセル専用マットレスの表面を、針や先のとがったもので刺したり、傷つけたりしないでください。エアセルのパンクの原因となり、エアマスタートライセルが正しく機能しなくなります。



トライセルご使用時にベッドから乗降する際は、送風チューブが接続されていない側(足元から向かって左側)から行なってください。エアセル(空気の筒)と送風チューブの接続部分に繰り返し体重がかかることにより破損する可能性があります。




エアマスタートライセル専用カバーとエアマスタートライセル専用マットレスとの間には、ベッド用パッドなどを入れないでください。期待した効果が得られない恐れがあります。

実際に使用しましょう

エアマスタートライセル専用マットレスは、背上げ時の底づきを回避する「背上げ対応機能」が搭載されています。以下に背上げ時の使用手順をご説明します。

1 エアマスタートライセル専用ポンプの「背上げボタン」を押してください。

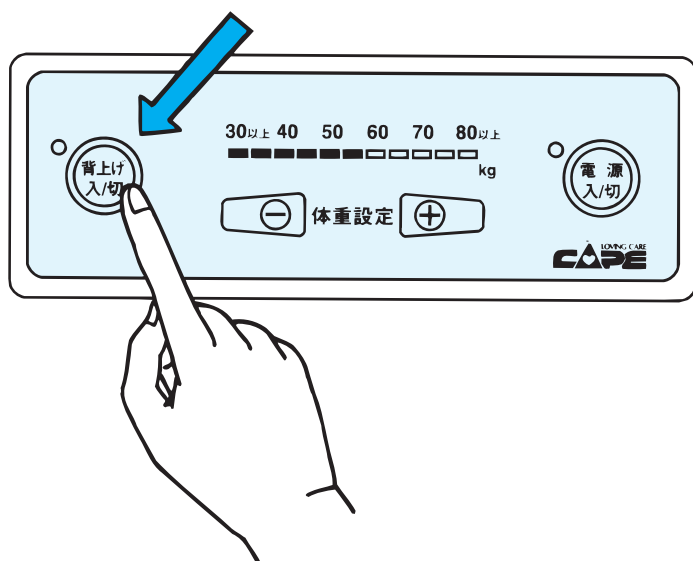

説明 エアマスタートライセル専用ポンプから送られる空気圧を調整し、波動機能を停止させます。それによって臀部の「底づき」を防止します。

説明 エアマスタートライセル専用ポンプから送られる空気圧が安定するまでスイッチを入れてから約9分かかります。

説明 背上げ対応機能は約2時間で自動的に解除され、通常時の波動と設定圧に戻ります。

説明 専用ポンプの電源を入れた直後に「背上げボタン」を押してもONになりません。約15分お待ちください。

お願い 「背上げ対応機能」は、背上げ時に臀部に集中する圧力による「底づき」を防ぐために、全てのエアセルに空気を満たして内圧を上げる仕組みになっています。したがって1回の背上げは2時間以内を想定しています。この時間を越えて背上げの必要がある際は「背上げ対応機能」を用いず、背上げの角度を30度以下にすることをお勧めします。2時間を超えて背上げする場合は改めて「背上げボタン」を押してください。

2 使用される方が寝た状態で、ベッドを背上げ状態にします。

- P.8~13の準備を行い、エアマスタートライセル専用マットレスの内圧が安定した状態にします。
- 背上げの角度は、70度の角度を限度としてください。



工夫

トライセルをより効果的に使用するために身体にやさしい背上げ機能のベッドを選びましょう。背上げ時に身体にそって床板が伸び、腰と膝がゆるやかに曲がるのが良いでしょう。身体のずれと圧迫を軽減します。


底つきチェックの方法 (参考)

●床ずれが最も起きそうな場所(通常は仙骨部)で、エアマットレスが完全に押しつぶされていないかどうか(「底つき」を起こしていないか)を介護者が手を使って直接確認し、適正な空気圧に調整します。

●「底つき」の確認は、1日1回以上行うようにしてください。

説明

人間は同じ体重でも、太っている/痩せている、背が高い/背が低い、筋肉質/脂肪質など、体型は様々です。又、側臥位や背上げ時など、寝ている姿勢も変化します。これらの条件の変化により圧迫される部位や面積、またそこにかかる圧迫の度合いがそれぞれに異なります。

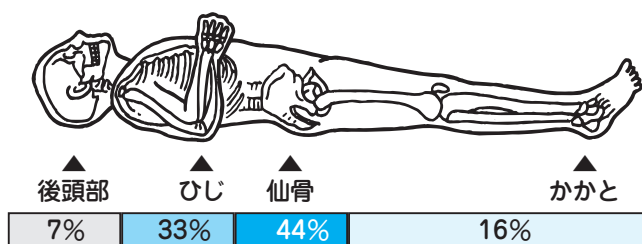

仙骨部には、体重の約40%が集中します。

手順

1

エアマットレスとマットレスや布団などの寝具との間で、床ずれが最も起きそうな場所の真下に、手のひらを上に向けて、水平に差し入れます。

●底つきを起こしている(体重を手に直接感じる)場合

空気圧が低すぎます。体重設定ボタンで現状の設定値より重く設定し、空気圧を上げます。


確認

空気圧の変化が落ちついていることを確認してください。

手順

2

中指を曲げてみて、エアセル部の押しつぶされ具合(底つき)を調べます。

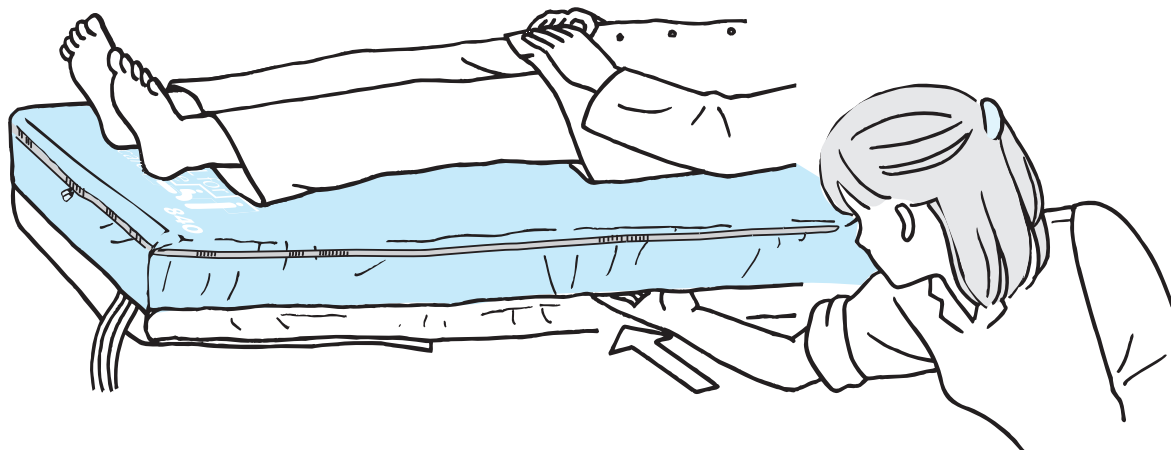


手順

3

前ページの操作の後、空気圧が変化して落ちつくまで5分間以上待ち、再度エアマットレスの底づきを調べます。最も押し潰されている場所で、2.5cm程度（指の幅2本分程度）の余裕が指先で感じられる状態が適正とされています。この状態になるまで、手順1～3を繰り返します。


約2.5cm以上、患者と手の間が潰されていないことを確認する

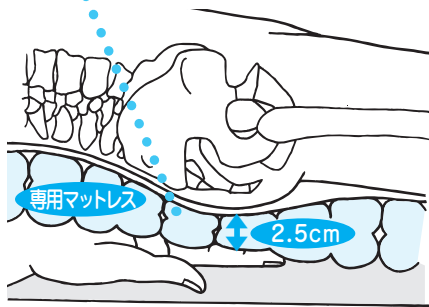

※アメリカ厚生省保健政策調査課(AHCPR)発行の「褥瘡の治療」のガイドラインユーザーマニュアルより引用。

注意

エアマスタートライセルのエアセル部は3系統に分かれており、約5分間隔で膨張と収縮を繰り返しています。底づきを調べる時は、膨張しているエアセルについての堅さを調べてください。

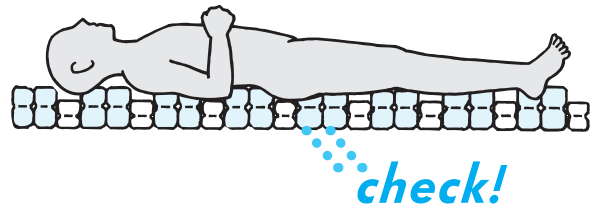

注意

ご使用中、停電やコンセントを抜くなどにより電源が切れた場合、通電後に再び電源ボタンを押し直し、体重設定を行ってください。

機器による接触圧力チェック

接触圧力測定器の活用により療養者の接触圧力を容易に測定することができます。床ずれ発生の危険度や体圧分散式マットレスの適合評価などを数値で確認でき、床ずれ防止の環境づくりにお役立ていただけます。



パームQは乾電池式で持ち運びにも便利な携帯型接触圧力測定器です。センサーパッドを測定したい部位に設置し、測定を開始するだけの簡単操作で、手早く正確な接触圧力が測れます。

携帯型接触圧力測定器
パームQ CR-490



定期的なお手入れのしかた

エアマスタートライセル専用マットレスの 空気圧点検

- エアマスタートライセルをご使用中は、必ず1週間に1度の間隔でエアセルの空気圧点検を行ってください。なお、エアマスタートライセルの設置場所を変えた場合や、停電などで一時的に作動が停止した場合などには、1週間以内の間隔でも、その都度行ってください。
- 体重設定表示の設定(P.12)を確認し、設定した数値が表示されていることを確認してください。設定値が違っている時、電源プラグをコンセントから外した場合は必ず、直ちにP.11~17の手順に従って設定し直してください。
- 異常や変化が感じられるとき、また困ったこと、わからないこと、不安なことが生じた場合には、P.20~21「故障かな?と思ったら」をご覧になり、確認してください。送風チューブの接続不良や、エアセルの損傷による空気漏れなども考えられます。

専用カバーのお手入れ

1. 表面に付着した汚れを予め取り除いた後、専用カバーをマットから取り外します。
2. 洗濯機で弱い洗濯ができます。
洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
3. 低い温度でのタンブル乾燥ができます。
乾燥機による乾燥、または陰干しをしてください。

洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示ラベル（洗濯ラベル）をご参照ください。

お願い

- ・ドライクリーニング(石油系は除く)、オートクレーブは、表面のポリウレタン樹脂を傷めますので使用しないでください。
- ・タンブル乾燥機を使用する場合、槽内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
- ・乾燥機による乾燥後は自然乾燥を行ってください。
- ・カバー損傷防止のため洗濯ネットを使用してください。
- ・アイロン、スチームプレスは絶対に避けてください。

各部の掃除

エアマスタートライセル専用マットレスのお手入れ

(専用カバーにより覆われていますので、頻繁な掃除の必要はありません)

1. エアマスタートライセル専用ポンプを電源ボタンを「OFF」(電源ボタン横の赤ランプが消えた状態)にして、エアマスタートライセル専用ポンプから送風チューブを外します。
2. エアセル部の空気を抜いてください。
3. エアマスタートライセル専用カバーを取り外します。
4. エアセル部を掃除します。
 - ・布に薄めた中性洗剤かぬるま湯(50℃以下)を含ませ、固くしぼります。
 - ・上記の布で、エアマスタートライセル専用マットレス内のエアセル部の表面の汚れをふき取ります。
 - ・陰干しして自然乾燥させます。
5. エアマスタートライセル専用カバーを取り付けます。

※エアマスタートライセルのエアセルは素材(ウレタンフィルム)の特性上、長期間使用すると黄変することがありますが、機能的には問題ありませんので続けてご使用ください。

お願い

ベンジン、シンナー、クレゾールなどは、材質を痛めますので使用しないでください。



保管・廃棄方法

エアマスタートライセル専用ポンプのお手入れ

1. エアマスタートライセル専用ポンプのスイッチを「OFF」(電源ボタン横の赤ランプが消えた状態)にして、コンセントから電源プラグを抜きます。
2. 布に薄めた中性洗剤かぬるま湯(50℃以下)を含ませ、固くしぼります。
3. 2.の布で、エアマスタートライセル専用ポンプの表面の汚れをふき取ります。
4. 底面にあるエアフィルターが汚れている場合は、エアフィルターを交換(P.11参照)してください。

注意

エアマスタートライセル専用マットレスから送風チューブを取り外さないでください。接続できなくなったり、接続部が破損したりする恐れがあります。

警告

エアマスタートライセルを長期間使用しないとき、またエアマスタートライセル専用ポンプのお手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから外してください。火災事故や感電事故、故障の原因となります。

エアマスタートライセル専用ポンプの電源コードを無理に引っ張ったり、傷つけたり、破損させたり、ドアに挟んだりしないでください。またコンセントからプラグを抜く時には、必ずプラグを持って抜いてください。感電事故や火災事故、故障の原因となります。

濡れた手で、エアマスタートライセル専用ポンプの電源プラグを抜き差ししないでください。感電事故や故障の原因となります。

保管方法

●エアマスタートライセルのご使用を止め、保管なさる場合は以下の手順で保管してください。

1. エアマスタートライセル専用ポンプのスイッチを「OFF」(電源ボタン横の赤ランプが消えた状態)にして、コンセントから電源プラグを抜きます。
2. エアマスタートライセル専用ポンプから送風チューブを外し、(この時、送風チューブ先端のカプラーをつかんで引き抜いて下さい。)エアセル部の空気を抜いてください。
3. 左記の「各部の掃除」と同様に、汚れを落とします。
4. エアマスタートライセル専用マットレス、エアマスタートライセル専用カバーは折りたたみ、お届け時に入っていたビニール袋に入れます。
5. エアマスタートライセル専用ポンプは電源コードを束ねて、お届け時に入っていたビニール袋に入れます。
6. それぞれを、お届け時に入っていた箱に納めて、保証書(本取扱説明書)と共に保管します。

お願い

- ・落下しないよう、安定した所に置いてください。
- ・箱がつぶれるような重い物を、上に重ねないでください。
- ・湿気の少ないところに保管してください。

エアマスタートライセルを廃棄する場合

各パーツを素材ごとに分け、各行政のゴミ分別方法に従って廃棄してください。

故障かな?と思ったら…

症 状	考えられる原因
●ポンプが作動しない (電源ランプが点灯していない)	電源プラグがコンセントに入っていない 電源が入っていない
●マットレスが膨らまない/ 柔らかすぎる	ポンプが作動していない 送風チューブが外れている 送風チューブが折れ曲がっている エアフィルターが詰まっている 体重設定ボタンの調整が誤っている エア抜き栓が抜けている
●エアセル部が部分的にしか 膨らまない	エアセルどうしをつなぐ送風 チューブが外れている
●マットレスが硬すぎる	体重設定ボタンの調整が誤っている
●ポンプの作動が一時的に停止する	故障ではありません
●ポンプの音が異常に大きい	ポンプの上に物がのっている ポンプが他の物に触れている ポンプを振動しやすい物の上に 置いている ポンプが水平に設置されていない
●停電が発生した	

エアマスタートライセルをお使いになっていて、または点検の際に何らかの異常や変化、疑問を感じられたときは、上記のことを確認し、それぞれについての説明が記載されている参照ページをご覧ください。それでも原因が不明なときは、故障や部品破損の可能性あります。ご使用を止め、裏面の保証書をご覧ください。ご購入先、もしくは株式会社ケーブまでお問い合わせください。

対処方法	取扱説明書の参照ページ
電源プラグをコンセントに入れてください 電源ボタンを「ON」にしてください	P.11 P.11
電源ボタンを「ON」にしてください 送風チューブを接続し直してください 送風チューブを伸ばしてください エアフィルターを交換してください 体重設定ボタンを適正に調節してください エア抜き栓をしっかり差し込んでください	P.11 P.9 P.9 ~ 10 P.11 P.12 ~ 17 P.8
専用カバーを開き、抜けている箇所の送風チューブを接続し直してください	お問い合わせください
体重設定ボタンを適正に調節してください	P.12 ~ 17
そのままでご使用ください	P.12
物を取り除いてください 物を取り除いてください ポンプを安定した場所へ設置してください	P.10 P.10 P.10
ポンプを水平に設置してください	P.10
停電回復後、再度、電源ボタンを押し直し、体重設定を行ってください	P.12 ~ 17

保証書

保証書(本書添付)

- この製品には、保証書を添付しております。保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をご確認の上、販売店からお受け取りください。
- 保証書に記載している内容は必ずお読みください。

保障期間

保障期間は、マットレス・ポンプともにお買い上げ日より3年間です。

修理依頼について

まず、「故障かな?と思ったら」(P.20~21)を参照して考えられる原因をお調べください。それでも異常があるときは、製品の電源を切って、お買い上げの販売店または株式会社ケーブにお問い合わせください。

保障期間中は…

- 正常な使用状態で故障が生じた場合、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または株式会社ケーブが修理させていただきます。
- 修理依頼される際は、保証書をご提示ください。
- また、保証書記載2の有料修理に当てはまる場合は、保証対象外となります。詳しくは保証書をご確認ください。

保証期間経過後は…

- お買い上げの販売店または株式会社ケーブにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様の要望により有料にて修理いたします。

■仕様一覧
エアマスタートライセル

介護保険 福祉用具貸与対象品目
TAISコード 00206-000039

タイプ/品番		標準 CR-280	ワイド CR-320
専用 マットレス	品番	CR-282	CR-321
	サイズ	幅84×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm
	重量	4kg	4.4kg
	材質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工 抗菌 ベースシート/ナイロンオックスすべり止め加工 抗菌	
専用カバー (マットレス付属)	品番	CH-234	CH-321
	材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布 防水・抗菌・伸縮	
専用ポンプ	品番	CR-281	
	サイズ	幅31.5×高15×奥行10cm (ポンプフック装着時/幅31.5×高15×奥行14.5cm)	
	重量	2.2kg	
	材質	ケース/ABS樹脂、フック/PA樹脂	
	その他	定格：AC100V、8W、50/60Hz ACコード：4m	



- ベッドのサイズに合うマットレスを使用してください。
- マットレスのサイズは基本寸法であるため、マットレス内圧の状態やご使用状況により多少異なる場合があります。

エアマスタートライセル

保証書

本書は、日本国内において取扱説明書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に本書記載内容にて無料修理させていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。※欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ずご記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失なさいませぬように大切に保管してください。

- 本書はエアマスタートライセル専用ポンプ及びエアマスタートライセル専用マットレスの保証書とさせていただきます。
- 保証期間内であっても、以下の場合には有料修理、または保証対象外となります。
 - 取扱または操作が不適当であったため生じた故障。移動、落下等による故障および損傷。
 - 当社(株式会社ケーブ)以外での改造が加えられた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、塩害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 接続している他の機器が、本製品の仕様に適合していないために生じた故障および損傷。
 - 本製品以外に故障の原因がある場合。
 - 保証書のご提示がない場合。および、保証書の所定事項に記入がない場合、あるいは字句の書き換えが認められた場合。
 - ポンプ本体に製造番号(シリアルナンバー)の表示がない、もしくは確認ができない場合。
- 本保証書に記入してある販売店に修理が依頼できない場合は、株式会社ケーブにご相談ください。

無料修理保証期間(お買い上げ日)	年	月	日より3年間
※お客様			
お名前	TEL		
ご住所			
※取扱店			
店名/住所/TEL			

株式会社 ケーブ

〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL : 046-821-5511(代) FAX : 046-821-5522
ホームページ : <http://www.cape.co.jp/>
E-mail : lovingcare@cape.co.jp