

Medi+Wash

生体用洗浄器 メディ・ウォッシュ

2つのノズルと洗浄圧の無段階調整で高い洗浄効果を実現した電動式生体用洗浄器。

CRM-100
35,000円(+税)
本体・ノズル×2セット

1年間保証

本体
サイズ : 幅19×奥行13×高20cm
重量 : 1.2kg(乾電池、洗浄水含まず)
材質 : ABS樹脂
電源 : 単3アルカリ乾電池4本(6V仕様)
水圧 : 約10~12psi
タンク容量 : 1.2ℓ

ノズル
サイズ : 幅21.5×奥行22×高12cm(ノズル装着時)
重量 : 160g
材質 : ABS樹脂、ステンレス

アタッチメント
ノズルカバー : シャワーノズル、ストレートノズル
ノズルカバー : 数量20枚
ノズルカップ : 数量10枚
洗浄チューブ : 1メートル

※ノズルアタッチメント(シャワー、ストレート)のみも購入いただけます。



一般医療機器(クラスI)特定保守管理医療器
製造販売届出番号: 14B3X90004000001
JMDNコード: 34628000



使いやすい、持ち運びやすい

メディ・ウォッシュは、洗浄圧を手元で簡単調整でき、残量や角度に関係なくノズルから出る洗浄圧を一定に保つ機能を持っています。広範囲に洗浄する状況や洗浄し難い創のピンポイント洗浄も、この1台でまかなえ、持ち運びも容易です。褥瘡の洗浄だけでなく、潰瘍や熱傷、術後縫合創などの洗浄にも幅広くご利用いただけます。



手元レバーで簡単調整できる「洗浄圧調整システム」

洗浄開始・停止はトリガーを握るだけの簡単操作。洗浄圧は、トリガーの握り具合で無段階に調整できます。握りやすいノズルは、噴射方向が定めやすく、洗浄効率を高めます。



洗浄の用途に応じて選べる「2タイプのノズル」

広い範囲を洗浄するのに最適なシャワーと、汚れをピンポイントで落とすストレート。ノズルは洗浄方法に合わせて2タイプから選べます。



■シャワーノズル
約50°の角度で円錐状に拡散。創全体を手早く洗浄することができます。

■ストレートノズル
約1mm径の直線状に噴射。細かな部分の汚れを集中的に落とすことができます。

跳ね返りを防止する「ノズルカップ・ノズルカバー」

洗浄時の跳ね返りに配慮した、使い捨てノズルカップおよびノズルカバーをセットして、効果的な洗浄をサポート。ストレートノズルに対応する跳ね返り防止カップは、切り欠き部分から水を一定方向に排出します。



使いやすい、洗浄効率を高める「簡単・コンパクト設計」

カートへの搭載や持ち運びも楽なコンパクト設計。ノズル本体と替えのノズルをセットできるトリガー受けも取り付けられます。また、タンクの水を冷めにくくする保温バッグをオプションでご用意しています。



オプション

- 保温バッグ本体用(肩掛けタイプ)
単品価格: 2,100円(+税)
品番: CRM-101
サイズ: 幅16×奥行16×高13cm
材質: アルミ箔、ポリエステル、ポリエチレン
- 保温バッグタンク用
単品価格: 1,900円(+税)
品番: CRM-102
サイズ: 幅15×奥行15×高16cm
材質: アルミ箔、ポリエステル、ポリエチレン

補充品

- ノズルカバー
単品価格: 1,250円(+税)
品番: CRM-103
数量: 50枚
サイズ: 幅21×高17cm
材質: ポリエチレン
- ノズルカップ
単品価格: 2,500円(+税)
品番: CRM-104
数量: 50枚
サイズ: 外径11×深3cm
材質: ポリエチレン
- 洗浄チューブ
単品価格: 2,500円(+税)
品番: CRM-105
数量: 5メートル
サイズ: 幅9×奥行9×高6cm
材質: シリコン
- タンク
単品価格: 2,000円(+税)
品番: CRM-106
数量: 1本(キャップ付き)
容量: 1.2ℓ
材質: ポリエチレン

体圧分散式マットレス 選択チャート

体圧分散式マットレスは、ご本人の要介護だけでなく、療養環境やさまざまな床ずれ発生因子をアセスメントし、リスクに応じたマットレスを選択する必要があります。

寝返り
つかまらないうて出来る

動きやすさを重視したウレタンフォームマットレス

自立促進と体圧分散

特殊寝台付属品
ミルフィ
体圧分散/圧再分配性能 ★★★

自立促進と体圧分散
(リバーシブルタイプ)

特殊寝台付属品
ホスピタマットレス
体圧分散/圧再分配性能 ★★

自立促進と体圧分散
(リバーシブルタイプ)

特殊寝台付属品
メリー&ハリー
体圧分散/圧再分配性能 ★★

寝返り
何かにつかまれば出来る

寝返り
出来ない

静止型マットレス・ウレタンフォームマットレス

床ずれ発生の2大要因の1つである「①外力」を小さくする

床ずれ防止と自立促進を重視

床ずれ防止用具
キュオラ
体圧分散/圧再分配性能 ★★★

床ずれ防止を重視

床ずれ防止用具
ディンプルマットレス
体圧分散/圧再分配性能 ★★★★★

骨突出が中等度以上の場合や既に床ずれがある場合はリスクが高まるので要注意。エアマットレスへの変更も検討。

ウレタンフォームマットレスは、骨突出や関節拘縮など、床ずれの危険因子を持つ方の対応には限界がありますので、予防的に使用することをおすすめします。
(文献)「体圧分散式マットレス選択の落とし穴」/美濃良夫/月刊ナーシング2006年7月号

寝返り
出来ない

寝返り
出来ない

エアマットレス(床ずれ防止・ケア環境を整える・介護負担軽減)

床ずれ発生の2大要因である「①外力」と外力のかかっている「②時間」を少なくする

床ずれ防止と安定感を重視

- 静止型マットレスからの移行
- 端座位・離床を行う

床ずれ防止用具
ネクサスR
体圧分散/圧再分配性能 ★★★★★

上敷タイプで高機能の性能

- 今あるベッドマットレスの上に敷きたい
- 背上げ時にエアマットレスがズレて困っている

床ずれ防止用具
トライセルE
体圧分散/圧再分配性能 ★★★★★

介護負担軽減

自動体位変換機能

体位変換器
ラグーナ
体圧分散/圧再分配性能 ★★★★★

最高レベルの体圧分散性能

- 床ずれを持っている
- 床ずれの状態に悩んでいる(DTI、ポケット、ステージIV)

床ずれ防止用具
ビッグセルインフィニティ
体圧分散/圧再分配性能 ★★★★★

寝返り
出来ない

エアマットレス
ウレタンフォームマットレス
専門分野
ウレタンフォームマットレス

マットレス用
シート
携帯型
接触圧力測定器

補助用具
車いす用
クッション

電動式
生体用洗浄器
(医療従事者向け)

41

42


床ずれ対策 11のポイント

1 発生原因 | 主な原因は体重の骨突出部位への圧力集中です。


- 体重の集中(圧力)

骨の突出した部位は局所へ圧力が集中しやすく、床ずれ発生危険度が高くなります。
 - 圧力、ずれ、摩擦などの物理的外力の継続(時間的継続性)


局所への外力の集中が長時間続くと、血流が障害され皮膚がダメージを受けます。
- 床ずれの発生 = 外力(圧力・ずれ・摩擦) × 時間

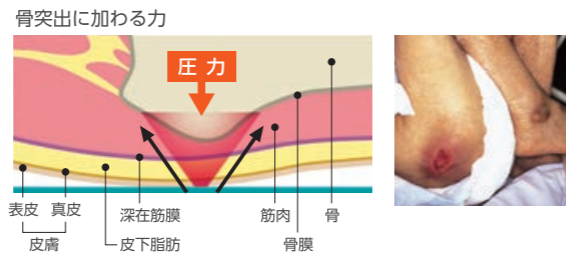

2 圧力と応力 | 応力とは、圧力、ずれ、摩擦などの物理的外力に対して、皮膚組織内に発生する力のことです。

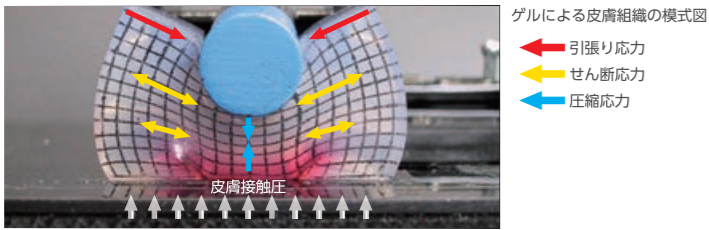

3 好発部位 | 体位によって圧力が集中する箇所が異なります。

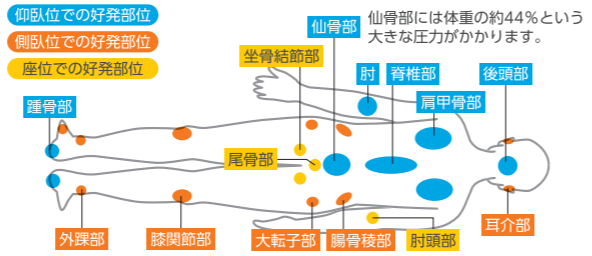

4 床ずれの分類 | 「創」を評価するスケールは様々なものがあります。

【深達度分類】

■ NPUAP分類 — 予防を重視し、看護の領域で主に使用

National Pressure Ulcer Advisory Panel(全米褥瘡諮問委員会)

DT疑い ※Suspected Deep Tissue Injury 圧力およびまたはせん断力によって生じる皮下軟部組織の損傷に起因する、限局性の紫または栗色の皮膚変色、または血疱(引用:「褥瘡看護技術」照林社)

紅斑 (圧迫しても蒼白にならない)

真皮におよぶ損傷

皮膚全層および皮下組織に至る 深在性筋膜におよぶ損傷

筋肉・骨支持組織におよぶ損傷

深さの判定が不能

発赤の場合、ステージ I の褥瘡を見分ける方法として、透明プラスチック板などが使用されています。

発赤判定ツール(ケアオリジナル品)

赤くなっている部分を圧迫する

- 退色する …… 褥瘡ではない
- 赤みはそのまま残っている …… ステージ I の褥瘡

■ Shea分類 — 治療目的、医学領域で主に使用

【日本褥瘡学会 褥瘡評価ツール】

■ DESIGN-R® (DESIGN®) — 重症度を分類でき、経過評価可能 D…深さ E…滲出液 S…サイズ I…炎症・感染 G…肉芽組織 N…壊死組織 P…ポケット

5 リスクアセスメント | 床ずれ発生の予測には、適切な時期に的確にアセスメントするスケールが効果的です。

※リスクアセスメントの結果がケアに直結できる妥当性、信頼性が検討されているスケールを選んで用いることがポイントです。

■ ブレーデンスケール

看護師が日常の業務の中で観察・評価できる6項目を抽出し、評点化する代表的なスケール。リスクを評点化することで、客観的に判断できるのが特長。

知覚の認知 湿潤 活動性 可動性 栄養状態 摩擦とずれ

■ K式スケール/在宅版K式スケール

前段階要因と引き金要因の2段階で評価する Yes/No 方式のスケール。骨突出の体圧測定により、リスク判定の簡便性と妥当性を第一に考えたスケール。

● 前段階要因	自力体位変換	骨突出	栄養状態	介護者の知識
● 引き金要因	体圧	湿潤	ずれ	栄養

■ OHスケール

4項目の危険要因を採点し、その合計点により患者を4段階(危険因子なし、軽度、中等度、高度)に分類できるスケール。シンプルで使いやすいのが特長。

自力体位変換	病的骨突出	浮腫	関節拘縮
--------	-------	----	------

■ 厚生労働省危険因子評価

数値化するスケールとは異なり、自立度の低い患者について、1つでも危険因子があれば、看護計画を立てるという介入に直結する評価リスト。

基本動作能力	病的骨突出	栄養状態	皮膚湿潤	関節拘縮	浮腫
--------	-------	------	------	------	----

6 身体的特徴 | 「病的骨突出」「関節拘縮」の方は、床ずれ発生リスクが高くなります。



7 体圧分散式マットレスの役割 | 局所にかかる圧力の強さを弱くし、圧力の集中を継続させないことがポイントです。

■ 圧力の軽減

身体の接触面積を増やすことで局所への圧力を分散させる。

■ 時間の継続を断つ

エアマットレス(エアセル)の膨張収縮により、局所に圧力が継続する時間を少なくさせる。

単一素材の場合、体重が集中する腰部の落ち込みに要注意。


■ 3連圧切替の有効性 <ネクサスR>

使用開始直後 15分後(圧管理開始) 20分後 25分後 30分後

圧力センサーの電子制御により、設定した体重に最適な圧力に15分かけて、ゆっくりと調整します。

圧力センサーの電子制御と5分間隔で膨張収縮を繰り返すトリプルシステムにより、身体を低圧保持しながら、局所の圧力を一時的に開放します。

8 体圧危険値の目安 | 骨突出部位の体圧危険値の目安

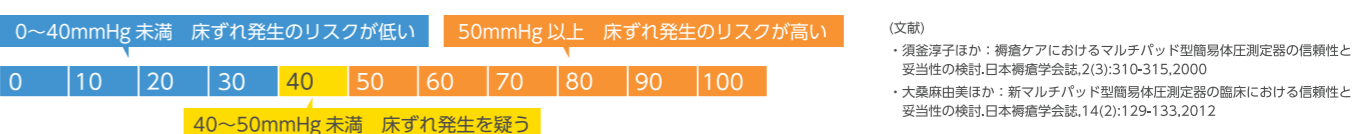

9 ずれ・摩擦 | ベッドの頭側挙上を行なう際、身体がずれないように注意が必要です。

■ 頭側挙上時の身体の位置

身体の大転子部とベッドの屈曲部位を合わせる

■ ずれの解消

<背抜き>

仰臥位 → 頭側挙上

頭側挙上 → 仰臥位

体幹にずれが生じると共に、下肢や踵部にもずれが生じています。

下肢を少し持ち上げ、ずれを解消する

<腰抜き>

腰部のずれを解除する他、頭側挙上の際に後傾してしまった骨盤をニュートラルな位置に戻すケアも推奨されています。

1 抱き起こす
2 もたれかからせる

1 側臥位にする
2 仰臥位にする

10 シーツの選び方 | ぴんと張ったシーツは× 体圧分散効果の妨げとなります。

シーツはエアセルの形状が見えるようにセット!

■ ルーズフィット or 伸縮性素材でエアマットレス本来の効果を発揮させましょう。

■ ぴんと張ったシーツ

シーツの張りによって十分な沈み込みが得られず、臀部や骨突出部位に局所的な圧力が加わります。それにより、エアマットレス本来の体圧分散効果が妨げられてしまいます。

■ ルーズフィットのシーツ

シーツの張りを緩めると身体全体をエアマットレスが広く受けとめ、エアマットレス本来の体圧分散効果が得られます。

伸縮素材のクイックフィットシーツ

エアマットレスには伸縮性のシーツが◎
 エアマットレスに使用するシーツは、張力の発生が少ない骨突出部位を包み込むように伸展する伸縮性の素材のものをオススメします。

シーツや横シーツをご使用の際は、ルーズフィットを心掛けてください。

(文献) 松尾淳子ほか:ベッドメイキングの違いがエアマットレスの圧再分配機能に及ぼす影響.日本創傷・オストミー・失禁管理学会誌 17(1):33-39,2013.

11 ポジショニング | 体圧分散の他、拘縮の予防、姿勢の安定から活動を促すなどの目的があります。

■ ポジショニングの目的

[何を目的としてポジショニングを行うか]が重要です。

大きく分けると2つのポジショニングがあります。


- 1 身体を安定させ保持する
- 2 動きを促進し能力や可能性を広げるために支持する

- 床ずれ対策 ● 拘縮・変形予防
- 筋緊張の緩和と調整 ● 呼吸の改善 ● 浮腫の改善
- 姿勢の安定により活動を促す ● 座位や立位の準備
- 安楽な姿勢作り

1 広い面で受けると身体は安定しますが、過度のサポートは動きの妨げになることもあるので注意しましょう。

エアマットレス 仕様一覧

		 スモールチェンジ ラグーナ						
マットレス	タイプ	交換						
	品番	840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000		
	JANコード	CR-700	CR-703	CR-705	CR-707	CR-711		
	セット価格	4939810007984 4939810007991 4939810008004 4939810008011 4939810008028				¥228,000(非課税)		
セット内容	マットレス	品番	CR-702	CR-704	CR-706	CR-708	CR-712	
		サイズ ※1	幅84×長192×厚13.5cm	幅90×長192×厚13.5cm	幅84×長180×厚13.5cm	幅90×長180×厚13.5cm	幅100×長192×厚13.5cm	
		重量	8.2kg	8.6kg	7.8kg	8.2kg	9.3kg	
		材質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体 プレスエア [®] (制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/側面:ナイロンオックス 下面:ポリエステルメッシュ すべり止め布付き					
		エアセル数	21本	21本	20本	20本	21本	
	価格(専用カバー付属)	¥140,000				¥160,000		
	専用カバー	品番	CH-702	CH-704	CH-706	CH-708	CH-712	
		材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)					
		価格(専用カバーのみ購入価格)	¥7,800				¥9,800	
	エアポンプ	品番	CR-701					
サイズ		幅36.5×高24.6×奥行8.7cm(ポンプフック装着時/幅36.5×高27.6×奥行15.7cm) ACコード:4m						
重量		3.4kg						
材質		ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂						
定格		AC100V、12W、50/60Hz						
電気代/日(参考値)※2	約5.1円							
価格	¥68,000							
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000102		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000103		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000104	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000105	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000106
	保証期間	3年保証(マット・ポンプ)						

		 スモールチェンジ ラグーナプラス						
マットレス	タイプ	交換						
	品番	840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000		
	JANコード	CR-721	CR-723	CR-725	CR-727	CR-731		
	セット価格	4939810008196 4939810008202 4939810008219 4939810008226 4939810008233				¥248,000(非課税)		
セット内容	マットレス	品番	CR-722	CR-724	CR-726	CR-728	CR-732	
		サイズ ※1	幅84×長192×厚13.5cm(足元のみ厚14.5cm)	幅90×長192×厚13.5cm(足元のみ厚14.5cm)	幅84×長180×厚13.5cm(足元のみ厚14.5cm)	幅90×長180×厚13.5cm(足元のみ厚14.5cm)	幅100×長192×厚13.5cm(足元のみ厚14.5cm)	
		重量	9.2kg	9.6kg	8.8kg	9.2kg	10.3kg	
		材質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体 プレスエア [®] (制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/側面:ナイロンオックス 下面:ポリエステルメッシュ すべり止め布付き					
		エアセル数	21本	21本	20本	20本	21本	
	価格(専用カバー付属)	¥160,000				¥180,000		
	専用カバー	品番	CH-702	CH-704	CH-706	CH-708	CH-712	
		材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)					
		価格(専用カバーのみ購入価格)	¥7,800				¥9,800	
	エアポンプ	品番	CR-701					
サイズ		幅36.5×高24.6×奥行8.7cm(ポンプフック装着時/幅36.5×高27.6×奥行15.7cm) ACコード:4m						
重量		3.4kg						
材質		ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂						
定格		AC100V、12W、50/60Hz						
電気代/日(参考値)※2	約5.1円							
価格	¥68,000							
Aタイプ	品番	CR-549						
	サイズ	幅60×長60×厚1cm、ACコード:4m						
	重量	1.0kg						
	材質	カバー/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、中身/ポリエステル100%、コントローラー/ABS樹脂						
	定格	AC100V、40W、50/60Hz						
電気代/日(参考値)※2	約27.4円							
価格	¥20,000							
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000107		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000108		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000109	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000110	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000111
	保証期間	3年保証(マット・ポンプ)/1年保証(プラス専用パッド Aタイプ)						


※特に記載がない限り、価格表示はすべて税抜き価格となります。
 ※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、マット内圧の状態やご使用状況により多少異なる場合があります。
 ※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回


		 エアマスター ネクサスR							
マットレス	タイプ	交換							
	品番	840	900	840/SHORT	900/SHORT	900/LONG	1000		
	JANコード	CR-660	CR-663	CR-665	CR-667	CR-669	CR-685		
	セット価格	4939810006956 4939810006963 4939810006970 4939810006987				4939810006994 4939810007007	¥192,000		
セット内容	マットレス	品番	CR-662	CR-664	CR-650	CR-668	CR-670	CR-686	
		サイズ ※1	幅84×長191×厚12cm	幅90×長191×厚12cm	幅84×長180×厚12cm	幅90×長180×厚12cm	幅90×長205×厚12cm	幅100×長191×厚12cm	
		重量	8.6kg	9.1kg	8.1kg	8.5kg	9.4kg	9.9kg	
		材質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体 プレスエア [®] (制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ すべり止め布付き(抗菌)						
		エアセル数	24本	24本	22本	22本	25本	24本	
	価格(専用カバー付属)	¥107,000				¥127,000			
	専用カバー	品番	CH-662	CH-664	CH-650	CH-668	CH-670	CH-686	
		材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)						
		価格(専用カバーのみ購入価格)	¥7,800				¥9,800		
	エアポンプ	品番	CR-661						
サイズ		幅36.5×高23.5×奥行8.7cm(ポンプフック装着時/幅36.5×高26.5×奥行15.7cm) ACコード:4m							
重量		3.5kg							
材質		ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂							
定格		AC100V、10W、50/60Hz							
電気代/日(参考値)※2	約4.8円(エコモード使用時、最大約20%節電)								
価格	¥65,000								
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000082		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000083		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000084	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000085	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000086	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000087
	保証期間	3年保証(マット・ポンプ)							


		 エアマスター ネクサスR プラス							
マットレス	タイプ	交換							
	品番	840	900	840/SHORT	900/SHORT	900/LONG	1000		
	JANコード	CR-671	CR-673	CR-675	CR-677	CR-679	CR-687		
	セット価格	4939810007199 4939810007212 4939810007236 4939810007250				4939810007274 4939810007298	¥212,000		
セット内容	マットレス	品番	CR-672	CR-674	CR-676	CR-678	CR-689	CR-688	
		サイズ ※1	幅84×長191×厚12cm(足元のみ厚13cm)	幅90×長191×厚12cm(足元のみ厚13cm)	幅84×長180×厚12cm(足元のみ厚13cm)	幅90×長180×厚12cm(足元のみ厚13cm)	幅90×長205×厚12cm(足元のみ厚13cm)	幅100×長191×厚12cm(足元のみ厚13cm)	
		重量	9.6kg	10.1kg	9.1kg	9.5kg	10.4kg	10.9kg	
		材質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体 プレスエア [®] (制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ すべり止め布付き(抗菌)						
		エアセル数	24本	24本	22本	22本	25本	24本	
	価格(専用カバー付属)	¥127,000				¥147,000			
	専用カバー	品番	CH-662	CH-664	CH-650	CH-668	CH-670	CH-686	
		材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)						
		価格(専用カバーのみ購入価格)	¥7,800				¥9,800		
	エアポンプ	品番	CR-661						
サイズ		幅36.5×高23.5×奥行8.7cm(ポンプフック装着時/幅36.5×高26.5×奥行15.7cm) ACコード:4m							
重量		3.5kg							
材質		ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂							
定格		AC100V、10W、50/60Hz							
電気代/日(参考値)※2	約4.8円(エコモード使用時、最大約20%節電)								
価格	¥65,000								
プラス専用パッド	品番	CR-659							
	サイズ	幅60×長60×厚1cm、ACコード:4m							
	重量	1.0kg							
	材質	カバー/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、中身/ポリエステル100%、コントローラー/ABS樹脂							
	定格	AC100V、40W、50/60Hz							
電気代/日(参考値)※2	約25.9円								
価格	¥20,000								
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000088		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000089		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000090	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000091	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000092	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000093
	保証期間	3年保証(マット・ポンプ)/1年保証(プラス専用パッド)							

※特に記載がない限り、価格表示はすべて税抜き価格となります。
 ※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、マット内圧の状態やご使用状況により多少異なる場合があります。
 ※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回

エアマットレス 仕様一覧

		 エアマスター ビッグセル インフィニティ					
A マ ッ ト レ ス	タイプ	交 換					
	品 番	840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000	
	JANコード	CR-550	CR-555	CR-553	CR-557	CR-559	
	セット価格	4939810006000 4939810006048 4939810006086 4939810006123 4939810006161				¥214,000	
	セット価格	¥194,000				¥214,000	
セ ット 内 容	マ ッ ト レ ス	品 番	CR-552	CR-554	CR-556	CR-558	CR-560
		サイズ ※1	幅84×長191×厚17cm	幅90×長191×厚17cm	幅84×長180×厚17cm	幅90×長180×厚17cm	幅100×長191×厚17cm
		重 量	8.3kg	8.6kg	8.0kg	8.2kg	9.1kg
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体プレスエア [®] (制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂 ベースシート/側面:ナイロンオックス 下面:ポリエステルメッシュ すべり止め布付き(抗菌)				
		エアセル数	27本	27本	25本	25本	27本
	価 格 (専用カバー付属)	¥139,000				¥159,000	
	マ ッ ト レ ス	品 番	CH-552	CH-554	CH-556	CH-558	CH-560
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)				
		価 格 (専用カバーのみ購入価格)	¥7,800				¥9,800
	エ ア ポ ン プ	品 番	CR-551				
サイズ		幅20.5×高33.5×奥行12.0cm(ポンプフック装着時/幅20.5×高36.5×奥行19.0cm) ACコード:4m					
重 量		4.0kg					
材 質		ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂					
定 格		AC100V、12W、50/60Hz					
電気代/日(参考値)※2		約6.9円(エコモード使用時、最大約20%節電)					
価 格	¥55,000						
そ 他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000074				00206-000126	
	保証期間	3年保証(マット・ポンプ)					

		 エアマスター トライセルE		
A マ ッ ト レ ス	タイプ	上 敷		
	品 番	840	900	
	JANコード	CR-330	CR-333	
	セット価格	4939810008318 4939810008325		
	セット価格	¥128,000		
セ ット 内 容	マ ッ ト レ ス	品 番	CR-332	CR-334
		サイズ ※1	幅84×長192×厚10cm	幅90×長192×厚10cm
		重 量	4.2kg	4.6kg
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌) ベースシート/ナイロンオックス	
		エアセル数	24本	
	価 格 (専用カバー付属)	¥88,000		
	マ ッ ト レ ス	品 番	CH-351	CH-352
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)	
		価 格 (専用カバーのみ購入価格)	¥7,700	
	エ ア ポ ン プ	品 番	CR-331	
サイズ		幅30.0×高13.2×奥行8.8cm(ポンプフック装着時/幅30.0×高13.4×奥行13.4cm) ACコード:4m		
重 量		2.5kg		
材 質		ケース/ABS樹脂、フック/PA樹脂		
定 格		AC100V、12W、50/60Hz		
電気代/日(参考値)※2		約4.7円		
価 格	¥40,000			
そ 他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000129 00206-000130		
	保証期間	3年保証(マット・ポンプ)		

		 エアマスター ビッグセル インフィニティプラス					
A マ ッ ト レ ス	タイプ	交 換					
	品 番	840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000	
	JANコード	CR-561	CR-565	CR-563	CR-567	CR-569	
	セット価格	4939810006208 4939810006222 4939810006246 4939810006260 4939810006284				¥234,000	
	セット価格	¥214,000				¥234,000	
セ ット 内 容	マ ッ ト レ ス	品 番	CR-562	CR-564	CR-566	CR-568	CR-579
		サイズ ※1	幅84×長191×厚17cm (足元のみ厚18cm)	幅90×長191×厚17cm (足元のみ厚18cm)	幅84×長180×厚17cm (足元のみ厚18cm)	幅90×長180×厚17cm (足元のみ厚18cm)	幅100×長191×厚17cm (足元のみ厚18cm)
		重 量	9.3kg	9.6kg	9.0kg	9.2kg	10.1kg
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体プレスエア [®] (制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂 ベースシート/側面:ナイロンオックス 下面:ポリエステルメッシュ すべり止め布付き(抗菌)				
		エアセル数	27本	27本	25本	25本	27本
	価 格 (専用カバー付属)	¥159,000				¥179,000	
	マ ッ ト レ ス	品 番	CH-552	CH-554	CH-556	CH-558	CH-560
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)				
		価 格 (専用カバーのみ購入価格)	¥7,800				¥9,800
	エ ア ポ ン プ	品 番	CR-551				
サイズ		幅20.5×高33.5×奥行12.0cm(ポンプフック装着時/幅20.5×高36.5×奥行19.0cm) ACコード:4m					
重 量		4.0kg					
材 質		ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂					
定 格		AC100V、12W、50/60Hz					
電気代/日(参考値)※2		約6.9円(エコモード使用時、最大約20%節電)					
価 格	¥55,000						
A タ イ プ	品 番	CR-549					
	サイズ	幅60×長60×厚1cm、ACコード:4m					
	重 量	1.0kg					
	材 質	カバー/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、中身/ポリエステル100%、コントローラー/ABS樹脂					
	定 格	AC100V、40W、50/60Hz					
電気代/日(参考値)※2	約27.4円						
価 格	¥20,000						
そ 他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000076				00206-000127	
	保証期間	3年保証(マット・ポンプ)/1年保証(プラス専用パッド Aタイプ)					

		 エアドクター		
A マ ッ ト レ ス	タイプ	上 敷		
	品 番	840	900	
	JANコード	CR-238	CR-268	
	セット価格	4939810008424 4939810008431		
	セット価格	¥97,000		
セ ット 内 容	マ ッ ト レ ス	品 番	CR-279	CR-289
		サイズ ※1	幅84×長192×厚9cm	幅90×長192×厚9cm
		重 量	3.3kg	3.4kg
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌) ベースシート/ナイロンオックス	
		エアセル数	20本	
	価 格 (専用カバー付属)	¥50,000		
	マ ッ ト レ ス	品 番	CH-279	CH-289
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・防臭・伸縮)	
		価 格 (専用カバーのみ購入価格)	¥7,700	
	エ ア ポ ン プ	品 番	CR-259	
サイズ		幅24.4×高17.9×奥行8.9cm(ポンプフック装着時/幅24.4×高17.9×奥行13.5cm) ACコード:4m		
重 量		1.8kg		
材 質		ケース/ABS樹脂、フック/PA樹脂		
定 格		AC100V、5W、50/60Hz		
電気代/日(参考値)※2		約1.4円		
価 格	¥47,000			
そ 他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000014		
	保証期間	3年保証(ポンプ)		

※価格表示はすべて税抜き価格となります。

※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、マット内圧の状態や使用状況により多少異なる場合があります。

※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回

※価格表示はすべて税抜き価格となります。

※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、マット内圧の状態や使用状況により多少異なる場合があります。

※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回(エアドクターは、50kg設定で圧切替24時間)

ベッドマットレス 仕様一覧

		ミルフィ			
マットレス	タイプ	交 換			
	品 番	830	900	830/SHORT	900/SHORT
	JANコード	4939810008479	4939810008486	4939810008493	4939810008509
	セット価格	¥65,000			
	品 番	※単品販売はしていません			
密閉内マットレス	サイズ	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm
	重 量	5.7kg	6.1kg	5.4kg	5.7kg
	材 質	1層目 : 高弾性ウレタンフォーム(特殊プロファイル加工) 2層目 : ソフトタッチウレタンフォーム 3層目 : 高弾性ウレタンフォーム 4層目 : 高弾性ウレタンフォーム 4層目サイド : 高硬度ウレタンフォーム 4層目 : 高硬度ウレタンフォーム			
	価 格	-			
	品 番	CH-366	CH-367	CH-368	CH-369
付属品カバー	材 質	上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮) 下面 / ナイロンオックス			
	価格(専用カバーのみ購入価格)	¥12,800			
その他	保険適用 / TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000075			

		メリー&ハリー			
マットレス	タイプ	交 換			
	品 番	830	900	900/SHORT	900/LONG
	JANコード	4939810006727	4939810006734	4939810006741	4939810006758
	セット価格	¥71,000	¥85,200		
	品 番	※単品販売はしていません			
密閉内マットレス	サイズ	幅83×長191×厚9cm	幅90×長191×厚9cm	幅90×長180×厚9cm	幅90×長205×厚9cm
	重 量	6.5kg	7.0kg	6.6kg	7.5kg
	材 質	<メリー層・ハリー層>超通気・高弾性ウレタンフォーム <ワッフル層>超通気・高弾性・高耐久ウレタンフォーム <芯材>超通気・高硬度ウレタンフォーム			
	価 格	-			
	品 番	CH-680	CH-681	CH-682	CH-683
付属品カバー	材 質	ポリエステル100%(吸水速乾・制菌・消臭・伸縮)			
	価格(専用カバーのみ購入価格)	¥12,800	¥13,200		
その他	保険適用 / TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000079		00206-000128	

		ホスピタマットレス	
マットレス	タイプ	交 換	
	品 番	830	900
	JANコード	4939810008554	4939810008561
	セット価格	¥46,800	
密閉内マットレス	品 番	※単品販売はしていません	
	サイズ	幅83×長191×厚8.5cm	幅90×長191×厚8.5cm
	重 量	6.0kg	6.5kg
	材 質	低反発面 / 低反発ウレタンフォーム 高反発面 / 高反発ウレタンフォーム	
	価 格	-	
付属品カバー	品 番	CH-288	CH-289
	材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)	
	価格(専用カバーのみ購入価格)	¥17,000	
その他	保険適用 / TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000069	

※価格表示はすべて税抜き価格となります。

ウレタンフォームマットレス 仕様一覧

		ディンプルマットレス			
マットレス	タイプ	交 換			
	品 番	830	900	830/SHORT	900/SHORT
	JANコード	4939810005577	4939810005584	4939810005591	4939810005607
	セット価格	¥82,000			
	品 番	※単品販売はしていません			
密閉内マットレス	サイズ	幅83×長191×厚12cm	幅90×長191×厚12cm	幅83×長180×厚12cm	幅90×長180×厚12cm
	重 量	6.0kg	6.6kg	5.6kg	6.2kg
	材 質	1層目 : ラバータッチウレタンフォーム(特殊ディンプル加工+スリット複合形状) 2層目 : ラバータッチウレタンフォーム 2層目サイド : 高硬度ウレタンフォーム 3層目 : 高硬度ウレタンフォーム			
	価 格	-			
	品 番	CH-540	CH-541	CH-542	CH-543
付属品カバー	材 質	上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮・防炎) 下面 / ナイロンオックス			
	価格(専用カバーのみ購入価格)	¥14,800			
その他	保険適用 / TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000070			

		キュオラ(通気タイプ)				キュオラ(防水タイプ)			
マットレス	タイプ	交 換				交 換			
	品 番	830	900	830/SHORT	900/SHORT	830	900	830/SHORT	900/SHORT
	JANコード	4939810006369	4939810006376	4939810006383	4939810006390	4939810006406	4939810006413	4939810006420	4939810006437
	セット価格	¥108,000				¥110,000			
	品 番	※単品販売はしていません				※単品販売はしていません			
密閉内マットレス	サイズ	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm
	重 量	6.5kg	7.0kg	6.1kg	6.6kg	6.5kg	7.0kg	6.1kg	6.6kg
	材 質	1層目 : 超通気高弾性ウレタンフォーム(特殊ディンプル加工+スリット複合形状) 2層目 : 三次元スプリング構造体 プレスエア®(制菌) 3層目 : 超通気高弾性ウレタンフォーム インナーカバー : ポリエステルメッシュ				1層目 : 超通気高弾性ウレタンフォーム(特殊ディンプル加工+スリット複合形状) 2層目 : 三次元スプリング構造体 プレスエア®(制菌) 3層目 : 超通気高弾性ウレタンフォーム インナーカバー : ポリエステルメッシュ			
	価 格	-				-			
	品 番	CH-590	CH-591	CH-592	CH-593	CH-594	CH-595	CH-596	CH-597
付属品カバー	材 質	上面・側面 / ポリエステルドライメッシュ(吸水速乾・制菌・消臭・伸縮) 下面 / ナイロンオックス				上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・消臭・伸縮) 下面 / ナイロンオックス			
	価格(専用カバーのみ購入価格)	¥12,800				¥14,800			
その他	保険適用 / TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000077				介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000078			

		アイリス2	
マットレス	タイプ	上 敷	
	品 番	標準	ワイド
	JANコード	4939810002521	4939810002699
	セット価格	¥33,000	
密閉内マットレス	品 番	※単品販売はしていません	
	サイズ	幅83×長191×厚7.5cm	幅90×長191×厚7.5cm
	重 量	4.4kg	4.7kg
	材 質	2層構造ウレタンフォーム(抗菌・難燃)	
	価 格	-	
付属品カバー	品 番	CH-250	CH-254
	材 質	上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮) 下面 / ナイロン(すべり止め加工)	
	価格(専用カバーのみ購入価格)	¥9,500	
その他	保険適用 / TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000010	

※価格表示はすべて税抜き価格となります。