

ポジショニング用具

姿勢体位管理補助用具

Anymo エニモ

- 簡単に使える
- 姿勢が崩れにくいユニーク設計
- 少ない数のクッションでポジショニングができる

Mモデル

仰臥位・側臥位・背上げ姿勢などマルチにサポート



Rモデル

30度側臥位をサポート



高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄 の3つに耐えるハイパフォーマンス素材

乾燥
100℃

高温乾燥と水掛けの良い構造で中までしっかり乾きやすい。




2時間
早い

従来品より約2時間早く乾燥。スピーディーに現場に戻ってきます。

※乾燥環境等によって乾燥時間が異なる場合があります。

大小のウレタンフォームを混合

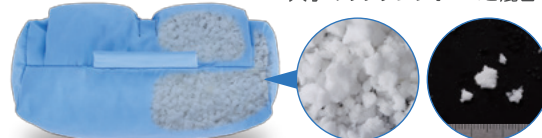

極小のウレタンフォームは体積が小さく、水分の含有量が少なくなるため、洗濯後の水分が抜けやすく乾きが早くなります。

いつも清潔に、エニモなら消毒方法の選択肢が広がります


次亜塩素酸
ナトリウム
500ppm

本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム液に30分間浸漬することができます。



熱水
80℃

本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。

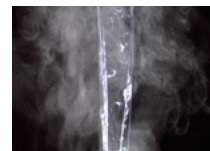


用途に合わせた3種類のオプションカバー（別売）

洗濯可能で、機能性の異なる3タイプのオプションカバーをご用意しています。


●通気タイプ



●防水タイプ（ハンドル付き）

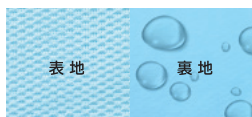

●清拭防水タイプ（ハンドル付き）


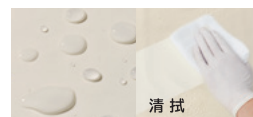


姿勢体位管理補助用具

E二モ Mモデル

Bタイプ 広げて背部のサポート、たんで下肢拘縮のサポートや側臥位の背部サポートに。裏表
同仕様POINT
肩から
骨盤までを
保持

背部を乗せたらキュッとフィット。

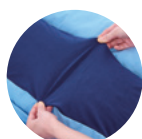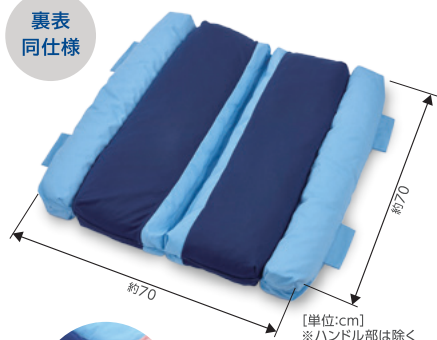側臥位の
背部のサポート仰臥位の
下肢のサポート仰臥位の
背部のサポート背上げ時の
背部のサポート置き方や向きを変えてクッションの
高さを調整できます。端を<引く張れば、浅い>側臥位
押し込めば、深い**Wタイプ** 仰臥位でも側臥位でも、下肢を乗せるだけでフィット。裏表
同仕様伸縮生地の面積が広いので、
オプションカバー装着時も下
肢を乗せる位置を迷わず簡単
に使えます。







伸縮生地で下肢を沈ませ優しくホールド。

POINT
乗せるだけで
安定

伸縮生地(紺色:切替部)

下肢を乗せる位置に伸縮生地を採用。
自重で適度に沈みフィット。包み込むよ
うに下肢をホールドします。

非伸縮生地(水色)

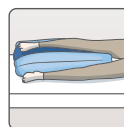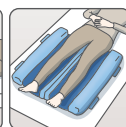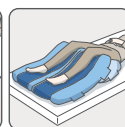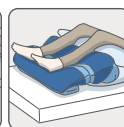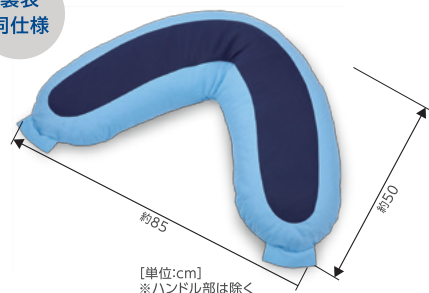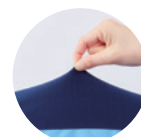中身のウレタンフォームのチップ
が大きく移動して姿勢が崩れない
よう非伸縮生地でエッジ部に使用
しています。側臥位の
下肢のサポート仰臥位の
下肢のサポート仰臥位の
下肢のサポート仰臥位の
下肢のサポート踵を浮かせられる適度な厚み。
踵を浮かせられる、たっぷりのボリューム。高齢者の30度側臥位に適した厚み。
二つ折りで簡単に厚みを調整。30度側臥位の
下肢の高さに合わせて厚みを設計しました。**Vタイプ** 伸縮生地で上肢がしっかりフィットするVタイプクッション。裏表
同仕様POINT
肘から
指先まで座位の
上肢のサポート背上げ時の
上肢のサポート仰臥位の
上肢のサポート仰臥位の
上肢(上腕)のサポート伸縮生地で上肢を沈ませ優しくホールド。
上肢を乗せれば自重で適度に沈み、フィットしてホールド。伸縮生地の面積が広いので、
オプションカバー装着時も上
肢を乗せる位置を迷わず簡単
に使えます。

ポジショニング用具

姿勢体位管理補助用具

エニモ Mモデル

Cタイプ 小回りが利く枕型のクッション。

2025
NEW

裏表
同仕様




円背の
側臥位サポート

背上げの
背部サポート

上肢拘縮の
サポート

1 軽量・コンパクトサイズで小回りが利く。

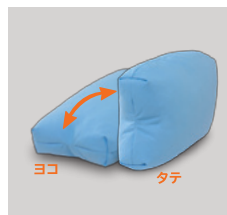

軽くてコンパクトだから、上肢の拘縮サポートにも使えます。
体格・状態や拘縮度合いに合わせて高さも調整できます。

2 ヨコでもタテでも安定する構造。



背上げの上肢サポートや間接的補助

3 背中や臀部、下肢の奥まで入るカーブライン設計。




奥まで入るので抜けづらく、姿勢が崩れにくい設計です。

姿勢体位管理補助用具

エニモ Rモデル


姿勢が崩れにくい、きれいな30度側臥位をつくる
ためにデザインされたリバーシブル構造

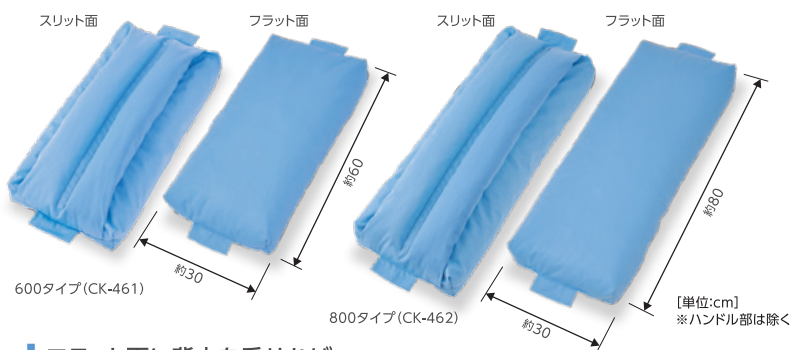

上半身のサポート

下肢のサポート

フラット面に背中を乗せれば、
クッションが傾き、きれいに角度がつきます

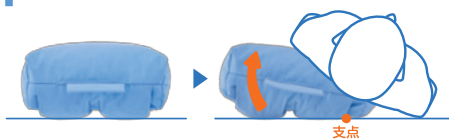

スリット面に下肢を乗せれば、
下肢を包み込むようにホールドします



クッションが外れにくい
から時間が経っても姿勢
が崩れにくい。



Anymo エニモ

本 体		介護保険／福祉用具貸与対象品目 体位変換器				
モデル	タイプ	品 番	価 格 (+税)	サイズ(cm)	材 質	TAISコード
Mモデル	Bタイプ 	CK-463	20,000円	約73×64cm	表側地／ポリエステル80%、綿20% 切替部／ポリエステル100%(W・Vタイプのみ) 中 身／ウレタンフォーム	00206-000170
	Wタイプ 	CK-464	15,500円	約70×70cm (ハンドル部4×12cm)		00206-000171
	Vタイプ 	CK-465	12,500円	約85×50cm (ハンドル部4×12cm)		00206-000172
	Cタイプ 	CK-466	6,500円	約40×23cm		—
Rモデル	600タイプ 	CK-461	11,000円	約30×60cm (ハンドル部4×12cm)	表側地／ポリエステル80%、綿20% 中 身／ウレタンフォーム	00206-000146
	800タイプ 	CK-462	13,000円	約30×80cm (ハンドル部4×12cm)		00206-000147

オプションカバー

各本体用のオプションカバーを 3タイプご用意しています。 洗濯もできます。	通気タイプ 		防水タイプ 		清拭防水タイプ 	
	ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止)		表地／ポリエステル100%(吸汗速乾・制菌・消臭) 裏地／ポリウレタンフィルム(防水)		表地／ポリウレタンフィルム(防水) 裏地／ポリエステル100%	
タイプ	品 番	価 格 (+税)	品 番	価 格 (+税)	品 番	価 格 (+税)
Mモデル Bタイプ用	CH-173	8,400円	CH-183	10,300円	CH-193	11,000円
Mモデル Wタイプ用	CH-174	7,900円	CH-184	9,700円	CH-194	10,600円
Mモデル Vタイプ用	CH-175	6,400円	CH-185	7,600円	CH-195	8,500円
Mモデル Cタイプ用	CH-176	2,600円	CH-186	3,100円	CH-196	3,300円
Rモデル 600タイプ用	CH-171	4,300円	CH-181	5,100円	CH-191	5,700円
Rモデル 800タイプ用	CH-172	5,100円	CH-182	6,000円	CH-192	6,700円

※オプションカバーは防水タイプ、清拭防水カバータイプのみハンドル付き(Cタイプ除く)

本体+オプションカバーセット

タイプ			タイプ		
品 番	価 格 (+税)		品 番	価 格 (+税)	
エニモM Bタイプ 防水カバーセット TAISコード 00206-000173	MB-BCS	30,300円	エニモM Bタイプ 清拭防水カバーセット TAISコード 00206-000176	MB-SBCS	31,000円
エニモM Wタイプ 防水カバーセット TAISコード 00206-000174	MW-BCS	25,200円	エニモM Wタイプ 清拭防水カバーセット TAISコード 00206-000177	MW-SBCS	26,100円
エニモM Vタイプ 防水カバーセット TAISコード 00206-000175	MV-BCS	20,100円	エニモM Vタイプ 清拭防水カバーセット TAISコード 00206-000178	MV-SBCS	21,000円
エニモR 600タイプ 防水カバーセット TAISコード 00206-000148	R600-BCS	16,100円	エニモR 600タイプ 清拭防水カバーセット TAISコード 00206-000150	R600-SBCS	16,700円
エニモR 800タイプ 防水カバーセット TAISコード 00206-000149	R800-BCS	19,000円	エニモR 800タイプ 清拭防水カバーセット TAISコード 00206-000151	R800-SBCS	19,700円

ポジショニング用具

姿勢体位管理補助用具

ロンボ ポジショニング ピロー&クッション



ドイツのテクノロジーを凝縮した、
豊富な形とサイズのピロー&クッション。
洗濯可能な素材で、快適・安全なベッド環境を創造します。



身体の形状にフィットする「ロンボフィル」と安定性を保つ「ロンボメッド」。
2種類の素材が、ポジショニングのバリエーションを広げます。

RHOMBO FILL (ロンボフィル) スニペット

身体の形状にぴったりとフィットして、広い面をサポートして圧力を分散。通気性に優れたハニカム構造の特殊ウレタンを菱形にカットすることで、空気の流れをスムーズにし、ムレを軽減します。



RHOMBO MED (ロンボメッド) スニペット+チップ

ウレタンよりも少し硬めで、へたりにくい特殊な形の発泡チップが、スニペットとスニペットの隙間を埋めることにより、身体を安定させて保持。適度なしっとり感で、療養者の緊張を最小限に抑えます。



さまざまなケースに対応できる、豊富なラインナップ



下肢屈曲拘縮などにも、
クッションを組み合わせて
サポート。



素材が軽いので、
身体にクッションを乗せても
安心です。



車いす座位の
サポートにも対応。

洗濯可能でいつも清潔



素材の特性を活かした使用方法



[振る]

ピローを振ることで、中身の厚みや形状が調整できます。



[引き出す]

ピローをつまんで引き出すことで、身体への接触部分を微調整できます。



[入れる]

大きなピロー (RF5) に小さなピロー (RF3) を入れることでボリュームがアップ。より安定感を出すことができます。



[揺らす]

ピローにのせた身体を揺らすことで、より身体の形状にフィットし、なじませることができます。



RHOMBO FILL ロンボフィル


RF1 (40×60cm) RF2 (40×80cm)

枕にも、さまざまな部位のサポートにも使用できるソフトタイプのマルチクッション。



RF1

RF2

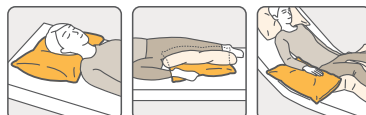

枕として使用

高さの補助

背上げ時の腕のサポート

RF3 (23×40cm) RF4 (40×60cm)

沈み込みを抑え、安定感よくさまざまな部位を支えることができるクッション。



RF3

RF4

高密度仕様



高さの補助

上肢のサポート

側臥位のズレ予防と安楽性の向上
(体圧分散マットレスとの併用が前提)

足底サポート

POINT!

中身を高密度に充填。感触の良さはそのままに、沈み込みを抑えてサポートできます。

RF5 (80×80cm)

サポートの難しい円背と拘縮にも対応する、広く身体を支えられる大型クッション。



円背の方の仰臥位の頭部・背部のサポート

背上げ時のサポート

拘縮の下肢のサポート

側臥位時の上半身のサポート

下肢の挙上
(下肢全体をサポート)

POINT!

RF5は振ったりすることで、中身を移動させ、厚みを変えることができます。例えば頭部側を厚く、背部側を薄くすることができます。



RHOMBO MED ロンボメッド

RM1-H(クッション本体：65×75cm、ハンドル部：4×12cm) 平らなままで、丸めて、折り曲げて、目的に応じて自在に使えるクッション。



体位変換器

下肢のサポート
(丸めて使用)踵の挙上
(折り曲げて使用)

側臥位の下肢のサポート

上肢のサポート
(丸めて使用)

下肢のサポート

下肢のサポート


POINT!

スリットに沿わせて下肢を支えることで、下肢を安定して支えることができます。

RM2-H(クッション本体：40×80cm、フラップ部：20×80cm、ハンドル部：4×12cm) フラップ付きでより安定感よく、快適に30度側臥位をサポートするクッション。




体位変換器

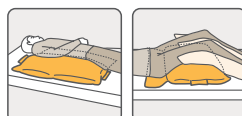

30度側臥位のサポート

安定感のある土台として使用

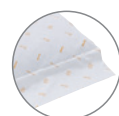

◀フラップ部を身体の下に敷きこんでご利用いただくとクッションがずれにくくなります。

RM3 (15×30cm)

小さな支持面を提供し、高さの微調整やスモールチェンジ(小さな体位変換)にも使用できる小型クッション。



側臥位の膝下のサポート

高さの補助

手のサポート

座位姿勢のサポート

上肢のポジショニング

POINT!

小さな隙間にもスムーズに入ることができるので、細かい部位をサポートするのに最適なサイズです。

ポジショニング用具



RHOMBO MED ロンボメッド

RM4-H(クッション本体：30×65cm、ハンドル部：4×12cm)

関節部の曲がりに沿い、上肢のサポート等に使えるクッション。



体位変換器



RM5 (Φ12×250cm)

1本で体位変換、側臥位、下肢のサポートなど自在に使えるクッション。



体位変換器



スネーククッション (Φ20×220cm)

1本で体位変換、側臥位等、さまざまな部位を全身的・部分的にサポートできるクッション。



体位変換器



◀両端には持ち手がついています。ビローを振ることで、中身を均一に整えることができ、使用前の準備が簡単にできます。



POINT!

側臥位に使用すると、頭から胸部・骨盤・上側になる下肢まで一本でサポートできます。頭側まで入れると、それがくさびとなり、背中のスネークが抜けずらく、姿勢が崩れにくくなります。

スネークミニクッション (Φ20×100cm)

さまざまな部位のサポートに使いやすい、ハーフサイズのスネーククッション。



体位変換器




RM6-H(クッション本体：62×65×15cm、ハンドル部：4×12cm)

高さを保持し、安定感よく姿勢をサポートする台形型クッション。



体位変換器

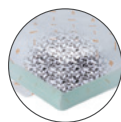

POINT!

中身のメッド素材が下肢の形状に沿い、優しく保持しながら、安定して下肢を支えることができます。



RHOMBO FILL & RHOMBO MED ロンボフィル・ロンボメッド

バックサポートクッション (40×45cm)

背中に置くだけで心地よくフィットする座位姿勢サポートクッション。



車いす付属品



POINT!

両サイドを軽く引っ張ることで、さらに身体になじみ、よりしっかりと座位姿勢をサポートすることができます。

QRコードからバックサポートクッションのご使用方法が動画でご覧いただけます。
<https://www.cape.co.jp/products/pdt019>



本 体

タイプ	TAISコード	価格(+税)	サイズ(cm)	材質
 RF1	00245-000193	6,600円	40×60	表側地／綿50%、ポリエステル50% 中身(充填物)／ロンボフィル(ポリウレタンスニペット)
 RF2	00245-000194	9,000円	40×80	
 RF3	00245-000195	7,800円	23×40	
 RF4	00245-000196	15,000円	40×60	
 RF5	00245-000197	18,100円	80×80	
 RM1-H	00245-000232	21,100円	本体 65×75 ハンドル部 4×12	表側地／綿50%、ポリエステル50% 中身(充填物)／ロンボメッド(ポリウレタンスニペット50%、ポリプロピレンビーズ50%) ※RM6-Hのみ、ロンボメッドの下層に内部ウレタンフォーム(ウレタンフォーム)
 RM2-H	00245-000233	21,100円	本体 40×80 フラップ部 20×80 ハンドル部 4×12	
 RM3	00245-000200	3,800円	15×30	
 RM4-H	00245-000234	10,800円	本体 30×65 ハンドル部 4×12	
 RM5	00245-000154	21,700円	Φ12×250	
 RM6-H	00245-000245	26,600円	62×65×15 ハンドル部 4×12	
 スネーククッション	00245-000102	35,000円	Φ20×220	
 スネークミニクッション	00245-000152	22,900円	Φ20×100	
 バックサポートクッション	00245-000168	21,100円	40×45	表側地／綿50%、ポリエステル50% 中身(充填物)／ロンボフィル、ロンボメッド
初期導入セット	00245-000103	76,100円	〔セット内容〕RF1, RF3(×2), RF5, RM1-H, RM2-H 汎用性の高いクッション5種類(計6個)をセットにしました。	

※サイズについて：本体サイズは、製造元のドイツ・リューク社の基準に従って、中身を充填する前の生地寸法にて記載しています。そのため実商品で寸法計測した場合には、大きさが表記サイズと異なります。

●本体(クッション)と オプションカバーのセット

体位変換器 介護保険／福祉用具貸与対象品目



防水カバーセット	品番	価格(+税)	TAISコード
ロンボRM1-H防水カバーセット	RM1-BCS	28,100円	00206-000133
ロンボRM2-H防水カバーセット	RM2-BCS	28,100円	00206-000134
ロンボRM4-H防水カバーセット	RM4-BCS	17,100円	00206-000135
ロンボRM5防水カバーセット	RM5-BCS	28,700円	00206-000139
ロンボRM6-H防水カバーセット	RM6-BCS	34,800円	00206-000145
ロンボスネーククッション防水カバーセット	SN-BCS	43,500円	00206-000137
ロンボスネークミニクッション防水カバーセット	SN-BCS mini	28,500円	00206-000138

清拭防水カバーセット	品番	価格(+税)	TAISコード
ロンボRM1-H清拭防水カバーセット	RM1-SBCS	28,900円	00206-000152
ロンボRM2-H清拭防水カバーセット	RM2-SBCS	28,900円	00206-000153
ロンボRM4-H清拭防水カバーセット	RM4-SBCS	18,000円	00206-000154
ロンボRM5清拭防水カバーセット	RM5-SBCS	29,500円	00206-000157
ロンボRM6-H清拭防水カバーセット	RM6-SBCS	35,500円	00206-000155
ロンボスネーククッション清拭防水カバーセット	SN-SBCS	44,500円	00206-000156
ロンボスネークミニクッション清拭防水カバーセット	SN-SBCS mini	29,200円	00206-000158

ポジショニング用具

オプションカバー	 通気タイプ	 防水タイプ	 清拭防水タイプ			
各本体用のオプションカバーを3タイプご用意しています。洗濯もできます。	ポリエステル100% (吸汗速乾・静電防止)		表地／ポリエステル100% (吸汗速乾・制菌・消臭) 裏地／ポリウレタンフィルム (防水)		表地／ポリウレタンフィルム (防水) 裏地／ポリエステル100%	
	品 番	価格 (+税)	品 番	価格 (+税)	品 番	価格 (+税)
RF1用	RF1／RF4C	4,700円	RF1／RF4CB	5,700円	RF1／RF4CS	6,400円
RF2用	RF2C	4,700円	RF2CB	5,700円	RF2CS	6,400円
RF3用	RF3C	2,400円	RF3CB	2,800円	RF3CS	3,100円
RF4用	RF1／RF4C	4,700円	RF1／RF4CB	5,700円	RF1／RF4CS	6,400円
RF5用	RF5C	6,500円	RF5CB	7,700円	RF5CS	8,500円
RM1-H用	RM1C	6,000円	RM1-HCB	7,000円	RM1-HCS	7,800円
RM2-H用	RM2C	6,000円	RM2-HCB	7,000円	RM2-HCS	7,800円
RM3用	RM3C	1,800円	RM3CB	2,100円	RM3CS	2,500円
RM4-H用	RM4C	5,400円	RM4-HCB	6,300円	RM4-HCS	7,200円
RM5用	RM5C	6,000円	RM5-HCB	7,000円	RM5-HCS	7,800円
RM6-H用	RM6C	7,000円	RM6-HCB	8,200円	RM6-HCS	8,900円
スネーククッション用	SNC	7,200円	SN-HCB	8,500円	SN-HCS	9,500円
スネークミニクッション用	SNC mini	4,700円	SN-HCB mini	5,600円	SN-HCS mini	6,300円
バックサポートクッション用	BSC	5,300円	BSCB	6,200円	BSCS	7,100円

フィットサポート

30度側臥位のポジショニングをサポートする

通気性に優れた特殊ウレタンフォーム

超通気ウレタンで、いつも爽やかムレ対策。丸洗いです。




専用カバー

吸湿速乾のドライメッシュ生地
(洗濯できます)



400タイプ

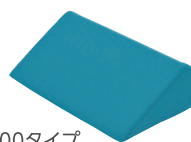

800タイプ



タイプ	400タイプ	800タイプ
品番	CK-396	CK-397
サイズ	幅40×奥行24×厚12cm	幅80×奥行24×厚12cm
価格	6,500円(+税)	11,000円(+税)
TAISコード	00206-000059	00206-000060
材質	カバー ポリエステル(ドライメッシュ) (吸湿速乾) 中身 超通気高弾性ウレタンフォーム	
専用カバーのみ購入価格	品番／CH-396 3,800円(+税)	品番／CH-397 4,900円(+税)

ケープ介助グローブ

背抜きやポジショニング時に。
滑りやすいグローブで、療養者にも介護者にもやさしい介助を実現。

滑りやすい素材を使用

滑りやすい素材のため、臀部などの重い箇所にも簡単に手を差し込むことができます。

使いやすいサイズ・形状

介助しやすいスリムフィットサイズ。
装着後に指を開くと落ちない幅で、裏返しやすい筒型タイプ。

丸洗い可能でいつも清潔

丸洗いできる素材なので、汚れても洗濯でき、いつも清潔に使うことができます。



背上げ(頭側挙上)時のずれ解消ケアに



ベッド上のポジショニング時に

ケープ介助グローブ

サイズ/フリーサイズ(幅17×長53cm)
材質/ナイロン100%

1セット2枚入り
品番/CK-388 価格 2,500円(+税)

10セットパック
品番/CK-418 価格 23,750円(+税)

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ

使いやすく衛生的な使い捨てタイプ


感染対策に

安心してご使用いただける、衛生的な使い捨てタイプ



フラップ構造

身体の下に手を差し込む際、フラップが折れ曲がり、スベリやすさが向上します。

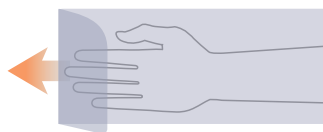

手が抜けにくいポケット構造

ポケットに沿って片手を肘付近まで挿入します。親指で仕切りを挟んでご使用いただくとグローブが抜けにくく、よりスムーズにご使用いただけます。



背上げ(頭側挙上)時や
ポジショニング時のずれ解消ケアに

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ

品番/CK-498
サイズ/フリーサイズ(幅18×長58cm)
材質/ポリエチレン

枚数/1箱50枚入り
価格 2,900円(+税)

二つ折りパッケージ

場所を取らないコンパクトなパッケージ。片手で一枚ずつ取り出せます。

