

RHOMBO

positioning pillows & cushions

姿勢体位管理補助用具

ロンボ ポジショニング ピロー&クッション

ドイツのテクノロジーを凝縮した
豊富な形とサイズのピロー&クッション。
洗濯可能な素材で、
快適・安全なベッド環境を創造します。



LAC x CAPE

身体の形状にフィットする「ロンボフィル」と安定性を保つ「ロンボメッド」
2種類の素材、ロンボフィルとロンボメッドがポジショニングのバリエーションを広げます。

RHOMBO FILL (ロンボフィル) スニペット

身体の形状にぴったりとフィットして、広い面をサポートして圧力を分散。
通気性に優れたハニカム構造の特殊ウレタンを菱形にカットすることで、空気の流れをスムーズにし、ムレを軽減します。



RHOMBO MED (ロンボメッド) スニペット+チップ

ウレタンよりも少し硬めで、へたりにくい特殊な形の発泡チップが、スニペットとスニペットの隙間を埋めることにより、身体を安定させて保持。適度なしっとり感で、療養者の緊張を最小限に抑えます。



QRコードからご使用方法が動画でご覧いただけます。
<https://www.cape.co.jp/products/pdt019>



■ロンボフィルシリーズ RHOMBO FILL

枕にも、さまざまな部位のサポートにも使用できるソフトタイプのマルチクッション。



RF1 (40×60cm)
価格：5,000円(+税)
RF2 (40×80cm)
価格：6,500円(+税)



枕として使用 高さの補助 背上げ時の腕のサポート

沈み込みを抑え、安定感よくさまざまな部位を支えることができるクッション。



RF3 (23×40cm)
価格：5,500円(+税)
RF4 (40×60cm)
価格：11,000円(+税)



高さの補助 足底サポート 上肢のサポート 側臥位のズレ予防と安楽性の向上※
※体圧分散マットレスとの併用が前提

サポートの難しい円背と拘縮にも対応する、広く身体を支えられる大型クッション。



RF5 (80×80cm)
価格：13,000円(+税)



円背の方の仰臥位の頭部・背部のサポート 背上げ時のサポート 拘縮の下肢のサポート 側臥位時の上半身のサポート 下肢の挙上(下肢全体をサポート)


■ロンボメッドシリーズ RHOMBO MED

平らなままでも、丸めて、折り曲げて、目的に応じて自在に使えるクッション。



体位変換器
RM1-H

RM1-H
(クッション本体：65×75cm、
ハンドル部：4×12cm)
価格：14,500円(+税)

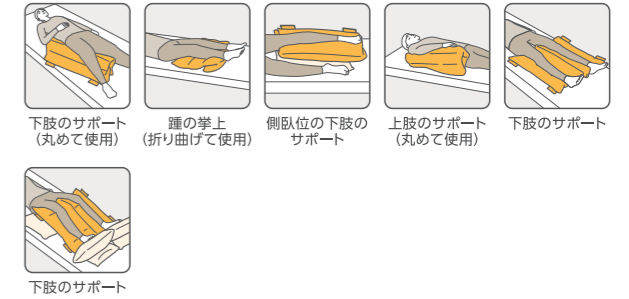


下肢のサポート(丸めて使用) 踵の挙上(折り曲げて使用) 側臥位の下肢のサポート 上肢のサポート(丸めて使用) 下肢のサポート
下肢のサポート

フラップ付きでより安定感よく、快適に30度側臥位をサポートするクッション。



体位変換器
RM2-H

RM2-H
(クッション本体：40×80cm、
フラップ部：20×80cm、
ハンドル部：4×12cm)
価格：14,500円(+税)

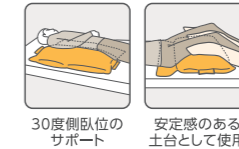

30度側臥位のサポート 安定感のある土台として使用

小さな支持面を提供し、高さの微調整やスモールチェンジ(小さな体位変換)にも使用できる小型クッション。



体位変換器
RM4-H

RM3 (15×30cm)
価格：2,700円(+税)



側臥位の膝下のサポート 上肢のポジショニング 高さの補助 手のサポート 座位姿勢のサポート

関節部の曲がりに沿い、上肢のサポート等に使えるクッション。



RM4-H
(クッション本体：30×65cm、
ハンドル部：4×12cm)
価格：7,500円(+税)



仰臥位での上肢のサポート 仰臥位での胸部・頭部のサポート 座位での上肢サポート 背上げ時の上肢サポート

1本で体位変換、側臥位、下肢のサポートなど自在に使えるクッション。



体位変換器
RM5

RM5 (Φ12×250cm)
価格：15,000円(+税)



下肢の拘縮予防のサポート 側臥位での胸部・骨盤・下肢のサポート 外旋・内旋予防と踵部の床ずれ対策 端坐位での骨盤サポート

1本で体位変換、側臥位等、さまざまな部位を全身的・部分的にサポートできるクッション。



体位変換器
スネーククッション

スネーククッション
(Φ20×220cm)
価格：25,000円(+税)



仰臥位・背上げ時の頭・肩・腕までのサポート 側臥位の頭部・背部・下肢のサポート 半腹臥位のサポート 下肢のサポート 端坐位での骨盤サポート

さまざまな部位のサポートに使いやすい、ハーフサイズのスネーククッション。



体位変換器
スネークミニクッション

スネークミニクッション
(Φ20×100cm)
価格：16,000円(+税)




側臥位のサポート 下肢のサポート 背上げ時の上肢のサポート 上肢のサポート

■ロンボフィル&ロンボメッド RHOMBO FILL & RHOMBO MED

背中に置くだけで心地よくフィットする座位姿勢サポートクッション。



バックサポートクッション(幅40×長45cm)
価格: 14,500円(+税)

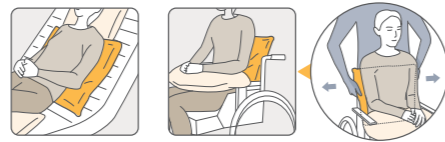

ベッドでの
背上げ姿勢を
サポート


車いすでの
座位姿勢を
サポート

POINT!

両サイドを軽く引っ張ることで、さらに
身体になじみ、よりしっかりと座位姿勢
をサポートすることができます。

■ロンボクッションの特長

素材の特性を活かした使用方法

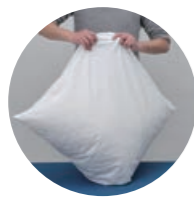

[振る]

ピローを振ることで、中身の
厚みや形状が調整できます。



[引き出す]

ピローをつまんで引き出すこ
とで、身体への接触部分を微
調整できます。



[入れる]

大きなピロー (RF5) に小さ
なピロー (RF3) を入れること
でボリュームがアップ。より安
定感を出すことができます。



[揺らす]

ピローにのせた身体を揺らす
ことで、より身体の形状に
フィットし、なじませること
ができます。

洗濯可能で、いつも清潔

洗濯での丸洗いは、95℃まで、乾燥機の使用は100℃まで可能。
オートクレーブ(105℃まで)も可能なので、いつも清潔に使用できます。



容易な体位変換

本体の持ち手を使い、介助者が楽に
体位変換できる便利なアイテム

体位変換器

介護保険/福祉用具貸与対象品目

●クッションのみ

	TAISコード
RM1-H	00245-000232
RM2-H	00245-000233
RM4-H	00245-000234
RM5	00245-000154
スネーククッション	00245-000102
スネークミニクッション	00245-000152

●クッションと防水カバーのセット

	TAISコード
ロンボ RM1-H 防水カバーセット	00206-000133
ロンボ RM2-H 防水カバーセット	00206-000134
ロンボ RM4-H 防水カバーセット	00206-000135
ロンボ RM5 防水カバーセット	00206-000139
ロンボ スネーククッション 防水カバーセット	00206-000137
ロンボ スネークミニクッション 防水カバーセット	00206-000138

■肌触りのよいオプションカバー (別売)

洗濯可能で、肌触りのよい専用カバーをオプションでタイプ別にご用意しています。



防水カバーにハンドルが付きました。

- (対象商品) RM1-HCB
RM2-HCB
RM4-HCB
RM5-HCB
SN-HCB
SN-HCB mini



本 体				オプションカバー		
タイプ	TAISコード	価格(+税)	サイズ(cm)	品 番	価格(+税)	材 質
RF1	00245-000193	5,000円	40×60	通気 RF1/RF4C	4,000円	表側地/綿50%、ポリエステル50%
RF2	00245-000194	6,500円	40×80	防水 RF1/RF4CB	4,600円	
RF3	00245-000195	5,500円	23×40	通気 RF2C	4,000円	
RF4	00245-000196	11,000円	40×60	防水 RF2CB	4,600円	
RF5	00245-000197	13,000円	80×80	通気 RF3C	2,000円	
RM1-H	00245-000232	14,500円	本体 65×75 ハンドル部 4×12	防水 RF3CB	2,300円	中身(充填物)/ロンボフィル(ポリウレタンスニペット)
RM2-H	00245-000233	14,500円	本体 40×80 フラップ部 20×80 ハンドル部 4×12	通気 RF1/RF4C	4,000円	
RM3	00245-000200	2,700円	15×30	防水 RF1/RF4CB	4,600円	
RM4-H	00245-000234	7,500円	本体 30×65 ハンドル部 4×12	通気 RF5C	5,500円	
RM5	00245-000154	15,000円	φ12×250	防水 RF5CB	6,300円	
スネーククッション	00245-000102	25,000円	φ20×220	通気 RM1C	5,000円	表側地/綿50%、ポリエステル50%
スネークミニクッション	00245-000152	16,000円	φ20×100	防水 RM1-HCB	5,700円	
バックサポートクッション	00245-000168	14,500円	40×45	通気 RM2C	5,000円	
初期導入セット	00245-000103	53,000円	[セット内容] RF1, RF3(×2), RF5, RM1-H, RM2-H	防水 RM2-HCB	5,700円	
				通気 RM3C	1,500円	
				防水 RM3CB	1,700円	中身(充填物)/ロンボメッド(ポリウレタンスニペット50%、ポリプロピレンビーズ50%)
				通気 RM4C	4,500円	
				防水 RM4-HCB	5,100円	
				通気 RM5C	5,000円	
				防水 RM5-HCB	5,700円	
				通気 SNC	6,000円	表側地/綿50%、ポリエステル50% 中身(充填物)/ロンボフィル、ロンボメッド
				防水 SN-HCB	6,900円	
				通気 SNC mini	4,000円	
				防水 SN-HCB mini	4,600円	
				通気 BSC	4,500円	
				防水 BSCB	5,100円	

エアマットレス
ウレタンフォームマットレス
専門分野
ウレタンフォームマットレス

マットレス用
シート

携帯型
接触圧力測定器

補助用具

車いす用
クッション

電動式
生体用洗浄器
(医療従事者向け)

姿勢体位管理補助用具 **サポタイト®**

大小種類の違うウレタンフォームチップで固形のウレタンフォームよりやわらかく、滑らかに身体の形に沿ってサポートします。



大小さまざまにカットされたウレタンチップにより、広い面積でしっかりと身体をサポートします。



材質：
カバー／ポリエステル65%、綿35%
中身／ウレタンフォーム(ランダムカット、マイクロキューブカット)

洗濯での丸洗い(80℃まで)、乾燥機の使用(80℃まで)、が可能なので、いつも清潔に使用できます。



洗濯方法：家庭用洗濯機、乾燥機○
※漂白剤、柔軟剤はご使用いただけません。

肌触りのよいオプションカバー(別売)

洗濯可能で、肌触りのよい専用カバーをオプションでタイプ別にご用意しています。



オプションカバー

- 通気タイプ
品番：CH-440
価格：2,500円(+税)
- 防水タイプ
品番：CH-450
価格：2,900円(+税)

(オプションカバー材質)

- 通気タイプ：
ポリエステル100%
(吸汗速乾・静電防止)
- 防水タイプ：
表地／ポリエステル100%
(吸汗速乾・制菌・消臭)、
裏地：ポリウレタンフィルム
(防水)

- 通気タイプ
品番：CH-441
価格：4,600円(+税)
- 防水タイプ
品番：CH-451
価格：5,200円(+税)

- 通気タイプ
品番：CH-442
価格：5,000円(+税)
- 防水タイプ
品番：CH-452
価格：5,700円(+税)

枕として、局所のサポートに

タイプ：標準枕
品番：CK-430
サイズ：約23×34cm
価格：5,600円(+税)
TAISコード：00206-000098

側臥位のサポートに

タイプ：三角枕
品番：CK-431
サイズ：約60×24cm
価格：9,800円(+税)
TAISコード：00206-000099

上肢のサポートに


タイプ：ブーメラン
品番：CK-432
サイズ：約54×83cm
価格：13,000円(+税)
TAISコード：00206-000100

側臥位の背部・下肢のサポートに

タイプ：側臥位セット
セット内容：三角枕×1、標準枕×2
品番：CK-433
価格：21,000円(+税)
TAISコード：00206-000101

ポジショニング補助パッド
フィットサポート

30度側臥位のポジショニングをサポートする体位変換補助パッド。

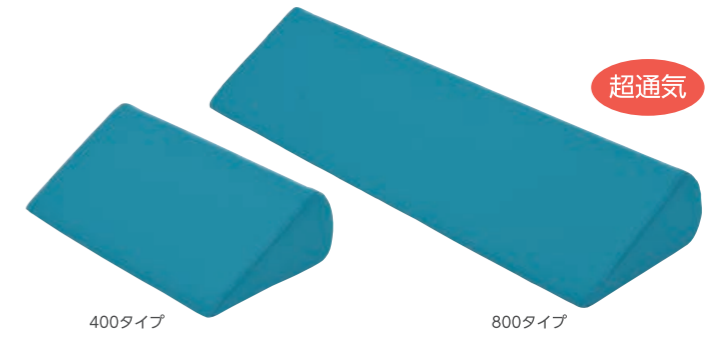

通気性に優れた特殊ウレタンフォーム

超通気ウレタンで、いつも爽やかムレ対策。丸洗いもできます。



専用カバー

吸湿速乾のドライメッシュ生地(洗濯できます)



400タイプ/CK-396
5,400円(+税)
パッド・専用カバーセット
サイズ：幅40×奥行24×厚12cm
重量：約270g
TAISコード：00206-000059
専用カバーのみ購入価格
2,600円(+税)

800タイプ/CK-397
8,800円(+税)
パッド・専用カバーセット
サイズ：幅80×奥行24×厚12cm
重量：約540g
TAISコード：00206-000060
専用カバーのみ購入価格
3,400円(+税)

材質：中身／超通気高弾性ポリウレタンフォーム
カバー／ポリエステル(ドライメッシュ)(吸湿速乾)

洗濯方法(中身・カバー)：家庭用洗濯機(40℃以下弱)、乾燥機×
※漂白剤、柔軟剤はご使用いただけません。

ケープ介助グローブ

背抜きやポジショニング時に。滑りやすいグローブで、療養者にも介護者にも負担の少ない介助を実現。



CK-388 (1セット2枚入り)
2,000円(+税)
サイズ：フリーサイズ(幅17×長53cm)
材質：ナイロン100%
10セットパック 19,000円(+税)

滑りやすい素材を使用

滑りやすい素材のため、臀部などの重い箇所にも簡単に手を差し込むことができます。

使いやすいサイズ・形状

介助しやすいスリムフィットサイズ。装着後に指を開くと落ちない幅で、裏返ししやすい筒型タイプ。



丸洗い可能でいつも清潔

丸洗いできる素材なので、汚れても洗濯でき、いつも清潔に使うことができます。

家庭用洗濯機(弱洗いモード)による丸洗いが可能です。
※詳しくは取扱説明書をご覧ください。

頭側挙上時のずれ解消ケアに



ベッド上の移動介助に



ポジショニングに



QRコードから用途ごとの使い方を動画でご覧いただけます。
<https://www.cape.co.jp/products/pdt030>




ケープの車いす用クッション 商品ラインナップ (商品機能の比較)

最適です……………○
適しています………○

FOLIO フォリオ

NEW

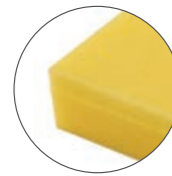


厚み 6cm
●無膜ウレタン
フォーム
25,000円(+税)
本体丸ごと洗えるタイプ





- 機能目安
- 体圧分散性能 ○
 - 長時間の座位 ○
 - 左右の姿勢崩れ ○
 - ズッコケ座り ○
 - 足こぎ ○

p.38

MY Cushion マイクッション

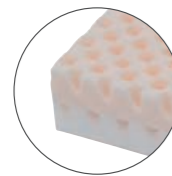

厚み 8cm
(前側 5cm)
●ウレタン
フォーム
7,300円(+税)

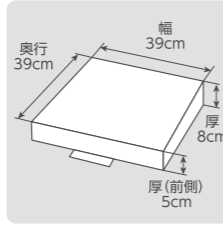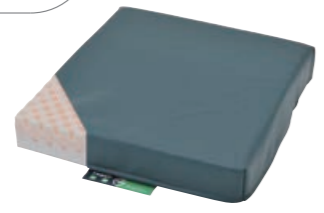


- 機能目安
- 体圧分散性能 ○
 - 長時間の座位 ○
 - 左右の姿勢崩れ ○
 - ズッコケ座り ○
 - 足こぎ ○

p.39

Gel-T Cushion Gel-T クッション




厚み 5cm
●ジェル+
ウレタン
フォーム
14,500円(+税)

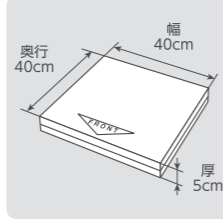



- 機能目安
- 体圧分散性能 ○
 - 長時間の座位 ○
 - 左右の姿勢崩れ ○
 - ズッコケ座り ○
 - 足こぎ ○

p.39

Bespo Gel Cushion® ベスポジェルクッション

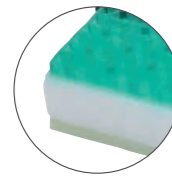


厚み 6.5cm
●ジェル+
ウレタン
フォーム
22,000円(+税)

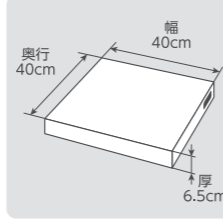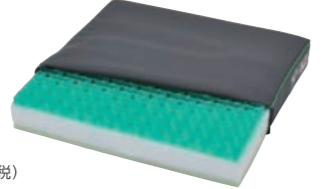



- 機能目安
- 体圧分散性能 ○
 - 長時間の座位 ○
 - 左右の姿勢崩れ ○
 - ズッコケ座り ○
 - 足こぎ ○

p.39

Duo Gel Cushion デュオジェルクッション

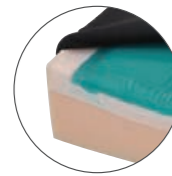

厚み 7.5cm
●ジェル+
ウレタン
フォーム
27,000円(+税)

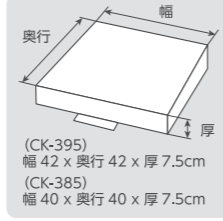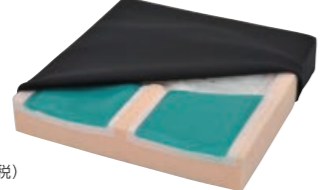


- 機能目安
- 体圧分散性能 ○
 - 長時間の座位 ○
 - 左右の姿勢崩れ ○
 - ズッコケ座り ○
 - 足こぎ ○

p.40

Cuburena® Cushion キュブレナ®クッション



厚み 10cm
●エア+
ウレタン
フォーム
39,800円(+税)

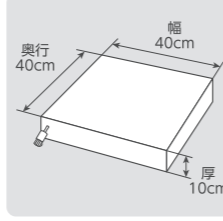

- 機能目安
- 体圧分散性能 ○
 - 長時間の座位 ○
 - 左右の姿勢崩れ ○
 - ズッコケ座り ○
 - 足こぎ ○

p.40

FOLIO

車いす用〈ウォッシュアブルタイプ〉クッション
フォリオ

NEW




CK-405
25,000円(+税)
クッション・専用カバーセット

サイズ : 幅40cm × 奥行40cm × 厚6cm
重量 : 0.6kg
介護保険/福祉用具貸与対象品目
TAISコード: 00206-000132
材質 : 専用カバー
アウターカバー: 上面/ポリエステル100%、
下面/ターボリン布 (すべり止め加工)
インナーカバー: ポリエステル100%
中身: ウレタンフォーム
専用カバーのみ: CH-405 6,800円(+税)


デイサービスなど外出時にも安心な、
前ずれ防止構造と優れた体圧分散性能。
お手入れも簡単、クッションを洗濯機で丸洗いしたら、
自然乾燥でOKです。

前後に分かれた独立構造で前ずれ防止を強化

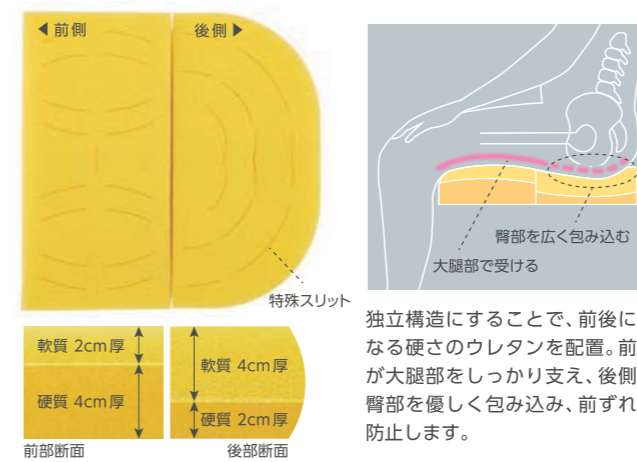

通気性の良いアウターカバー+無膜ウレタンフォームでさらっと快適

■無膜ウレタンフォーム
通気性が高く、ムレを軽減する
無膜ウレタンを採用。長時間で
も快適に使用できます。

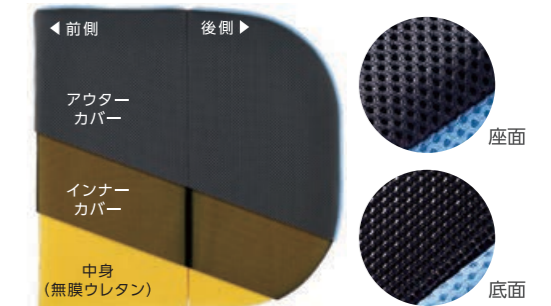


■アウターカバー
座面カバーには、さらっと爽や
かな感触のWラッセル生地を採
用。通気性が高く、ムレを軽減し
ます。
底面には滑り止めの素材を使用。



標準車いすにも
合わせやすい薄型設計。
*写真は使用例です。

特殊スリット構造が安定感よく、圧力を分散します

特殊スリット構造が、体格に応じて適度に沈み込み、安定感よく圧力を分散し
ます。

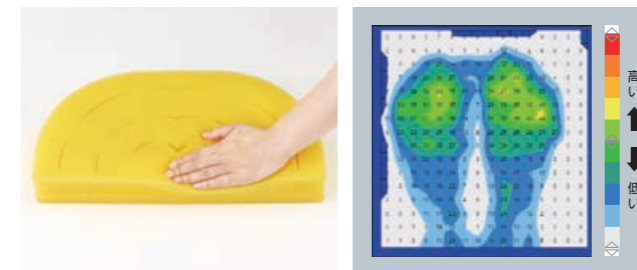

厚さ6cmの薄型で優れた体圧分散性能。

家庭用洗濯機で丸洗いできます

フォリオのアウターカバーをつけたまま、2つ折りにして洗濯ネットに入れ、
洗濯機で洗ってください。



簡単、自然乾燥

洗濯後は、ハンガーを底面の
ハンガー掛け用ベルトに掛け
て風通しの良い場所で日陰干
してください。

軽量・コンパクト

重さはたったの600g。
軽くて折りたためるから収納
や持ち運びにも便利です。



エアマットレス
ウレタンフォームマットレス
体位変換器/体圧分散式マットレス
専門分野
ウレタンフォームマットレス

マットレス用
シート

携帯型
接触圧力測定器

補助用具

車いす用
クッション

電動式
生体用洗浄器
(医療従事者向け)


MY Cushion

体圧分散式クッション マイクッション

阪和住吉総合病院 副院長 美濃良夫先生 共同開発



車いすのスリングシート上での姿勢保持と体圧分散を考えたクッション。足に力が伝わりやすいバックアップ構造で、「足こぎがしやすく」、臀部にかかる「体圧を分散」

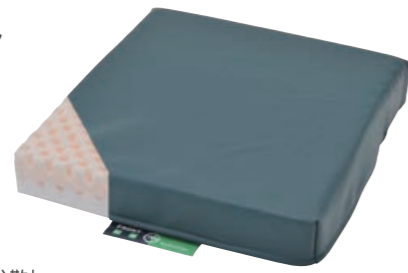


CK-398
7,300円(+税)
クッション・専用カバーセット

サイズ : 幅39×奥行39×厚8(前側5)cm
重量 : 500g
介護保険/福祉用具貸与対象品目
TAISコード: 00206-000051
材質 : 専用カバー
上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)
下面/ナイロン(すべり止め加工)
中身:ウレタンフォーム

専用カバーのみ: CH-281 2,800円(+税)

体圧分散と安定保持を両立させる二層構造

- 大腿部でしっかり体重を受け、臀部にかかる体圧を減少。
- 骨盤の後傾を防ぎ、力が伝わりやすくなり、足こぎがしやすくなります。
- シートのためみによる外力を吸収。

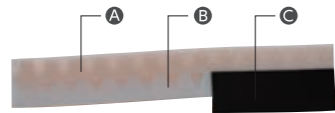

- A 粘弾性ウレタンフォーム(体圧分散)
- B 高反発ウレタンフォーム(身体を安定保持)
- C 硬度粘弾性ウレタンフォーム(安定感+車いすとのフィット感)



Gel-T Cushion

体圧分散式クッション Gel-Tクッション



流動性のジェルが瞬間的なすずれに対応。車いす上で可動する機会が多い方に最適なクッション。



CK-346
14,500円(+税)
クッション・専用カバーセット

サイズ : 幅40×奥行40×厚5cm
重量 : 2.45kg
介護保険/福祉用具貸与対象品目
TAISコード: 00206-000006
材質 : 専用カバー:
上面/ナイロン 100%(防水・抗菌)
下面/ポリ塩化ビニール 100%(防水・抗菌・難燃・すべり止め加工)
中身: 高弾性・高密度ウレタンフォーム(抗菌・難燃)
流動性ジェル: ナトリウムアクリル樹脂

専用カバーのみ: 5,300円(+税)



- A 体圧分散
高弾性・高密度ウレタンフォーム
- B 瞬間的なすずれ・摩擦を軽減
流動性ジェル


上下のウレタンフォームに挟まれたジェルパッドの中は、流動性ジェル素材。

Bespo Gel Cushion

体圧分散式クッション ベスポジェルクッション



「前ずれ防止」と「足こぎサポート」の1枚二役、幅広い療養者にフィットするクッション。

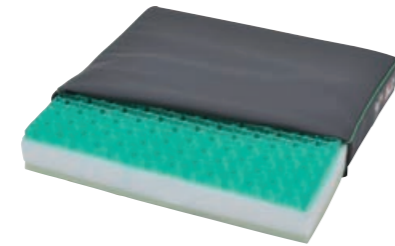


CK-375
22,000円(+税)
クッション・専用カバーセット

サイズ : 幅40×奥行40×厚6.5cm
重量 : 1.9kg
介護保険/福祉用具貸与対象品目
TAISコード: 00206-000072
材質 : 専用カバー:
上面/表地 ポリエステル100%(吸水速乾・制菌・伸縮)、裏地 ポリウレタンフィルム(防水)
下面/ターポリン布(防水・すべり止め加工)
中袋: ウレタンフィルム
中身: ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム
上/低反発ウレタンフォーム
下/高反発ウレタンフォーム

専用カバーのみ: CH-370 5,300円(+税)

低反発・高反発ウレタンスラッシュ二層構造

前後でそれぞれの厚みを変えることで、沈み込みの度合いが異なり、姿勢保持にも足こぎサポートにも対応します。

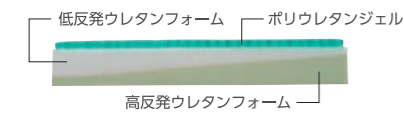

すずれへの追従性と体圧分散性能に優れたヘキサジェル

深く沈み込む側には、目の粗いジェルでしなやかさと追従性を追求。沈み込みを抑えた側には、目の細かいジェルで接触面積を増やし、しっかりとホールドします。



専用カバーの表地は爽やかメッシュ生地 裏地は汚れの侵入を防ぐ防水加工

カバーは伸縮性のある素材を使用。表面は爽やかメッシュ生地。裏面は防水加工を施し、失禁などによる汚染を防ぎます。




Duo Gel Cushion


体圧分散式クッション デュオジェルクッション



「体圧分散」と「姿勢保持」、ズレへの対応を実現した高性能クッション。

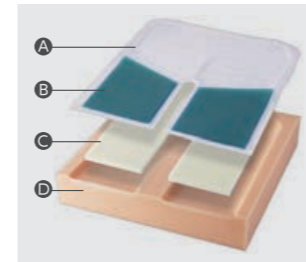


- A 瞬間的なすずれ・摩擦を軽減
流動シリコンジェル
- B 大腿部を安定サポート
シリコンジェルTRUGEL
- C 体圧分散
低反発ウレタンフォーム
- D しっかりホールド
高密度ウレタンフォーム

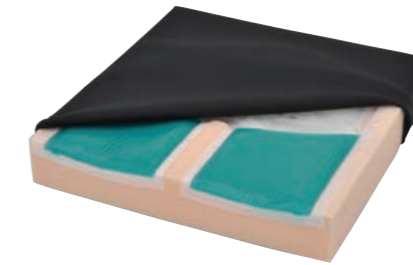

坐骨結節部への圧力集中を分散するU字構造

左右の大腿部の裏側で体重を受けるU字構造により、坐骨結節に集中する圧力を分散します。

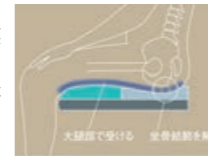

CK-395(42×42)/CK-385(40×40)
27,000円(+税)
クッション・専用カバーセット

サイズ : 幅42×奥行42×厚7.5cm(CK-395)
幅40×奥行40×厚7.5cm(CK-385)
重量 : 1.9kg(CK-395)、1.7kg(CK-385)
介護保険/福祉用具貸与対象品目
TAISコード: 00206-000048
材質 : 専用カバー: 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮)、裏地 ポリウレタンフィルム(防水)
下面/ターポリン布(防水・防炎・すべり止め加工)

中袋: ウレタンフィルム
中身: シリコンジェル、ウレタンフォーム
上/低反発ウレタンフォーム
下/高密度ウレタンフォーム

専用カバーのみ: CH-295(CK-395用)、CH-285(CK-385用) 各5,300円(+税)




専用カバー
表地はムシ対策の透湿性生地、裏地は汚れの侵入を防ぐ防水加工。伸縮性に優れた素材を使用し内部のジェルやウレタンフォーム本来の体圧分散効果を発揮します。

Cuburena® Cushion

車いす用高性能エア式ハイブリッドクッション キュブレナ® クッション




わずか10秒で自動調圧完了。
優れた体圧分散性能を発揮する
次世代の高性能エア式ハイブリッドクッション。

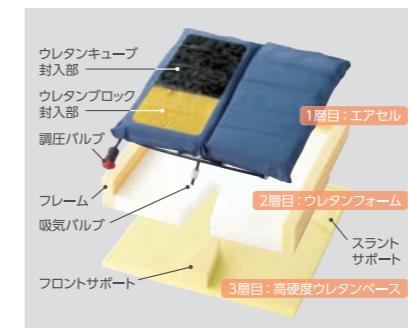

高硬度ウレタンベース層により姿勢保持をアシスト

3層目の高硬度ウレタンベースにより車いすのスリングシートのためみを補正。スラントサポートとフロントサポートにより、正しい座位姿勢をアシストします。

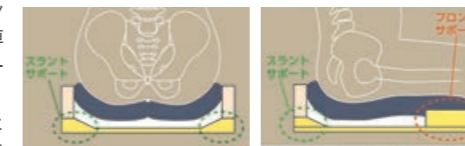

- スラントサポート
骨盤の後傾や左右の傾きを抑制します。
- フロントサポート
前方への体のずれと骨盤の後傾を抑制します。

オリジナル構造のバルブで内圧を自動調圧


調圧バルブをあけて10秒待つだけ。調圧バルブがエアセルの内圧を自動で調圧し、療養者の体重や体型に応じた最適な座面を簡単に作ります。



- 調圧バルブ
バルブをあげるだけでエアセル内の圧力を最適に調整。
- 吸気バルブ
立ち上がると自動的に空気を吸い込み、座る前の状態に復帰します。

特殊構造のエアセルが 高い安定性と座り心地を実現

エアセル内を分割し、部位に最適な保持力を持たせることで、前ずれ防止と横方向の安定性を向上させ、座り心地の良さを実現しました。

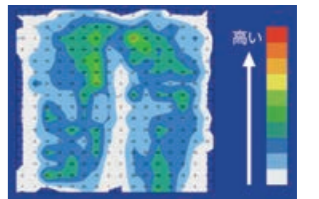

キュブレナは優れた体圧分散性能で、臀部にかかる圧力をより広範囲に分散。

専用カバーの表地は爽やかメッシュ生地 裏地は汚れの侵入を防ぐ防水加工

カバーは伸縮性のある素材を使用。表面はメッシュ生地。裏面には防水加工を施し、失禁などによる汚染を防ぎます。

