


商品特長からみるラインナップ表

体圧分散性能★★、
次亜塩素酸ナトリウム1,000ppmの
清拭消毒に対応した
コストパフォーマンスモデル

New Model

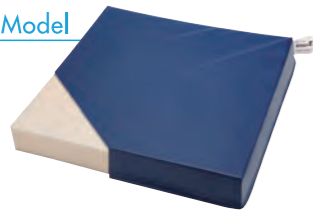


アルトネ
体圧分散性能★★
価格16,900円(+税)

厚み
5.5cm


・専用加工の
専用カバー Ag+
・8万回の繰り返し
圧縮試験クリア

清拭消毒に対応した、お手軽プライスのモデル

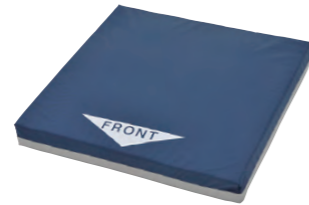

Gel-Tクッション
体圧分散性能★
価格14,500円(+税)

厚み
5cm

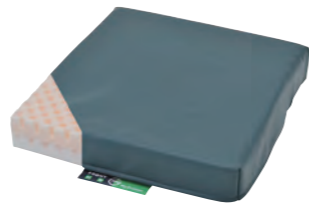


MYクッション
体圧分散性能★
価格7,300円(+税)

厚み
8cm
(前側5cm)

仙骨座りに対応し、
丸洗いができる通気性に優れたモデル




丸洗い
OK
ムシ対策
カバーを外さず
丸洗い可能

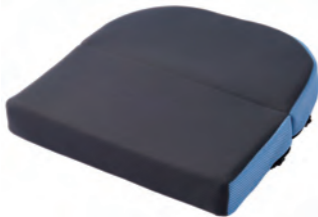

フォルリオ
体圧分散性能★★
価格25,000円(+税)

厚み
6cm


仙骨座りに対応したモデル

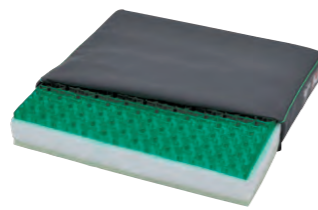

ベスポジェルクッション
体圧分散性能★★
価格22,000円(+税)


厚み
6.5cm

さらなる体圧分散と姿勢保持に対応したモデル

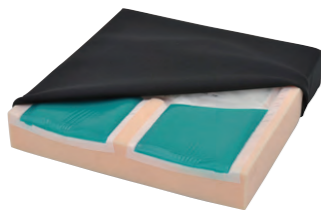

デュオジェルクッション
体圧分散性能★★★
価格27,000円(+税)

厚み
7.5cm

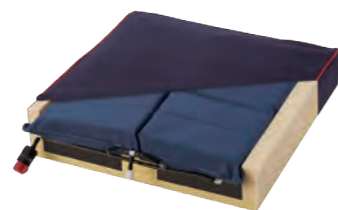

キュブレナクッション
体圧分散性能★★★
価格39,800円(+税)


厚み
10cm

詳しくは各商品カタログをご覧ください。

姿勢保持能力でみるラインナップ表


簡単お手入れ清拭タイプ

New Model

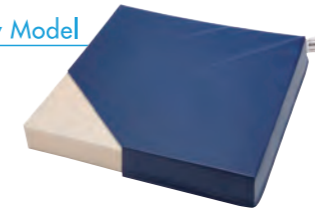


厚み
5.5cm

アルトネ
体圧分散性能★★
価格16,900円(+税)

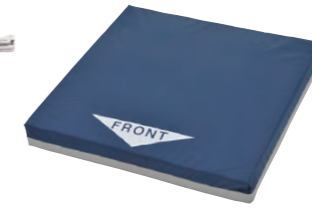

厚み
5cm

Gel-Tクッション
体圧分散性能★
価格14,500円(+税)

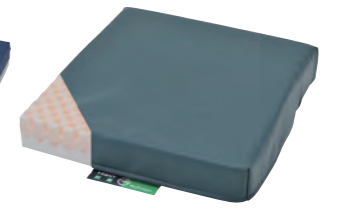

厚み
8cm
(前側5cm)

MYクッション
体圧分散性能★
価格7,300円(+税)

姿勢保持ができる

丸洗い&通気タイプ

「前ずれ防止」と「足こぎサポート」の
一枚二役




仙骨座りに
なりやすい方



厚み
6cm

フォルリオ
体圧分散性能★★
価格25,000円(+税)

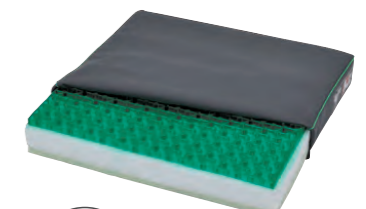


厚み
6.5cm

ベスポジェルクッション
体圧分散性能★★
価格22,000円(+税)

姿勢保持ができる、または、姿勢保持ができない




仙骨座りに
なりやすい方

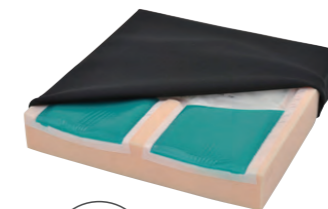


厚み
7.5cm

デュオジェルクッション
体圧分散性能★★★
価格27,000円(+税)

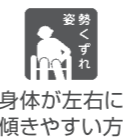

姿勢くずれ
身体が左右に
傾きやすい方

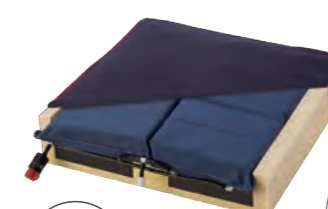

厚み
10cm

キュブレナクッション
体圧分散性能★★★
価格39,800円(+税)



骨盤の後傾や体幹の横倒れを
防ぐバックサポートクッションを
併用すれば、座位姿勢がさらに
整いやすくなります。[P.40]

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

New Model


Altone アルトネ

設置方向フリーデザイン

前後左右の向きがなく設置に迷いません。
向きをローテーションすれば、さらに長持ちします。



標準車いすにも合わせやすいスリム設計

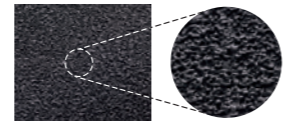


クッションの下面は滑り止め加工
車椅子の座面をしっかりグリップ。


車いすでの移動時、道路の凸凹
や屋内の段差による衝撃を吸収
して、皮膚を守ります。

優れた体圧分散性能と衝撃吸収性

クッションの中身は優れた体圧分散性能と衝撃吸収性
を持つ低反発ウレタンフォームを使用。

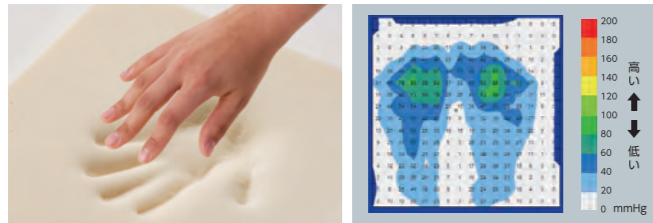

身体の形に馴染みながらフォームが
変形して体圧を分散します。

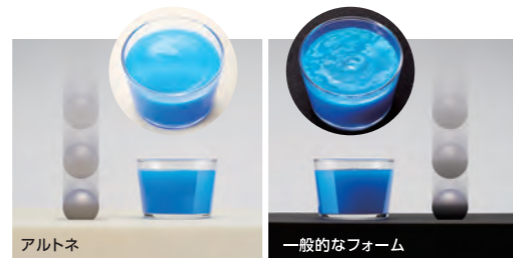

写真ノ一般的なウレタンフォームとの衝撃吸収力比較試験
(鉄球落下時の衝撃を容器に入れた液体の状態を検証)

荷重 × 8万回 8万回の繰り返し圧縮試験も
クリアしています。
※社内品質基準に準ずる

清拭消毒に対応する耐薬品性の専用カバー

専用カバーは、濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムや
消毒用エタノールによる清拭消毒にも対応可能。
専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。



液体が侵入しにくい防水仕様

専用カバーの表面は防水加工、ファスナー部には「止水加工」を施しています。
さらに、液体が直接ファスナーに伝わらないよう「ファスナー隠し」も設けた仕
様になっています。



制菌加工
銀複合系抗菌剤も使用しています。
対応菌種 / MRSA、黄色ブドウ球菌、
大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

アルトネ TAISコード/00206-000136

品番 / CK-460
サイズ / 幅39.5 × 奥行39.5 × 厚5.5cm
重量 / 0.9kg
クッション・カバーセット価格 **16,900円 (+税)**
専用カバーのみ価格 (品番 / CH-460) **5,500円 (+税)**

材質 **専用カバー** 上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮)
下面 / PVCラミネート加工布 (防水・すべり止め加工)
中身 低反発ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**


Gel-T Cushion Gel-T クッション

ジェルとウレタンフォームのコンビネーション



ジェル+ウレタンフォームの
サンドイッチ構造
流動性ジェルが瞬間的なずれに対応し、
ウレタンフォームとともに体圧を分散。

厚み
5cm

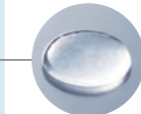

ジェルパッドの中には
流動性ジェル素材



防水加工の専用カバー
表地はナイロン素材で汚れを拭き取り
やすく、裏地は防水加工。
専用カバーは洗濯可能。

Gel-T クッション TAISコード/00206-000006

品番 / CK-346
サイズ / 幅40 × 奥行40 × 厚5cm
重量 / 2.45kg
クッション・専用カバーセット価格 **14,500円 (+税)**
専用カバーのみ価格 **5,300円 (+税)**

材質 **専用カバー** 上面 / ナイロン 100% (防水・抗菌)
下面 / ポリ塩化ビニール 100% (防水・抗菌・難燃・すべり止め加工)
中身 高弾性・高密度ウレタンフォーム (抗菌・難燃)
流動性ジェル (ナトリウムアクリル樹脂)

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

MY Cushion マイクッション

足に力が伝わりやすいバックアップ構造で
「足こぎがしやすく」、臀部に掛かる「体圧を分散」

体圧分散と安定保持を両立させる二層構造



- 大腿部でしっかり体重を受け、臀部にか
かる体圧を軽減。
- 骨盤の後傾を防ぎ、力が伝わりやすくな
り、足こぎがしやすくなります。
- シートのたわみによる外力を吸収。



防水加工の専用カバー
表地は防水加工で拭き取りやすく、
下面はすべり止め加工。専用カバー
は伸縮性があり、洗濯も可能。

吊下げネームタグ付きで、
フックに引っ掛けられるので収納に
便利です。

マイクッション TAISコード/00206-000051

品番 / CK-398
サイズ / 幅39 × 奥行39 × 厚8cm (前側5cm)
重量 / 0.5kg
クッション・専用カバーセット価格 **7,300円 (+税)**
専用カバーのみ価格 (品番 / CH-281) **2,800円 (+税)**

材質 **専用カバー** 上面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・抗菌・伸縮)
下面 / ナイロン (すべり止め加工)
中身 ウレタンフォーム


介護保険貸与対象品目 車いす付属品

FOLIO フォリオ




通気性の高いクッションで快適、汚れたときは丸洗いもできる車いす用クッション。デイサービスなど外出時にも安心な前ずれ防止構造と優れた体圧分散性能。

通気性の良いアウターカバーと無膜ウレタンフォームでさらっと快適

家庭用洗濯機で丸洗い、自然乾燥

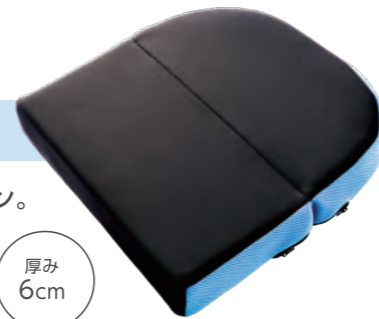

厚み 6cm

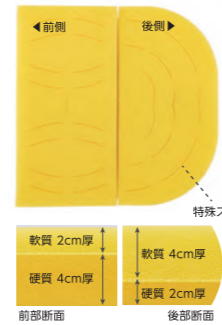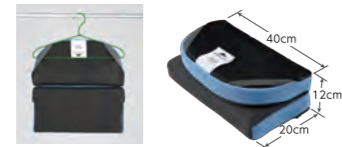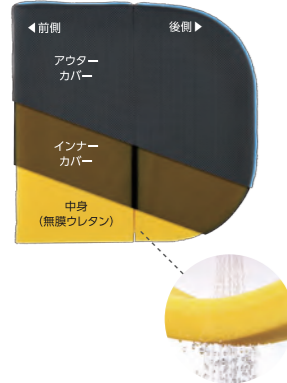

前後に分かれた独立構造で前ずれを防止

特殊スリットで体圧分散

前後断面
軟質 2cm厚 硬質 4cm厚
後部断面
軟質 4cm厚 硬質 2cm厚

フォリオ TAISコード/00206-000132

品番/CK-405
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚6cm
重量/0.6kg

クッション・専用カバーセット価格 25,000円(+税)
専用カバーのみ価格(品番/CH-405) 6,800円(+税)

材質 専用カバー アウターカバー/上面 ポリエステル100%
裏地 ターポリン布(すべり止め加工)
インナーカバー ポリエステル100%
中身 ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 車いす付属品

Bespo Gel Cushion ベスポジェルクッション

「前ずれ防止」と「足こぎサポート」の1枚二役

クッションの前後の向きを変えるだけで、前ずれ防止にも足こぎのサポートにも使えます。




前後で沈み込みの度合いが異なるスラッシュ構造。沈み込み側を

- 膝側に向きを設置すれば足こぎをサポート。
- 座骨側に向きを設置すれば前ずれを防止。



「ずれへの追従性と体圧分散性能に優れたヘキサジェル

深く沈み込む側には、目の粗いジェルでしなやかさと追従性を追求。沈み込みを抑えた側には、目の細かいジェルで接触面積を増やし、しっかりとホールドします。

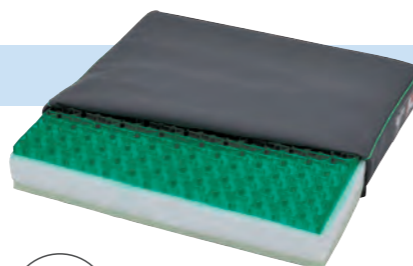

厚み 6.5cm



専用カバーの表地は爽やかメッシュ生地、裏地は汚れが侵入しにくい防水加工。専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

ベスポジェルクッション TAISコード/00206-000072

品番/CK-375
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚6.5cm
重量/1.9kg


クッション・専用カバーセット価格 22,000円(+税)
専用カバーのみ価格(品番/CH-370) 5,300円(+税)

材質 専用カバー 上面/表地 ポリエステル100%(吸水速乾・制菌・伸縮)
裏地 ポリウレタンフィルム(防水)
下面/ターポリン布(防水・すべり止め加工)
ウレタンフィルム
中袋 1層目/ポリウレタンジェル
中身 2層目/低反発ウレタンフォーム
3層目/高反発ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 車いす付属品

Duo Gel Cushion デュオジェルクッション

「体圧分散」と「姿勢保持」、ずれへの対応を実現した高性能クッション
理想的な姿勢保持を実現するコンビネーション構造

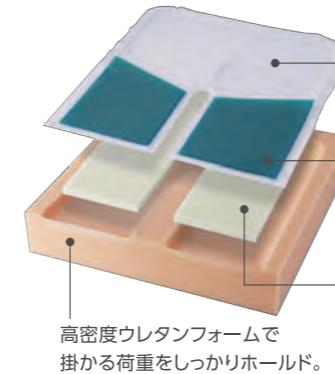


体重を受ける後ろ側には流動性ジェルを採用。お尻を包み込み、ずれを吸収。

前側のシリコンTRUGELが大腿部をしっかり支え、安定体位をサポート。

低反発ウレタンフォームで体圧分散。

坐骨結節部への圧力集中を分散するU字構造

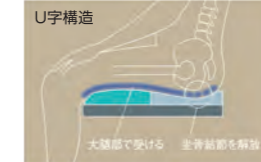


左右の大腿部の裏側で体重を受けるU字構造で坐骨結節部に集中する圧力を分散。

厚み 7.5cm



表地はムレ対策の透湿性生地
裏地は汚れの侵入を防ぐ防水加工

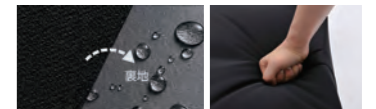

カバーの表地はムレ対策の透湿性生地。裏地は汚れが侵入しにくい防水加工。専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

デュオジェルクッション TAISコード/00206-000048 (各タイプ共通)

品番/CK-385 品番/CK-395
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚7.5cm サイズ/幅42 × 奥行42 × 厚7.5cm
重量/1.7kg 重量/1.9kg

クッション・専用カバーセット価格 27,000円(+税)

専用カバーのみ価格 品番/CH-285(CK-385用)、CH-295(CK-395用) 各5,300円(+税)

材質 専用カバー 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮)
裏地 ポリウレタンフィルム(防水)
下面/ターポリン布(防水・防炎・すべり止め加工)
ウレタンフィルム
中袋 1層目/シリコンジェル
中身 2層目/低反発ウレタンフォーム
3層目/高密度ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 車いす付属品

Cuburena Cushion キュブレナクッション

わずか10秒で自動調圧完了。
優れた体圧分散性能を発揮する
高性能エア式ハイブリッドクッション。




厚み 10cm



調圧バルブ/調圧バルブをあけて10秒待つだけ。エアセルの内圧を自動で調圧し、療養者の体重や体型に応じた最適な座面を簡単に作ります。
吸気バルブ/立ち上がると自動的に空気を吸い込み、座る前の状態に復帰します。

スラントサポート

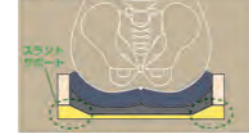

骨盤の後傾や左右の傾きを抑制します。

フロントサポート



前方への体のずれと骨盤の後傾を抑制します。3層目の高硬度ウレタンベースが車いすのスリングシートのたわみを補正。スラントサポートとフロントサポートが座位姿勢をサポートします。



専用カバーの表地はメッシュ生地、裏地は汚れが侵入しにくい防水加工。専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

キュブレナクッション TAISコード/00206-000081

品番/CK-400
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚10cm
重量/1.1kg

クッション・専用カバーセット価格 39,800円(+税)
専用カバーのみ価格(品番/CH-400) 6,200円(+税)

材質 専用カバー 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮)
裏地 ポリウレタンフィルム(防水・抗菌)
下面/ターポリン布(防水・すべり止め加工)
ウレタンフィルム
中袋 1層目/エアセル/ウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
中身 1層目/エアセル内/ウレタンフォーム
2層目/ウレタンフォーム
3層目/高硬度ウレタンフォーム

調圧バルブ/ABS, POM, SUS, シリコンゴム
吸気バルブ/ポリプロピレン, シリコンゴム, ナイロン