


商品特長からみるラインナップ表

体圧分散性能★★★、  
次亜塩素酸ナトリウム1,000ppmの  
清拭消毒に対応した  
コストパフォーマンスモデル

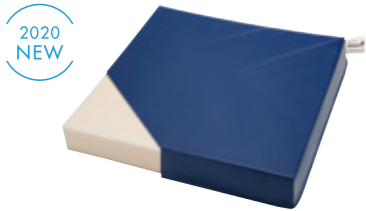


2020 NEW  
アルトネ  
体圧分散性能★★★  
価格16,900円(+税)  
厚み 5.5cm

・専用加工の  
専用カバー Ag+  
・8万回の繰り返し  
圧縮試験クリア

清拭消毒に対応した、お手軽プライスのモデル




Gel-Tクッション  
体圧分散性能★  
価格14,500円(+税)  
厚み 5cm

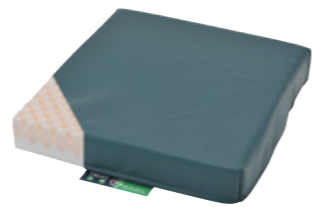


MYクッション  
体圧分散性能★  
価格7,300円(+税)  
厚み 8cm  
(前側5cm)

仙骨座りに対応し、  
丸洗いができる通気性に優れたモデル

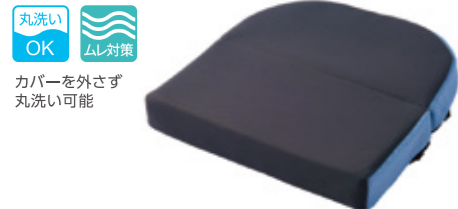


丸洗い OK  
ムシ対策  
カバーを外さず  
丸洗い可能  
フォリオ  
体圧分散性能★★★  
価格25,000円(+税)  
厚み 6cm

仙骨座りに対応したモデル

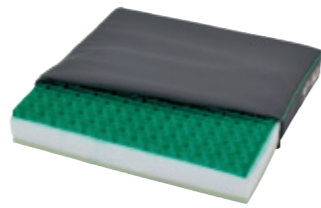

ベスポジェルクッション  
体圧分散性能★★★  
価格22,000円(+税)  
厚み 6.5cm

さらなる体圧分散と姿勢保持に対応したモデル

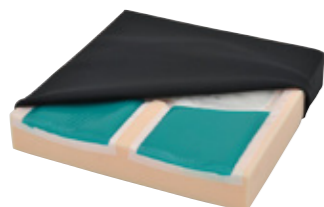

デュオジェルクッション  
体圧分散性能★★★★  
価格27,000円(+税)  
厚み 7.5cm




キュブレナクッション  
体圧分散性能★★★★  
価格39,800円(+税)  
厚み 10cm

詳しくは各商品カタログをご覧ください。

姿勢保持能力でみるラインナップ表

簡単お手入れ清拭タイプ

2020 NEW

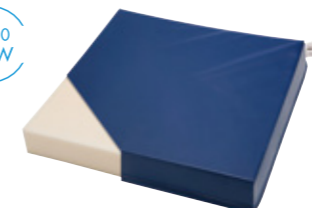

厚み 5.5cm  
アルトネ  
体圧分散性能★★★  
価格16,900円(+税)



厚み 5cm  
Gel-Tクッション  
体圧分散性能★  
価格14,500円(+税)



厚み 8cm  
(前側5cm)  
MYクッション  
体圧分散性能★  
価格7,300円(+税)

姿勢保持ができる

丸洗い&通気タイプ


「前ずれ防止」と「足こぎサポート」の  
一枚二役



仙骨座りに  
なりやすい方



丸洗い OK  
ムシ対策  
厚み 6cm  
フォリオ  
体圧分散性能★★★  
価格25,000円(+税)

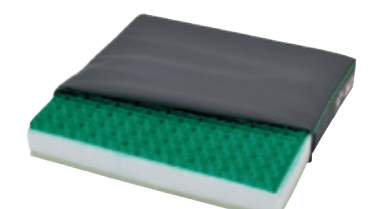


厚み 6.5cm  
ベスポジェルクッション  
体圧分散性能★★★  
価格22,000円(+税)

姿勢保持ができる、または、姿勢保持ができない


優れた体圧分散性能&姿勢保持



仙骨座りに  
なりやすい方

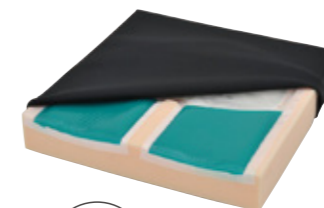

厚み 7.5cm  
デュオジェルクッション  
体圧分散性能★★★★  
価格27,000円(+税)

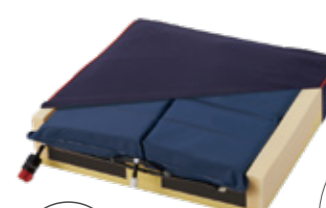

厚み 10cm  
キュブレナクッション  
体圧分散性能★★★★  
価格39,800円(+税)



骨盤の後傾や体幹の横倒れを  
防ぐバックサポートクッションを  
併用すれば、座位姿勢がさらに  
整いやすくなります。[P.40]

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

Altone アルトネ


2020 NEW

設置方向フリーデザイン

前後左右の向きがなく設置に迷いません。  
向きをローテーションすれば、さらに長持ちします。



標準車いすにも合わせやすいスリム設計

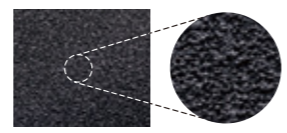


クッションの下面は滑り止め加工  
車椅子の座面をしっかりとグリップ。


車いすでの移動時、道路の凸凹  
や屋内の段差による衝撃を吸収  
して、皮膚を守ります。

優れた体圧分散性能と衝撃吸収性

クッションの中身は優れた体圧分散性能と衝撃吸収性  
を持つ低反発ウレタンフォームを使用。

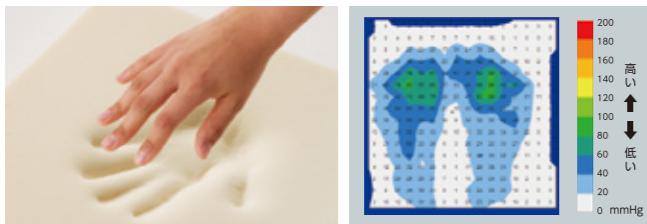

身体の形に馴染みながらフォームが  
変形して体圧を分散します。

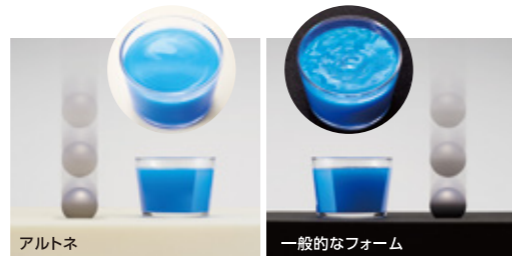

写真/一般的なウレタンフォームとの衝撃吸収力比較試験  
(鉄球落下時の衝撃を容器に入れた液体の状態を検証)


**荷重 × 8万回** 8万回の繰り返し圧縮試験も  
クリアしています。  
※社内品質基準に準ずる

清拭消毒に対応する耐薬品性の専用カバー

専用カバーは、濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムや  
消毒用エタノールによる清拭消毒にも対応可能。  
専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

液体が侵入しにくい防水仕様

専用カバーの表面は防水加工、ファスナー部には「止水加工」を施しています。  
さらに、液体が直接ファスナーに伝わらないよう「ファスナー隠し」も設けた仕  
様になっています。

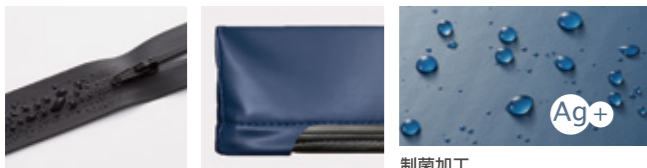

**抗菌加工**  
銀複合系抗菌剤も使用しています。  
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、  
大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌



アルトネ TAISコード/00206-000136

品番/CK-460  
サイズ/幅39.5×奥行39.5×厚5.5cm  
重量/0.9kg

材質 **専用カバー** 上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)  
下面/PVCラミネート加工布(防水・すべり止め加工)  
**中身** 低反発ウレタンフォーム

クッション・カバーセット価格 **16,900円(+税)**  
専用カバーのみ価格(品番/CH-460) **5,500円(+税)**

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

Gel-T Cushion Gel-T クッション


ジェルとウレタンフォームのコンビネーション



ジェル+ウレタンフォームの  
サンドイッチ構造  
流動性ジェルが瞬間的なずれに対応し、  
ウレタンフォームとともに体圧を分散。

厚み  
5cm

ジェルパッドの中には  
流動性ジェル素材

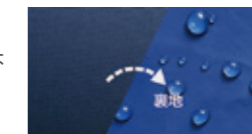

防水加工の専用カバー  
表地はナイロン素材で汚れを拭き取り  
やすく、裏地は防水加工。  
専用カバーは洗濯可能。

Gel-T クッション TAISコード/00206-000006

品番/CK-346  
サイズ/幅40×奥行40×厚5cm  
重量/2.45kg

材質 **専用カバー** 上面/ナイロン 100%(防水・抗菌)  
下面/ポリ塩化ビニール 100%(防水・抗菌・難燃・すべり止め加工)  
**中身** 高弾性・高密度ウレタンフォーム(抗菌・難燃)  
流動性ジェル(ナトリウムアクリル樹脂)

クッション・専用カバーセット価格 **14,500円(+税)**  
専用カバーのみ価格 **5,300円(+税)**

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**


MY Cushion マイクッション

足に力が伝わりやすいバックアップ構造で  
「足こぎがしやすく」、臀部に掛かる「体圧を分散」

体圧分散と安定保持を両立させる二層構造



- 大腿部でしっかり体重を受け、臀部にか  
かる体圧を軽減。
- 骨盤の後傾を防ぎ、力が伝わりやすくな  
り、足こぎがしやすくなります。
- シートのたわみによる外力を吸収。

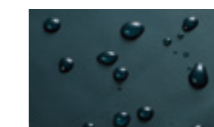

防水加工の専用カバー  
表地は防水加工で拭き取りやすく、  
下面はすべり止め加工。専用カバー  
は伸縮性があり、洗濯も可能。



吊上げネームタグ付きで、  
フックに引っ掛けられるので収納に  
便利です。

マイクッション TAISコード/00206-000051

品番/CK-398  
サイズ/幅39×奥行39×厚8cm(前側5cm)  
重量/0.5kg

材質 **専用カバー** 上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)  
下面/ナイロン(すべり止め加工)  
**中身** ウレタンフォーム

クッション・専用カバーセット価格 **7,300円(+税)**  
専用カバーのみ価格(品番/CH-281) **2,800円(+税)**

エアマットレス

ウレタンフォームマットレス

マットレス用  
シート

専門分野  
ウレタンフォームマットレス

車いす用  
クッション

ポジショニング用具

携帯型  
接触圧力測定器



介護保険貸与対象品目 車いす付属品

FOLIO フォリオ

通気性の高いクッションで快適、汚れたときは丸洗いもできる車いす用クッション。デイサービスなど外出時にも安心な前ずれ防止構造と優れた体圧分散性能。

通気性の良いアウターカバーと無膜ウレタンフォームでさらっと快適


家庭用洗濯機で丸洗い、自然乾燥

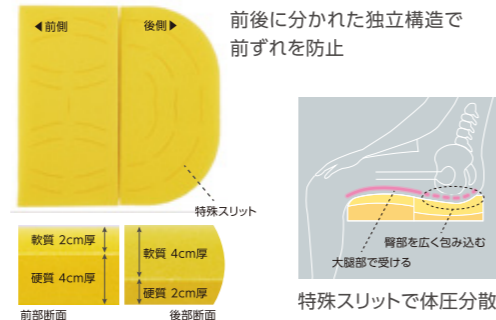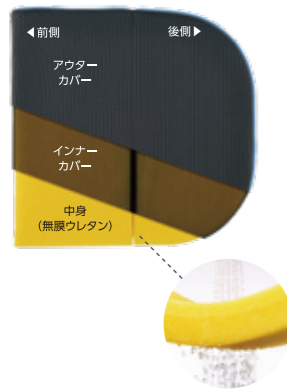

厚み 6cm



前後に分かれた独立構造で前ずれを防止

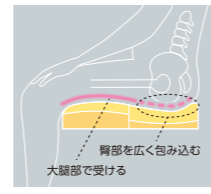

特殊スリットで体圧分散

フォリオ TAISコード/00206-000132

品番/CK-405  
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚6cm  
重量/0.6kg

クッション・専用カバーセット価格 25,000円(+税)  
専用カバーのみ価格(品番/CH-405) 6,800円(+税)

材質 専用カバー アウターカバー/上面 ポリエステル100%  
裏地 ポリウレタンフィルム(防水)  
下面 ターポリン布(防水・すべり止め加工)  
インナーカバー ポリエステル100%  
中身 ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 車いす付属品

Bespo Gel Cushion ベスポジェルクッション

「前ずれ防止」と「足こぎサポート」の1枚二役

クッションの前後の向きを変えるだけで、前ずれ防止にも足こぎのサポートにも使えます。




前後で沈み込みの度合いが異なるスラッシュ構造。沈み込み側を

- ①膝側に向きを設置すれば足こぎをサポート。
- ②座骨側に向きを設置すれば前ずれを防止。



「ずれへの追従性と体圧分散性能に優れたヘキサジェル

深く沈み込む側には、目の粗いジェルでしなやかさと追従性を追求。沈み込みを抑えた側には、目の細かいジェルで接触面積を増やし、しっかりとホールドします。

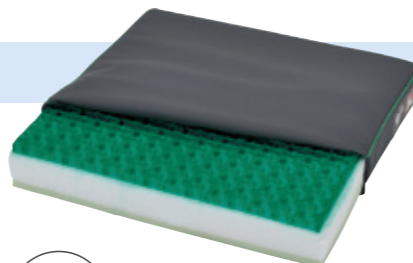

厚み 6.5cm



専用カバーの表地は爽やかメッシュ生地、裏地は汚れが侵入しにくい防水加工。専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

ベスポジェルクッション TAISコード/00206-000072

品番/CK-375  
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚6.5cm  
重量/1.9kg


クッション・専用カバーセット価格 22,000円(+税)  
専用カバーのみ価格(品番/CH-370) 5,300円(+税)

材質 専用カバー 上面/表地 ポリエステル100%(吸水速乾・制菌・伸縮)  
裏地 ポリウレタンフィルム(防水)  
下面/ターポリン布(防水・すべり止め加工)  
ウレタンフィルム  
中袋 1層目/ポリウレタンジェル  
中身 2層目/低反発ウレタンフォーム  
3層目/高反発ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 車いす付属品

Duo Gel Cushion デュオジェルクッション

「体圧分散」と「姿勢保持」、ずれへの対応を実現した高性能クッション。理想的な姿勢保持を実現するコンビネーション構造

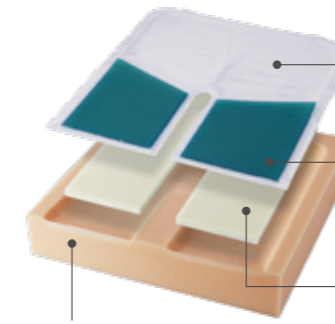


高密度ウレタンフォームで掛かる荷重をしっかりホールド。

体重を受ける後ろ側には流動性ジェルを採用。お尻を包み込み、ずれを吸収。

前側のシリコンTRUGELが大腿部をしっかり支え、安定体位をサポート。

低反発ウレタンフォームで体圧分散。

坐骨結節部への圧力集中を分散するU字構造

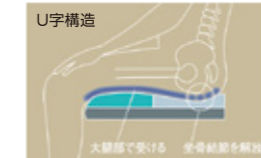


左右の大腿部の裏側で体重を受けるU字構造で坐骨結節部に集中する圧力を分散。

厚み 7.5cm



表地はムレ対策の透湿性生地、裏地は汚れの侵入を防ぐ防水加工

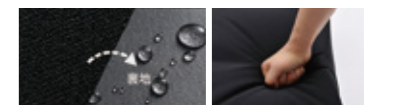

カバーの表地はムレ対策の透湿性生地。裏地は汚れが侵入しにくい防水加工。専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

デュオジェルクッション TAISコード/00206-000048 (各タイプ共通)

品番/CK-385  
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚7.5cm  
重量/1.7kg  
品番/CK-395  
サイズ/幅42 × 奥行42 × 厚7.5cm  
重量/1.9kg

クッション・専用カバーセット価格 27,000円(+税)

専用カバーのみ価格 品番/CH-285(CK-385用)、CH-295(CK-395用) 各5,300円(+税)

材質 専用カバー 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮)  
裏地 ポリウレタンフィルム(防水)  
下面/ターポリン布(防水・防炎・すべり止め加工)  
ウレタンフィルム  
中袋 1層目/シリコンジェル  
中身 2層目/低反発ウレタンフォーム  
3層目/高密度ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 車いす付属品

Cuburena Cushion キュブレナクッション

わずか10秒で自動調圧完了。優れた体圧分散性能を発揮する高性能エア式ハイブリッドクッション。




厚み 10cm



調圧バルブ/調圧バルブをあけて10秒待つだけ。エアセルの内圧を自動で調圧し、療養者の体重や体型に応じた最適な座面を簡単に作ります。


吸気バルブ/立ち上がると自動的に空気を吸い込み、座る前の状態に復帰します。

スラントサポート

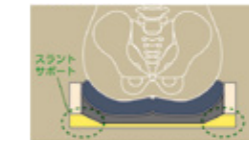

骨盤の後傾や左右の傾きを抑制します。3層目の高硬度ウレタンベースが車いすのスリングシートのため補正。スラントサポートとフロントサポートが座位姿勢をサポートします。

フロントサポート

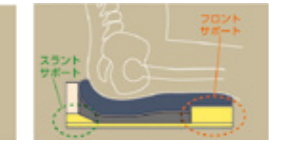

前方への体のずれと骨盤の後傾を抑制します。



専用カバーの表地はメッシュ生地、裏地は汚れが侵入しにくい防水加工。専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

キュブレナクッション TAISコード/00206-000081

品番/CK-400  
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚10cm  
重量/1.1kg

クッション・専用カバーセット価格 39,800円(+税)  
専用カバーのみ価格(品番/CH-400) 6,200円(+税)

材質 専用カバー 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮)  
裏地 ポリウレタンフィルム(防水・抗菌)  
下面/ターポリン布(防水・すべり止め加工)  
ウレタンフィルム  
中袋 1層目エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)  
中身 1層目エアセル内/ウレタンフォーム  
2層目/ウレタンフォーム  
3層目/高硬度ウレタンフォーム  
調圧バルブ/ABS、POM、SUS、シリコンゴム  
吸気バルブ/ポリプロピレン、シリコンゴム、ナイロン

エアマットレス

ウレタンフォームマットレス

マットレス用シート

専門分野ウレタンフォームマットレス

車いす用クッション

ポジションング用具

携帯型圧力測定器