


商品特長からみるラインナップ表

体圧分散性能★★、
次亜塩素酸ナトリウム1,000ppmの
清拭消毒に対応した
コストパフォーマンスモデル

2020
NEW

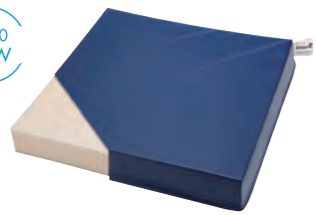


アルトネ
体圧分散性能★★
価格18,000円(+税)

厚み
5.5cm


・専用加工の
専用カバー Ag+
・8万回の繰り返し
圧縮試験クリア

清拭消毒に対応した、お手軽プライスのモデル

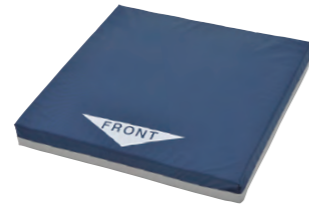

Gel-Tクッション
体圧分散性能★
価格16,000円(+税)

厚み
5cm

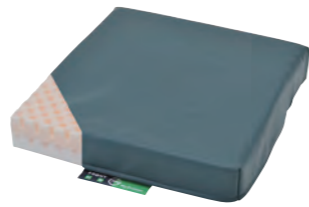


MYクッション
体圧分散性能★
価格8,000円(+税)

厚み
8cm
(前側5cm)

仙骨座りに対応し、
丸洗いができる通気性に優れたモデル




カバーを外さず
丸洗い可能

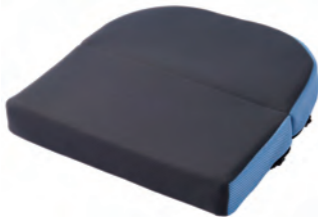

フォリオ
体圧分散性能★★
価格27,000円(+税)


厚み
6cm

さらなる体圧分散と姿勢保持に対応したモデル

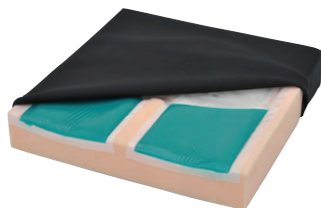

デュオジェルクッション
体圧分散性能★★★
価格30,000円(+税)

厚み
7.5cm

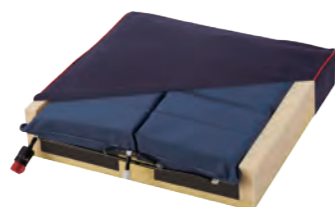

キューブレナクッション
体圧分散性能★★★
価格43,000円(+税)

厚み
10cm


詳しくは各商品カタログをご覧ください。

姿勢保持能力でみるラインナップ表

簡単お手入れ清拭タイプ



2020
NEW

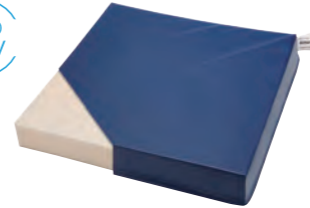


厚み
5.5cm

アルトネ
体圧分散性能★★
価格18,000円(+税)



厚み
5cm

Gel-Tクッション
体圧分散性能★
価格16,000円(+税)

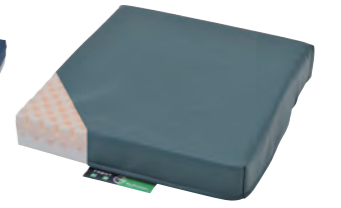

厚み
8cm
(前側5cm)

MYクッション
体圧分散性能★
価格8,000円(+税)

姿勢保持ができる

丸洗い&通気タイプ



仙骨座りに
なりやすい方



厚み
6cm


フォリオ
体圧分散性能★★
価格27,000円(+税)




姿勢保持ができる、または、姿勢保持ができない



仙骨座りに
なりやすい方

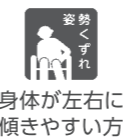


姿勢くずれ
身体が左右に
傾きやすい方

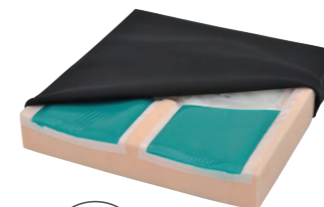

厚み
7.5cm

デュオジェルクッション
体圧分散性能★★★
価格30,000円(+税)

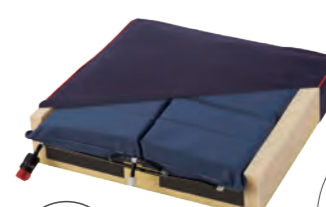

厚み
10cm

キューブレナクッション
体圧分散性能★★★
価格43,000円(+税)



骨盤の後傾や体幹の横倒れを
防ぐバックサポートクッションを
併用すれば、座位姿勢がさらに
整いやすくなります。[P.38]

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**


Altone アルトネ

設置方向フリーデザイン


前後左右の向きがなく設置に迷いません。
向きをローテーションすれば、さらに長持ちします。



2020 NEW

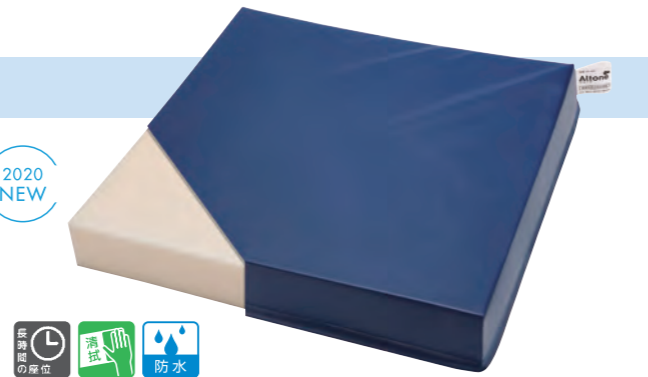

標準車いすにも合わせやすいスリム設計

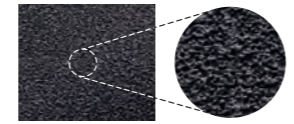


クッションの下面は滑り止め加工
車椅子の座面をしっかりグリップ。

車いすでの移動時、道路の凸凹
や屋内の段差による衝撃を吸収
して、皮膚を守ります。

優れた体圧分散性能と衝撃吸収性

クッションの中身は優れた体圧分散性能と衝撃吸収性
を持つ低反発ウレタンフォームを使用。

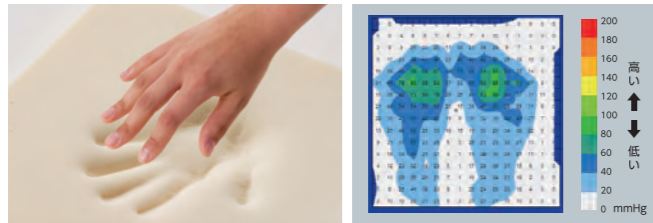

身体の形に馴染みながらフォームが
変形して体圧を分散します。



写真/一般的なウレタンフォームとの衝撃吸収力比較試験
(鉄球落下時の衝撃を容器に入れた液体の状態を検証)

荷重 × 8万回 8万回の繰り返し圧縮試験も
クリアしています。
※社内品質基準に準ずる

清拭消毒に対応する耐薬品性の専用カバー

専用カバーは、濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムや
消毒用エタノールによる清拭消毒にも対応可能。
専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。



液体が侵入しにくい防水仕様

専用カバーの表面は防水加工、ファスナー部には「止水加工」を施しています。
さらに、液体が直接ファスナーに伝わらないよう「ファスナー隠し」も設けた仕
様になっています。



制菌加工
銀複合系抗菌剤も使用しています。
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、
大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

アルトネ TAISコード/00206-000136

品番/CK-460
サイズ/幅39.5×奥行39.5×厚5.5cm
重量/0.9kg
クッション・カバーセット価格 18,000円(+税)
専用カバーのみ価格(品番/CH-460) 6,100円(+税)

材質 **専用カバー** 上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)
下面/PVCラミネート加工布(防水・すべり止め加工)
中身 低反発ウレタンフォーム


介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

Gel-T Cushion Gel-T クッション

ジェルとウレタンフォームのコンビネーション



ジェル+ウレタンフォームの
サンドイッチ構造
流動性ジェルが瞬間的なずれに対応し、
ウレタンフォームとともに体圧を分散。

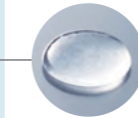

ジェルパッドの中には
流動性ジェル素材

厚み
5cm



防水加工の専用カバー
表地はナイロン素材で汚れを拭き取り
やすく、裏地は防水加工。
専用カバーは洗濯可能。

Gel-T クッション TAISコード/00206-000006

品番/CK-346
サイズ/幅40×奥行40×厚5cm
重量/2.45kg
クッション・専用カバーセット価格 16,000円(+税)
専用カバーのみ価格 5,900円(+税)

材質 **専用カバー** 上面/ナイロン 100%(防水・抗菌)
下面/ポリ塩化ビニール 100%(防水・抗菌・難燃・すべり止め加工)
中身 高弾性・高密度ウレタンフォーム(抗菌・難燃)
流動性ジェル(ナトリウムアクリル樹脂)

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

MY Cushion マイクッション

足に力が伝わりやすいバックアップ構造で
「足こぎがしやすく」、臀部に掛かる「体圧を分散」

体圧分散と安定保持を両立させる二層構造



- 大腿部でしっかり体重を受け、臀部にか
かる体圧を軽減。
- 骨盤の後傾を防ぎ、力が伝わりやすくな
り、足こぎがしやすくなります。
- シートのたわみによる外力を吸収。



防水加工の専用カバー
表地は防水加工で拭き取りやすく、
下面はすべり止め加工。専用カバー
は伸縮性があり、洗濯も可能。

吊下げネームタグ付きで、
フックに引っ掛けられるので収納に
便利です。

マイクッション TAISコード/00206-000051


品番/CK-398
サイズ/幅39×奥行39×厚8cm(前側5cm)
重量/0.5kg
クッション・専用カバーセット価格 8,000円(+税)
専用カバーのみ価格(品番/CH-281) 3,100円(+税)

材質 **専用カバー** 上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)
下面/ナイロン(すべり止め加工)
中身 ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 車いす付属品

FOLIO フォリオ



通気性の高いクッションで快適、汚れたときは丸洗いもできる車いす用クッション。デイサービスなど外出時にも安心な前ずれ防止構造と優れた体圧分散性能。

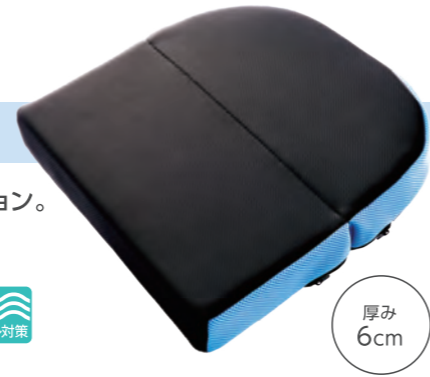

前後に分かれた独立構造で前ずれ防止を強化





厚み 6cm

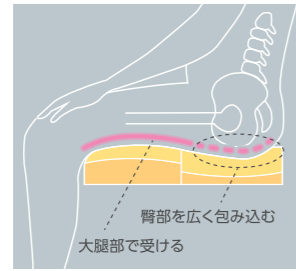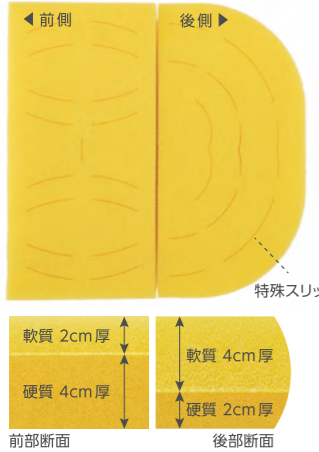

独立構造にすることで、前後に異なる硬さのウレタンを配置。前側が大腿部をしっかり支え、後側が臀部を優しく包み込み、前ずれを防止します。

通気性の良いアウターカバー + 無膜ウレタンフォームでさらっと快適

■無膜ウレタンフォーム
通気性が高く、ムレを軽減する無膜ウレタンを採用。長時間でも快適に使用できます。

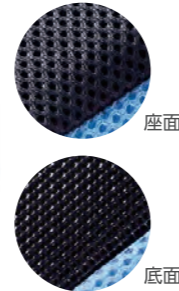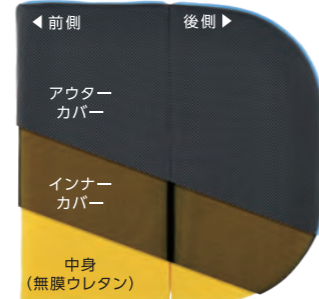

■アウターカバー
座面カバーには、さらっと爽やかな感触のWラッセル生地を採用。通気性が高く、ムレを軽減します。底面には滑り止めの素材を使用。



標準車いすにも合わせやすい薄型設計。*写真は使用例です。

■簡単、自然乾燥

洗濯後は、ハンガーを底面のハンガー掛け用ベルトに掛けて風通しの良い場所で日陰干ししてください。




■軽量・コンパクト

重さはたったの600g。軽くて折りたためるから収納や持ち運びにも便利です。



■特殊スリット構造が安定感よく、圧力を分散します


特殊スリット構造が、体格に応じて適度に沈み込み、安定感よく圧力を分散します。

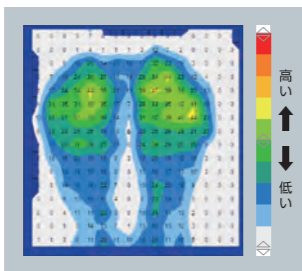

厚さ6cmの薄型で優れた体圧分散性能。

■家庭用洗濯機で丸洗いできます

フォリオのアウターカバーをつけたまま、2つ折りにして洗濯ネットに入れ、洗濯機で洗ってください。

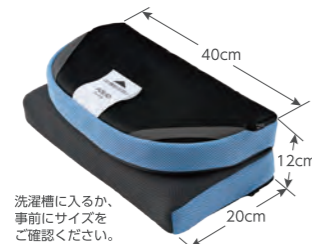

洗濯槽に入るか、事前にサイズをご確認ください。

フォリオ TAISコード/00206-000132

品番/CK-405
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚6cm
重量/0.6kg


クッション・専用カバーセット価格 27,000円(+税)
専用カバーのみ価格(品番/CH-405) 7,600円(+税)

材質 専用カバー アウターカバー/上面 ポリエステル100%
ターポリン布(すべり止め加工)
インナーカバー ポリエステル100%
中身 ウレタンフォーム


介護保険貸与対象品目 車いす付属品

Duo Gel Cushion デュオジェルクッション

「体圧分散」と「姿勢保持」、ずれへの対応を実現した高性能クッション。理想的な姿勢保持を実現するコンビネーション構造

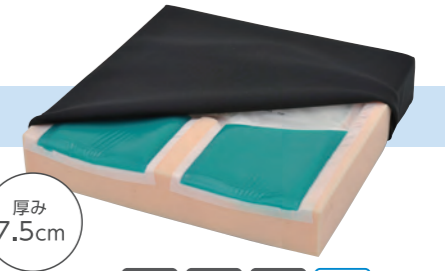


厚み 7.5cm

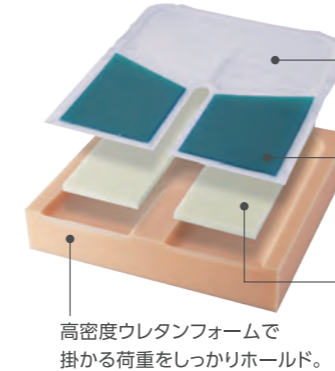


体重を受ける後ろ側には流動性ジェルを採用。お尻を包み込み、ずれを吸収。
前側のシリコンTRUGELが大腿部をしっかり支え、安定体位をサポート。
低反発ウレタンフォームで体圧分散。

坐骨結節部への圧力集中を分散するU字構造

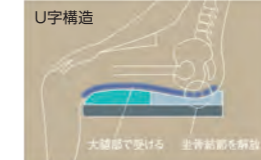

左右の大腿部の裏側で体重を受けるU字構造で坐骨結節部に集中する圧力を分散。

表地はムレ対策の透湿性生地。裏地は汚れの侵入を防ぐ防水加工

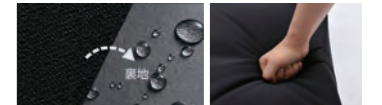

カバーの表地はムレ対策の透湿性生地。裏地は汚れが侵入しにくい防水加工。専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

デュオジェルクッション

TAISコード/00206-000048 (各タイプ共通)

品番/CK-385
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚7.5cm
重量/1.7kg

品番/CK-395
サイズ/幅42 × 奥行42 × 厚7.5cm
重量/1.9kg

材質 専用カバー 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮) 裏地 ポリウレタンフィルム(防水)
下面/ターポリン布(防水・防炎・すべり止め加工)
ウレタンフィルム
中袋 1層目/シリコンジェル
中身 2層目/低反発ウレタンフォーム
3層目/高密度ウレタンフォーム

クッション・専用カバーセット価格 30,000円(+税)

専用カバーのみ価格 品番/CH-285(CK-385用)、CH-295(CK-395用) 各5,900円(+税)

介護保険貸与対象品目 車いす付属品

Cuburena Cushion キュブレナクッション

わずか10秒で自動調圧完了。優れた体圧分散性能を発揮する高性能エア式ハイブリッドクッション。




厚み 10cm



調圧バルブ/調圧バルブをあけて10秒待つだけ。エアセルの内圧を自動で調圧し、療養者の体重や体型に応じた最適な座面を簡単に作ります。
吸気バルブ/立ち上がると自動的に空気を吸い込み、座る前の状態に復帰します。

スラントサポート

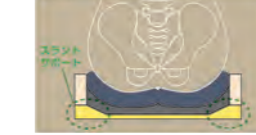


骨盤の後傾や左右の傾きを抑制します。3層目の高硬度ウレタンベースが車いすのスリングシートのたわみを補正。スラントサポートとフロントサポートが座位姿勢をサポートします。

フロントサポート



前方への体のずれと骨盤の後傾を抑制します。

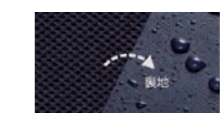

専用カバーの表地はメッシュ生地、裏地は汚れが侵入しにくい防水加工。専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

キュブレナクッション

TAISコード/00206-000081

品番/CK-400
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚10cm
重量/1.1kg

材質 専用カバー 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮) 裏地 ポリウレタンフィルム(防水・抗菌)
下面/ターポリン布(防水・すべり止め加工)
ウレタンフィルム
中袋 1層目エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
中身 1層目エアセル内/ウレタンフォーム
2層目/ウレタンフォーム
3層目/高硬度ウレタンフォーム

クッション・専用カバーセット価格 43,000円(+税)

専用カバーのみ価格(品番/CH-400) 6,900円(+税)

調圧バルブ/ABS, POM, SUS, シリコンゴム
吸気バルブ/ポリプロピレン, シリコンゴム, ナイロン