


ケープ介助グローブ

背抜きやポジショニング時に。
滑りやすいグローブで、療養者にも介護者にもやさしい介助を実現。

滑りやすい素材を使用
滑りやすい素材のため、臀部などの重い箇所にも簡単に手を差し込むことができます。

使いやすいサイズ・形状
介助しやすいスリムフィットサイズ。
装着後に指を開くと落ちない幅で、裏返ししやすい筒型タイプ。

丸洗い可能でいつも清潔
丸洗いできる素材なので、汚れても洗濯でき、いつも清潔に使うことができます。

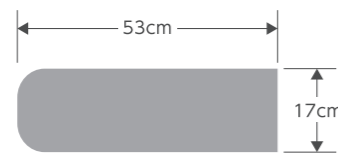

背上げ(頭側挙上)時のずれ解消ケアに



ベッド上のポジショニング時に

ケープ介助グローブ

品番/CK-388
サイズ/フリーサイズ(幅17×長53cm)
材質/ナイロン100%

1セット2枚入り 価格 2,200円(+税)
10セットパック 価格 20,900円(+税)

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ



使いやすく衛生的な使い捨てタイプ

感染対策に
安心してご使用いただける、衛生的な使い捨てタイプ



フラップ構造
身体の下に手を差し込む際、フラップが折れ曲がり、スベリやすさが向上します。

手が抜けにくいポケット構造
ポケットに沿って片手を肘付近まで挿入します。親指で仕切りを挟んでご使用いただくとグローブが抜けにくく、よりスムーズにご使用いただけます。

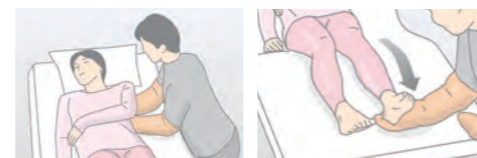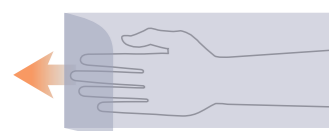

背上げ(頭側挙上)時や
ポジショニング時のずれ解消ケアに

二つ折りパッケージ
場所を取らないコンパクトなパッケージ。片手で一枚ずつ取り出せます。



ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ

品番/CK-498
サイズ/フリーサイズ(幅18×長58cm)
材質/ポリエチレン

枚数/1箱50枚入り
価格 2,200円(+税)

姿勢体位管理補助用具

ロンボ ポジショニング ピロー&クッション



ドイツのテクノロジーを凝縮した、
豊富な形とサイズのピロー&クッション。
洗濯可能な素材で、快適・安全なベッド環境を創造します。



身体の形状にフィットする「ロンボフィル」と安定性を保つ「ロンボメッド」。
2種類の素材が、ポジショニングのバリエーションを広げます。

RHOMBO FILL (ロンボフィル) スニペット

身体の形状にぴったりとフィットして、広い面をサポートして圧力を分散。通気性に優れたハニカム構造の特殊ウレタンを菱形にカットすることで、空気の流れをスムーズにし、ムレを軽減します。



RHOMBO MED (ロンボメッド) スニペット+チップ

ウレタンよりも少し硬めで、へたりにくい特殊な形の発泡チップが、スニペットとスニペットの隙間を埋めることにより、身体を安定させて保持。適度なしっかり感で、療養者の緊張を最小限に抑えます。




さまざまなケースに対応できる、豊富なラインナップ

洗濯可能でいつも清潔



下肢屈曲拘縮などにも、クッションを組み合わせるとサポート。

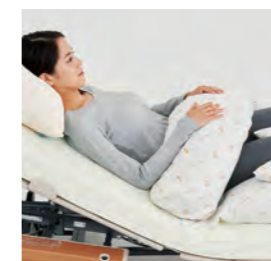

素材が軽いので、身体にクッションを乗せても安心です。



車いす座位のサポートにも対応。



素材の特性を活かした使用方法



[振る]

ピローを振ることで、中身の厚みや形状が調整できます。



[引き出す]

ピローをつまんで引き出すことで、身体への接触部分を微調整できます。



[入れる]

大きなピロー(RF5)に小さなピロー(RF3)を入れることでボリュームがアップ。より安定感を出すことができます。



[揺らす]

ピローにのせた身体を揺らすことで、より身体の形状にフィットし、なじませることができます。

RHOMBO FILL ロンボフィル

RF1 (40×60cm) RF2 (40×80cm) 枕にも、さまざまな部位のサポートにも使用できるソフトタイプのマルチクッション。



RF3 (23×40cm) RF4 (40×60cm) 沈み込みを抑え、安定感よくさまざまな部位を支えることができるクッション。



高密度仕様



RF5 (80×80cm) サポートの難しい円背と拘縮にも対応する、広く身体を支えられる大型クッション。




POINT! RF5は振ったりすることで、中身を移動させ、厚みを変えることができます。例えば頭部側を厚く、背部側を薄くすることができます。

RHOMBO MED ロンボメッド

RM1-H (クッション本体：65×75cm、ハンドル部：4×12cm) 平らなままで、丸めて、折り曲げて、目的に応じて自在に使えるクッション。




体位変換器

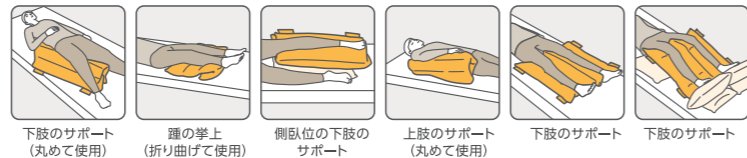


POINT! スリットに沿わせて下肢を支えることで、下肢を安定して支えることができます。

RM2-H (クッション本体：40×80cm、フラップ部：20×80cm、ハンドル部：4×12cm) フラップ付きでより安定感よく、快適に30度側臥位をサポートするクッション。

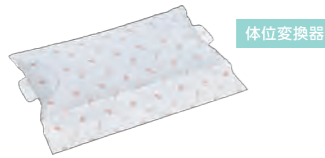

体位変換器

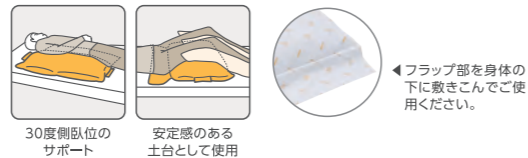

RM3 (15×30cm) 小さな支持面を提供し、高さの微調整やスモールチェンジ(小さな体位変換)にも使用できる小型クッション。



POINT! 小さな隙間にもスムーズに入れることができ、細かい部位をサポートするのに最適なサイズです。

RM4-H (クッション本体：30×65cm、ハンドル部：4×12cm) 関節部の曲がりに沿い、上肢のサポート等に使えるクッション。



体位変換器



RM5 (Φ12×250cm) 1本で体位変換、側臥位、下肢のサポートなど自在に使えるクッション。



体位変換器



スネーククッション (Φ20×220cm) 1本で体位変換、側臥位等、さまざまな部位を全身的・部分的にサポートできるクッション。



体位変換器



◀両端には持ち手がついています。ピローを振ることで、中身を均一に整えることができ、使用前の準備が簡単にできます。

POINT! 側臥位に使用すると、頭から胸部・骨盤・上側になる下肢まで一本でサポートできます。頭側まで入れると、それがさびとなり、背中の中のスネークが抜けずらく、姿勢が崩れにくくなります。

スネークミニクッション (Φ20×100cm) さまざまな部位のサポートに使いやすい、ハーフサイズのスネーククッション。



体位変換器



RM6-H (クッション本体：62×65×15cm、ハンドル部：4×12cm) 高さを保持し、安定感よく姿勢をサポートする台形型クッション。 **NEW**



体位変換器



RHOMBO FILL & RHOMBO MED ロンボフィル・ロンボメッド

バックサポートクッション (40×45cm) 背中に置くだけで心地よくフィットする座位姿勢サポートクッション。



車いす付商品



POINT! 両サイドを軽く引っ張ることで、さらに身体にフィットし、よりしっかりと座位姿勢をサポートすることができます。

QRコードからバックサポートクッションのご使用方法が動画でご覧いただけます。
<https://www.cape.co.jp/products/pdt019>



ポジショニング用具



本 体				オプションカバー				
タイプ	TAISコード	価格(+税)	サイズ(cm)	材 質	品 番	価格(+税)	材 質	
RF1	00245-000193	5,000円	40×60	表側地／ 綿50%、 ポリエステル50%	通気 RF1/RF4C	4,000円	洗濯可能で、肌触りのよい専用 カバーをオプションでタイプ別 にご用意しています。	
RF2	00245-000194	6,500円	40×80		防水 RF1/RF4CB	4,600円		
RF3	00245-000195	5,500円	23×40		通気 RF2C	4,000円		
RF4	00245-000196	11,000円	40×60		防水 RF2CB	4,600円		
RF5	00245-000197	13,000円	80×80		通気 RF3C	2,000円		
				防水 RF3CB	2,300円			
				中身(充填物)／ ロンボフィル(ポリウレタ ンスニペット)	通気 RF1/RF4C	4,000円		●通気タイプ: ポリエステル100% (吸汗速乾・静電防止)
RM1-H	00245-000232	14,500円	本体 65×75 ハンドル部 4×12	防水 RF1/RF4CB	4,600円	●防水タイプ: 表地／ポリエステル100% (吸汗速乾・制菌・消臭)、 裏地／ポリウレタンフィルム(防水)		
RM2-H	00245-000233	14,500円	本体 40×80 フラップ部 20×80 ハンドル部 4×12	通気 RF5C	5,500円			
RM3	00245-000200	2,700円	15×30	防水 RF5CB	6,300円			
RM4-H	00245-000234	7,500円	本体 30×65 ハンドル部 4×12	通気 RM1C	5,000円			
RM5	00245-000154	15,000円	φ12×250	防水 RM1-HCB	5,700円			
スネーククッション	00245-000102	25,000円	φ20×220	通気 RM2C	5,000円			
スネークミニクッション	00245-000152	16,000円	φ20×100	防水 RM2-HCB	5,700円			
RM6-H	00245-000245	18,800円	62×65×15 ハンドル部 4×12	通気 RM3C	1,500円			
バックサポートクッション	00245-000168	14,500円	40×45	防水 RM3CB	1,700円			
初期導入セット	00245-000103	53,000円	【セット内容】RF1, RF3(×2), RF5, RM1-H, RM2-H	通気 RM4C	4,500円			
				防水 RM4-HCB	5,100円			
				中身(充填物)／ ロンボメッド(ポリウレタ ンスニペット50%、ポリ プロピレンビーズ50%) ※RM6-Hのみ ロンボメッドの下層に 内部ウレタンフォーム (ウレタンフォーム)	通気 RM5C	5,000円		
				防水 RM5-HCB	5,700円			
				表側地／ 綿50%、ポリエステル50% 中身(充填物)／ ロンボフィル、ロンボメッド	通気 SNC	6,000円		
					防水 SN-HCB	6,900円		
					通気 SNC mini	4,000円		
					防水 SN-HCB mini	4,600円		
					通気 RM6C	5,800円		
					防水 RM6-HCB	6,600円		
					通気 BSC	4,500円		
					防水 BSCB	5,100円		

※サイズについて：本体サイズは、製造元のドイツ・リュウク社の基準に従って、中身を充填する前の生地寸法にて記載しています。そのため実商品で寸法計測した場合には、大きさが表記サイズと異なります。



防水カバーにハンドルが付きまして。
(対象商品) RM1-HCB, RM2-HCB, RM4-HCB,
RM5-HCB, RM6-HCB, SN-HCB,
SN-HCB mini

体位変換器 介護保険/福祉用具貸与対象品目

本体の持ち手を使い、介助者が楽に体位変換できる便利なアイテム

●本体(クッション)のみ TAISコード

RM1-H	00245-000232
RM2-H	00245-000233
RM4-H	00245-000234
RM5	00245-000154
RM6-H	00245-000245
スネーククッション	00245-000102
スネークミニクッション	00245-000152

●本体(クッション)と防水カバーのセット TAISコード

ロンボ RM1-H 防水カバーセット	00206-000133
ロンボ RM2-H 防水カバーセット	00206-000134
ロンボ RM4-H 防水カバーセット	00206-000135
ロンボ RM5 防水カバーセット	00206-000139
ロンボ スネーククッション 防水カバーセット	00206-000137
ロンボ スネークミニクッション 防水カバーセット	00206-000138
ロンボRM6-H防水カバーセット	00206-000145

サポタイト

大小種類の違うウレタンフォームチップで固形のウレタンフォームより柔らかく、滑らかに身体の形に沿ってサポートします。




丸洗い OK
乾燥機 80℃
80℃の丸洗い洗濯と乾燥が可能



	枕として、局所のサポートに	側臥位のサポートに	上肢のサポートに	側臥位の背部・下肢のサポートに				
タイプ	標準枕	三角枕	ブーメラン	側臥位セット 三角枕×1、 標準枕×2				
品番	CK-430	CK-431	CK-432	CK-433				
サイズ	約23×34cm	約60×24cm	約54×83cm	標準枕：約23×34cm/三角枕：約60×24cm				
価格	6,000円(+税)	10,500円(+税)	14,000円(+税)	22,500円(+税)				
TAISコード	00206-000098	00206-000099	00206-000100	00206-000101				
材質	<table border="1"> <tr> <td>カバー</td> <td>ポリエステル65%、綿35%</td> </tr> <tr> <td>中身</td> <td>ウレタンフォーム(ランダムカット、マイクロキューブカット)</td> </tr> </table>				カバー	ポリエステル65%、綿35%	中身	ウレタンフォーム(ランダムカット、マイクロキューブカット)
カバー	ポリエステル65%、綿35%							
中身	ウレタンフォーム(ランダムカット、マイクロキューブカット)							

肌触りのよいオプションカバー(別売) 洗濯可能で、肌触りのよい専用カバーをオプションでご用意しています。

	品番	標準枕用/CH-440	三角枕用/CH-441	ブーメラン用/CH-442
通気	価格	2,500円(+税)	4,600円(+税)	5,000円(+税)
	材質	ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止)		
防水	品番	標準枕用/CH-450	三角枕用/CH-451	ブーメラン用/CH-452
	価格	2,900円(+税)	5,200円(+税)	5,700円(+税)
	材質	表地/ポリエステル100%(吸汗速乾・制菌・消臭) 裏地/ポリウレタンフィルム(防水)		

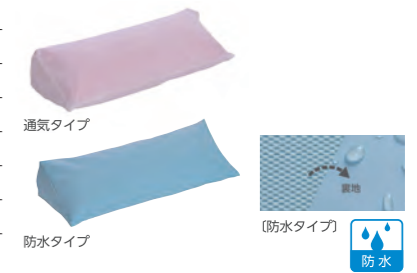

フィットサポート

30度側臥位のポジショニングをサポートする

通気性に優れた特殊ウレタンフォーム


超通気ウレタンで、いつも爽やかムレ対策。
丸洗いでできます。



丸洗い OK

専用カバー

吸湿速乾のドライメッシュ生地
(洗濯できます)

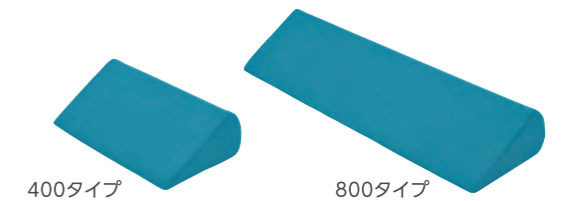

タイプ	400タイプ	800タイプ				
品番	CK-396	CK-397				
サイズ	幅40×奥行24×厚12cm	幅80×奥行24×厚12cm				
価格	5,800円(+税)	9,500円(+税)				
TAISコード	00206-000059	00206-000060				
材質	<table border="1"> <tr> <td>カバー</td> <td>ポリエステル(ドライメッシュ)(吸湿速乾)</td> </tr> <tr> <td>中身</td> <td>超通気高弾性ウレタンフォーム</td> </tr> </table>		カバー	ポリエステル(ドライメッシュ)(吸湿速乾)	中身	超通気高弾性ウレタンフォーム
カバー	ポリエステル(ドライメッシュ)(吸湿速乾)					
中身	超通気高弾性ウレタンフォーム					
専用カバーのみ購入価格	3,000円(+税)	3,900円(+税)				

姿勢体位管理補助用具/体位変換器

エニモ Rモデル

2022
NEW

Anymo

姿勢が崩れにくい、美しい30度側臥位をつくるためにデザインされたリバーシブル構造のポジショニングクッション。

●Rモデル 600タイプ (CK-461)



●Rモデル 800タイプ (CK-462)




高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄 の3つに耐えるハイパフォーマンス素材

乾燥 100℃ 高温乾燥と水抜けの良い構造で中までしっかり乾きやすい。

2時間早い 従来品より約2時間早く乾燥。スピーディーに現場に戻ってきます。



極小のウレタンフォームを混合、洗濯後の水分が抜けやすく乾きやすい。

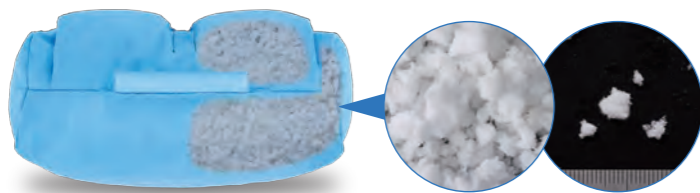

■大小のウレタンフォームを混合
極小のウレタンフォームは体積が小さく、水分の含有量が少なくなるため、乾きが早くなります。

いつも清潔に、エニモなら消毒方法の選択肢が広がります。

次亜塩素酸ナトリウム 500ppm

本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム水溶液に30分間浸漬することができます。




熱水 80℃

本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。




美しい30度側臥位をつくるためにデザインされたエニモRモデル600/800タイプ

■背中を乗せるだけでクッションが傾いて、きれいに角度がつく「スリット構造」。スリット構造を支点にシーソーのようにクッションが自然に傾き、背中に差し込むだけでしっかり角度がつく構造です。

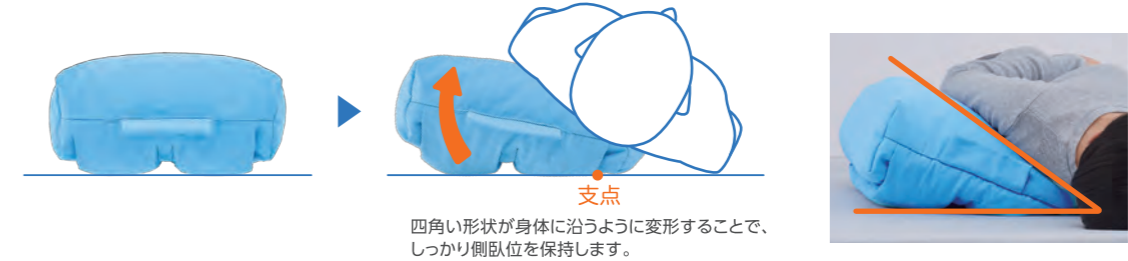

■クッションが外れにくいから時間が経っても姿勢が崩れにくい。荷重により、スリットがマットレスに引っ掛かるように広がり、クッションの抜けを防止します。

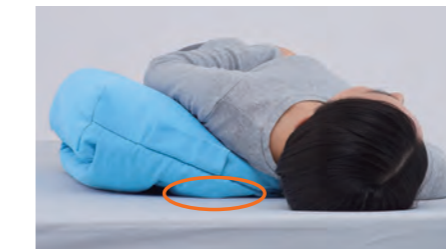

■肩から臀部までこの1本で支えるからキレイにキマる。従来の枕型クッションの2個分の長さで、男女問わず高齢者の肩から臀部まで1本でしっかり支えます。



■下肢をのせる位置をガイドする「スリット構造」で誰でも正しくポジショニングづくり。

下肢をのせる位置をガイドするスリット構造。スリットに下肢をのせるだけで、自重でスリット構造が下肢を包み込むようにホールド。下肢の安定感が増します。



エニモ本体 介護保険/福祉用具貸与対象品目 体位変換器

モデルタイプ	品番	価格	TAISコード	サイズ	材質
Rモデル 600タイプ	CK-461	9,800円(+税)	00206-000146	約30×60cm(ハンドル部は除く)	表側地/ポリエステル80%、綿20%
Rモデル 800タイプ	CK-462	11,800円(+税)	00206-000147	約30×80cm(ハンドル部は除く)	中身/ポリウレタンフォーム100%

オプションカバー(別売)

通気タイプ	モデルタイプ	品番	価格	防水タイプ	モデルタイプ(ハンドル付き)	品番	価格
	Rモデル 600タイプ通気カバー	CH-171	4,000円(+税)		Rモデル 600タイプ防水カバー	CH-181	4,600円(+税)
	Rモデル 800タイプ通気カバー	CH-172	4,700円(+税)		Rモデル 800タイプ防水カバー	CH-182	5,400円(+税)
材質: ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止)				材質: 表地/ポリエステル100%(吸汗速乾・制菌・消臭) 裏地/ポリウレタンフィルム(防水)			

防水カバーセット(エニモ本体と防水カバー) 介護保険/福祉用具貸与対象品目 体位変換器

モデルタイプ	TAISコード	価格
R600タイプ 防水カバーセット	00206-000148	14,400円(+税)
R800タイプ 防水カバーセット	00206-000149	17,200円(+税)



※カバーは防水タイプのみハンドル付き

エアマットレス

ウレタンフォームマットレス

マットレス用シート

専門分野

ウレタンフォームマットレス

車いす用クッション

ポジショニング用具

携帯型圧力測定器