

# Portable Interface Pressure Sensor Palm Q

携帯型接触圧力測定器 パームQ

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻  
老年看護学／創傷看護学分野 共同研究

床ずれ発生のリスク評価や  
体圧分散式マットレスの評価に。  
接触圧力を数値化し、接触圧力点の移動もリアルタイムで  
可視化する携帯型接触圧力測定器。



CR-490  
42,000円(+税)  
●本体・センサーパッドセット

1年間保証

本体	サイズ:幅6.5×長17.5×厚3.5cm 重量:160g(電池含まず) 材質:ABS樹脂 電源:9V角型アルカリ乾電池、別売:専用ACアダプタ AC100V
センサーパッド	品番:CH-491 価格:5,700円(+税)※センサーパッドのみ購入価格 サイズ:パッド部:幅13×長13cm、導圧チューブ:長さ約75cm 重量:50g 材質:ウレタン・ABS樹脂・POM樹脂
測定方式	エアバッグ式による圧力センサー検出方式/カプラー脱着によるエアバッグ内空気封入方式
測定範囲	0~200mmHg
測定精度	±3mmHg(当社測定方法による)
使用環境温度	0~+40℃、80%以下(結露なきこと)
保管温度	-10~+50℃
オプション(別売)	品番:CH-492 専用ACアダプタ 価格:2,000円(+税) 仕様:入力:AC100-120V、50/60Hz、0.3A 出力:DC9V、1.3A コード長さ:1.8m

操作は  
簡単

センサーパッドを測定部位に設置し、  
スイッチを押すだけの簡単操作。  
安定後、約12秒<sup>※</sup>で測定が完了します。  
※安定までに時間がかかる場合もあります。



## 使用用途

- 床ずれ防止のための危険度評価**
  - リスク評価・予防ケアの標準的ツールとして
  - 療養者・ご家族と連携して行う予防の実現
- 体圧分散式マットレスの適合評価**
  - 体圧分散式マットレス導入の検討
  - ご使用中の用具の再評価
  - エアマットレスの圧力管理の確認
- 看護ケアの評価**
  - 頭側挙上、ポジショニング、シーティングなどの評価
  - エアマットレスの圧切替の動きの評価


## 体圧危険値の目安 骨突出部位の体圧危険値の目安



(文献)  
・須釜淳子ほか:褥瘡ケアにおけるマルチパッド型簡易体圧測定器の信頼性と妥当性の検討.日本褥瘡学会誌.2(3):310-315,2000  
・大桑麻由美ほか:新マルチパッド型簡易体圧測定器の臨床における信頼性と妥当性の検討.日本褥瘡学会誌.14(2):129-133,2012

## より広い面積が測定できるセンサーパッド

1つのポイントを中心として円周上に等角度で4つのポイントを配置。  
骨突出部位の周囲の接触圧力、過体重療養者などの骨突出がない部位も正確に測定できます。

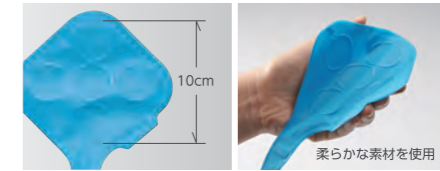

## 接触圧力を視覚化するガイダンスモード

5つのパッドに加わる圧力を液晶画面のグラフにリアルタイムで表示します。正確な測定位置へパッドを調整し、短時間で正確な測定ができます。

5つのパッドの接触圧力がリアルタイムに4段階の円グラフで表示されます。

※円グラフは右記の範囲で外側から順に表示されます。  
(表示されている数値は最高値を表示しています。)



## 長時間の測定を可能にしたロングタームモード

パッド1~5のポイントを任意に選択し、連続で接触圧力を測定できます。

エアマットレスの膨張収縮による圧力変化、頭側挙上やポジショニングなどの看護ケアの評価など、研究や臨床評価、看護研修会のツールとしても活用できます。



## 頭側挙上時の最高圧力点の移動を測る方法


頭側挙上時は身体の足元方向(尾骨部)に向けて圧力点が移動します。一番端のパッドを起点にし、身体の縦方向に3つのパッドが並列するように当ててください。測定を開始すると、図のように圧力点が移動していくのが確認できます。

## 25回分の測定値を保存できるメモリ機能

最高圧力値だけでなく、5つのポイントすべての測定値を記憶。  
最大25回分の測定結果が保存可能で、メモリ番号により療養者や測定部位別に管理することができます。



## パームQの使用方法

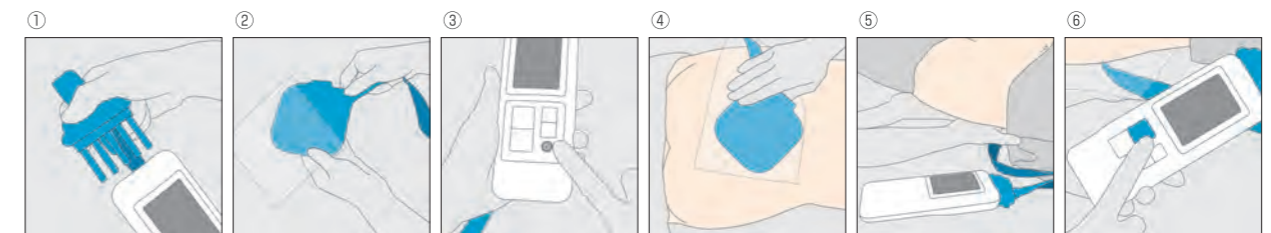

- ① 本体とセンサーパッドを接続する。
- ② 感染防止のため、パッド部をディスパーゼブルの薄いビニール袋で覆う。
- ③ 電源を入れ、「ガイダンスボタン」を押す。
- ④ センサーパッドを測定部位に設置し、療養者を測定したい体位に整える。
- ⑤ 液晶画面を見ながら、中央のパッドの接触圧力が一番高くなるようにパッドの位置を調整する。
- ⑥ 「スタートボタン」を押し測定開始。  
約12秒後に最高値のパッド番号・グラフが点滅し、最高圧力値が測定表示部に表示される。

# エアマットレス 仕様一覧

		 マイクロクライメイト ビッグセル アイズ					
マットレス	タイプ	交換					
		840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000	
	品番	CR-750	CR-753	CR-755	CR-757	CR-761	
	JANコード	4939810008844	4939810008851	4939810008868	4939810008875	4939810008882	
	セット価格	¥237,000				¥257,000	
マットレス内容	専用マットレス	品番	CR-752	CR-754	CR-756	CR-758	CR-762
		サイズ※1	幅84 x 長192 x 厚15cm	幅90 x 長192 x 厚15cm	幅84 x 長180 x 厚15cm	幅90 x 長180 x 厚15cm	幅100 x 長192 x 厚15cm
		重量	6.5kg	6.8kg	6.3kg	6.5kg	7.3kg
		材質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/側面:ナイロンオックス、下面:ポリエステルメッシュ、すべり止め部:ポリウレタンフィルムラミネート加工布、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂(ケース部)、換気ユニット/ABS樹脂(ケース部)				
		エアセル数	25本	25本	24本	24本	25本
	価格(専用カバー付属)	¥160,000				¥180,000	
	専用カバー	品番	CH-752	CH-754	CH-756	CH-758	CH-762
		材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)				
		価格(専用カバーのみ購入価格)	¥9,000				¥12,000
	専用ポンプ	品番	CR-751				
サイズ		幅30.0 x 高20.3 x 奥行8.8cm(ポンプフック装着時/幅30.0 x 高20.9 x 奥行14.1cm)					
重量		2.9kg					
材質		ケース/ABS樹脂、ポンプフック/POM樹脂					
定格		定格/AC100V、8W、50/60Hz ACコード長さ/4m					
電気代/日(参考値)※2		約5.2円					
価格	¥77,000						
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目00206-000140	介護保険福祉用具貸与対象品目00206-000141	介護保険福祉用具貸与対象品目00206-000142	介護保険福祉用具貸与対象品目00206-000143	介護保険福祉用具貸与対象品目00206-000144	
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)					

※特に記載がない限り、価格表示はすべて税抜き価格となります。  
 ※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、エアマットレス内圧の状態やご使用状況により多少異なる場合があります。  
 ※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回

		 スモールチェンジ ラグーナ					
マットレス	タイプ	交換					
		840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000	
	品番	CR-700	CR-703	CR-705	CR-707	CR-711	
	JANコード	4939810007984	4939810007991	4939810008004	4939810008011	4939810008028	
	セット価格	¥228,000(非課税)				¥248,000(非課税)	
マットレス内容	専用マットレス	品番	CR-702	CR-704	CR-706	CR-708	CR-712
		サイズ※1	幅84 x 長192 x 厚13.5cm	幅90 x 長192 x 厚13.5cm	幅84 x 長180 x 厚13.5cm	幅90 x 長180 x 厚13.5cm	幅100 x 長192 x 厚13.5cm
		重量	8.2kg	8.6kg	7.8kg	8.2kg	9.3kg
		材質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体 プレスエアー®(制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/側面:ナイロンオックス 下面:ポリエステルメッシュ すべり止め布付き				
		エアセル数	21本	21本	20本	20本	21本
	価格(専用カバー付属)	¥153,000				¥173,000	
	専用カバー	品番	CH-702	CH-704	CH-706	CH-708	CH-712
		材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)				
		価格(専用カバーのみ購入価格)	¥8,800				¥11,800
	専用ポンプ	品番	CR-701				
サイズ		幅36.5 x 高24.6 x 奥行8.7cm(ポンプフック装着時/幅36.5 x 高27.6 x 奥行15.7cm) ACコード: 4m					
重量		3.4kg					
材質		ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂					
定格		AC100V、12W、50/60Hz					
電気代/日(参考値)※2		約5.1円					
価格	¥75,000						
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000102	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000103	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000104	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000105	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000106	
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)					

		 スモールチェンジ ラグーナプラス					
マットレス	タイプ	交換					
		840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000	
	品番	CR-721	CR-723	CR-725	CR-727	CR-731	
	JANコード	4939810008196	4939810008202	4939810008219	4939810008226	4939810008233	
	セット価格	¥250,000(非課税)				¥270,000(非課税)	
マットレス内容	専用マットレス	品番	CR-722	CR-724	CR-726	CR-728	CR-732
		サイズ※1	幅84 x 長192 x 厚13.5cm(足元のみ厚14.5cm)	幅90 x 長192 x 厚13.5cm(足元のみ厚14.5cm)	幅84 x 長180 x 厚13.5cm(足元のみ厚14.5cm)	幅90 x 長180 x 厚13.5cm(足元のみ厚14.5cm)	幅100 x 長192 x 厚13.5cm(足元のみ厚14.5cm)
		重量	9.2kg	9.6kg	8.8kg	9.2kg	10.3kg
		材質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体 プレスエアー®(制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/側面:ナイロンオックス 下面:ポリエステルメッシュ すべり止め布付き				
		エアセル数	21本	21本	20本	20本	21本
	価格(専用カバー、プラス専用パッドAタイプ付属)	¥175,000				¥195,000	
	専用カバー	品番	CH-702	CH-704	CH-706	CH-708	CH-712
		材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)				
		価格(専用カバーのみ購入価格)	¥8,800				¥11,800
	専用ポンプ	品番	CR-701				
サイズ		幅36.5 x 高24.6 x 奥行8.7cm(ポンプフック装着時/幅36.5 x 高27.6 x 奥行15.7cm) ACコード: 4m					
重量		3.4kg					
材質		ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂					
定格		AC100V、12W、50/60Hz					
電気代/日(参考値)※2		約5.1円					
価格	¥75,000						
プラス専用パッド	品番	CR-549					
	サイズ	幅60 x 長60 x 厚1cm、ACコード: 4m					
	重量	1.0kg					
	材質	カバー/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、中身/ポリエステル100%、コントローラー/ABS樹脂					
	定格	AC100V、40W、50/60Hz					
電気代/日(参考値)※2	約27.4円						
価格	¥22,000						
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000107	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000108	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000109	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000110	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000111	
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)/1年間保証(プラス専用パッド Aタイプ)					

※特に記載がない限り、価格表示はすべて税抜き価格となります。  
 ※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、エアマットレス内圧の状態やご使用状況により多少異なる場合があります。  
 ※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回

# エアマットレス 仕様一覧


		 エアマスター ネクサスR						
アッセ	タイプ	交 換						
		840	900	840/SHORT	900/SHORT	900/LONG	1000	
	品 番	CR-660	CR-663	CR-665	CR-667	CR-669	CR-685	
	JANコード	4939810006956	4939810006963	4939810006970	4939810006987	4939810006994	4939810007007	
	セット価格	¥190,000			¥210,000			
セッ ト内 容	専用 マット レス	品 番	CR-662	CR-664	CR-650	CR-668	CR-670	CR-686
		サイズ ※1	幅84×長191×厚12cm	幅90×長191×厚12cm	幅84×長180×厚12cm	幅90×長180×厚12cm	幅90×長205×厚12cm	幅100×長191×厚12cm
		重 量	8.6kg	9.1kg	8.1kg	8.5kg	9.4kg	9.9kg
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体プレスエア <sup>®</sup> (制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂 ベースシート/ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ すべり止め布付き(抗菌)					
		エアセル数	24本	24本	22本	22本	25本	24本
		価 格 (専用カバー付属)	¥118,000			¥138,000		
		マッ トレス 専用 カバー	品 番	CH-662	CH-664	CH-650	CH-668	CH-670
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)					
		価 格 (専用カバーのみ購入価格)	¥8,800			¥11,800		
		専用 ポンプ	品 番	CR-661				
		サイズ	幅36.5×高23.5×奥行8.7cm(ポンプフック装着時/幅36.5×高26.5×奥行15.7cm) ACコード:4m					
		重 量	3.5kg					
		材 質	ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂					
		定 格	AC100V、10W、50/60Hz					
		電気代/日(参考値)※2	約4.8円(エコモード使用時、最大約20%節電)					
		価 格	¥72,000					
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000082 介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000083 介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000084 介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000085 介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000086 介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000087						
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)						

		 エアマスター ネクサスR プラス						
アッセ	タイプ	交 換						
		840	900	840/SHORT	900/SHORT	900/LONG	1000	
	品 番	CR-671	CR-673	CR-675	CR-677	CR-679	CR-687	
	JANコード	4939810007199	4939810007212	4939810007236	4939810007250	4939810007274	4939810007298	
	セット価格	¥212,000			¥232,000			
セッ ト内 容	専用 マット レス	品 番	CR-672	CR-674	CR-676	CR-678	CR-689	CR-688
		サイズ ※1	幅84×長191×厚12cm (足元のみ厚13cm)	幅90×長191×厚12cm (足元のみ厚13cm)	幅84×長180×厚12cm (足元のみ厚13cm)	幅90×長180×厚12cm (足元のみ厚13cm)	幅90×長205×厚12cm (足元のみ厚13cm)	幅100×長191×厚12cm (足元のみ厚13cm)
		重 量	9.6kg	10.1kg	9.1kg	9.5kg	10.4kg	10.9kg
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット/三次元スプリング構造体プレスエア <sup>®</sup> (制菌)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂 ベースシート/ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ すべり止め布付き(抗菌)					
		エアセル数	24本	24本	22本	22本	25本	24本
		価 格 (専用カバー、 プラス専用パッド付属)	¥140,000			¥160,000		
		マッ トレス 専用 カバー	品 番	CH-662	CH-664	CH-650	CH-668	CH-670
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)					
		価 格 (専用カバーのみ購入価格)	¥8,800			¥11,800		
		専用 ポンプ	品 番	CR-661				
		サイズ	幅36.5×高23.5×奥行8.7cm(ポンプフック装着時/幅36.5×高26.5×奥行15.7cm) ACコード:4m					
		重 量	3.5kg					
		材 質	ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂					
		定 格	AC100V、10W、50/60Hz					
		電気代/日(参考値)※2	約4.8円(エコモード使用時、最大約20%節電)					
		価 格	¥72,000					
	プ ラ ス 専 用 パ ッ ド	品 番	CR-659					
		サイズ	幅60×長60×厚1cm、ACコード:4m					
		重 量	1.0kg					
		材 質	カバー/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、中身/ポリエステル100%、コントローラー/ABS樹脂					
		定 格	AC100V、40W、50/60Hz					
		電気代/日(参考値)※2	約25.9円					
		価 格	¥22,000					
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000088 介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000089 介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000090 介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000091 介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000092 介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000093						
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)/1年間保証(プラス専用パッド)						

※価格表示はすべて税抜き価格となります。

※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、エアマットレス内圧の状態や使用状況により多少異なる場合があります。

※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回

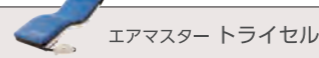		 エアマスター トライセルE		
セッ ト	タイプ	上 敷		
		840	900	
	品 番	CR-330	CR-333	
	JANコード	4939810008318	4939810008325	
	セット価格	¥140,000		
セッ ト内 容	専用 マット レス	品 番	CR-332	CR-334
		サイズ ※1	幅84×長192×厚10cm	幅90×長192×厚10cm
		重 量	4.2kg	4.6kg
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌) ベースシート/ナイロンオックス	
		エアセル数	24本	
		価 格 (専用カバー付属)	¥95,000	
		マッ トレス 専用 カバー	品 番	CH-351
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌防臭・伸縮)	
		価 格 (専用カバーのみ購入価格)	¥8,700	
		専用 ポンプ	品 番	CR-331
		サイズ	幅30.0×高13.2×奥行8.8cm(ポンプフック装着時/幅30.0×高13.7×奥行14.4cm) ACコード:4m	
		重 量	2.5kg	
		材 質	ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂	
		定 格	AC100V、12W、50/60Hz	
		電気代/日(参考値)※2	約4.7円	
		価 格	¥45,000	
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000129		00206-000130
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)		

		 エアドクター		
セッ ト	タイプ	上 敷		
		840	900	
	品 番	CR-238	CR-268	
	JANコード	4939810008424	4939810008431	
	セット価格	¥110,000		
セッ ト内 容	専用 マット レス	品 番	CR-279	CR-289
		サイズ ※1	幅84×長192×厚9cm	幅90×長192×厚9cm
		重 量	3.3kg	3.4kg
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌) ベースシート/ナイロンオックス	
		エアセル数	20本	
		価 格 (専用カバー付属)	¥58,000	
		マッ トレス 専用 カバー	品 番	CH-279
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌防臭・伸縮)	
		価 格 (専用カバーのみ購入価格)	¥8,700	
		専用 ポンプ	品 番	CR-259
		サイズ	幅24.4×高17.9×奥行8.9cm(ポンプフック装着時/幅24.4×高18.2×奥行14.5cm) ACコード:4m	
		重 量	1.8kg	
		材 質	ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂	
		定 格	AC100V、5W、50/60Hz	
		電気代/日(参考値)※2	約1.4円	
		価 格	¥52,000	
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000014		
	保証期間	3年間保証(専用ポンプ)		

※価格表示はすべて税抜き価格となります。


※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、エアマットレス内圧の状態や使用状況により多少異なる場合があります。

※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回(エアドクターは、50kg設定で圧切替24時間)

# ウレタンフォームマットレス 仕様一覧




		ディンプルマットレス			
マットレス	タイプ	交換			
	品番	830	900	830/SHORT	900/SHORT
	JANコード	4939810005577	4939810005584	4939810005591	4939810005607
	セット価格	¥90,000			
	品番	※単品販売はしていません			
交換マットレス	品番	幅83×長191×厚12cm	幅90×長191×厚12cm	幅83×長180×厚12cm	幅90×長180×厚12cm
	重量	6.0kg	6.6kg	5.6kg	6.2kg
	材質	1層目 : ラバータッチウレタンフォーム (特殊ディンプル加工+スリット複合形状) 2層目 : ラバータッチウレタンフォーム 2層目サイド : 高硬度ウレタンフォーム 3層目 : 高硬度ウレタンフォーム			
	価格	-			
	品番	CH-540	CH-541	CH-542	CH-543
専用カバー付 マットレス	材質	上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮・防災) 下面 / ナイロンオックス			
	価格 (専用カバーのみ購入価格)	¥16,800			
	その他	保険適用 / TAISコード 介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000070			

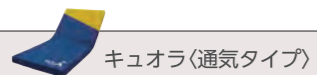


		キュオラ (通気タイプ)				キュオラ (防水タイプ)			
マットレス	タイプ	交換				交換			
	品番	830	900	830/SHORT	900/SHORT	830	900	830/SHORT	900/SHORT
	JANコード	4939810006369	4939810006376	4939810006383	4939810006390	4939810006406	4939810006413	4939810006420	4939810006437
	セット価格	¥118,000				¥120,000			
	品番	※単品販売はしていません				※単品販売はしていません			
交換マットレス	品番	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm
	重量	6.5kg	7.0kg	6.1kg	6.6kg	6.5kg	7.0kg	6.1kg	6.6kg
	材質	1層目 : 超通気高弾性ウレタンフォーム (特殊ディンプル加工+スリット複合形状) 2層目 : 三次元スプリング構造体 プレスエア® (制菌) 3層目 : 超通気高弾性ウレタンフォーム インナーカバー : ポリエステルメッシュ				1層目 : 超通気高弾性ウレタンフォーム (特殊ディンプル加工+スリット複合形状) 2層目 : 三次元スプリング構造体 プレスエア® (制菌) 3層目 : 超通気高弾性ウレタンフォーム インナーカバー : ポリエステルメッシュ			
	価格	-				-			
	品番	CH-590	CH-591	CH-592	CH-593	CH-594	CH-595	CH-596	CH-597
専用カバー付 マットレス	材質	上面・側面 / ポリエステルドライメッシュ (吸水速乾・制菌・消臭・伸縮) 下面 / ナイロンオックス				上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・透湿・制菌・消臭・伸縮) 下面 / ナイロンオックス			
	価格 (専用カバーのみ購入価格)	¥14,800				¥16,800			
	その他	保険適用 / TAISコード 介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000077				介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000078			



		ミルフィ			
マットレス	タイプ	交換			
	品番	830	900	830/SHORT	900/SHORT
	JANコード	4939810008479	4939810008486	4939810008493	4939810008509
	セット価格	¥71,000			
	品番	※単品販売はしていません			
交換マットレス	品番	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm
	重量	5.7kg	6.1kg	5.4kg	5.7kg
	材質	1層目 : 高弾性ウレタンフォーム (特殊プロファイル加工) 2層目 : ソフトタッチウレタンフォーム 3層目 : 高弾性ウレタンフォーム 3層目サイド : 高硬度ウレタンフォーム 4層目 : 高硬度ウレタンフォーム			
	価格	-			
	品番	CH-366	CH-367	CH-368	CH-369
専用カバー付 マットレス	材質	上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮) 下面 / ナイロンオックス			
	価格 (専用カバーのみ購入価格)	¥14,800			
	その他	保険適用 / TAISコード 介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000075			

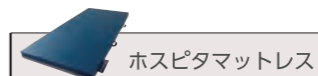

		ホスピタマットレス	
マットレス	タイプ	交換	
	品番	830	900
	JANコード	4939810008554	4939810008561
	セット価格	¥51,000	
	品番	※単品販売はしていません	
交換マットレス	品番	幅83×長191×厚8.5cm	幅90×長191×厚8.5cm
	重量	6.0kg	6.5kg
	材質	低反発面 / 低反発ウレタンフォーム 高反発面 / 高反発ウレタンフォーム	
	価格	-	
	品番	CH-288	CH-289
専用カバー付 マットレス	材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮)	
	価格 (専用カバーのみ購入価格)	¥19,000	
	その他	保険適用 / TAISコード 介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000069	

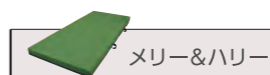

		メリー&ハリー			
マットレス	タイプ	交換			
	品番	830	900	900/SHORT	900/LONG
	JANコード	4939810006727	4939810006734	4939810006741	4939810006758
	セット価格	¥78,000			
	品番	※単品販売はしていません			
交換マットレス	品番	幅83×長191×厚9cm	幅90×長191×厚9cm	幅90×長180×厚9cm	幅90×長205×厚9cm
	重量	6.5kg	7.0kg	6.6kg	7.5kg
	材質	<メリー層・ハリー層> 超通気・高弾性ウレタンフォーム <ワッフル層> 超通気・高弾性・高耐久ウレタンフォーム <芯材> 超通気・高硬度ウレタンフォーム			
	価格	-			
	品番	CH-680	CH-681	CH-682	CH-683
専用カバー付 マットレス	材質	ポリエステル100% (吸水速乾・制菌・消臭・伸縮)			
	価格 (専用カバーのみ購入価格)	¥14,800			¥15,200
	その他	保険適用 / TAISコード 介護保険福祉用具貸与対象品目 / 00206-000079			00206-000128

※価格表示はすべて税抜き価格となります。

※価格表示はすべて税抜き価格となります。