

Bespo Gel Cushion®


ベスポジェルクッション

介護保険 福祉用具貸与対象品目 / 車いす付属品 貸与マーク取得済み



『足こぎサポート』と『前ずれ防止』の1枚二役、幅広い療養者にフィットするクッション。

クッションの構造・特長

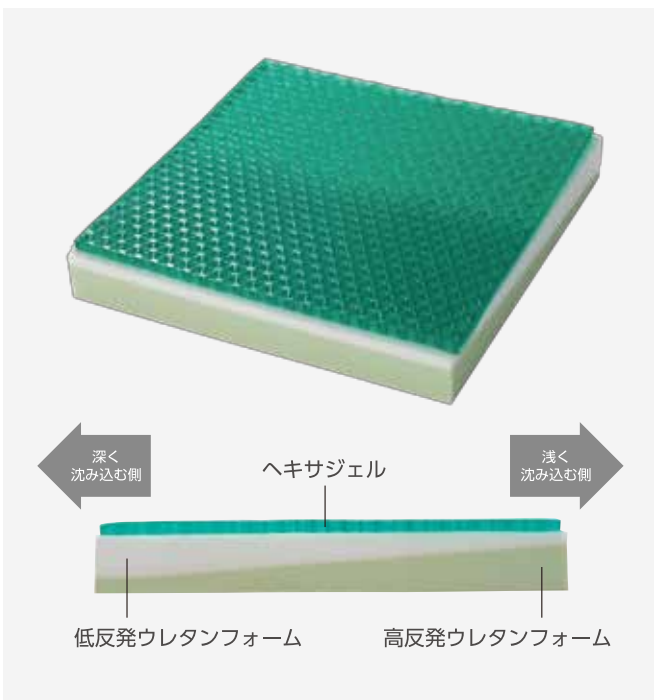

ずれへの追従性と体圧分散性能に優れたヘキサジェル



■深く沈み込む側
目の粗いジェルと低反発ウレタンフォームにより沈み込みやすい構造になっています。

■浅く沈み込む側
目の細かいジェルと高反発ウレタンフォームにより沈み込みを抑える構造になっています。

クッションを前後するだけで用途が変わる『2WAY構造』




■用途1 / 足こぎサポート
大腿部が沈み、膝が下がることで、足底が床にしっかり密着。力が伝わりやすくなり、足こぎがしやすくなります。

■用途2 / 前ずれ防止
臀部が沈み込むことで、前ずれを防止します。

専用カバー

専用カバーは伸縮性のある素材を使用。表地は爽やかメッシュ生地、裏地は汚れの浸入を防ぐ防水加工。さらにインナーカバー（中袋）が、中身のウレタンへの臭いや汚れの浸透を防ぎます。

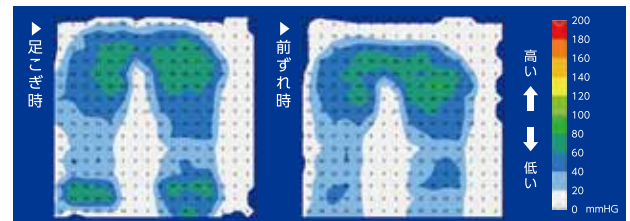

商品仕様

品番	CK-375
価格	22,000円(+税) クッション・専用カバーセット ※専用カバーのみ購入価格(品番 CH-370) : 5,300円(+税)
サイズ	幅40 × 奥行40 × 厚6.5cm
重量	1.9kg
TAISコード	00206-000072

材質	●専用カバー 上面 / 表地 ポリエステル100% (吸水速乾・制菌・伸縮) 裏地 ポリウレタンフィルム(防水) 下面 / ターポリン布(防水・すべり止め加工)
	●中袋 ウレタンフィルム
	●中身 ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム (上 / 低反発ウレタンフォーム、下 / 高反発ウレタンフォーム)

サイズ

