


## 各診療科のニーズに応えるオーダーメイドシリーズ


診察用、手術用から、新生児・小児用など、多岐にわたる診療科目の床ずれ対策に最適な高性能専門科目用マットレスとクッションを取り揃えました。  
各種ご要望のサイズにあわせ、それぞれ1枚からオーダーメイドが可能です。

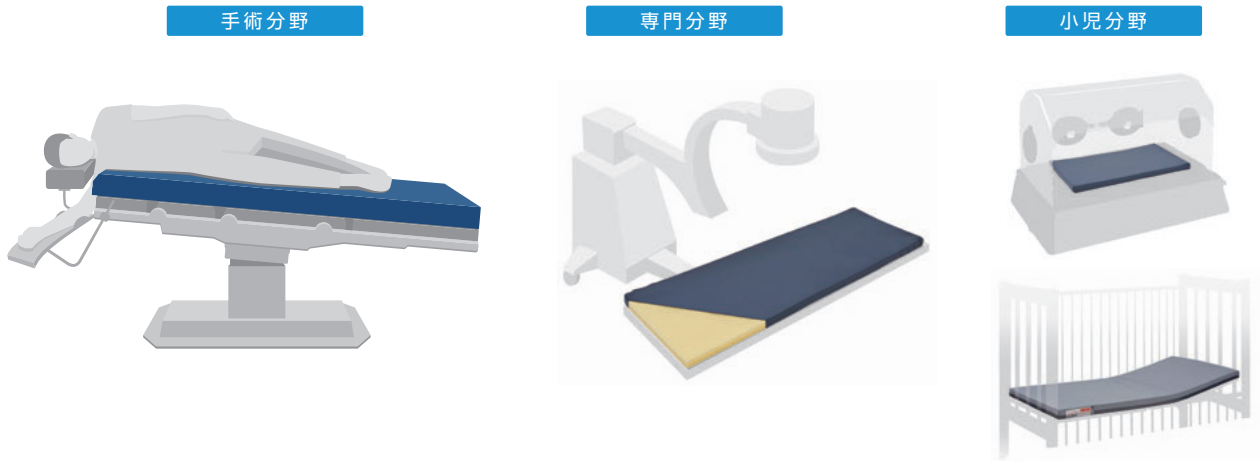

### 手術用体圧分散用具

### CAPE Surgical Series ケープサージカルシリーズ

側臥位のような体圧の集中する体位でも、安心して使える手術専用の体圧分散用具。  
変形するけど、つぶれない安心の素材と構造。  
複雑になりがちな体位固定を、よりシンプルにサポートするケープサージカルシリーズ。

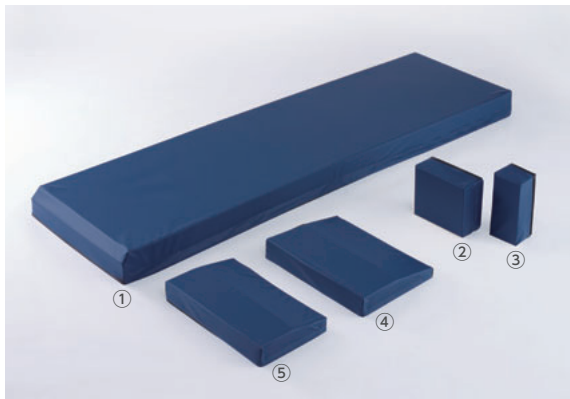

① CSM-1 ② CSC-11 ③ CSC-12 ④ CSC-21 ⑤ CSC-22

#### ◎清拭消毒に対応する専用カバー



- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
  - 制菌加工  
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌
- 防水 制菌 伸縮 機能

#### ◎液体が侵入しにくい防水仕様



止水ファスナーをカバーするフラップ構造



止水ファスナー


### ケープサージカルシリーズ 手術用体圧分散用具

品番	CSM-1	CSC-11	CSC-12	CSC-21	CSC-22	●専用カバーのみの価格 CSM-1 40,700円(+税) CSC-11 3,300円(+税) CSC-12 3,000円(+税) CSC-21 5,500円(+税) CSC-22 5,000円(+税)
サイズ(cm)	オーダーメイド	幅20×長18×厚8	幅10×長22×厚8	幅40×長30×厚6	幅40×長24×厚6	
重量(g)	上限: 幅70×長195×厚10	195	130	385	315	
価格	110,000円(+税)	9,000円(+税)	8,000円(+税)	15,000円(+税)	13,000円(+税)	
材質	専用カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮) 中身 1層目：低反発ウレタンフォーム 2層目：高反発ウレタンフォーム			中身：高反発ウレタンフォーム		CSM-1はご要望サイズでの受注生産となります。

## CSM-1

パークベンチ体位用マットレス


長時間のパークベンチ体位の手術のために開発されたマットレス。  
1枚でも底づきの心配もなく、体圧が集中する特殊体位に適した体圧分散効果。  
これからの体位固定方法をよりシンプルに。

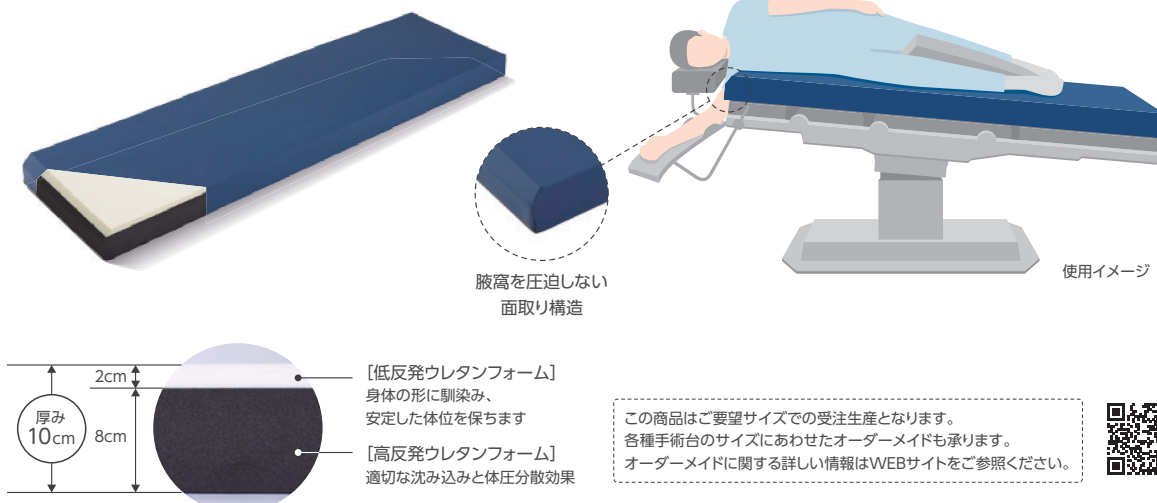

## CSC-11 / CSC-12

体位固定用クッション (側部支持器用)

側部支持器による体位固定に。  
強く締めつけても、つぶれない安心の2層構造。

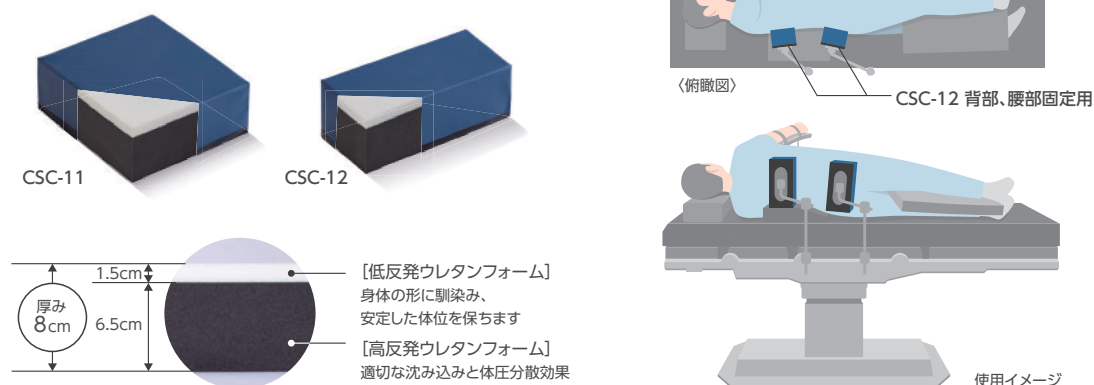


## CSC-21 / CSC-22

腋高用クッション

胸郭から腰までを広くサポートする腋高用クッション。  
平らな面と適度な傾斜で、必要な高さを保ちます。

◎体型にあわせて選べる2サイズ

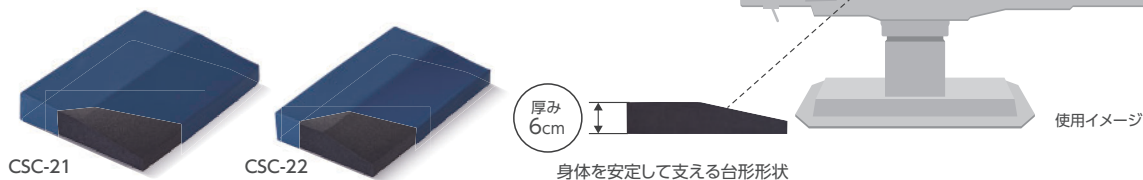


診察台用マットレス (内視鏡検査や長時間の画像診断など)

E-care Mattress エケアマットレス

放射線・MRI・心臓カテーテル・内視鏡 他



画像診断や内視鏡検査など、  
長時間の同一体位の保持が必要な患者様に。  
体圧を分散し、快適性を高める診察台用の  
体圧分散式マットレス。

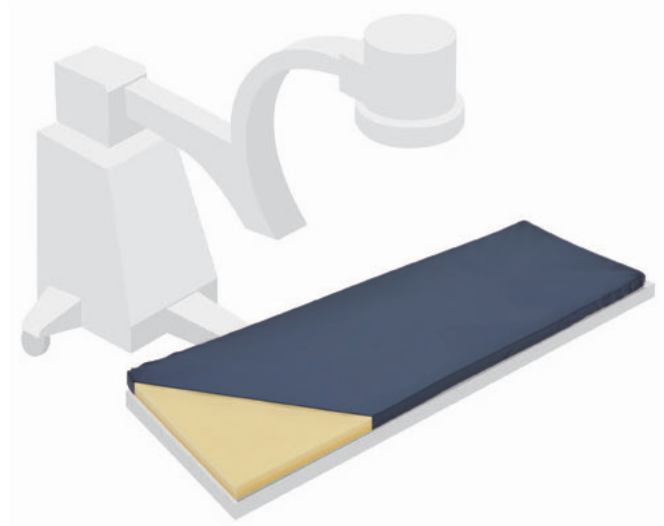

体圧分散に優れ、柔らかく身体を支える

2層構造


低反発と高反発の2層構造で、低反発ウレタンフォームが接触面積を増やし、高反発ウレタンフォームがしっかりと身体を支えます。

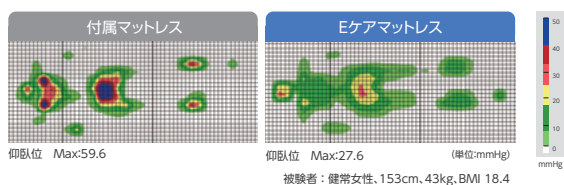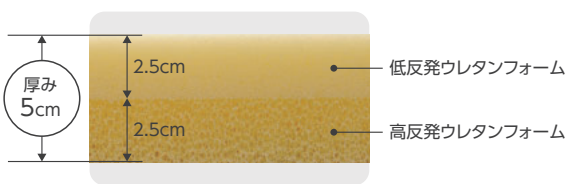

診断の妨げにならない

X線透過素材

透過性の高い無膜ウレタンフォームを使用しました。画像診断に影響を与えにくい素材です。

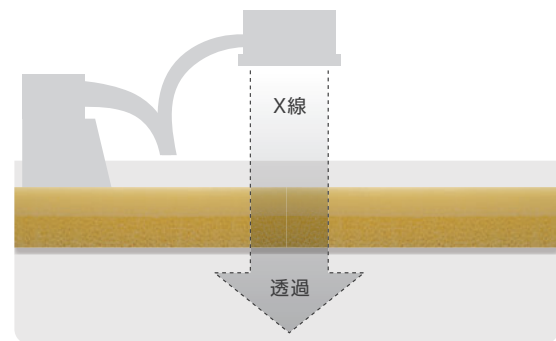

診察台に合わせた

オーダーメイド

タイプ・形状の異なる診察台にジャストフィットするように、サイズ、形状ともにオーダーメイドで承ります。また、固定のための面ファスナーを取り付ける(料金は別途)ことも可能です。



その他形状にも対応いたします。詳細はWEBサイトを参照ください。

専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。
- 制菌加工  
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌



防水 制菌 伸縮 機能

品番 CR-249 (受注生産となります) **オーダーメイド**  
 材質 **専用カバー** 上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮)  
 下面/ナイロン(すべり止め加工)  
**マットレス** 無膜ウレタンフォーム


この商品をご要望サイズでの受注生産となります。  
各種診察台用ベッドサイズにあわせてオーダーメイドも承ります。  
特殊形状は別途ご相談ください。



サイズ **長方形タイプ** マットレス・専用カバーセット価格  
 幅93cm以下 x 長194cm以下 x 厚み5cm **88,000円(+税)**  
 専用カバーのみ価格(品番/CH-239) **37,400円(+税)**  
 幅93cm以下 x 長194cm超240cm以下 x 厚み5cm **104,500円(+税)**  
 専用カバーのみ価格(品番/CH-239) **49,500円(+税)**  
 幅93cm以下 x 長240cm超 x 厚み5cm **オープン価格**  
 専用カバーのみ価格(品番/CH-239) **オープン価格**

## 保育器専用マットレス

N Care Mattress Nケアマットレス

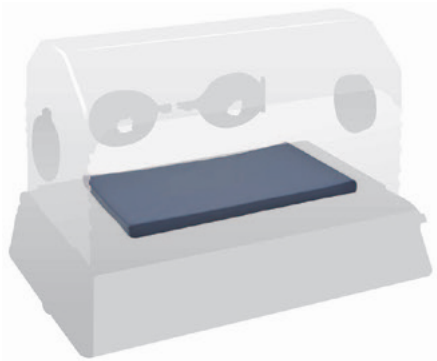

品番 CR-219 (受注生産となります)

サイズ/幅32 x 長62 x 厚3.5cm

重量/250g

材質 **専用カバー** ポリウレタンフィルムラミネート加工布  
(防水・制菌・伸縮)**マットレス** 粘弾性ウレタンフォーム  
(特殊プロファイル加工)マットレス・専用カバーセット価格 **22,000円 (+税)**この商品をご要望サイズでの受注生産となります。  
各種保育器サイズにあわせてオーダーメイドも承ります。

ずれや摩擦を吸収

## ■ 新生児の皮膚を守るプロファイルカット


とても小さな新生児の身体と皮膚に合わせた細かい特殊プロファイルカット。新生児の最も接触圧の高い頭部の体圧分散ケアと全身の体圧を分散します。材質は、新生児の動きを損なわない粘弾性ウレタンフォームを使用。



## ■ 専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。
- 制菌加工  
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

防水 制菌 伸縮 機能

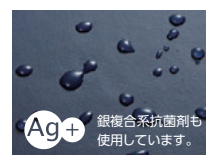Ag+ 銀複合系抗菌剤も  
使用しています。

## 小児用マットレス

Pedicare Mattress ペディケアマットレス




品番 CR-229 (受注生産となります)

サイズ/(上限)幅95 x 長195 x 厚7cm (厚みは全て7cm)  
\*小児・学童用ベッド・一般ベッド・開放型保育器などに対応材質 **専用カバー** ポリウレタンフィルムラミネート加工布  
(防水・制菌・伸縮)**マットレス** 5~20kg面/低反発ウレタンフォーム  
20~30kg面/粘弾性ウレタンフォーム  
(特殊プロファイル加工)マットレス・専用カバーセット価格 **68,000円 (+税)**専用カバーのみ価格 (品番/CH-229) **29,700円 (+税)**この商品をご要望サイズでの受注生産となります。  
各種小児用ベッドサイズにあわせてオーダーメイドも承ります。

患児の成長に合わせて表裏を使い分け

## ■ 体重別で選べるリバーシブル構造

5~20kg 未満と20~30kg 未満で使い分けられるリバーシブル構造。

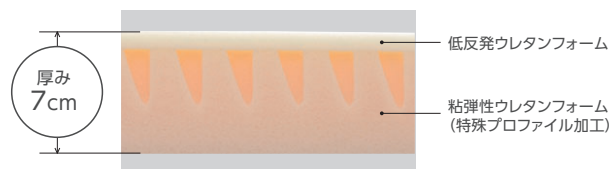

低反発ウレタンフォーム

粘弾性ウレタンフォーム  
(特殊プロファイル加工)5~20kg面には接触面積を増やす低反発ウレタンフォームを使用。  
20~30kg面には粘弾性ウレタンフォームを使用しています。

## ■ 専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。
- 制菌加工  
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

防水 制菌 伸縮 機能

Ag+ 銀複合系抗菌剤も  
使用しています。