

車いす用クッション


介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

Gel-T Cushion Gel-T クッション

ジェルとウレタンフォームのコンビネーション



ジェル+ウレタンフォームのサンドイッチ構造
流動性ジェルが瞬間的なずれに対応し、ウレタンフォームとともに体圧を分散。

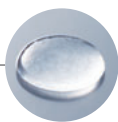

ジェルパッドの中には流動性ジェル素材

厚み 5cm



防水加工の専用カバー
表地はナイロン素材で汚れを拭き取りやすく、裏地は防水加工。専用カバーは洗濯可能。

Gel-T クッション TAISコード/00206-000006

品番/CK-346
サイズ/幅40×奥行40×厚5cm
重量/2.45kg

クッション・専用カバーセット価格 **16,000円(+税)**
専用カバーのみ価格 **6,500円(+税)**

材質 **専用カバー** 上面/ナイロン 100% (防水・抗菌)
下面/ポリ塩化ビニル 100% (防水・抗菌・難燃・すべり止め加工)
中身 高弾性・高密度ウレタンフォーム (抗菌・難燃)
流動性ジェル (ナトリウムアクリル樹脂)


介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

MY Cushion マイクッション


足に力が伝わりやすいバックアップ構造で「足こぎがしやすく」、臀部に掛かる「体圧を分散」

体圧分散と安定保持を両立させる二層構造

厚み 8cm

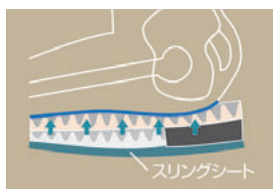

- 大腿部でしっかり体重を受け、臀部にかかる体圧を軽減。
- 骨盤の後傾を防ぎ、足に力が伝わりやすくなり、足こぎがしやすくなります。
- シートのたわみによる外力を吸収。

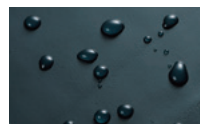

防水加工の専用カバー
表地は防水加工で拭き取りやすく、下面はすべり止め加工。専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。



吊下げネームタグ付きで、フックに引っ掛けられるので収納に便利です。

マイクッション TAISコード/00206-000051

品番/CK-398
サイズ/幅39×奥行39×厚8cm(前側5cm)
重量/0.5kg

クッション・専用カバーセット価格 **8,000円(+税)**
専用カバーのみ価格(品番/CH-281) **3,500円(+税)**

材質 **専用カバー** 上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・抗菌・伸縮)
下面/ナイロン(すべり止め加工)
中身 ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**




FOLIO フォリオ

通気性の高いクッションで快適、汚れたときは丸洗いもできる車いす用クッション。デイサービスなど外出時にも安心な前ずれ防止構造と優れた体圧分散性能。



厚み
6cm


前後に分かれた独立構造で前ずれ防止を強化

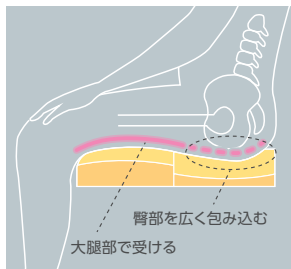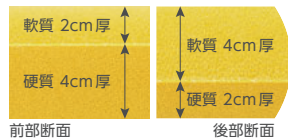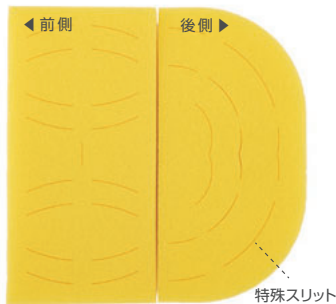

独立構造にすることで、前後に異なる硬さのウレタンを配置。前側が大腿部をしっかり支え、後側が臀部を優しく包み込み、前ずれを防止します。

特殊スリット構造が安定感よく、圧力を分散します


特殊スリット構造が、体格に応じて適度に沈み込み、安定感よく圧力を分散します。

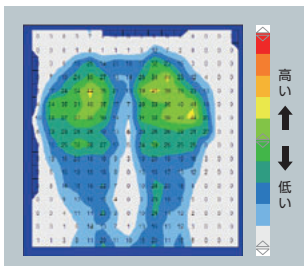

厚さ6cmの薄型で優れた体圧分散性能。

家庭用洗濯機で丸洗いできます

フォリオの OUTER カバーをつけたまま、2つ折りにして洗濯ネットに入れ、洗濯機で洗ってください。


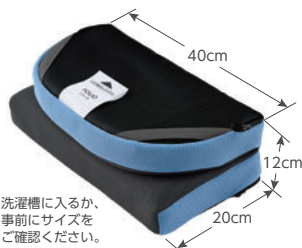


洗濯槽に入るか、事前にサイズをご確認ください。


通気性の良い OUTER カバー + 無膜ウレタンフォームでさらっと快適

■ 無膜ウレタンフォーム

通気性が高く、ムレを軽減する無膜ウレタンを採用。長時間でも快適に使用できます。

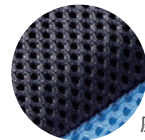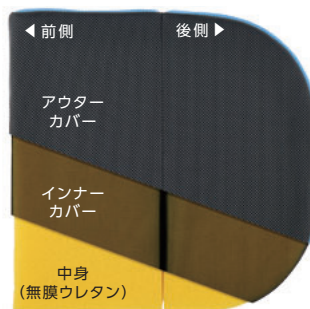

座面

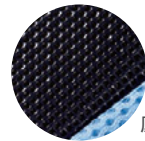

底面

■ OUTER カバー

座面カバーには、さらっと爽やかな感触の Wラッセル生地を採用。通気性が高く、ムレを軽減します。

底面には滑り止めの素材を使用。



標準車いすにも合わせやすい薄型設計。▶

*写真は使用例です。

簡単、自然乾燥

洗濯後は、ハンガーを底面のハンガー掛け用ベルトに掛けて風通しの良い場所で日陰干ししてください。



軽量・コンパクト

重さはたったの600g。軽くて折りたためるから収納や持ち運びにも便利です。



フォリオ TAISコード/00206-000132

品番/CK-405
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚6cm
重量/0.6kg

クッション・専用カバーセット価格 **27,000円(+税)**

専用カバーのみ価格(品番/CH-405) **8,400円(+税)**


材質	専用カバー	OUTERカバー/上面	ポリエステル100%
		INNERカバー	ポリエステル100%
		中身	ウレタンフォーム
		OUTERカバー/下面	ポリエステル100%
			ターポリン布(すべり止め加工)

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

Duo Gel Cushion デュオジェルクッション

「体圧分散」と「姿勢保持」、ずれへの対応を実現した高機能クッション

理想的な姿勢保持を実現するコンビネーション構造

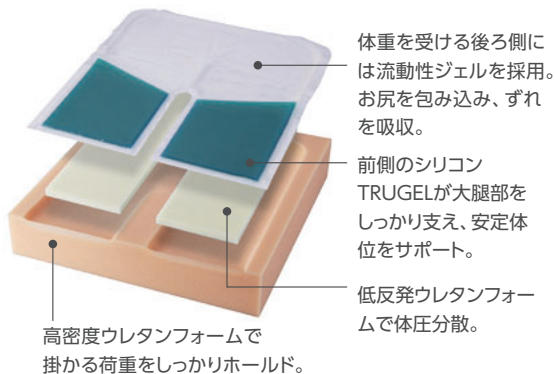


高密度ウレタンフォームで掛かる荷重をしっかりホールド。

体重を受ける後ろ側には流動性ジェルを採用。お尻を包み込み、ずれを吸収。

前側のシリコンTRUGELが大腿部をしっかり支え、安定体位をサポート。


低反発ウレタンフォームで体圧分散。

坐骨結節部への圧力集中を分散するU字構造

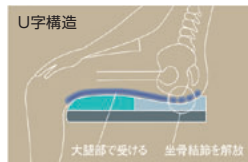


左右の大腿部の裏側で体重を受けるU字構造で坐骨結節部に集中する圧力を分散。

厚み 7.5cm

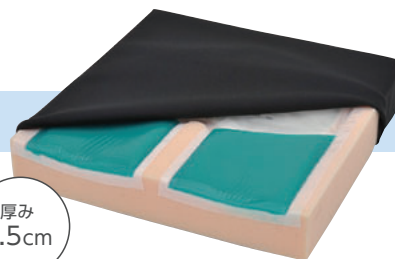

表地はムレ対策の透湿性生地
裏地は汚れの侵入を防ぐ防水加工

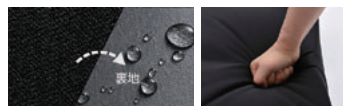

カバーの表地はムレ対策の透湿性生地。裏地は汚れが侵入ににくい防水加工。専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

デュオジェルクッション TAISコード/00206-000048 (各タイプ共通)

品番/CK-385 品番/CK-395
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚7.5cm サイズ/幅42 × 奥行42 × 厚7.5cm
重量/1.7kg 重量/1.9kg

クッション・専用カバーセット価格 **30,000円(＋税)**

専用カバーのみ価格 品番/CH-285(CK-385用)、CH-295(CK-395用) 各**6,500円(＋税)**


材質 **専用カバー** 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮)
裏地 ポリウレタンフィルム(防水)
下面/ターポリン布(防水・防炎・すべり止め加工)

中袋 ウレタンフィルム
中身 1層目/シリコンジェル
2層目/低反発ウレタンフォーム
3層目/高密度ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**


Cuburena Cushion キュブレナクッション

わずか10秒で自動調圧完了。
優れた体圧分散性能を発揮する
高機能エア式ハイブリッドクッション。

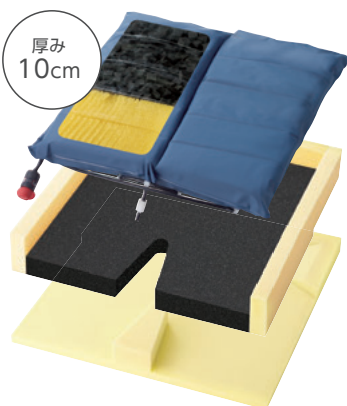

調圧バルブ/
調圧バルブをあけて10秒待つだけ。エアセルの内圧を自動で調圧し、療養者の体重や体型に応じた最適な座面を簡単に作ります。

吸気バルブ/
立ち上がると自動的に空気を吸い込み、座る前の状態に復帰します。

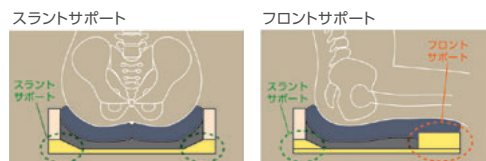

骨盤の後傾や左右の傾きを抑制します。前方への体のずれと骨盤の後傾を抑制します。

3層目の高硬度ウレタンベースが車いすのスリングシートのため補正。スラントサポートとフロントサポートが座位姿勢をサポートします。



専用カバーの表地はメッシュ生地、裏地は汚れが侵入ににくい防水加工。専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

キュブレナクッション TAISコード/00206-000081

品番/CK-400
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚10cm
重量/1.1kg

クッション・専用カバーセット価格 **43,000円(＋税)**

専用カバーのみ価格(品番/CH-400) **7,600円(＋税)**

材質 **専用カバー** 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮)
裏地 ポリウレタンフィルム(防水・抗菌)
下面/ターポリン布(防水・すべり止め加工)

中袋 ウレタンフィルム
中身 1層目エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
1層目エアセル内/ウレタンフォーム
2層目/ウレタンフォーム
3層目/高硬度ウレタンフォーム

調圧バルブ/ABS、POM、SUS、シリコンゴム
吸気バルブ/ポリプロピレン、シリコンゴム、ナイロン