


車いす用クッション

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

Altone v2 アルトネ v2

2024
NEW

医療現場のニーズに応える、車いす用クッション

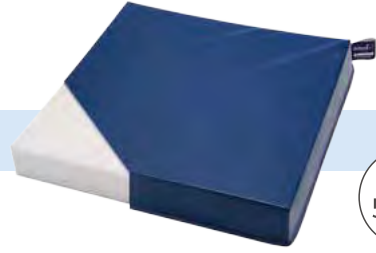

厚み
5.5cm


どの向きでも使える設置方向フリーデザイン

前後左右の向きがないので迷わず使えます。向きをローテーションすれば、さらに長持ち。



やさしく臀部を支え体圧を分散する高密度のウレタンフォーム

- 高密度のウレタンフォームが可能にする厚み5.5cmのスリム設計。標準型車いすにも合わせやすいサイズです。
- 8万回の繰り返し圧縮試験をクリアした優れた耐久性。

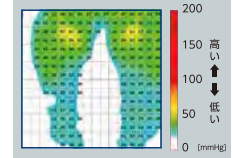

荷重 × 8万回

お手入れ簡単な防水・清拭タイプのカバー

- 濡れた時でも、さっとひと拭きできる防水加工。
- 液体が侵入しにくい「止水ファスナー」「ファスナー隠し」のダブル構造。
- 専用カバーは洗濯可能で、消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム液(1,000ppm以下)を使った清拭消毒もできます。専用カバーは制菌加工、銀複合系抗菌剤も使用しています。



下面はグリップの効いた滑り止め加工

アルトネ v2 TAISコード/00206-000179

品番/CK-490
サイズ/幅39.5 × 奥行39.5 × 厚5.5cm
重量/0.95kg

クッション・専用カバーセット価格 **オープン価格**
専用カバーのみ価格(CH-490) **オープン価格**

材質 **専用カバー** 上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)
下面/PVCラミネート加工布(防水・すべり止め加工)
中身 ウレタンフォーム


介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

FOLIO フォリオ

通気性の高い、丸洗いでできる車いす用クッション




通気性の良いアウターカバーと無膜ウレタンフォームでさらっと快適

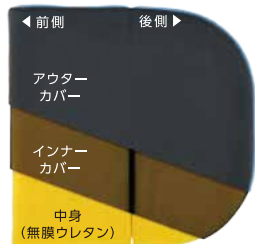


特殊スリット

前後に分かれた独立構造で前ずれを防止
特殊スリット構造で体圧を分散

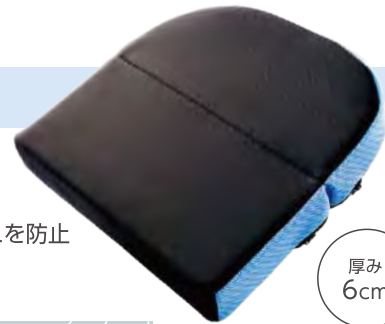

厚み
6cm

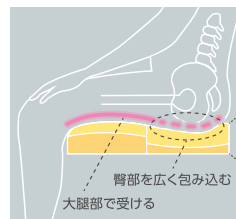

前部断面 軟質 2cm厚 / 硬質 4cm厚
後部断面 軟質 4cm厚 / 硬質 2cm厚

家庭用洗濯機で丸洗い可能

2つ折りにして洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます。



洗濯機に入るか、事前にサイズをご確認ください。



フォリオ TAISコード/00206-000132

品番/CK-405
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚6cm
重量/0.6kg


クッション・専用カバーセット価格 **27,000円(+税)**
専用カバーのみ価格(品番/CH-405) **8,400円(+税)**

材質 **専用カバー** アウターカバー/上面 ポリエステル100%
下面 ターボリン布(すべり止め加工)
インナーカバー ポリエステル100%
中身 ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 車いす付属品

Gel-T Cushion Gel-T クッション

ジェルとウレタンフォームのコンビネーション

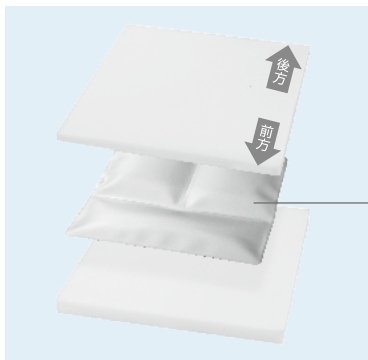

**ジェル+ウレタンフォームの
サンドイッチ構造**
流動性ジェルが瞬間的なずれに対応し、
ウレタンフォームとともに体圧を分散。



ジェルパッドの中には
流動性ジェル素材



厚み
5cm



防水加工の専用カバー
表地はナイロン素材で汚れを拭き取り
やすく、裏地は防水加工。
専用カバーは洗濯可能。

Gel-T クッション TAISコード/00206-000006

品番/CK-346
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚5cm
重量/2.45kg

材質 専用カバー 上面/ナイロン 100%(防水・抗菌)
下面/ポリ塩化ビニル 100%(防水・抗菌・難燃・すべり止め加工)
中身 高弾性・高密度ウレタンフォーム(抗菌・難燃)
流動性ジェル(ナトリウムアクリル樹脂)

クッション・専用カバーセット価格 **21,000円(+税)**
専用カバーのみ価格 **6,500円(+税)**

介護保険貸与対象品目 車いす付属品

MY Cushion マイクッション



足に力が伝わりやすいバックアップ構造で
「足こぎがしやすく」、臀部に掛かる「体圧を分散」

体圧分散と安定保持を両立させる二層構造

厚み
8cm



- 大腿部でしっかり体重を受け、臀部にかかる体圧を軽減。
- 骨盤の後傾を防ぎ、足に力が伝わりやすくなり、足こぎがしやすくなります。
- シートのたわみによる外力を吸収。

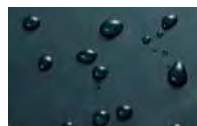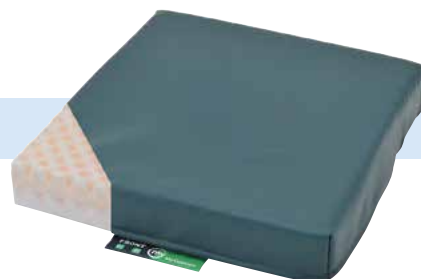

防水加工の専用カバー
表地は防水加工で拭き取りやすく、
下面はすべり止め加工。専用カバー
は伸縮性があり、洗濯も可能。



吊下げネームタグ付きで、
フックに引っ掛けられるので収納に
便利です。

マイクッション TAISコード/00206-000051

品番/CK-398
サイズ/幅39 × 奥行39 × 厚8cm(前側5cm)
重量/0.5kg


材質 専用カバー 上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)
下面/ナイロン(すべり止め加工)
中身 ウレタンフォーム

クッション・専用カバーセット価格 **8,000円(+税)**
専用カバーのみ価格(品番/CH-281) **3,500円(+税)**

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

Duo Gel Cushion デュオジェルクッション

「体圧分散」と「姿勢保持」、ずれへの対応を実現した高機能クッション
理想的な姿勢保持を実現するコンビネーション構造

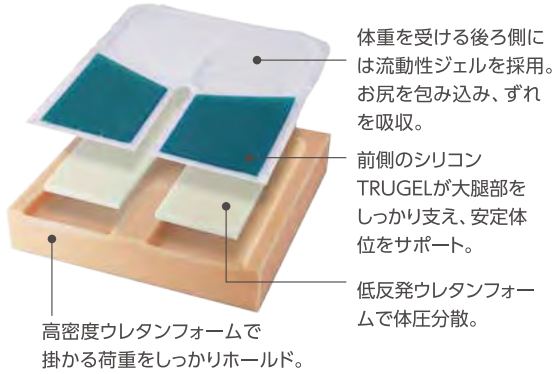


高密度ウレタンフォームで掛かる荷重をしっかりホールド。

体重を受ける後ろ側には流動性ジェルを採用。お尻を包み込み、ずれを吸収。

前側のシリコンTRUGELが大腿部をしっかり支え、安定体位をサポート。

低反発ウレタンフォームで体圧分散。

坐骨結節部への圧力集中を分散するU字構造

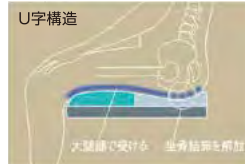


左右の大腿部の裏側で体重を受けるU字構造で坐骨結節部に集中する圧力を分散。

厚み
7.5cm



表地はムレ対策の透湿性生地
裏地は汚れの侵入を防ぐ防水加工

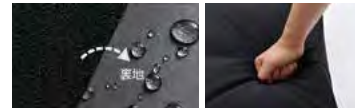

カバーの表地はムレ対策の透湿性生地。裏地は汚れが侵入しにくい防水加工。専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

デュオジェルクッション TAISコード/00206-000048 (各タイプ共通)

品番/CK-385 品番/CK-395
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚7.5cm サイズ/幅42 × 奥行42 × 厚7.5cm
重量/1.7kg 重量/1.9kg

クッション・専用カバーセット価格 **39,000円(＋税)**

専用カバーのみ価格 品番/CH-285(CK-385用)、CH-295(CK-395用) 各**6,500円(＋税)**

材質 **専用カバー** 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮)
裏地 ポリウレタンフィルム(防水)
下面/ターボリン布(防水・防炎・すべり止め加工)

中袋 ウレタンフィルム

中身 1層目/シリコンジェル
2層目/低反発ウレタンフォーム
3層目/高密度ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

Cuburena Cushion キュブレナクッション

わずか10秒で自動調圧完了。
優れた体圧分散性能を発揮する
高機能エア式ハイブリッドクッション。




厚み
10cm



調圧バルブ 吸気バルブ

調圧バルブ/
調圧バルブをあけて10秒待つだけ。エアセルの内圧を自動で調圧し、療養者の体重や体型に応じた最適な座面を簡単に作ります。

吸気バルブ/
立ち上がると自動的に空気を吸い込み、座る前の状態に復帰します。

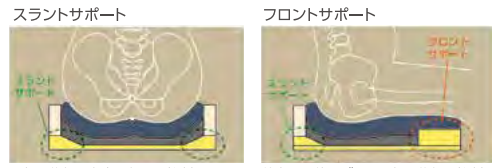

スラントサポート フロントサポート

骨盤の後傾や左右の傾きを抑制します。 前方への体のずれと骨盤の後傾を抑制します。

3層目の高硬度ウレタンベースが車いすのスリングシートのためみを補正。スラントサポートとフロントサポートが座位姿勢をサポートします。



専用カバーの表地はメッシュ生地、裏地は汚れが侵入しにくい防水加工。専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

キュブレナクッション TAISコード/00206-000081

品番/CK-400
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚10cm
重量/1.1kg

クッション・専用カバーセット価格 **43,000円(＋税)**

専用カバーのみ価格(品番/CH-400) **7,600円(＋税)**

材質 **専用カバー** 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮)
裏地 ポリウレタンフィルム(防水・抗菌)
下面/ターボリン布(防水・すべり止め加工)

中袋 ウレタンフィルム

中身 1層目エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
1層目エアセル内/ウレタンフォーム
2層目/ウレタンフォーム
3層目/高硬度ウレタンフォーム

調圧バルブ/ABS、POM、SUS、シリコンゴム
吸気バルブ/ポリプロピレン、シリコンゴム、ナイロン