

# 携帯型接触圧力測定器

Portable Interface Pressure Sensor

## Palm Q


携帯型接触圧力測定器 パームQ

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学／創傷看護学分野 共同研究

床ずれ発生のリスク評価や体圧分散式マットレスの評価に。  
接触圧力を可視化する携帯型接触圧力測定器。

5つのパッドに加わる接触圧力を数値と円グラフで表示します。

※表示される数値は最高値を表示します。

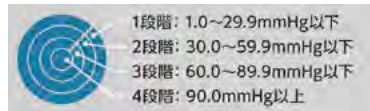

約12秒\*で  
測定完了

\*上記測定時間は安定後の時間です。安定までに時間がかかる場合もあります。



### 骨突出部位の体圧危険値の目安




(文献)

- ・須金淳子ほか：褥瘡ケアにおけるマルチパッド型簡易体圧測定器の信頼性と妥当性の検討.日本褥瘡学会誌,2(3):310-315,2000
- ・大桑麻由美ほか：新マルチパッド型簡易体圧測定器の臨床における信頼性と妥当性の検討.日本褥瘡学会誌,14(2):129-133,2012

### 使用用途

- 体圧値からリスクを評価。
- 頭側挙上、ポジショニング、シーティングなど姿勢ごとの体圧評価。
- 導入前やご使用中の体圧分散式マットレスの適合評価。

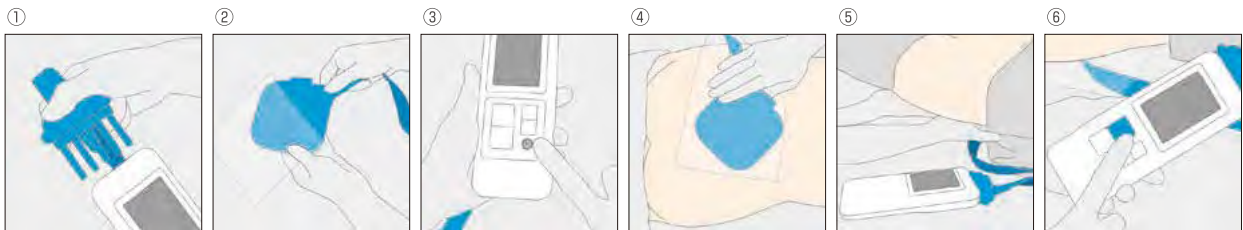

- ① 本体とセンサーパッドを接続する。
- ② 感染防止のため、パッド部をディスポーザブルの薄いビニール袋で覆う。
- ③ 電源を入れ、**ガイドンスボタン**を押す。
- ④ センサーパッドを測定部位に設置し、療養者を測定したい体位に整える。
- ⑤ 液晶画面を見ながら、中央のパッドの接触圧力が一番高くなるようにパッドの位置を調整する。
- ⑥ **スタートボタン**を押し測定開始。  
約12秒後に最高値のパッド番号・グラフが点滅し、最高圧力値が測定表示部に表示される。

品番/CR-490

価格 42,000円(+税)

本体・センサーパッドセット

測定方式：エアバッグ式による圧力センサー検出方式

本体
センサーパッド
オプション(別売)

サイズ:幅6.5 x 長17.5 x 厚3.5cm 重量:160g(電池含まず) 材質:ABS樹脂  
電源:9V角型アルカリ乾電池、別売:専用ACアダプタ(AC100V)

品番:CH-491 価格:6,500円(+税) ※センサーパッドのみ購入価格  
サイズ:パッド部 幅13 x 長13cm、導圧チューブ長さ約75cm 重量:50g  
材質:ウレタン・ABS樹脂・POM樹脂

専用ACアダプタ 品番:CH-492 価格:2,400円(+税)

エアマットレス

ウレタンフォームマットレス

マットレス用シート

専門分野  
ウレタンフォームマットレス

車いす用クッション

ポジショニング用具

携帯型接触圧力測定器

# エアマットレス オプション

## 急速ポンプKURO エアマットレス専用急速ポンプ



約30秒でエアマットレスの充填が完了。送風・吸引の両方の機能を保有。  
この1台でエアマットレスの設置・撤収に対応できます。

タイプ/品番: CH-320  
 価格: **オープン価格**  
 サイズ: 幅22.0×高18.1×奥行9.6cm  
 (アタッチメント装着時/幅25.7×高18.1×奥行9.6cm)  
 付属品: アタッチメント丸型、専用フィルター(2枚)

- ① アタッチメント丸型(CH-320付属品)
- ② アタッチメント3連型(別売)  
※シリコンキャップ1個付き



対応機種  
 ①ビッグセルアイズ、ネクサスアイビー、ラグーナ  
 ②エアマスターES、トライセルE、エアドクター



エアマスターES、  
 トライセルEには  
 ②のシリコンキャップを外して  
 お使いください。

## 風量計セット

エアポンプの風量が適正に供給できているか  
 測定できます。

全てのエアマットレスにご使用いただけます。

タイプ/品番: CH-317  
 価格: **オープン価格**



## 風圧計セット

エアポンプの風圧が適正に供給できているか  
 測定できます。


全てのエアマットレスにご使用いただけます。

タイプ/品番: CH-318  
 価格: **オープン価格**



## キャリーバッグ

マットレスとポンプがコンパクトに収納でき、持ち運びが楽に行える肩掛けバッグです。

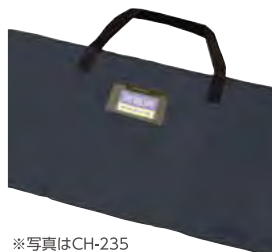

※写真はCH-235

品番: CH-235  
 対応機種: ビッグセルアイズ(1000タイプ除く)、ネクサスアイビー(1000タイプ除く)、  
 ラグーナ(1000タイプ除く)、エアマスターES、トライセルE、エアドクター  
 価格: **5,500円(＋税)**  
 サイズ: 幅100×高60cm  
 カラー: ネイビー

品番: CH-243  
 対応機種: ビッグセルアイズ(1000タイプ)、ネクサスアイビー(1000タイプ)、ラグーナ(1000タイプ)  
 価格: **11,000円(＋税)**  
 サイズ: 幅110×高75×奥行35cm  
 カラー: グレー

# エアマットレス 仕様一覧



マイクロクライメイト ビッグセル アイズ

		マイクロクライメイト ビッグセル アイズ					
セット	タイプ	交換					
		840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000	
	品番	CR-750	CR-753	CR-755	CR-757	CR-761	
	JANコード	4939810008844	4939810008851	4939810008868	4939810008875	4939810008882	
セット価格		¥237,000				¥257,000	
セット内容	専用マットレス	品番	CR-752	CR-754	CR-756	CR-758	CR-762
		サイズ※1	幅84×長192×厚15cm	幅90×長192×厚15cm	幅84×長180×厚15cm	幅90×長180×厚15cm	幅100×長192×厚15cm
		重量	6.5kg	6.8kg	6.3kg	6.5kg	7.3kg
		材質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ、すべり止め部: ポリウレタンフィルムラミネート加工布、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂(ケース部)、ファンユニット/ABS樹脂(ケース部)				
		エアセル数	25本	25本	24本	24本	25本
	価格(専用カバー付属)	¥160,000				¥180,000	
	専用カバー	品番	CH-752	CH-754	CH-756	CH-758	CH-762
		価格(専用カバーのみ購入価格)	¥9,900				¥13,200
	専用ポンプ	品番	CR-751				
		サイズ	幅30.0×高20.3×奥行8.8cm(ポンプフック装着時/幅30.0×高20.9×奥行14.1cm)				
重量		2.9kg					
材質		ケース/ABS樹脂、ポンプフック/POM樹脂					
定格		定格/AC100V、8W、50/60Hz ACコード/4m					
電気代/日(参考値)※2		約5.2円					
価格	¥77,000						
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000140	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000141	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000142	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000143	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000144	
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)					

※特に記載がない限り、価格表示はすべて税抜き価格となります。

※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、エアマットレス内圧の状態やご使用状況により多少異なる場合があります。

※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回

# エアマットレス 仕様一覧



## マイクロクライメイト ネクスサス アイビー

マットレス	タイプ	交 換					
		840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000	
	品 番	CR-770	CR-773	CR-775	CR-777	CR-781	
	JANコード	4939810009964	4939810009971	4939810009988	4939810009995	4939810010014	
	セット価格	¥190,000				¥210,000	
セット内容 専用マットレス	品 番	CR-772	CR-774	CR-776	CR-778	CR-782	
	サイズ※1	幅84 x 長192 x 厚12cm	幅90 x 長192 x 厚12cm	幅84 x 長180 x 厚12cm	幅90 x 長180 x 厚12cm	幅100 x 長192 x 厚12cm	
	重 量	7.7kg	8.1kg	7.3kg	7.7kg	8.6kg	
	材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌) ベースマット/三次元スプリング構造体 プレスエア® (制菌) ベースシート/ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ、PVCラミネート加工布 ヘッドアップセンサユニット、ファンユニット (ケース部) /ABS樹脂					
	エアセル数	24本	24本	22本	22本	24本	
	価格 (専用カバー付属)	¥120,000				¥140,000	
	付属品 マットレス	品 番	CH-772	CH-774	CH-776	CH-778	CH-782
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮)				
		価格 (専用カバーのみ購入価格)	¥9,900				¥13,200
	専用ポンプ	品 番	CR-771				
		サイズ	幅30.0 x 高20.3 x 奥行8.8cm (ポンプフック装着時/幅30.0 x 高20.9 x 奥行14.1cm)				
		重 量	2.9kg				
材 質		ケース/ABS樹脂、ポンプフック/POM樹脂					
定 格		定格/AC100V、8W、50/60Hz ACコード/4m					
電気代/日(参考値)※2		約5.2円					
価 格		¥70,000					
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000161	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000162	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000163	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000164	介護保険福祉用具貸与対象品目 00206-000165	
	保証期間	3年間保証 (専用マットレス・専用ポンプ)					



## エアマスター ES

マットレス	タイプ	交 換		
		840	900	
	品 番	CR-790	CR-793	
	JANコード	4939810010861	4939810010878	
	セット価格	オープン価格		
セット内容 専用マットレス	品 番	CR-792	CR-794	
	サイズ※1	幅84 x 長192 x 厚12cm	幅90 x 長192 x 厚12cm	
	重 量	6.1kg	6.5kg	
	材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌) ベースマット/三次元スプリング構造体 プレスエア® (制菌) ベースシート/ナイロンオックス、ポリウレタンフィルムラミネート加工布		
	エアセル数	24本		
	価格 (専用カバー付属)	オープン価格		
	付属品 マットレス	品 番	CH-792	CH-794
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・透湿・制菌・伸縮)	
		価格 (専用カバーのみ購入価格)	オープン価格	
	専用ポンプ	品 番	CR-791	
		サイズ	幅30.0 x 高13.2 x 奥行8.8cm (ポンプフック装着時/幅30.0 x 高13.7 x 奥行14.4cm)	
		重 量	2.5kg	
材 質		ケース/ABS樹脂、ポンプフック/POM樹脂		
定 格		定格/AC100V、12W、50/60Hz ACコード長さ/4m		
電気代/日(参考値)※2		約4.7円		
価 格		オープン価格		
その他	保証期間	3年間保証 (専用マットレス・専用ポンプ)		

※特に記載がない限り、価格表示はすべて税抜き価格となります。

※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、エアマットレス内圧の状態やご使用状況により多少異なる場合があります。

※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回

# エアマットレス 仕様一覧



エアマスター トライセルE

セットアップ	タイプ	上 敷		
		840	900	
	品 番	CR-330	CR-333	
	JANコード	4939810008318	4939810008325	
セット価格		¥140,000		
セット内容	専用マットレス	品 番	CR-332	CR-334
		サイズ ※1	幅84×長192×厚10cm	幅90×長192×厚10cm
		重 量	4.2kg	4.6kg
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌) ベースシート/ナイロンオックス	
		エアセル数	24本	
	価 格 (専用カバー付属)	¥95,000		
	付属品 マットレス	品 番	CH-351	CH-352
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌防臭・伸縮)	
		価 格 (専用カバーのみ購入価格)	¥9,600	
	専用ポンプ	品 番	CR-331	
		サイズ	幅30.0×高13.2×奥行8.8cm(ポンプフック装着時/幅30.0×高13.7×奥行14.4cm) ACコード/4m	
		重 量	2.5kg	
		材 質	ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂	
		定 格	AC100V、12W、50/60Hz	
電気代/日(参考値)※2		約4.7円		
価 格	¥45,000			
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000129	00206-000130	
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)		




エアドクター

セットアップ	タイプ	上 敷		
		840	900	
	品 番	CR-238	CR-268	
	JANコード	4939810008424	4939810008431	
セット価格		¥110,000		
セット内容	専用マットレス	品 番	CR-279	CR-289
		サイズ ※1	幅84×長192×厚9cm	幅90×長192×厚9cm
		重 量	3.3kg	3.4kg
		材 質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌) ベースシート/ナイロンオックス	
		エアセル数	20本	
	価 格 (専用カバー付属)	¥58,000		
	付属品 マットレス	品 番	CH-279	
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌防臭・伸縮)	
		価 格 (専用カバーのみ購入価格)	¥9,600	
	専用ポンプ	品 番	CR-259	
		サイズ	幅24.4×高17.9×奥行8.9cm(ポンプフック装着時/幅24.4×高18.2×奥行14.5cm) ACコード/4m	
		重 量	1.8kg	
		材 質	ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂	
		定 格	AC100V、5W、50/60Hz	
電気代/日(参考値)※2		約1.4円		
価 格	¥52,000			
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000014		
	保証期間	3年間保証(専用ポンプ)		

※価格表示はすべて税抜き価格となります。


※1: マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、エアマットレス内圧の状態や使用状況により多少異なる場合があります。

※2: 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件: 初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回(エアドクターは、50kg設定で圧切替24時間)

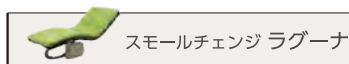

スモールチェンジ ラグーナ

セット	タイプ	交 換					
		840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000	
	品 番	CR-700	CR-703	CR-705	CR-707	CR-711	
	JANコード	4939810007984	4939810007991	4939810008004	4939810008011	4939810008028	
	セット価格	¥228,000(非課税)				¥248,000(非課税)	
セット内容	専用マットレス	品 番	CR-702	CR-704	CR-706	CR-708	CR-712
		サイズ ※1	幅84×長192×厚13.5cm	幅90×長192×厚13.5cm	幅84×長180×厚13.5cm	幅90×長180×厚13.5cm	幅100×長192×厚13.5cm
		重 量	8.2kg	8.6kg	7.8kg	8.2kg	9.3kg
		材 質	エアセル／ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット／三次元スプリング構造体 プレスエア <sup>®</sup> (制菌)、ヘッドアップセンサ／ABS樹脂、ベースシート／側面：ナイロンオックス 下面：ポリエステルメッシュ すべり止め布付き				
		エアセル数	21本	21本	20本	20本	21本
	価 格(専用カバー付属)	¥153,000				¥173,000	
	専用カバー	品 番	CH-702	CH-704	CH-706	CH-708	CH-712
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)				
	専用ポンプ	品 番	CR-701				
		サイズ	幅36.5×高24.6×奥行8.7cm(ポンプフック装着時／幅36.5×高27.6×奥行15.7cm) ACコード：4m				
重 量		3.4kg					
材 質		ケース／ABS樹脂、フック／POM樹脂					
定 格		AC100V、12W、50/60Hz					
電気代/日(参考値)※2		約5.1円					
価 格	¥75,000						
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000102	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000103	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000104	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000105	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000106	
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)					

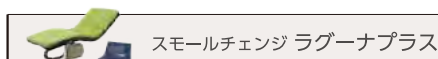

スモールチェンジ ラグーナプラス

セット	タイプ	交 換					
		840	900	840/SHORT	900/SHORT	1000	
	品 番	CR-721	CR-723	CR-725	CR-727	CR-731	
	JANコード	4939810008196	4939810008202	4939810008219	4939810008226	4939810008233	
	セット価格	¥250,000(非課税)				¥270,000(非課税)	
セット内容	専用マットレス	品 番	CR-722	CR-724	CR-726	CR-728	CR-732
		サイズ ※1	幅84×長192×厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)	幅90×長192×厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)	幅84×長180×厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)	幅90×長180×厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)	幅100×長192×厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)
		重 量	9.2kg	9.6kg	8.8kg	9.2kg	10.3kg
		材 質	エアセル／ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット／三次元スプリング構造体 プレスエア <sup>®</sup> (制菌)、ヘッドアップセンサ／ABS樹脂、ベースシート／側面：ナイロンオックス 下面：ポリエステルメッシュ すべり止め布付き				
		エアセル数	21本	21本	20本	20本	21本
	価 格(専用カバー、プラス専用パッドAタイプ付属)	¥175,000				¥195,000	
	専用カバー	品 番	CH-702	CH-704	CH-706	CH-708	CH-712
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)				
	専用ポンプ	品 番	CR-701				
		サイズ	幅36.5×高24.6×奥行8.7cm(ポンプフック装着時／幅36.5×高27.6×奥行15.7cm) ACコード：4m				
重 量		3.4kg					
材 質		ケース／ABS樹脂、フック／POM樹脂					
定 格		AC100V、12W、50/60Hz					
電気代/日(参考値)※2		約5.1円					
価 格	¥75,000						
プラス専用パッド	品 番	CR-549					
	サイズ	幅60×長60×厚1cm、ACコード：4m					
	重 量	1.0kg					
	材 質	カバー／ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、中身／ポリエステル100%、コントローラー／ABS樹脂					
	定 格	AC100V、40W、50/60Hz					
電気代/日(参考値)※2	約27.4円						
価 格	¥22,000						
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000107	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000108	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000109	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000110	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000111	
	保証期間	3年間保証(専用マットレス・専用ポンプ)／1年間保証(プラス専用パッド Aタイプ)					

※特に記載がない限り、価格表示はすべて税抜き価格となります。

※1：マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、エアマットレス内圧の状態やご使用状況により多少異なる場合があります。

※2：当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。動作条件：初期設定のモードで、圧切替18時間＋背上げ保持2時間×3回



# ウレタンフォームマットレス 仕様一覧



ウェブリーマットレス

マットレス	タイプ	交換							
	品番	830	900	830/SHORT	900/SHORT				
	JANコード	CR-800	CR-801	CR-802	CR-803				
	セット価格	オープン価格							
	品番	※単品販売はしていません							
容内マットレス	サイズ	幅83×長191×厚12cm	幅90×長191×厚12cm	幅83×長180×厚12cm	幅90×長180×厚12cm				
	重量	6.4kg	6.9kg	6.0kg	6.5kg				
	材質	ソフト層：ウレタンフォーム(スリット加工) 中間層：ウレタンフォーム(抜き加工) ハード層：ウレタンフォーム(スリット加工)							
	価格	オープン価格							
	品番	CH-800	CH-801	CH-802	CH-803				
付属品	材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)							
	価格(専用カバーのみ購入価格)	オープン価格							
	品番	CH-800 CH-801 CH-802 CH-803							
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000166		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000167		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000168		介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000169	



ディンプルマットレス

マットレス	タイプ	交換							
	品番	830	900	830/SHORT	900/SHORT				
	JANコード	CR-540	CR-541	CR-542	CR-543				
	セット価格	¥90,000							
	品番	※単品販売はしていません							
容内マットレス	サイズ	幅83×長191×厚12cm	幅90×長191×厚12cm	幅83×長180×厚12cm	幅90×長180×厚12cm				
	重量	6.0kg	6.6kg	5.6kg	6.2kg				
	材質	1層目：ラバータッチウレタンフォーム(特殊ディンプル加工+スリット複合形状) 2層目：ラバータッチウレタンフォーム 2層目サイド：高硬度ウレタンフォーム 3層目：高硬度ウレタンフォーム							
	価格	-							
	品番	CH-540	CH-541	CH-542	CH-543				
付属品	材質	上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮・防炎) 下面/ナイロンオックス							
	価格(専用カバーのみ購入価格)	¥18,500							
	品番	CH-540 CH-541 CH-542 CH-543							
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000070							



キュオラ(通気タイプ)



キュオラ(防水タイプ)

マットレス	タイプ	交換				交換			
	品番	830	900	830/SHORT	900/SHORT	830	900	830/SHORT	900/SHORT
	JANコード	CR-590	CR-591	CR-592	CR-593	CR-594	CR-595	CR-596	CR-597
	セット価格	¥118,000				¥120,000			
	品番	※単品販売はしていません				※単品販売はしていません			
容内マットレス	サイズ	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm
	重量	6.5kg	7.0kg	6.1kg	6.6kg	6.5kg	7.0kg	6.1kg	6.6kg
	材質	1層目：超通気高弾性ウレタンフォーム(特殊ディンプル加工+スリット複合形状) 2層目：三次元スプリング構造体 プレスエア®(制菌) 3層目：超通気高弾性ウレタンフォーム インナーカバー：ポリエステルメッシュ				1層目：超通気高弾性ウレタンフォーム(特殊ディンプル加工+スリット複合形状) 2層目：三次元スプリング構造体 プレスエア®(制菌) 3層目：超通気高弾性ウレタンフォーム インナーカバー：ポリエステルメッシュ			
	価格	-				-			
	品番	CH-590	CH-591	CH-592	CH-593	CH-594	CH-595	CH-596	CH-597
付属品	材質	上面・側面/ポリエステルドライメッシュ(吸水速乾・制菌・消臭・伸縮) 下面/ナイロンオックス				上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・消臭・伸縮) 下面/ナイロンオックス			
	価格(専用カバーのみ購入価格)	¥16,300				¥18,500			
	品番	CH-590 CH-591 CH-592 CH-593				CH-594 CH-595 CH-596 CH-597			
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000077				介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000078			


※価格表示はすべて税抜き価格となります。

# ウレタンフォームマットレス 仕様一覧




ミルフィ

		ミルフィ				
セット	タイプ	交 換				
		830	900	830/SHORT	900/SHORT	
	品 番	CR-362	CR-363	CR-364	CR-365	
	JANコード	4939810008479	4939810008486	4939810008493	4939810008509	
	セット価格	¥71,000				
セット内容	マットレス	品 番	※単品販売はしていません			
		サイズ	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm
		重 量	5.7kg	6.1kg	5.4kg	5.7kg
		材 質	1層目 : 高弾性ウレタンフォーム (特殊プロファイル加工) 2層目 : ソフトタッチウレタンフォーム 3層目 : 高弾性ウレタンフォーム 3層目サイド: 高硬度ウレタンフォーム 4層目 : 高硬度ウレタンフォーム			
	価 格	-				
	付属品 マットレス 専用カバー	品 番	CH-366	CH-367	CH-368	CH-369
		材 質	上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮) 下面/ナイロンオックス			
価格 (専用カバーのみ購入価格)		¥16,300				
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000075				

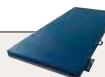

ホスピタマットレス

		ホスピタマットレス				
セット	タイプ	交 換				
		830	900			
	品 番	CR-286	CR-287			
	JANコード	4939810008554	4939810008561			
	セット価格	¥51,000				
セット内容	マットレス	品 番	※単品販売はしていません			
		サイズ	幅83×長191×厚8.5cm	幅90×長191×厚8.5cm		
		重 量	6.0kg	6.5kg		
		材 質	低反発面/低反発ウレタンフォーム 高反発面/高反発ウレタンフォーム			
	価 格	-				
	付属品 マットレス 専用カバー	品 番	CH-288	CH-289		
		材 質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮)			
価格 (専用カバーのみ購入価格)		¥20,900				
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000069				

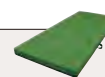

メリー&ハリー

		メリー&ハリー				
セット	タイプ	交 換				
		830	900	900/SHORT	900/LONG	
	品 番	CR-680	CR-681	CR-682	CR-683	
	JANコード	4939810006727	4939810006734	4939810006741	4939810006758	
	セット価格	¥78,000			¥94,000	
セット内容	マットレス	品 番	※単品販売はしていません			
		サイズ	幅83×長191×厚9cm	幅90×長191×厚9cm	幅90×長180×厚9cm	幅90×長205×厚9cm
		重 量	6.5kg	7.0kg	6.6kg	7.5kg
		材 質	<メリー層・ハリー層> 超通気・高弾性ウレタンフォーム <ワッフル層> 超通気・高弾性・高耐久ウレタンフォーム <芯材> 超通気・高硬度ウレタンフォーム			
	価 格	-				
	付属品 マットレス 専用カバー	品 番	CH-680	CH-681	CH-682	CH-683
		材 質	ポリエステル100% (吸水速乾・制菌・消臭・伸縮)			
価格 (専用カバーのみ購入価格)		¥16,300			¥16,800	
その他	保険適用/TAISコード	介護保険福祉用具貸与対象品目/00206-000079		00206-000128		

※価格表示はすべて税抜き価格となります。