

車いす用クッション


介護保険貸与対象品目 車いす付属品

Altone v2 アルトネ v2

医療現場のニーズに応える、車いす用クッション



2024
NEW

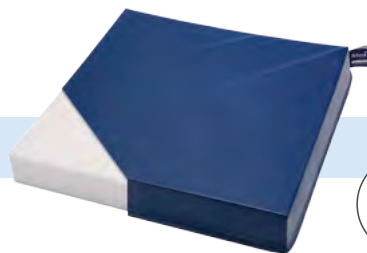

厚み
5.5cm



どの向きでも使える設置方向フリーデザイン

前後左右の向きがないので迷わず使えます。向きをローテーションすれば、さらに長持ち。



やさしく臀部を支え体圧を分散する高密度のウレタンフォーム


- 高密度のウレタンフォームが可能にする厚み5.5cmのスリム設計。標準型車いすにも合わせやすいサイズです。
- 8万回の繰り返し圧縮試験をクリアした優れた耐久性。

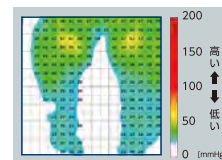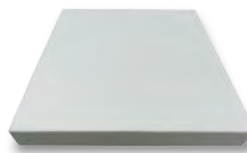

荷重 × 8万回

お手入れ簡単な防水・清拭タイプのカバー

- 濡れた時でも、さっとひと拭きできる防水加工。
- 液体が侵入しにくい「止水ファスナー」「ファスナー隠し」のダブル構造。
- 専用カバーは洗濯可能で、消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム液(1,000ppm以下)を使った清拭消毒もできます。専用カバーは抗菌加工、銀複合系抗菌剤も使用しています。

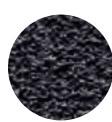

下面はグリップの効いた滑り止め加工

アルトネ v2 TAISコード/00206-000179

品番/CK-490
サイズ/幅39.5 × 奥行39.5 × 厚5.5cm
重量/0.95kg

クッション・専用カバーセット価格 **オープン価格**
専用カバーのみ価格(CH-490) **オープン価格**

材質 専用カバー 上面・側面/ポリウレタンフィルム
ラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)
下面/PVCラミネート加工布
(防水・すべり止め加工)
中身 ウレタンフォーム


介護保険貸与対象品目 車いす付属品

FOLIO フォリオ


通気性の高い、丸洗いできる車いす用クッション



通気性の良いアウターカバーと無膜ウレタンフォームでさらっと快適

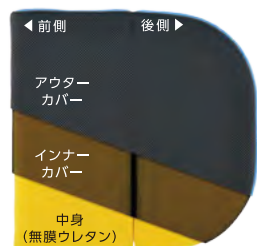

特殊スリット

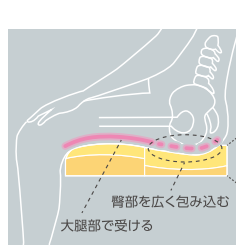

前部断面 軟質 2cm厚 硬質 4cm厚
後部断面 軟質 4cm厚 硬質 2cm厚

家庭用洗濯機で丸洗い可能

2つ折りにして洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます。



フォリオ TAISコード/00206-000132

品番/CK-405
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚6cm
重量/0.6kg

クッション・専用カバーセット価格 **27,000円(+税)**
専用カバーのみ価格(品番/CH-405) **8,400円(+税)**

材質 専用カバー アウターカバー/上面 ポリエステル100%
下面 ターボリン布(すべり止め加工)
インナーカバー ポリエステル100%
中身 ウレタンフォーム

介護保険貸与対象品目 車いす付属品


Gel-T Cushion Gel-T クッション

ジェルとウレタンフォームのコンビネーション



ジェル+ウレタンフォームの サンドイッチ構造

流動性ジェルが瞬間的なずれに対応し、
ウレタンフォームとともに体圧を分散。

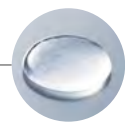

ジェルパッドの中には
流動性ジェル素材



厚み
5cm



防水加工の専用カバー
表地はナイロン素材で汚れを拭き取り
やすく、裏地は防水加工。
専用カバーは洗濯可能。

Gel-T クッション TAISコード/00206-000006

品番/CK-346
サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚5cm
重量/2.45kg

材質 専用カバー

上面/ナイロン 100% (防水・抗菌)
下面/ポリ塩化ビニル 100% (防水・抗菌・難燃・すべり止め加工)
中身 高弾性・高密度ウレタンフォーム (抗菌・難燃)
流動性ジェル (ナトリウムアクリル樹脂)

クッション・専用カバーセット価格 **21,000円 (+税)**
専用カバーのみ価格 (品番/CH-346) **6,500円 (+税)**

介護保険貸与対象品目 車いす付属品

MY Cushion マイクッション



足に力が伝わりやすいバックアップ構造で
「足こぎがしやすく」、臀部に掛かる「体圧を分散」

体圧分散と安定保持を両立させる二層構造

厚み
8cm



- 大腿部でしっかり体重を受け、臀部にかかる体圧を軽減。
- 骨盤の後傾を防ぎ、足に力が伝わりやすくなり、足こぎがしやすくなります。
- シートのたわみによる外力を吸収。

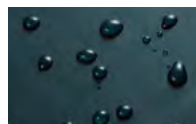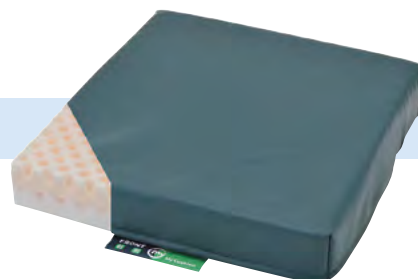

防水加工の専用カバー
表地は防水加工で拭き取りやすく、
下面はすべり止め加工。専用カバー
は伸縮性があり、洗濯も可能。



吊下げネームタグ付きで、
フックに引っ掛けられるので収納に
便利です。

マイクッション TAISコード/00206-000051

品番/CK-398
サイズ/幅39 × 奥行39 × 厚8cm (前側5cm)
重量/0.5kg

材質 専用カバー

上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・抗菌・伸縮)
下面/ナイロン (すべり止め加工)
中身 ウレタンフォーム

クッション・専用カバーセット価格 **8,000円 (+税)**
専用カバーのみ価格 (品番/CH-281) **3,500円 (+税)**

エアマットレス

ウレタンフォームマットレス

マットレス用
シート

専門分野
ウレタンフォームマットレス

車いす用
クッション



ポジショニング用具

携帯型
接触圧力測定器

介護保険貸与対象品目 **車いす付属品**

Duo Gel Cushion デュオジェルクッション

「体圧分散」と「姿勢保持」、ずれへの対応を実現した高機能クッション
理想的な姿勢保持を実現するコンビネーション構造

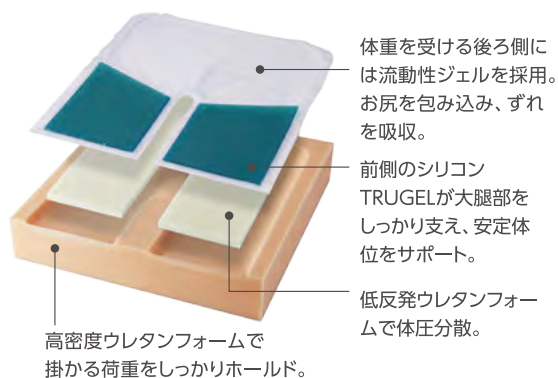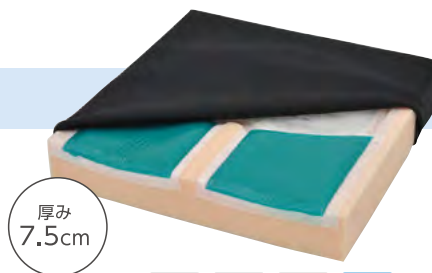


坐骨結節部への圧力集中を分散するU字構造



左右の大腿部の裏側で体重を受けるU字構造で坐骨結節部に集中する圧力を分散。

表地はムレ対策の透湿性生地
裏地は汚れの侵入を防ぐ防水加工

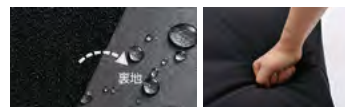

カバーの表地はムレ対策の透湿性生地。
裏地は汚れが侵入ににくい防水加工。
専用カバーは伸縮性があり、洗濯も可能。

デュオジェルクッション

TAISコード/00206-000048 (各タイプ共通)

品番/CK-385

サイズ/幅40 × 奥行40 × 厚7.5cm

重量/1.7kg

品番/CK-395

サイズ/幅42 × 奥行42 × 厚7.5cm

重量/1.9kg

クッション・専用カバーセット価格 **39,000円(+税)**

専用カバーのみ価格 品番/CH-285 (CK-385用)、CH-295 (CK-395用) 各**6,500円(+税)**

材質 **専用カバー**

上面/表地 ポリエステル100% (伸縮)
裏地 ポリウレタンフィルム (防水)
下面/ターボリン布 (防水・防炎・すべり止め加工)

中袋

中身

ウレタンフィルム
1層目/シリコンジェル
2層目/低反発ウレタンフォーム
3層目/高密度ウレタンフォーム