

キューオラ®		介護保険 福祉用具貸与対象品目							
セット価格	通気タイプ 118,000円 (+税)				防水タイプ 120,000円 (+税)				
TAISコード	00206-000077				00206-000078				
タイプ 品番	830 CR-590	900 CR-591	830/SHORT CR-592	900/SHORT CR-593	830 CR-594	900 CR-595	830/SHORT CR-596	900/SHORT CR-597	
ウレタン フォーム	サイズ (幅×長×厚cm)	83×191×10	90×191×10	83×180×10	90×180×10	83×191×10	90×191×10	83×180×10	90×180×10
	重量	6.5Kg	7.0Kg	6.1Kg	6.6Kg	6.5Kg	7.0Kg	6.1Kg	6.6Kg
	材質	1層目：超通気高弾性ウレタンフォーム (特殊ディンプル加工 + スリット複合形状) 2層目：三次元スプリング構造体プレスエアー®【抗菌】 3層目：超通気高弾性ウレタンフォーム インナーカバー：ポリエステルメッシュ							
専用 カバー	単品価格	16,300円 (+税) ※カバーのみの購入価格				18,500円 (+税) ※カバーのみの購入価格			
	品番	CH-590	CH-591	CH-592	CH-593	CH-594	CH-595	CH-596	CH-597
	材質	<上面・側面> ポリエステルドライメッシュ 吸水速乾・抗菌・消臭				<上面・側面> ポリウレタンフィルムラミネート加工布 防水・透湿・抗菌・消臭			
		<下面> ナイロンオックス				<下面> ナイロンオックス			

通気タイプ



防水タイプ


 商品に関する詳しい情報は、ケーブのホームページをご覧ください。
<https://www.cape.co.jp/>
 ホームページ

*介護保険における福祉用具の貸与に関しては、居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。
 *キューオラの取り扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
 *商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
 *印刷の関係で実物とは色が違うことがあります。
 *本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 **株式会社 ケーブ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
 TEL:046-821-5511 (代) FAX:046-821-5522
 E-mail:lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
 TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

お問い合わせ先

体圧分散式ウレタンフォームマットレス/床ずれ防止用具 <交換タイプ>



超通気ウレタンフォームマットレス

キューオラ®

QOLA^{Ag+}

ケーブの技術が
ウレタンフォームマットレスの
問題点をクリア。

超通気

安定感

体圧分散



衛生・ニオイ
対策

へたり対策
耐久性

新発想、AクラスのQOLA。



抜群の通気性、動きやすい安定性、優れた体圧分散性、
療養者のQOLを高める
ウレタンフォームマットレス「キュオラ」。

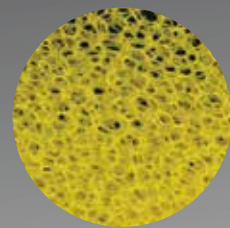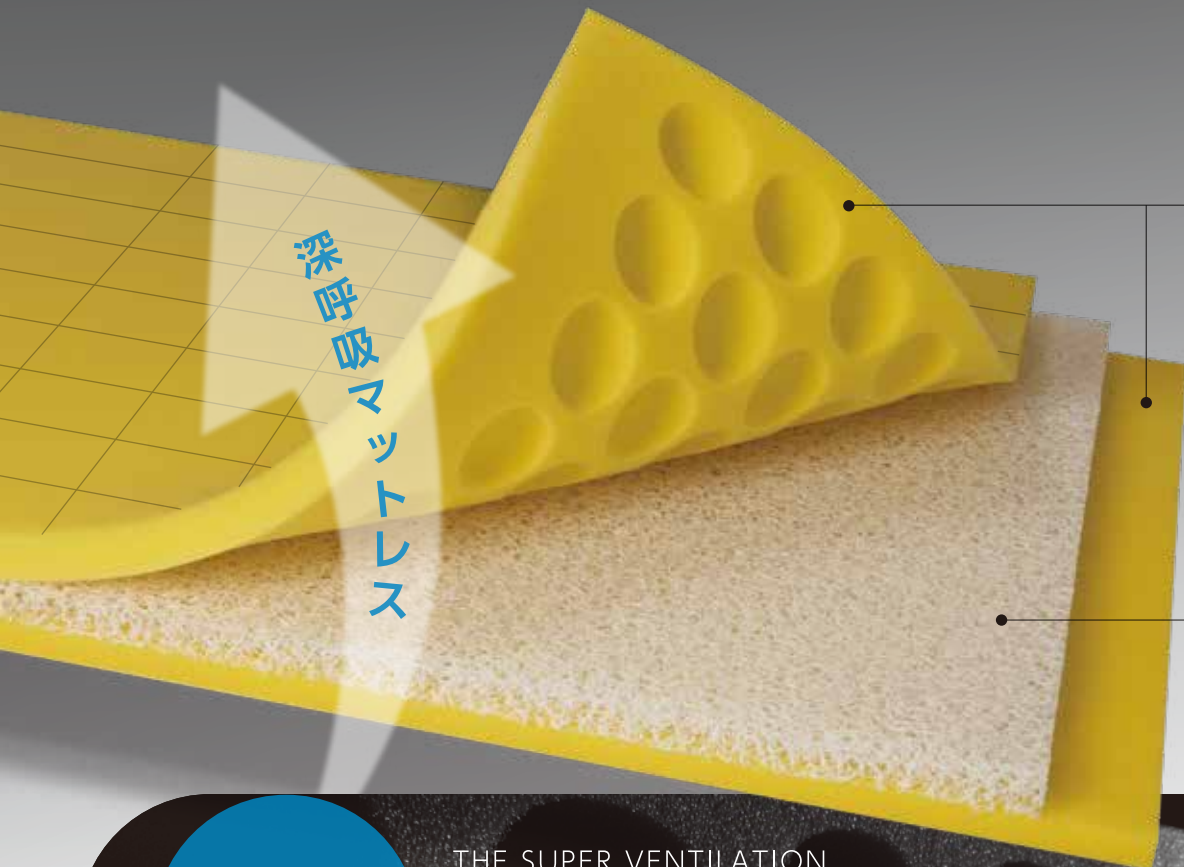

超通気フォーム
ムレにくく、空気や水を通りやすくした超通気フォーム。




三次元スプリング構造体「ブレスエア®」
クッション性があり、ムレにくいブレスエア®を、マットレスの中間層に採用しました。




**湿度を
コントロールして
ムレを改善**

超通気フォームと三次元スプリング構造体ブレスエア®の使用で、従来品に比べ寝床内の温度を1.5℃、湿度を15%削減。湿度をコントロールすることで不快指数を低く抑え、ムレ感がなくご使用いただけます。

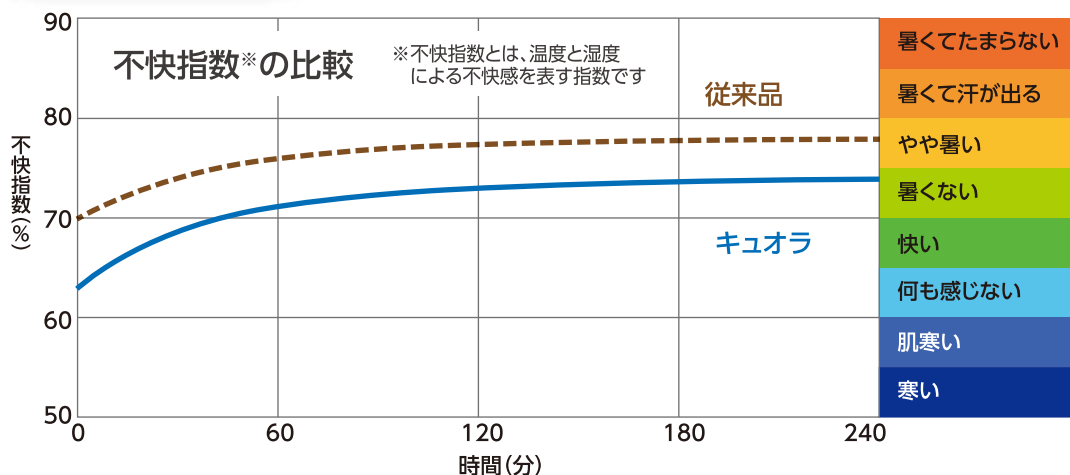

不快感のイメージイラスト

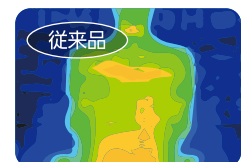



※左のグラフの数値とは関係ありません

衛生・ニオイ
対策

超通気フォームとブレスエアー®の使用で、
水抜けが速く、優れた速乾性を実現。

丸洗いができて衛生的 (80°C高温乾燥可能)

超通気フォームの中間層にブレスエアー®を採用したことで、脱水効果に優れ、洗浄後の水分残留を抑えます。従来品の高通気フォームに比べ1/3の所要時間で完全乾燥が可能になりました。

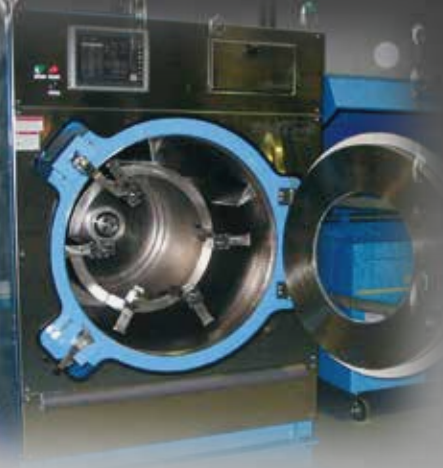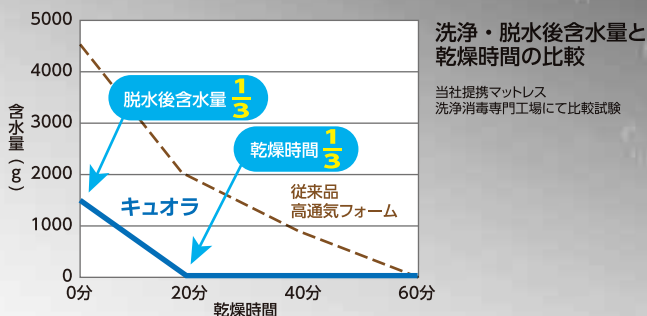

マットレスを保護するインナーカバー

マットレスにはメッシュ素材のインナーカバーを付属しています。洗濯・乾燥を行う際にマットレスを保護することができます。



2種類のカバー

吸水速乾の通気カバーと清拭可能な防水カバーの2種類をご用意しました。どちらも消臭機能を持ち、汗や尿、排泄臭を減少させるとともに、制菌加工 (SEK赤ラベル) を施しており菌の繁殖を抑えます。カバーは取り外して洗濯することができ、衛生的な環境を保てます。

通気カバー

吸水性に優れたサラッとした肌触り。摩擦係数が低いのでずれが生じにくく、しなやかに身に添うカバーです。

防水カバー

失禁などによる汚染を防ぐ、お手入れ簡単な清拭タイプのカバーです。

Ag+

※Ag+
銀複合系抗菌剤を
使用しています。

制菌加工

消臭機能

伸縮性



(社)繊維評価技術協議会
認証番号 009SA98
制菌加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制します)
試験方法 (菌液吸収法)
別名:有機系 (セリジン)
BIO GUARD.

へたり対策
耐久性

優れた耐久性

8万回の繰り返し圧縮にも耐えられる構造と、へたりにくい超通気フォームとブレスエアー®を採用。へたりをおさえ、長期にわたり使用可能な質の高いマットレスをご提供します。



片手で持ち運びやすい



裏面のオリジナルハンドルで、片手で楽に持ち運びができます。



安定感

EXCELLENT STABILITY



体圧分散


PRESSURE REDISTRIBUTION

寝返り
起き上がりを
サポート

高い反発弾性により、フォームの跳ね返す力が療養者の動こうとする力をサポートするので、寝返りや起き上がりが楽に行えます。また、安定感のある床面は、身体の重さをしっかり受けるので、端座位や離床時の体重移動がしやすくなります。




キュオラの安定した床面は、従来のサイドフレーム構造の段差による骨盤の倒れや不安定感がありません。深く腰掛ける際や座ったまま前へ移動する動作が安定して安全に行えます。

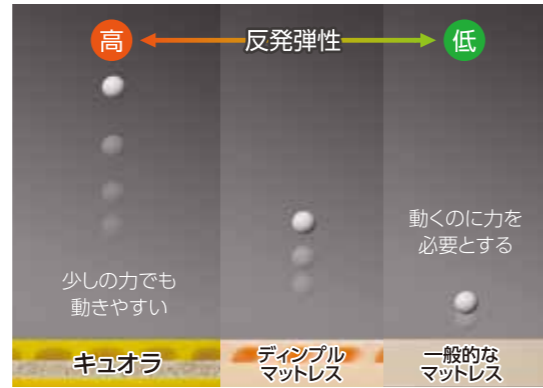

同じ高反発ウレタンフォームの中でもキュオラは跳ね返す力に優れた高弾性フォームを使用しています。


変形させて
反力を軽減

ウレタンフォームは、荷重を受けると圧縮されて硬くなり、反力を持ちます。その性質に着目し、「圧縮」ではなく「変形」させるために、内部にディンプル形状の空間を持たせました。

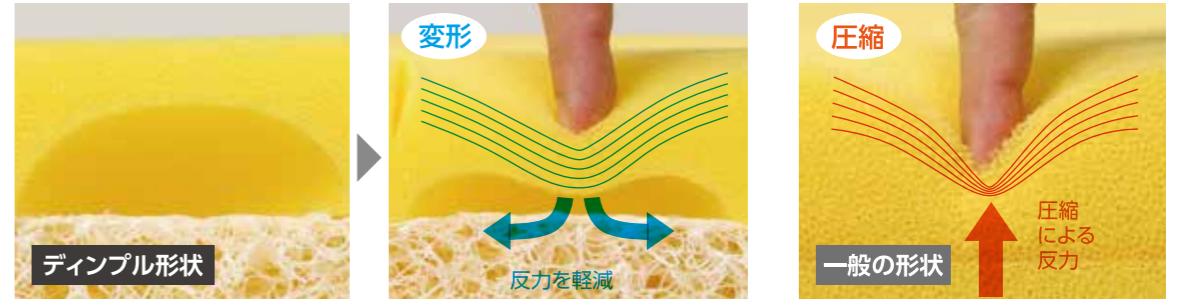




優れた
体圧分散性能

踵や骨突出部位はピンポイントで沈み込ませ、大きな部位は接触面積を増やすことで、集中荷重と広範囲荷重の両方に対応。10cmの薄さで優れた体圧分散性能を発揮します。

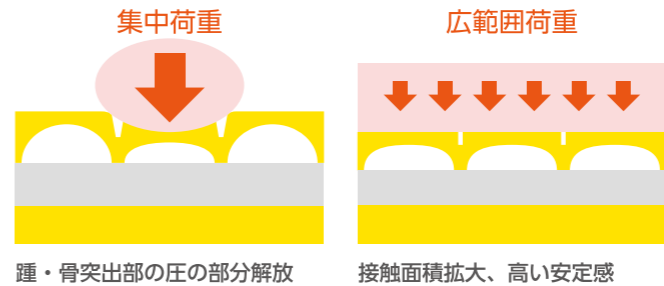

理想的な
ポジショニング
を保持


部位別にディンプルの深さを変えることで、体重バランスに合わせた部分コントロールを実現。腰部を支持し、理想的なSラインの寝姿勢を保持します。

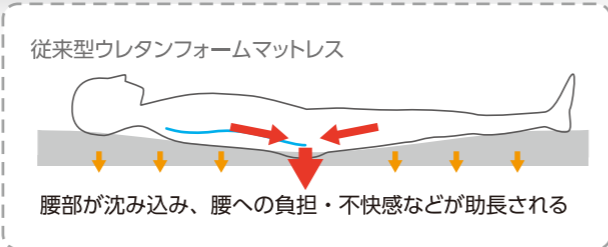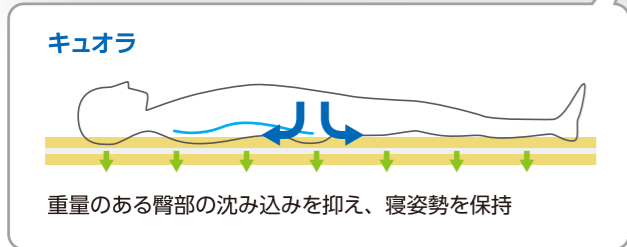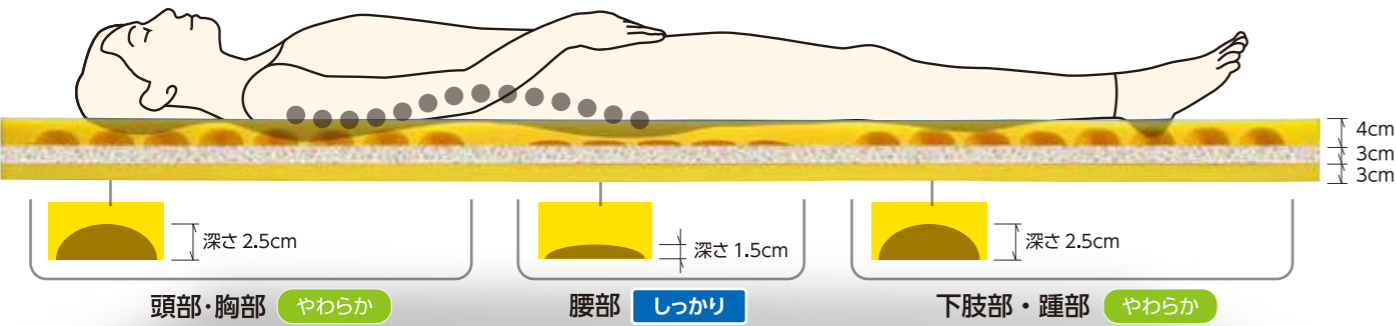

三次元スプリング構造体
プレスエアー®の特長

- クッション性能：高反発で寝返りがうちやすい
- 通気性：ムレにくい
- 水切り性：容易に洗え、すばやく乾く
- 制菌性能：SEK基準に合格する制菌性能付与
- 耐久性：へたりにくい

(社) 繊維評価技術協議会
認証番号 CO751-K07
新素材工
(繊維上の細菌の増殖を)
抑制します。
別名: 繊維系(フェノール)
プレスエアー®

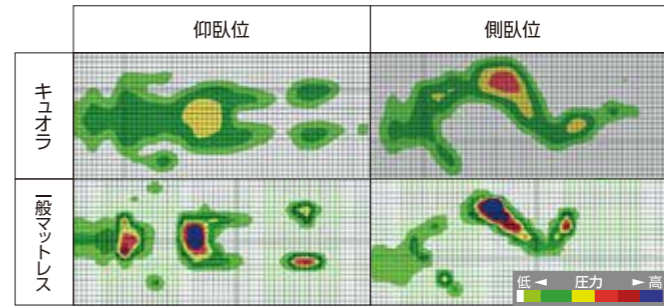

被験者：153cm / 体重 45kg / BMI19.2 / 女性
測定器：ABW社 エルゴチェック