



Ag+




MILPHY

ミルフィ


沈み込みを抑えて 寝返りや起き上がりを サポート



4種類・4層構造 ウレタンフォーム

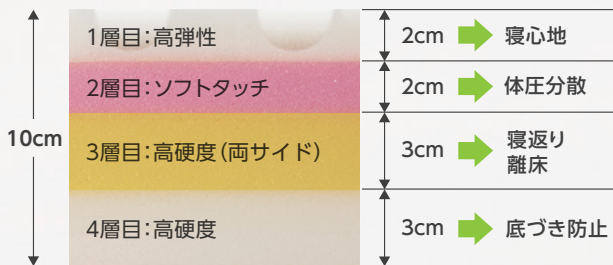


ここがポイント

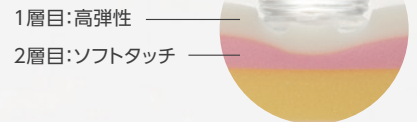


1層目は反発弾性に優れた高弾性ウレタンフォーム、2層目にはクッション材の機能を持つソフトタッチウレタンフォームを採用。荷重が加わると一番柔らかい2層目から沈み込むため、1層目の安定感を損なわず、寝返りや起き上がりがしやすくなります。

Sラインを保持して 快適な寝心地を実現

1層目の上面はプロファイルカット加工。体重が集中する腰部は、プロファイルカットを浅く加工し、過度な沈み込みを抑えます。背骨のSラインを保持し、理想的な寝姿勢を実現します。

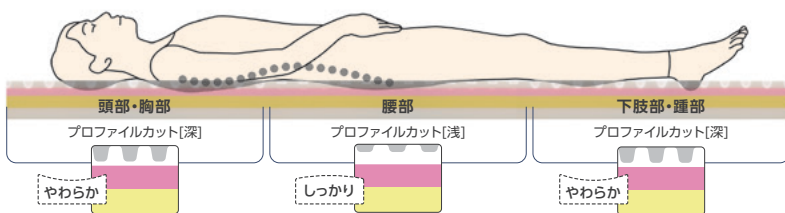

1層目のプロファイルカットが広い面積で身体を支え、2層目のソフトタッチウレタンフォームが適度に沈み込み、体圧を分散。

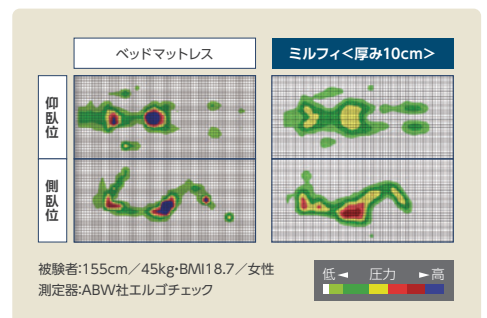

ポジショニングしやすい環境づくり

適切なポジショニングを行っても、腰部が過度に沈み込む姿勢では、ポジショニングのピローに下肢等の重みを十分に預けることが難しくなります。

腰部の沈み込みを抑えるミルフィは、ポジショニングのベースになる環境を整えてくれます。



3層目の左右両サイドに「アクティブフレーム構造」を採用




安心
設計

ここが
ポイント

左右両サイドには高硬度ウレタンフォームの「アクティブフレーム」を採用し、端座位の安定を実現。高硬度のアクティブフレームは身体に直接当たらないよう、3層目に配置しています。

制菌加工*1、清拭タイプの専用カバー

専用カバーは、アルコールや次亜塩素酸ナトリウム*2による清拭消毒にも対応可能。

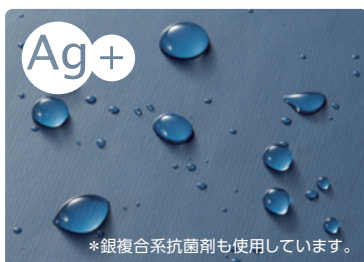

防水 制菌 伸縮

*1 対応菌種：MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌
*2 対応可能な希釈濃度については、(株)ケーブまでお問い合わせください。

持ち運びに便利なハンドル付き

専用カバーの裏面には腕を通すベルトとハンドル付き。片手で楽に持ち運びができます。

タグの裏面には、管理番号などが書き込めるスペースを設けています。





ミルフィ

介護保険 福祉用具貸与対象品目(特殊環台付属品)
TAISコード:00206-000075 (各サイズ共通)

セット価格 **71,000円**(+税)

タイプ/品番		830/CR-362	900/CR-363	830/SHORT/CR-364	900/SHORT/CR-365
ウレタンフォーム	サイズ	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm
	重量	5.7Kg	6.1Kg	5.4Kg	5.7Kg
	材質	1層目:高弾性ウレタンフォーム(特殊プロファイル加工) 2層目:ソフトタッチウレタンフォーム 3層目:高弾性ウレタンフォーム、3層目サイド:高硬度ウレタンフォーム 4層目:高硬度ウレタンフォーム			
専用カバー	単品価格	16,300円 (+税) ※カバーのみの購入価格			
	品番	CH-366	CH-367	CH-368	CH-369
	材質	<上面・側面> ポリウレタンフィルムラミネート加工布 防水・制菌・伸縮 <下面> ナイロンオックス			

介護保険における福祉用具の貸与に関しては、
居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

- * ミルフィの取り扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- * 商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- * 印刷の関係で実物とは色が違うことがあります。
- * 記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
- * 本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL: 046-821-5511 (代) FAX: 046-821-5522
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

お問い合わせ先