



じっは、

人が心地よいと感じる硬さって、 2種類あったんです。

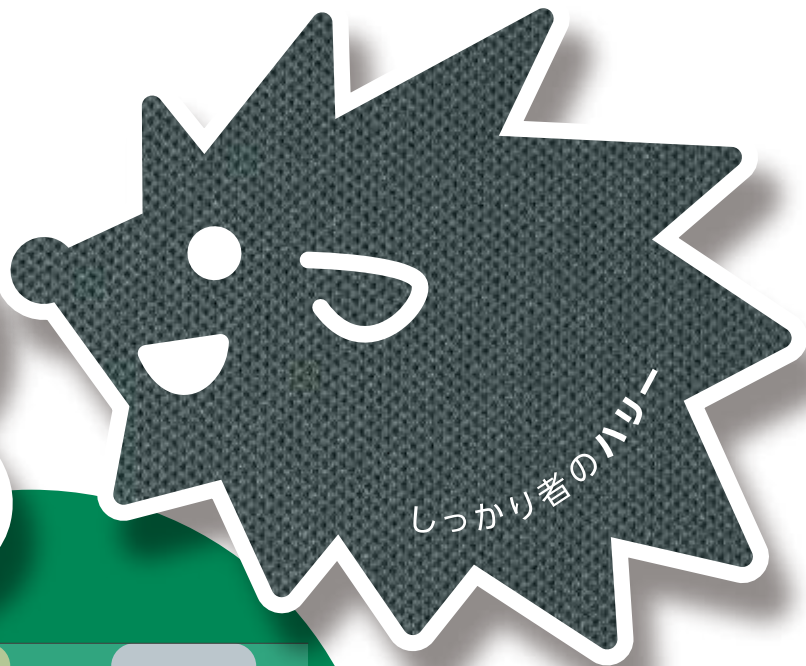

当社モニター調査結果

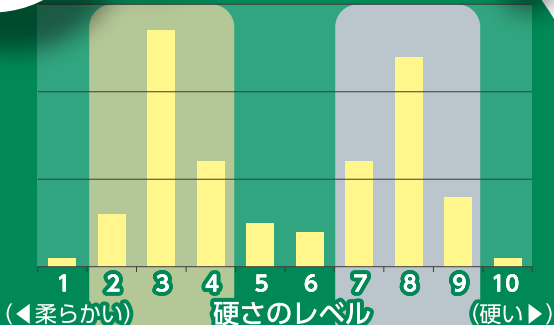

100人が選んだ
 寝心地をカタチにしたら、
リバーシブル
 になりました。

柔らかめサイドと、
 硬めサイド、
 両面とも心地よい
 マットレスです。

自然でやさしい
 フィット感のある寝心地
メリー面(ソフト)

使い慣れた
 お布団のような寝心地
ハリー面(ハード)

介護保険貸与対象品 特殊寝台付属品

メリハリのあるリバーシブル通気マットレス


Mery & Hary®

メリー アンド ハリー

さあ、
 次はあなたも
 お試しください。

高硬度フォームの 芯材が織りなすメリハリ

芯材をマットの中心よりもハリ面に寄せることで、硬さのメリハリを付けました。1枚で2つの寝心地をご提供できます。

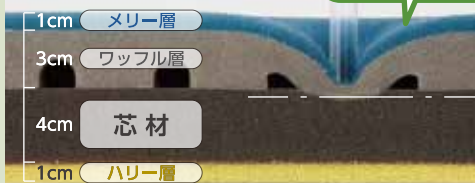

メリー面(ソフト)
自然でやさしい
フィット感のある寝心地

ハリー面(ハード)
使い慣れたお布団の
ような寝心地


独自の“ワッフル構造”で寝心地バツグン



体重が集中する臀部の沈み込みを軽減し、理想的なSラインの寝姿勢を保てます。身体を支えるワッフル層には耐久性に優れた素材を使用しています。


暑さに負けない“オール通気製法”

すべての素材に通気性の高い無膜ウレタンフォームを採用し、風通しがよく、高温多湿な季節も快適。丸洗いできるので、衛生管理も万全に行えます。

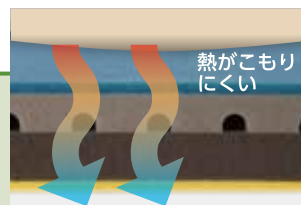

メリー&ハリー®		介護保険 福祉用具貸与対象品目			
セット	タイプ 品番	830 CR-680	900 CR-681	900/SHORT CR-682	900/LONG CR-683
	TAISコード	00206-000079			00206-000128
	価格	78,000円(+税)			94,000円(+税)
	サイズ (幅×長×厚cm)	83×191×9	90×191×9	90×180×9	90×205×9
	重量	6.5Kg	7.0Kg	6.6Kg	7.5Kg
	マットレス 材質	<メリー層・ハリー層>超通気・高弾性ウレタンフォーム <ワッフル層>超通気・高弾性・高耐久ウレタンフォーム <芯材>超通気・高硬度ウレタンフォーム			
専用 カバー	品番	CH-680	CH-681	CH-682	CH-683
	価格 (本体価格)	16,300円(+税)			16,800円(+税)
	カバー材質	ポリエステル100%(吸水速乾・抗菌・消臭)			

ポロシャツと同じ “鹿の子素材”

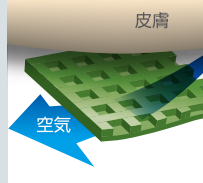

通気性にすぐれ、
さらりとした風合い

通気

吸水速乾

SEK赤ラベル抗菌

消臭

Ag+

※Ag+
銀複合系抗菌剤を
使用しています。

※SEK赤ラベル… MRSA、黄色ぶどう球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎球菌に有効
※消臭… アンモニア、酢酸、メチルメルカプタン、硫化水素などに有効



商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

<https://www.cape.co.jp/>

*介護保険における福祉用具の貸与に関しては、居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

*メリー&ハリーの取り扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

*印刷の関係で実物とは色が違うことがあります。

*本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 **株式会社 ケープ**

本 社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522
E-mail:lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

お問い合わせ先