


リバーシブルタイプのホスピタマットレスが
制菌加工になって生まれ変わりました。

CAPE
Hospita Mattress
830
信
反発

Hospita Mattress
830
信
反発
CAPE

医療機関、介護施設向けにリニューアル

制菌加工^{*1}、清拭タイプの専用カバー

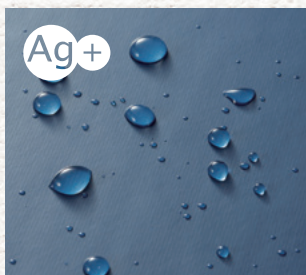

専用カバーは、アルコールや次亜塩素酸ナトリウム^{*2}による清拭消毒にも対応可能。

防水 制菌 伸縮

銀複合系抗菌剤も使用しています。

^{*1} 対応菌種：MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

^{*2} 対応可能な希釈濃度については、(株)ケーブまでお問い合わせください。



ファスナーは大きくL字型に開くので、カバーの交換も簡単です。

優れた耐久性

8万回の繰り返し圧縮残留ひずみ試験^{*3}をクリアした耐久性。

^{*3} 社内品質基準に準ずる

高品質なのに、このお値段

51,000円(＋税)

^{*}まとめ買いの場合は、さらにお得な価格をご用意しておりますので、ご相談ください。

ホスピタマットレス

Hospita Mattress

830/900タイプ

交換タイプ




体圧分散式ベッドマットレス／特殊寝台付属品

低反発 と 高反発 が選べる

リバーシブル構造

柔らかい「低反発メモリーフォーム」と安定性のある「高反発バランスフォーム」の2層構造。

療養者様のお好みに合わせてお使いいただけます。

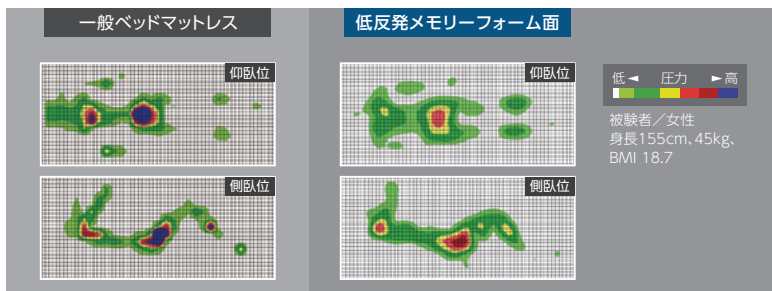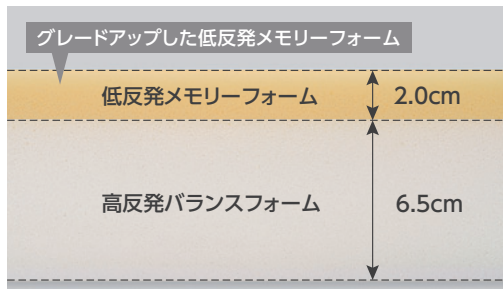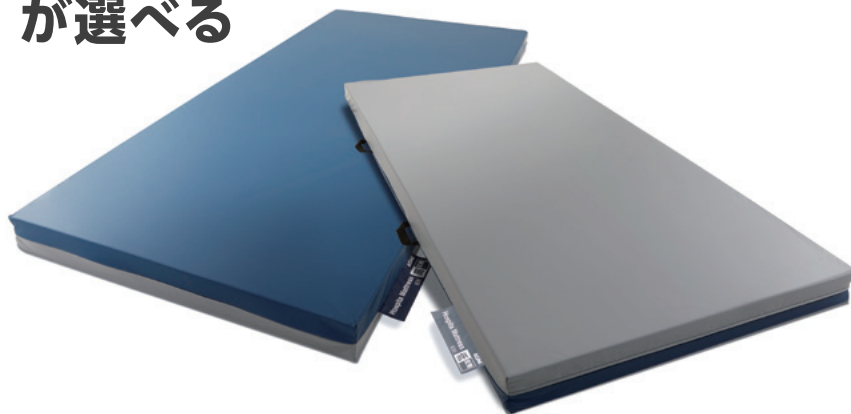

低反発メモリーフォームの特長

じんわりと身体に馴染み、圧迫感を軽減します。

- こんな方に
- 体圧分散の必要な方
 - 柔らかめのマットレスがお好みの方

高反発バランスフォームの特長

適度な弾力で、身体を安定して支持します。

- こんな方に
- リハビリなどで安定感が必要な方
 - 硬めのマットレスがお好みの方

分かりやすいタグ付き



持ち運びに便利なハンドル付き

カバーは持ち運び便利なハンドル付き。ひとりでも簡単に持ち運びができます。

約800g
軽量化*

*旧機種と比較した結果

ホスピタマットレス仕様		介護保険 福祉用具貸与対象品目(特殊寝台付属品) TAISコード 00206-000069 (各サイズ共通)	
セット	セット価格51,000円(+税)		
タイプ/品番	830/CR-286	900/CR-287	
サイズ	幅83×長191×厚8.5(cm)	幅90×長191×厚8.5(cm)	
重量	6.0kg	6.5kg	
材質	低反発面/低反発ウレタンフォーム(2.0cm) 高反発面/高反発ウレタンフォーム(6.5cm)		
専用カバー	単品価格20,900円(+税) ※カバーのみ購入価格		
品番	CH-288	CH-289	
材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布 カラー/高反発面:ネイビー、低反発面:グレー 防水・制菌・伸縮		

*ウレタンフォームの永久歪み(ヘタリ)について
ウレタンフォームは経年劣化します。常時圧迫を受けていると元の容積に戻らなくなる、いわゆる永久歪み(ヘタリ)が起こります。永久歪み(ヘタリ)が一部でも見られた場合は、当初の寝心地感と異なる恐れがありますので、ご注意ください。

*ホスピタマットレスの取り扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
*印刷の関係で実物とは色が違うことがあります。
*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 株式会社 ケープ

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522
E-mail:lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

商品に関する詳しい情報は、
ケープのホームページをご覧ください。

<https://www.cape.co.jp/>

お問い合わせ先