


Urethane Foam Mattress
I R I S 2

自立支援対応 薄型ウレタンフォームマットレス





体圧分散と姿勢保持を両立 薄型ウレタンフォームマットレス「アイリス2」。

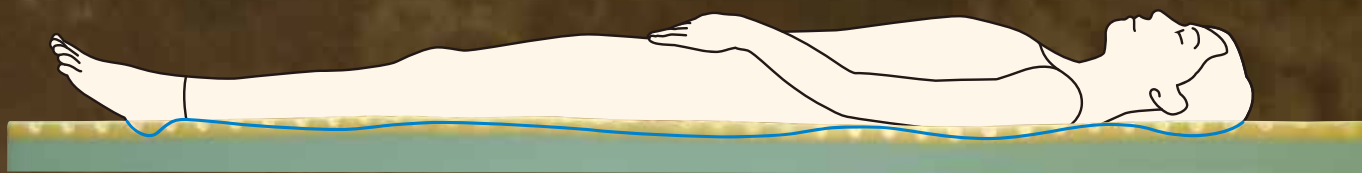

体圧分散効果と安定感を両立させる 二層構造

反発力の異なる素材の組み合わせにより、体圧分散効果と安定感が同時に得られます。

上層-粘弾性フォーム:柔軟に変形し、体圧分散。

下層-高密度フォーム:体圧を吸収し、安定支持。

ウレタンフォームは抗菌加工済み。

フィット層 体圧分散 + ずれ吸収


安定支持層 体圧分散 + 身体保持

可動性とADL拡大の安定体位を助ける 薄さ7.5cm

療養者が身体を動かしても安定する薄さを実現。端座位・ベッドからの立ち上がりも安全に行えます。

ずれや摩擦を軽減する アイリスカット

凸部は四隅がつながり合い、加重の方向に連動して追従。マットレス上で動く際や背上げ時のずれや摩擦を吸収します。

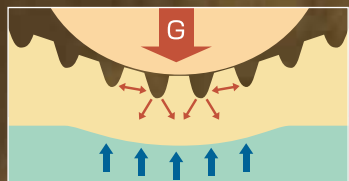

伸縮性に優れ、張力を回避する 防水カバー

カバーには伸縮性に優れた素材を使用し、張力を回避。マットレス自体の体圧分散効果を最大限に発揮します。三方が開き、脱着が容易なファスナー式。



優れた伸縮性

張力を回避



防水・制菌加工

失禁・嘔吐・吐血などによる汚染を対策
制菌加工 / 5菌種
(黄色ぶどう球菌、肺炎桿菌、大腸菌、緑膿菌、MRSA)

アイリス2[®]		介護保険 福祉用具貸与対象品目 TAISコード 00206-000010	
セット価格: 33,000円 (税抜)			
タイプ/品番	標準 CR-277	ワイド CR-278	
専用 マットレス	サイズ	幅83×厚7.5×長191(cm)	幅90×厚7.5×長191(cm)
	重量	4.4kg	4.7kg
	材質	2層構造ウレタンフォーム 抗菌・難燃	
専用カバー (マットレス付属)	単品価格	9,500円 (税抜) ※カバーのみの購入価格	
	品番	CH-250	CH-254
	材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布 制菌・防水	

CAPE LOVING CARE
 褥瘡に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。
<http://www.cape.co.jp/>
 ホームページ

*介護保険における福祉用具の貸与に関しては、居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。
 *アイリス2の取り扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
 *製品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
 *印刷の関係で実物とは色が違うことがあります。
 *本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 株式会社 ケープ

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
 TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522
 E-mail:lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
 TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

お問い合わせ先