

体圧分散式ウレタンフォームマットレス

ソフトナースプラス <上敷きタイプ>

# Soft-nurse-Plus

超通気・高密度低反発ウレタンフォームマットレス

High Density Visco-elastic Foam Series




# 信頼と実績のソフトナースに 新タイプ登場。 通気性と体圧分散性能が向上した 「ソフトナースプラス」




## 薄くて体圧分散性能が高い 高密度低反発ウレタンフォーム

低反発ウレタンフォームがじんわりと柔らかく変形し、広い面積で身体を支えます。厚み4cmの超薄型オーバーレイタイプなので、ベッド上での寝返りや端座位も安定して行うことができます。

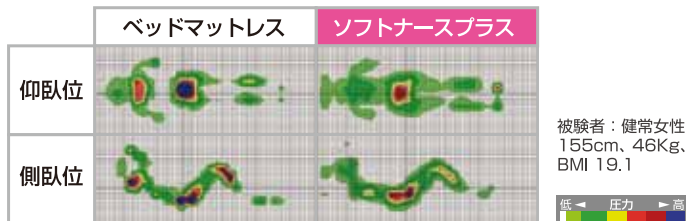

## ムレを軽減し、洗浄可能な 超通気・ウォッシュャブル

オープンセル構造の特殊ウレタンフォームと横スリットが、通気性を確保し快適な寝床内環境を実現します。また、優れた耐久性で、低反発素材でありながら洗浄が可能です。オートクレーブ滅菌にも対応します。

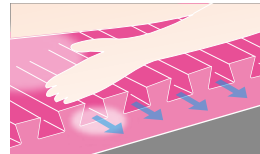


通気性に優れたウォッシュャブルタイプ

オートクレーブOK

洗濯機での丸洗い(95℃まで)  
乾燥機(100℃まで)

## 体圧分散、追従性に優れた 横スリット構造

逆三角形形状スリットが身体をきめ細かく支えます。また、加重の方向に連動して追従し、マットレス上で動く際や頭側挙上時のずれ・摩擦を軽減します。表面は、凹凸感や圧迫感の少ないフラット形状です。

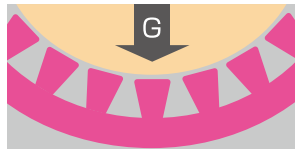

## 用途に応じたサイズに自在に対応する カッティング対応

手術室のオペテーブルや検査台などのサイズに合わせ、カットして使えます。また、局所を安定的に支える際など、裏面をリバーシブルで使用することもできます。



持ち運びやすい  
軽量&コンパクト

## ソフトナースプラス

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 品番/価格  | CR-299 37,000円(税抜)     |
| サイズ/重量 | 幅83×長191×厚4cm / 2.7 Kg |
| 材質     | 高密度低反発ウレタンフォーム         |



商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

<http://www.cape.co.jp/>

\*ソフトナースプラスの取り扱いにあたっては、付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

\*製品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

\*印刷の関係で実物とは色が違うことがあります。

\*本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

## ■輸入元 ラックヘルスケア株式会社

本社 / 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目10番2号  
TEL:06-6244-0636 FAX:06-6244-0836  
URL <http://www.lac-hc.co.jp>

## ■総発売元 株式会社 ケーブ

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522  
E-mail: [lovingcare@cape.co.jp](mailto:lovingcare@cape.co.jp)

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

お問い合わせ先