

E-care Mattress

Examining table

診察台用マットレス



検査・診察時の QOL を向上させる体圧分散マットレス。

**オーダー
メイド** この商品は
ご希望サイズでの
受注生産となります。




画像診断や内視鏡検査など、 長時間同一体位の保持が必要な場面で 患者さまの安楽性を高める 「Eケア® マットレス」




体圧分散に優れ、柔らかく身体を支える 2層構造

低反発と高反発の2層構造で、低反発ウレタンフォームが接触面積を増やし、高反発ウレタンフォームがしっかりと身体を支えます。

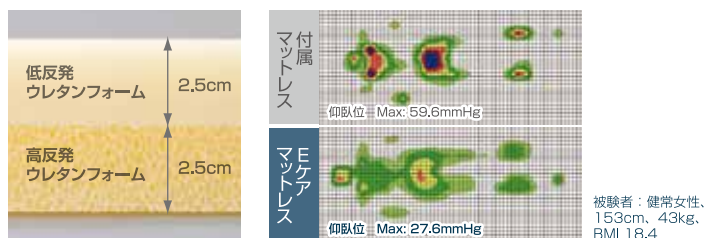

診断の妨げにならない X線透過素材

透過性の高い無膜ウレタンフォームを使用しました。X線診断に影響を与えにくい素材です。

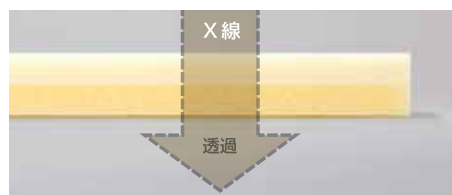

診察台に合わせた オーダーメイド

タイプ・形状の異なる診察台にジャストフィットするように、サイズ、形状ともにオーダーメイドで承ります。また、固定のためのマジックテープ®を取り付ける(料金は別途)ことも可能です。

長方形タイプ



特殊タイプ (例)



その他形状にも対応いたします。別途お問い合わせください。

移乗時の動きを安定させる 厚さ5cm

高反発ウレタンフォームがしっかりと身体を支えるため、診察台への移乗も安定して、安全に行うことができます。



安定した移乗を実現する高反発ウレタンフォーム

清拭によるお手入れが可能な 防水カバー

上面は、失禁などによる汚染を防ぐ防水・抗菌加工が施され、伸縮性も備えています。下面はすべり止め加工で診察台上でのすべりを防ぎます。



はっ水加工された専用カバー表面

Eケア® マットレス

品番	CR-249
サイズ 価格	幅93cm以下、長194cm以下 : 80,000円 (税抜) 幅93cm以下、長194cm超240cm以下 : 95,000円 (税抜) 幅93cm以下、長240cm超 : オープン価格 特殊形状は別途ご相談ください。厚みは全て5cm
材質	マットレス : 無膜ウレタンフォーム 専用カバー : 上面/ポリエステル100%ウレタンフィルム加工布(防水・抗菌・伸縮・はっ水加工) 下面/ナイロン(すべり止め加工)

専用カバーのみ：CH-239
幅93cm以下、長194cm以下(長方形タイプ) 30,000円(税抜)
幅93cm以下、長194cm超240cm以下(長方形タイプ) 40,000円(税抜)
幅93cm以下、長240cm超(長方形タイプ) オープン価格



商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

<http://www.cape.co.jp/>

*Eケアマットレスの取り扱いにあたっては、付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
*製品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
*印刷の関係で実物とは色が違うことがあります。
*本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■ 販売元 株式会社 ケープ

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522
E-mail:lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

お問い合わせ先