


# Pedicare Mattress

小児用マットレス ペディケアマットレス





リバーシブル

30kg未満の体重の軽い患児に最適な「沈み込み」と「順応性」を両立させた小児専用マットレス。

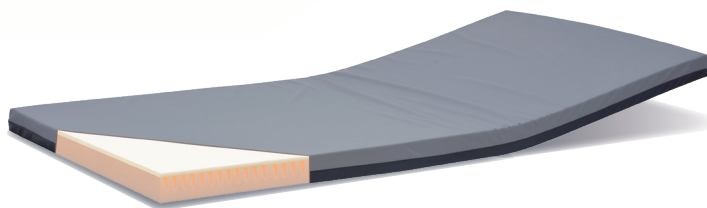


## 軽い身体を沈み込ませ、体圧分散させる 2層構造

5~20kg面には軽い身体でも沈み込み、接触面積を増やす低反発ウレタンフォーム。20~30kg面には細かく深いプロファイル加工で追従性に優れたウレタンフォームの2層構造です。

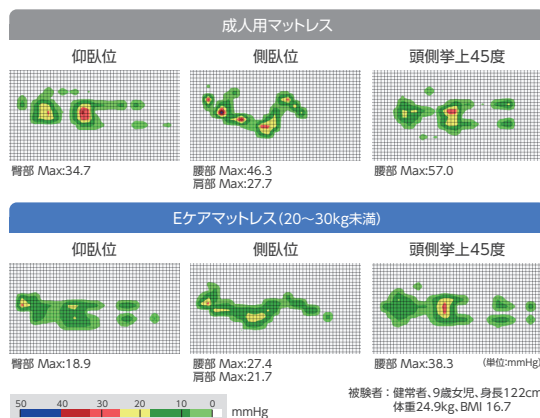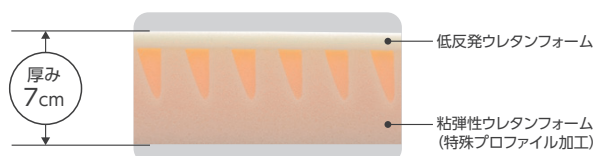

## 体重別を選ぶ リバーシブル構造

5~20kg未満と20~30kg未満で使い分けられるリバーシブル構造。1枚のマットレスで、患児の成長に合わせて、幅広く対応できます。

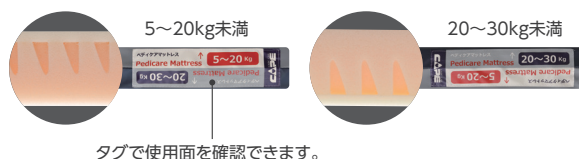


### ご使用方法

- ・45度以上の頭側上りが想定される場合は、上敷マットレスとしてご使用ください。
- ・45度以上の頭側上りが想定されない場合は、交換マットレスとしてご使用ください。

## お手入れ簡単な清拭タイプ 専用カバー

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。
- 制菌加工  
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

防水 制菌 伸縮 機能

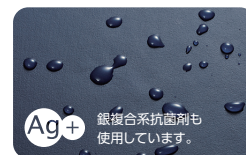

## ペディケアマットレス 小児用マットレス

品番	CR-229		
サイズ 価格 オーダー メイド	(上限)幅95×長195cm 厚みは全て7cm マットレス・専用カバーセット価格 : 68,000円(+税) 専用カバーのみ価格(品番/CH-229) : 29,700円(+税) *小児・学童用ベッド・一般ベッド・開放型保育器などに対応	材質	専用カバー : ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮) マットレス : 5~20kg面 / 低反発ウレタンフォーム 20~30kg面 / 粘弾性ウレタンフォーム (特殊プロファイル加工)

この商品をご要望サイズでの受注生産となります。各種小児用ベッドサイズにあわせたオーダーメイドも承ります。オーダーメイドに関する詳しい情報はWEBサイトをご参照ください。





#### 安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

\*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

\*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。

\*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。

\*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

### ■販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL: 046-821-5511(代) FAX: 046-821-5522  
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先