


30度側臥位のポジショニングをサポートする補助パッド。
超通気ウレタンフォームでムレを解消。



超通気ウレタンフォーム


超通気ウレタンで、いつも爽やかムレ対策。
3次元網目構造で、従来品に比べて30%
湿度を減少。

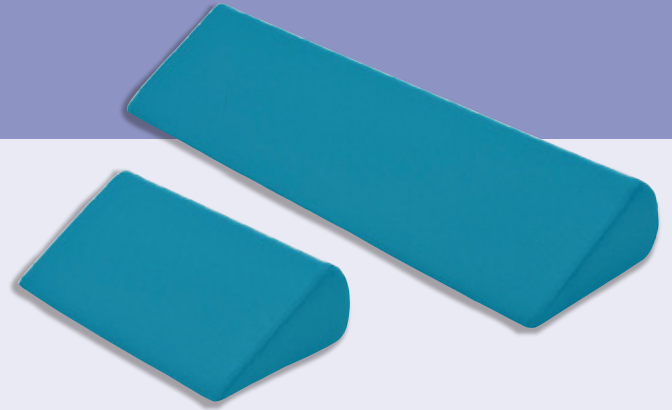

■ 超通気ウレタン素材



■ 時間の経過に対する湿度の変化

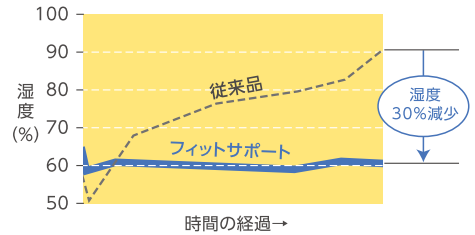


丸洗い可能でいつも清潔

丸洗いできる素材なので、汚れても洗濯でき、いつも清潔に使うことができます。 ※詳しくは品質表示ラベル(洗濯ラベル)をご参照ください。




側臥位30度ルール(骨突出のない方)

30度側臥位は骨突出のない臀筋で圧力を受けることができます。
広い面積で身体のポジションを保ちましょう!

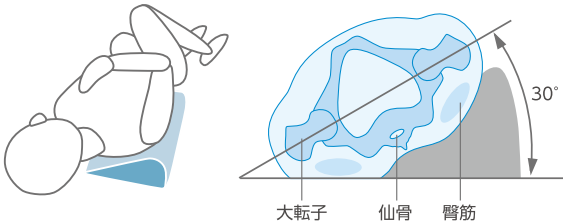

下記のような方は、30度側臥位が必ずしも有効ではありませんので、
ご注意ください。

- るいそが激しく、臀筋が萎縮し仙骨部の骨突出が著明な方
- 30度側臥位が安楽な姿勢でなく、自力で好みの姿勢に戻ってしまう方(得手体位のある方)
- 30度側臥位でズレしまう方

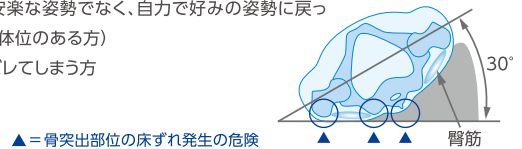

	800タイプ	400タイプ
タイプ		
品番	CK-397	CK-396
TAISコード	00206-000060	00206-000059
価格	8,800円(+税)	5,400円(+税)
サイズ(cm)	幅80×奥行24×厚12	幅40×奥行24×厚12
材質(カバー)	ポリエステル(ドライメッシュ)(吸湿速乾)	
材質(中身)	超通気高弾性ポリウレタンフォーム	
洗濯方法	中身・カバーとも:家庭用洗濯機(40℃以下弱)、乾燥機 × ※漂白剤、柔軟剤はご使用いただけません。	

専用カバー

タイプ	800タイプ	400タイプ
価格	3,400円(+税)	2,600円(+税)

専用カバー

吸湿速乾のドライメッシュ生地
(洗濯できます)





安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

介護保険における福祉用具の貸与に関しては、 居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

- * 商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- * 印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
- * 記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
- * メディ・ウォッシュは、一般医療機器の「特定保守管理医療器」に属します。
お取り扱いいただく場合には、高度管理医療器販売業・貸与業許可が必要です。
- * 本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 **株式会社 ケープ**

本 社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL : 046-821-5511(代) FAX : 046-821-5522
E-mail : lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL : 092-431-0885 FAX : 092-431-0889

お問い合わせ先