

# Duo Gel Cushion

デュオジェルクッション

介護保険 福祉用具貸与対象品目 / 車いす付属品 貸与マーク取得済み




長時間、車いすに座られる方に。

『体圧分散』と『姿勢保持』、ズレへの対応を実現した高機能クッション。


## クッションの構造・特長

高密度ウレタンフォームでしっかりホールド  
体重をしっかり受け、テーパ形状で前ずれを防ぎます。

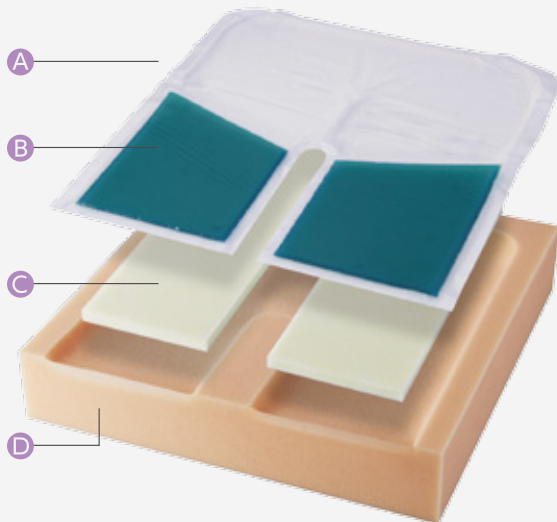


- A** 瞬間的なずれ・摩擦を軽減  
流動シリコンジェル
- B** 大腿部を安定サポート  
シリコンジェルTRUGEL
- C** 体圧分散  
低反発ウレタンフォーム
- D** しっかりホールド  
高密度ウレタンフォーム

### 坐骨結節部への圧力集中を分散する『U字構造』

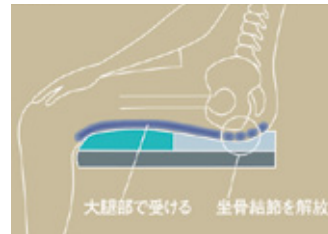

左右の大腿部の裏側で体重を受けるU字構造により、坐骨結節部に集中する圧力を分散します。左右の体圧分布に偏りがなく、バランス良く身体を支えて、優れた体圧分散効果を発揮します。

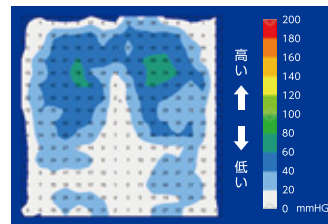

### 専用カバー



専用カバーの表地はムレ対策の透湿性生地、裏地は汚れの浸入を防ぐ防水加工。さらにインナーカバー（中袋）が中身のウレタンへの臭いや汚れの浸透を防ぎます。専用カバーは、伸縮性に優れた素材で、内部のジェルやウレタンフォーム本来の効果を発揮させます。

## 商品仕様

品番	CK-395(42×42)/CK-385(40×40)
価格	27,000円(税抜) クッション・専用カバーセット ※専用カバーのみ購入価格:各5,300円(税抜) (品番 CH-295/CK-395用、品番 CH-285/CK-385用)
サイズ	CK-395/幅42×奥行42×厚7.5cm CK-385/幅40×奥行40×厚7.5cm
重量	CK-395/1.9kg、CK-385/1.7kg
TAISコード	00206-000048

材質	●専用カバー 上面/表地 ポリエステル100%(伸縮) 裏地 ポリウレタンフィルム(防水) 下面/ターポリン布(防水・防炎・すべり止め加工)
	●中袋 ウレタンフィルム
	●中身 シリコンジェル、ウレタンフォーム (上/低反発ウレタンフォーム、下/高密度ウレタンフォーム)

## サイズ





#### 安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<http://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

#### 介護保険における福祉用具の貸与に関しては、 居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

\*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

\*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。

\*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。

\*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

#### ■製造販売元 **株式会社 ケープ**

本 社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL: 046-821-5511(代) FAX: 046-821-5522  
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先