

Duo Gel Cushion

デュオジェルクッション

介護保険 福祉用具貸与対象品目 / 車いす付属品 貸与マーク取得済み




長時間、車いすに座られる方に。

『体圧分散』と『姿勢保持』、ズレへの対応を実現した高性能クッション。


クッションの構造・特長

高密度ウレタンフォームでしっかりホールド
体重をしっかり受け、テーパ形状で前ずれを
防ぎます。

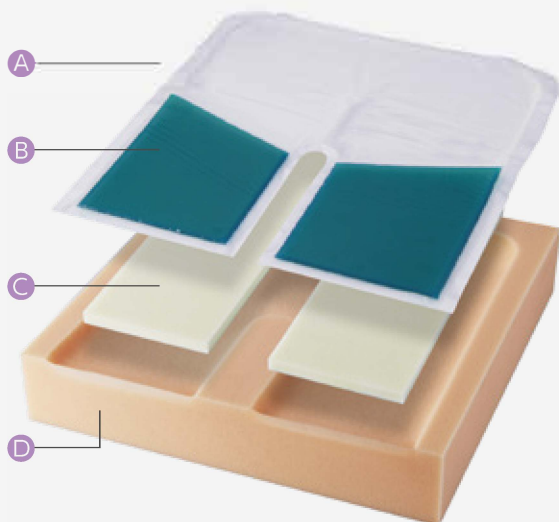


- A** 瞬間的なずれ・摩擦を軽減
流動シリコンジェル
- B** 大腿部を安定サポート
シリコンジェルTRUGEL
- C** 体圧分散
低反発ウレタンフォーム
- D** しっかりホールド
高密度ウレタンフォーム

坐骨結節部への圧力集中を分散する「U字構造」

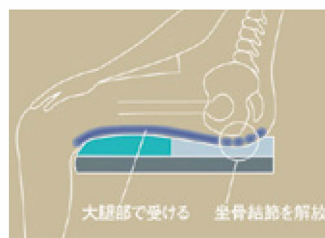

左右の大腿部の裏側で体重を受けるU字構造により、坐骨結節部に集中する圧力を分散します。左右の体圧分布に偏りがなく、バランス良く身体を支えて、優れた体圧分散効果を発揮します。

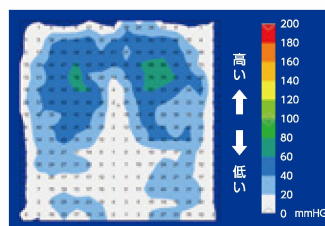

専用カバー




専用カバーの表地はムレ対策の透湿性生地、裏地は汚れの浸入を防ぐ防水加工。さらにインナーカバー（中袋）が中身のウレタンへの臭いや汚れの浸透を防ぎます。専用カバーは、伸縮性に優れた素材で、内部のジェルやウレタンフォーム本来の効果を発揮させます。

商品仕様

品番	CK-395 (42 × 42) / CK-385 (40 × 40)
価格	39,000円(税抜) クッション・専用カバーセット ※専用カバーのみ購入価格: 各6,500円(税抜) (品番 CH-295 / CK-395用、品番 CH-285 / CK-385用)
サイズ	CK-395 / 幅42 × 奥行42 × 厚7.5cm CK-385 / 幅40 × 奥行40 × 厚7.5cm
重量	CK-395 / 1.9kg、CK-385 / 1.7kg
TAISコード	00206-000048

材質	●専用カバー 上面 / 表地 ポリエステル100% (伸縮) 裏地 ポリウレタンフィルム (防水) 下面 / ターポリン布 (防水・防災・すべり止め加工)
	●中袋 ウレタンフィルム
	●中身 シリコンジェル、ウレタンフォーム (上 / 低反発ウレタンフォーム、下 / 高密度ウレタンフォーム)

サイズ

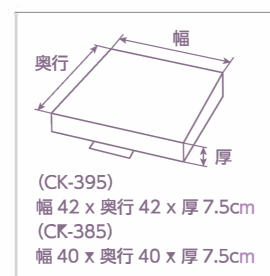



安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

介護保険における福祉用具の貸与に関しては、 居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

- * 商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- * 印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
- * 記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
- * 本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 **株式会社 ケープ**

本 社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL: 046-821-5511 (代) FAX: 046-821-5522
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先