

Bespo Gel Cushion[®]


ベスポジェルクッション

介護保険 福祉用具貸与対象品目/車いす付属品 貸与マーク取得済み




『足こぎサポート』と『前ずれ防止』の1枚二役、幅広い療養者にフィットするクッション。

■ クッションの構造・特長

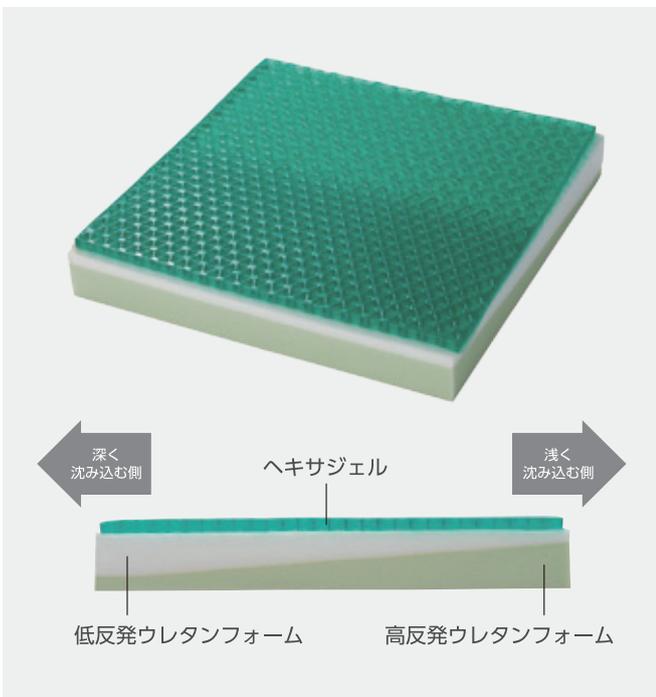

■ ずれへの追従性と体圧分散性能に優れたヘキサジェル

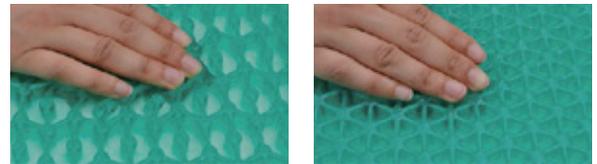

■ 深く沈み込む側
目の粗いジェルと低反発ウレタンフォームにより沈み込みやすい構造になっています。

■ 浅く沈み込む側
目の細かいジェルと高反発ウレタンフォームにより沈み込みを抑える構造になっています。

■ クッションを前後するだけで用途が変わる『2WAY構造』




■ 用途1/足こぎサポート
大腿部が沈み、膝が下がることで、足底が床にしっかり密着。力が伝わりやすくなり、足こぎがしやすくなります。

■ 用途2/前ずれ防止
臀部が沈み込むことで、前ずれを防止します。

■ 専用カバー

専用カバーは伸縮性のある素材を使用。表地は爽やかメッシュ生地、裏地は汚れの浸入を防ぐ防水加工。さらにインナーカバー（中袋）が、中身のウレタンへの臭いや汚れの浸透を防ぎます。

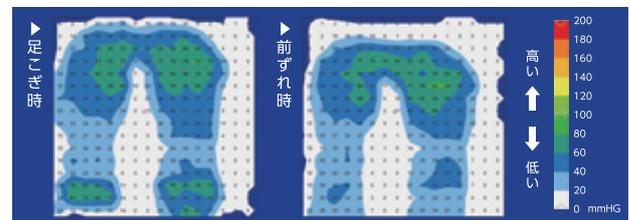

■ 商品仕様

品番	CK-375
価格	22,000円(税抜) クッション・専用カバーセット ※専用カバーのみ購入価格(品番 CH-370): 5,300円(税抜)
サイズ	幅40 × 奥行40 × 厚6.5cm
重量	1.9kg
TAISコード	00206-000072

材質	● 専用カバー 上面/表地 ポリエステル100% (吸水速乾・制菌・伸縮) 裏地 ポリウレタンフィルム(防水) 下面/ターボリン布(防水・すべり止め加工)
	● 中袋 ウレタンフィルム
	● 中身 ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム (上/低反発ウレタンフォーム、下/高反発ウレタンフォーム)

■ サイズ





安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<http://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

介護保険における福祉用具の貸与に関しては、 居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。

*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。

*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 **株式会社 ケープ**

本 社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL: 046-821-5511(代) FAX: 046-821-5522
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先