

# MY Cushion

マイクッション

阪和住吉総合病院 副院長 美濃良夫先生 共同開発  
介護保険 福祉用具貸与対象品目/車いす付属品 貸与マーク取得済み




足に力が伝わりやすいバックアップ構造で、『足こぎがしやすく』、臀部に掛かる『体圧を分散』。リーズナブルな価格の「マイクッション」。

## クッションの構造・特長



- A 体圧分散**  
粘弾性ウレタンフォーム
- B 安定保持**  
高反発ウレタンフォーム
- C 安定&フィッティング**  
硬度粘弾性ウレタンフォーム


### 臀部を高く保ち、大腿部でしっかり体重を受ける『バックアップ構造』

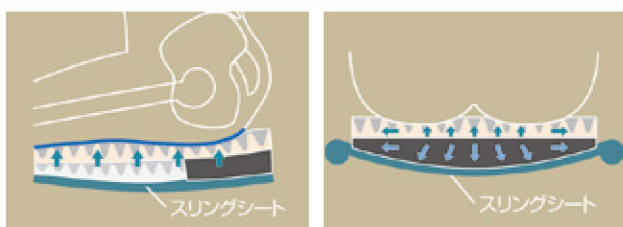

#### バックアップ構造

- 大腿部でしっかり体重を受け、臀部に掛かる体圧が減少。
- 骨盤の後傾を防ぎ、力が伝わりやすくなり、足こぎがしやすくなります。
- シートのたわみによる外力を吸収。

### 体圧分散と安定保持を両立させる『二層構造』

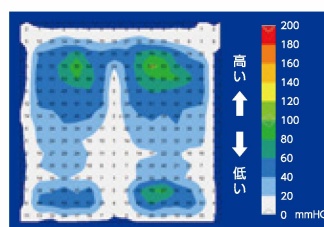

大腿下部を広く支える前面は粘弾性フォームと高反発フォームの二層構造。凹凸二層構造が体圧分散効果を高め、さらには車いす上のせん断力も吸収します。

### 専用カバー

専用カバーは伸縮性のある素材を使用。汚れの浸入を防ぐ防水加工。抗菌加工済み。吊り下げネームタグ付きで、フックに掛けられ管理がしやすく便利です。




### 商品仕様

品番	CK-398
価格	8,000円(税抜) クッション・専用カバーセット ※専用カバーのみ購入価格(品番 CH-281):3,500円(税抜)
サイズ	幅39×奥行39×厚8(前側5)cm
重量	0.5kg
TAISコード	00206-000051

材質	●専用カバー 上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水、抗菌、伸縮) 下面/ナイロン(すべり止め加工)
	●中身 ウレタンフォーム

### サイズ

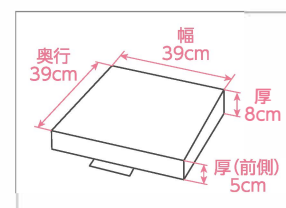



#### 安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

#### 介護保険における福祉用具の貸与に関しては、 居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

- \* 商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- \* 印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
- \* 記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
- \* 本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

### ■製造販売元 **株式会社 ケープ**

本 社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL: 046-821-5511 (代) FAX: 046-821-5522  
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先