

# Gel-T Cushion

Gel-Tクッション

介護保険 福祉用具貸与対象品目/車いす付属品 貸与マーク取得済み



流動性のジェルが『瞬間的なずれ』に対応。  
車いす上で可動する機会の多い方に最適なクッション。

## ■ クッションの構造・特長

サンドウィッチ構造により、底づきやひんやり感がありません。



### A 体圧分散

高弾性・高密度ウレタンフォーム


### B 瞬間的なずれ・摩擦を軽減

流動性ジェル

### ■ 3ブロックに分かれたジェルパッドが瞬間的なずれや摩擦、圧力集中を軽減



上下のウレタンフォームに挟まれたジェルパッドの中は、流動性ジェル素材。

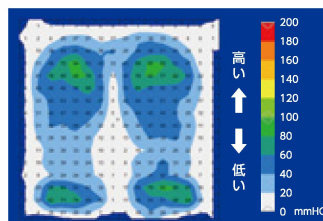


### ■ 専用カバー

専用カバー裏地は汚れの浸入を防ぐ防水加工。




## ■ 商品仕様

品番	CK-346
価格	21,000円(税抜) クッション・専用カバーセット ※専用カバーのみ購入価格：6,500円(税抜)
サイズ	幅40 × 奥行40 × 厚さ5cm
重量	2.45kg
TAISコード	00206-000006

材質	●専用カバー 上面/ナイロン100%(防水・抗菌) 下面/ポリ塩化ビニール100% (防水・抗菌・難燃・すべり止め加工)
	●中身 ウレタンフォーム(抗菌・難燃)、 流動性ジェル(ナトリウムアクリル樹脂) 生産国 アメリカ合衆国 

## ■ サイズ

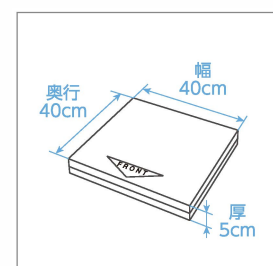



#### 安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

#### 介護保険における福祉用具の貸与に関しては、 居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

- \* 商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- \* 印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
- \* 記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
- \* 本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

#### ■製造販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL: 046-821-5511 (代) FAX: 046-821-5522  
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先