


# CAPE

## ケープ 専門科目用マットレス カタログ

Eケアマットレス／Nケアマットレス／ペディケアマットレス／  
ケープサージカルシリーズ

Mattress for specialized subject

# #03

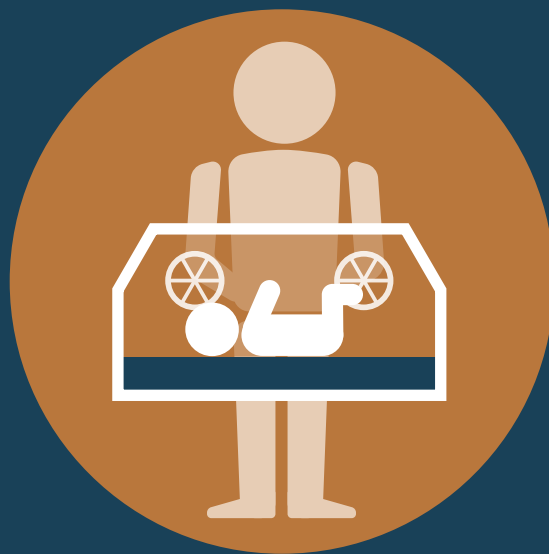

LOVING CARE  
**CAPE**

ゼロ褥瘡をめざして

# 商品ラインナップ

## ケープ 専門科目用マットレス


診察用、手術用から、新生児・小児用など、多岐にわたる診療科目の床ずれ対策に最適な高性能専門科目用マットレスとクッションを取り揃えました。  
各種ご要望のサイズにあわせ、それぞれ1枚からオーダーメイドが可能です。

### E-care Mattress

診察台用マットレス Eケアマットレス

X線透過素材

- 放射線
- MRI
- 心臓カテーテル
- 内視鏡
- 診察台
- ストレッチャー etc...

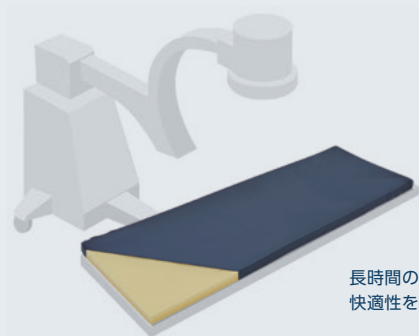

長時間の同一体位が必要な検査や処置に  
快適性を高める体圧分散式マットレス

### N Care Mattress

保育器用マットレス Nケアマットレス

特殊プロファイル




5,000g未満の新生児をやさしく包む  
保育器・新生児ベッド専用マットレス

### Pedicare Mattress

小児用マットレス ペディケアマットレス


リバーシブル

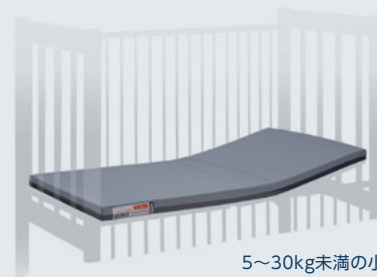

5~30kg未満の小児専用マットレス

### CAPE Surgical Series

手術用体圧分散用具 ケープサージカルシリーズ

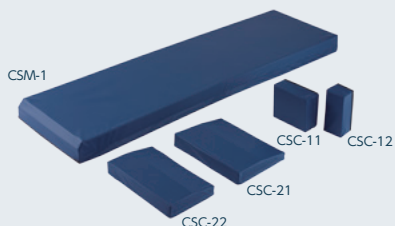

CSM-1


長時間のパーベンチ体位の手術のために開発されたマットレス

CSC-11/CSC-12

側部支持器による体位固定に

CSC-21/CSC-22

腋窩用クッション  
胸郭から腰までを広くサポート

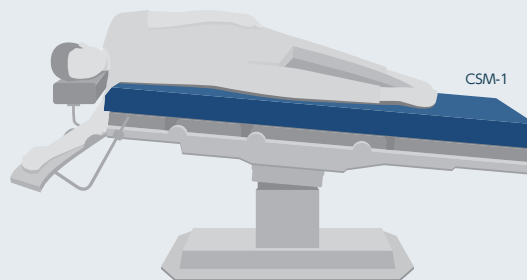


# E-care Mattress

診察台用マットレス Eケアマットレス

X線透過素材



## 放射線・MRI・心臓カテーテル・内視鏡 他

画像診断や内視鏡検査など、  
長時間の同一体位の保持が必要な患者様に。  
体圧を分散し、快適性を高める診察台用の  
体圧分散式マットレス。

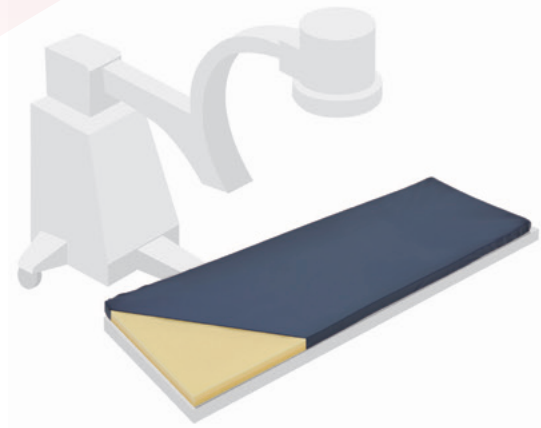


### 体圧分散に優れ、柔らかく身体を支える 2層構造

低反発と高反発の2層構造で、低反発ウレタンフォームが接触面積を増やし、  
高反発ウレタンフォームがしっかりと身体を支えます。

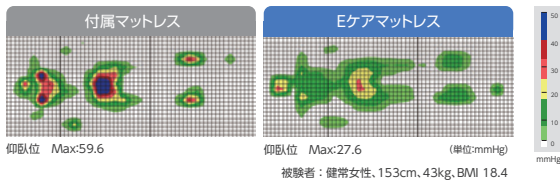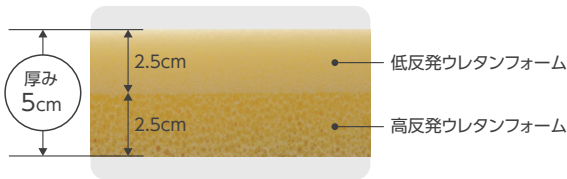

### 診断の妨げにならない X線透過素材

透過性の高い無膜ウレタンフォームを使用しました。画像診断に影響を与えない素材です。

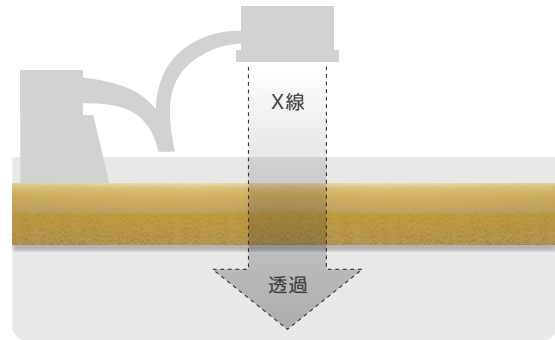

### 診察台に合わせた オーダーメイド

タイプ・形状の異なる診察台にジャストフィットするように、サイズ、形状ともに  
オーダーメイドで承ります。また、固定のためのマジックテープ®を取り付ける  
(料金は別途)ことも可能です。



その他形状にも対応いたします。詳細はWEBサイトをご参照ください。

### お手入れ簡単な清拭タイプ 専用カバー

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。
- 制菌加工  
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

防水 制菌 伸縮 機能



## Eケアマットレス 診察台用マットレス

品番	CR-249		
サイズ 価格	長方形 タイプ	幅93cm以下、長194cm以下	88,000円(+税)
		幅93cm以下、長194cm超240cm以下	104,500円(+税)
オーダー メイド		幅93cm以下、長240cm超	オープン価格
		特殊形状は別途ご相談ください。厚みは全て5cm	
材質	専用カバー： 上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮) 下面/ナイロン(すべり止め加工) マットレス： 無膜ウレタンフォーム		

- 専用カバーのみの価格：CH-239 幅93cm以下、長194cm以下(長方形タイプ) 37,400円(+税)  
幅93cm以下、長194cm超240cm以下(長方形タイプ) 49,500円(+税)  
幅93cm以下、長240cm超(長方形タイプ) オープン価格

この商品をご要望サイズでの受注生産となります。各種診察台ベッドサイズにあわせたオーダーメイドも承ります。オーダーメイドに関する詳しい情報はWEBサイトをご参照ください。



専門分野

小児分野



手術分野

# N-care Mattress

保育器用マットレス Nケアマットレス

特殊プロファイル

新生児の繊細でやわらかな肌を  
床ずれから守りたい。  
そんな願いから生まれた新生児専用マットレス。

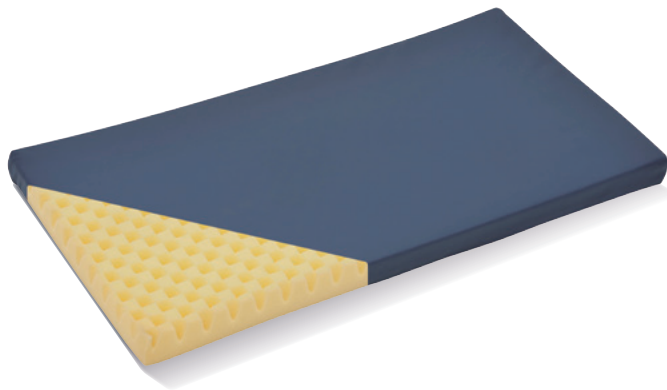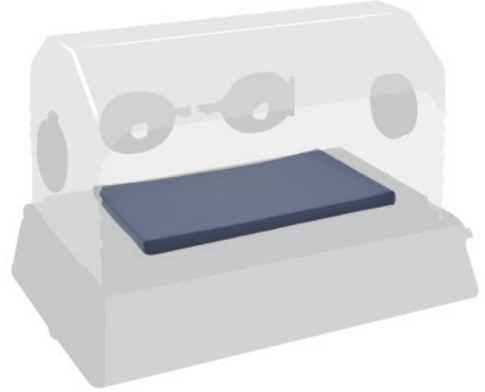

## ずれや摩擦を吸収 新生児の皮膚を守るプロファイルカット


とても小さな新生児の身体と皮膚に合わせた細かい特殊プロファイルカット。新生児の最も接触圧力の高い頭部の体圧分散ケアと全身の体圧を分散します。材質は、新生児の動きを損なわない粘弾性ポリウレタンフォームを使用。体重5,000gまでの新生児にご利用いただけます。



## お手入れ簡単な清拭タイプ 専用カバー

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。
- 制菌加工  
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

防水 制菌 伸縮 機能

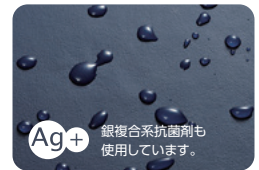

## Nケアマットレス 保育器用マットレス

品番	CR-219		
サイズ 価格 オーダー メイド	幅32×長62×厚3.5cm (重量:250g) : 22,000円(+税) ※受注生産となります	材質	専用カバー : ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮) マットレス : 粘弾性ウレタンフォーム (特殊プロファイル加工)

この商品をご要望サイズでの受注生産となります。基本サイズの他に各種保育器サイズにあわせたオーダーメイドも承ります。オーダーメイドに関する詳しい情報はWEBサイトをご参照ください。



専門分野

小児分野

手術分野

# Pedicare Mattress

小児用マットレス ペディケアマットレス




リバーシブル

30kg未満の体重の軽い患児に最適な「沈み込み」と「順応性」を両立させた小児専用マットレス。




## 軽い身体を沈み込ませ、体圧分散させる 2層構造

5~20kg面には軽い身体でも沈み込み、接触面積を増やす低反発ウレタンフォーム。20~30kg面には細かく深いプロファイル加工で追従性に優れたウレタンフォームの2層構造です。

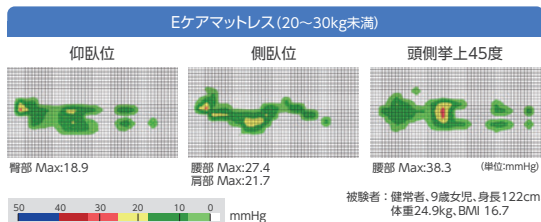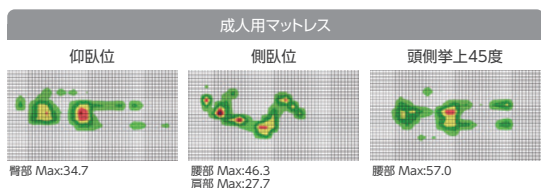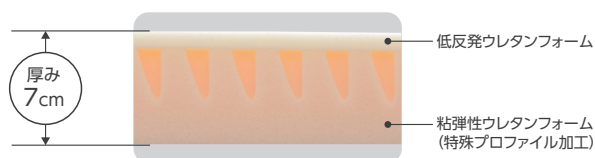

## 体重別を選ぶ リバーシブル構造

5~20kg未満と20~30kg未満で使い分けられるリバーシブル構造。1枚のマットレスで、患児の成長に合わせて、幅広く対応できます。

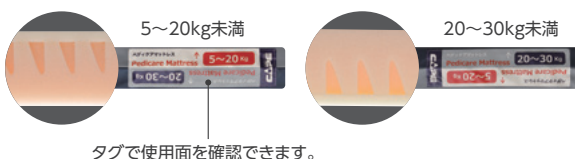

### ご使用方法

- ・45度以上の頭側上りが想定される場合は、上敷マットレスとしてご使用ください。
- ・45度以上の頭側上りが想定されない場合は、交換マットレスとしてご使用ください。

## お手入れ簡単な清拭タイプ 専用カバー

- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。
- 制菌加工  
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

防水 制菌 伸縮 機能



## ペディケアマットレス 小児用マットレス

品番	CR-229		
サイズ	(上限)幅95×長195cm 厚みは全て7cm		
価格	マットレス・専用カバーセット価格 : 68,000円(+税)		
オーダーメイド	専用カバーのみ価格(品番/CH-229) : 29,700円(+税)		
		材質	専用カバー : ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮) マットレス : 5~20kg面 / 低反発ウレタンフォーム 20~30kg面 / 粘弾性ウレタンフォーム(特殊プロファイル加工)

この商品をご要望サイズでの受注生産となります。各種小児用ベッドサイズにあわせたオーダーメイドも承ります。オーダーメイドに関する詳しい情報はWEBサイトをご参照ください。



専門分野

小児分野

手術分野


# CAPE Surgical Series

手術用体圧分散用具 ケープサージカルシリーズ

側臥位のような体圧の集中する体位でも、安心して使える手術専用の体圧分散用具。

変形するけど、つぶれない安心の素材と構造。

複雑になりがちな体位固定を、よりシンプルにサポートするケープサージカルシリーズ。

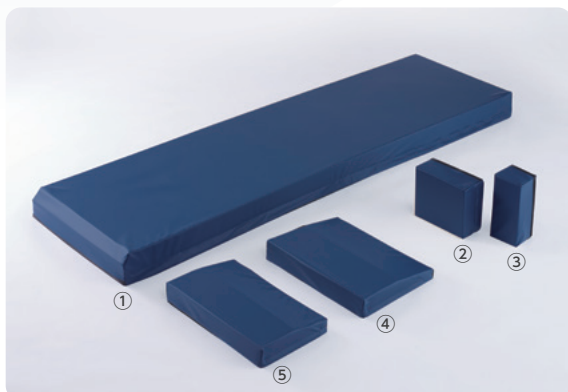

① CSM-1 ② CSC-11 ③ CSC-12 ④ CSC-21 ⑤ CSC-22


## ◎清拭消毒に対応する専用カバー



- 消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
- 制菌加工  
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

防水 制菌 伸縮 機能

## ◎液体が侵入しにくい防水仕様

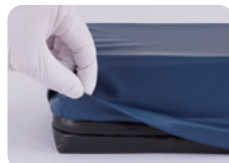

止水ファスナーをカバーするフラップ構造





止水ファスナー

## CSM-1 パークベンチ体位用マットレス

長時間のパークベンチ体位の手術のために開発されたマットレス。


1枚でも底づきの心配もなく、体圧が集中する特殊体位に適した体圧分散効果。

これからの体位固定方法をよりシンプルに。

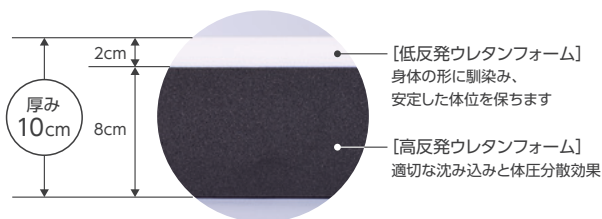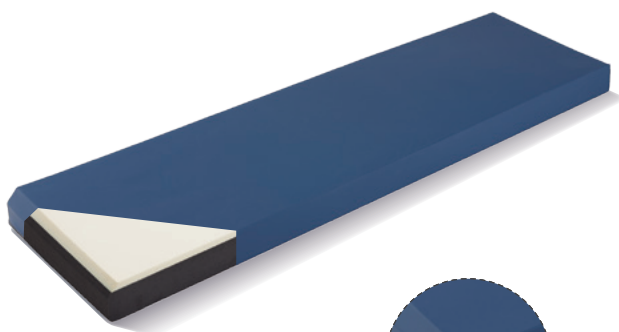


【低反発ウレタンフォーム】  
身体の形に馴染み、  
安定した体位を保ちます

【高反発ウレタンフォーム】  
適切な沈み込みと体圧分散効果

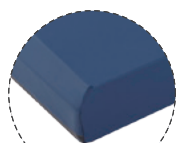

腋窩を圧迫しない  
面取り構造

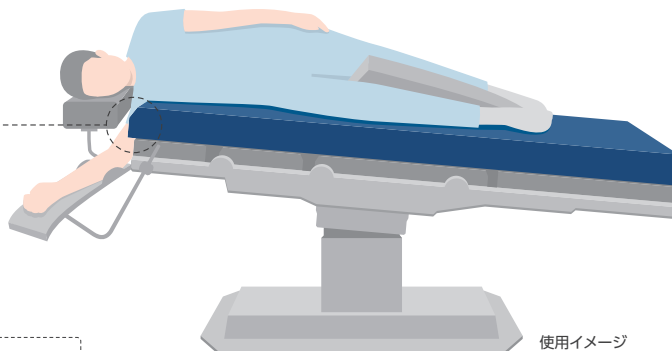


使用イメージ



この商品をご要望サイズでの受注生産となります。  
各種手術台のサイズにあわせたオーダーメイドも承ります。  
オーダーメイドに関する詳しい情報はWEBサイトをご参照ください。



## CSC-11 / CSC-12 体位固定用クッション(側部支持器用)

側部支持器による体位固定に。  
強く締めつけても、つぶれない安心の2層構造。

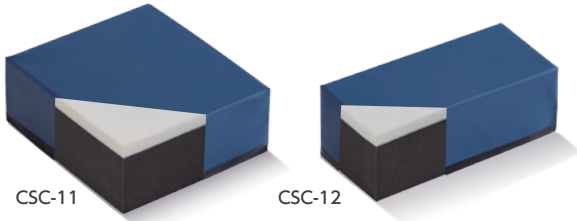

CSC-11


CSC-12

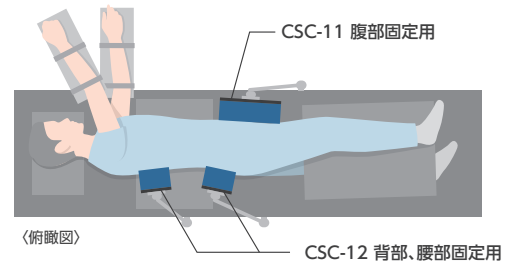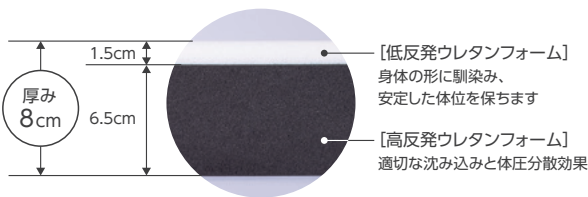

〈俯瞰図〉

CSC-11 腹部固定用

CSC-12 背部、腰部固定用

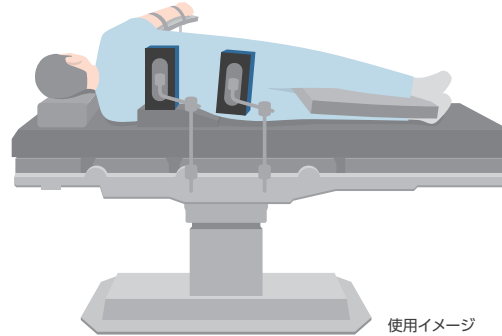


使用イメージ

## CSC-21 / CSC-22 腋窩用クッション



胸郭から腰までを広くサポートする腋窩用クッション。  
平らな面と適度な傾斜で、必要な高さを保ちます。

◎体型にあわせて選べる2サイズ

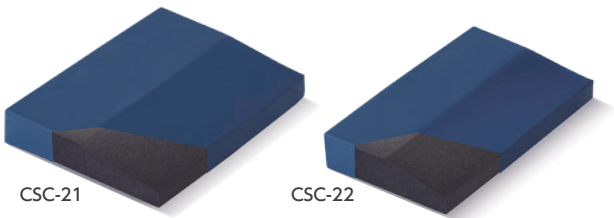

CSC-21

CSC-22

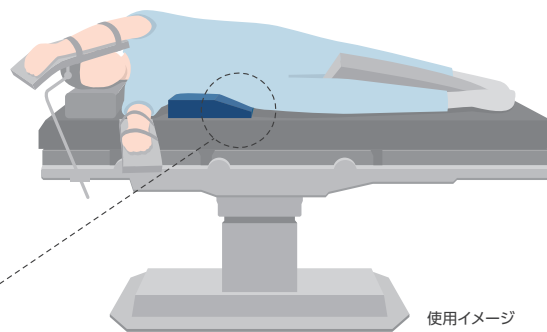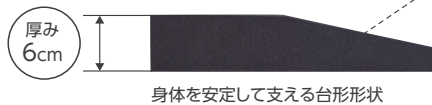

使用イメージ

### ケープサージカルシリーズ 手術用体圧分散用具

品番	CSM-1	CSC-11	CSC-12	CSC-21	CSC-22	●専用カバーのみの価格 CSM-1 40,700円(+税) CSC-11 3,300円(+税) CSC-12 3,000円(+税) CSC-21 5,500円(+税) CSC-22 5,000円(+税)
サイズ(cm)	オーダーメイド	幅20×長18×厚8	幅10×長22×厚8	幅40×長30×厚6	幅40×長24×厚6	
重量(g)	上限: 幅70×長195×厚10	195	130	385	315	
価格	110,000円(+税)	9,000円(+税)	8,000円(+税)	15,000円(+税)	13,000円(+税)	
材質	専用カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮) 中身 1層目：低反発ウレタンフォーム 2層目：高反発ウレタンフォーム			中身：高反発ウレタンフォーム		

CSM-1はご要望サイズでの受注生産となります。

専門分野

小児分野

手術分野

# ケープ 専門科目用マットレス カタログ

## #03



### 安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

\*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

\*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。

\*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。

\*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

### ■販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL: 046-821-5511(代) FAX: 046-821-5522  
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先