

Altone^{Ag+} v2

車いす用クッション アルトネ^{フィット} v2

LOVING CARE
CAPE

ゼロ
褥瘡0をめざして

体圧分散式クッション/
車いす付属品



だれでも正しく
**かんたん
設置**

さっとひと拭き
**いつでも
清潔**


医療現場のニーズに応える、車いす用クッション

1 使い勝手の良い設置方向フリーデザイン

前後左右の向きがないので、迷いません。
向きをローテーションすれば、さらに長持ち。



2 やさしく臀部を支え、体圧を分散する 高密度のウレタンフォーム

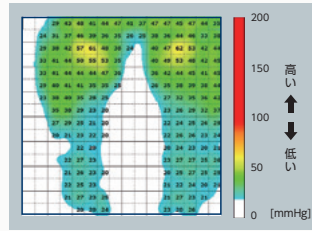

(写真は本品のウレタンフォーム)

優れた耐久性

8万回の繰り返し圧縮試験をクリア。



荷重 × 8万回

3 お手入れ簡単な、防水・清拭タイプのカバー

濡れた時でも、さっとひと拭き。
専用カバーは、消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム液(1,000ppm以下)による清拭消毒にも対応可能。

専用カバーは洗濯もできます。



液体が侵入しにくい “止水ファスナー” “ファスナー隠し”のダブル構造

ファスナーには止水加工を施しています。さらに流れてくる液体が直接ファスナーに伝わらないよう、ファスナー隠しを設けたダブル構造になっています。



カバーは制菌加工 銀複合系抗菌剤も使用しています。




4 標準車いすにも合わせやすい スリム設計



*写真は使用例です。

下面は滑り止め加工

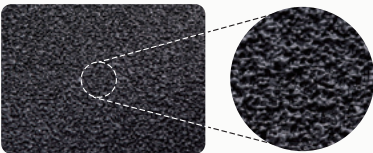

クッションの滑り止めが、車いすの座面をしっかりグリップします。

5 L字型に大きく開くカバー クッションの出し入れが簡単です。



▲商品タグの裏面

商品タグの裏には、収納管理に便利な記名用スペース付き。



商品名	アルトネ v2	価格	オープン価格	
品番	CK-490	TAISコード	00206-000179	
サイズ	幅 39.5cm × 奥行 39.5cm × 厚 5.5cm		重量	0.95kg
材質	<ul style="list-style-type: none"> ●専用カバー <ul style="list-style-type: none"> 上面・側面 / ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮) 下面 / PVCラミネート加工布(防水・すべり止め加工) ●中身 <ul style="list-style-type: none"> ウレタンフォーム 			
専用カバーのみ購入価格	CH-490 / オープン価格			

*介護保険における福祉用具の貸与に関しては、居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。
*本品の取扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

製造販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

商品に関する詳しい情報は
ケープのホームページをご覧ください

<https://www.cape.co.jp/>

お問い合わせ先