

AIR MASTER ES

使い慣れたシンプル機能と安全対策。

お求めやすい価格の

リプレイメントタイプ

新登場。

医療機関・介護施設向け仕様




写真は840タイプ [CR-790]

シンプル機能

ボタン操作は2っだけ。

床ずれ対策の基本「体圧管理」を療養者の体重に合わせてできます。経管栄養、お食事など長時間の背上げでお過ごしの際は、背上げモードのボタンを押すと適切な内圧と動作に自動調整します。

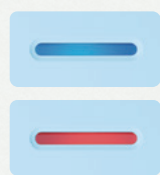

見やすい光サインで正常／異常をお知らせ。



① 体重設定

設定範囲:20~90kg




② 背上げ



安全対策

総厚12cm スリムタイプの 安全設計。

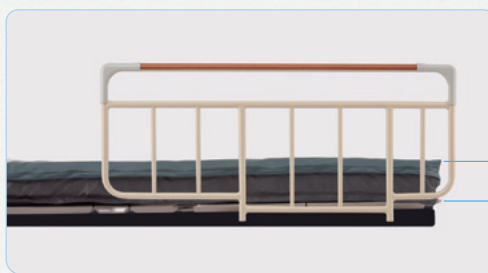

自動で空気漏れを防ぐ電磁弁を搭載。

ポンプに搭載された電磁弁が停電・非通電と同時にエアマットレスの空気漏れをブロック。約14日間エアマットレスの内圧を保持します。

手間 要らず

電源復旧後は直前の
体重設定に自動復帰

電源プラグを抜いてベッド移動する時も



停電時も



高機能
タイプ

厚み10cmのエアセルが 効果的に床ずれ好発部位の圧迫を低減。



背上げ
対応

ボタン1つで快適な背上げ姿勢。 適切な内圧に整え、臀部をしっかりと支えます。



- ✓ 経管栄養の注入
- ✓ お食事など長時間の
背上げで過ごされる際に。

安心の
2時間
オートオフ
機能付

コンパクト
設計


居室・倉庫空間を考えた 省スペース設計。



お手入れ
かんたん

専用カバーは防水加工、 清拭も可能。

濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウム
や消毒用エタノールでの清拭も可能。

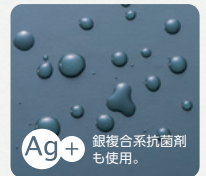

セット		タイプ	840	900	
		品番	CR-790	CR-793	
		JANコード	4939810010861	4939810010878	
		セット価格	オープン価格		
セット内容	専用 マットレス	品番	CR-792	CR-794	
		サイズ ※1	幅84×長192×厚12cm	幅90×長192×厚12cm	
		重量	6.1kg	6.5kg	
		材質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌) ベースマット/三次元スプリング構造体 プレスエア®(制菌) ベースシート/ナイロンオックス、ポリウレタンフィルムラミネート加工布		
			エアセル本数	24本	
			価格(専用カバー付属)	オープン価格	
	マットレス 付属品	品番	CH-792	CH-794	
		材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布 [防水] [透湿] [制菌] [伸縮]		
	専用カバー	価格(専用カバーのみ購入価格)	オープン価格		
		品番	CR-791		
サイズ		幅30.0×高13.2×奥行8.8cm (ポンプフック装着時/幅30.0×高13.7×奥行14.4cm)、ACコード:4m			
重量		2.5kg			
材質		ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂			
専用ポンプ	定格	AC100V、12W、50/60Hz			
	電気代/日(参考値) ※2	約4.7円			
	価格	オープン価格			

※1 マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、エアマットレス内圧の状態や使用状況により多少異なる場合があります。

※2 当社調べ。エアマットレスの上に荷重をかけた状態で一日動作させた消費電力を計測。初期設定のモードで、圧切替18時間+背上げ保持2時間×3回。

*エアマスターイーエスの取り扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。

*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

専用マットレス、専用ポンプ
3年間保証

製造販売元 **株式会社 ケーブ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889
<https://www.cape.co.jp/>

お問い合わせ先